

TENA SMARTCARE CHANGE INDICATOR™ NÁVOD K WEBOVÉMU PORTÁLU



OBSAH



ÚVOD	3
------------	---

ZAČÍNÁME

Aktivace účtu a přihlášení	4
----------------------------------	---

ODDĚLENÍ

Přidání oddělení	5
------------------------	---

Úprava nebo odstranění oddělení	6
---------------------------------------	---

KLIENTI

Přidání klienta	7
-----------------------	---

Zobrazení klienta	8
-------------------------	---

Úprava nebo odstranění klienta	9
--------------------------------------	---

UŽIVATELÉ

Přidání uživatelského účtu	10
----------------------------------	----

Úprava nebo odstranění uživatelského účtu	11
---	----

PEČOVATELSKÉ ZAŘÍZENÍ

Změna nastavení pečovatelského zařízení	12
---	----

POUŽÍVÁNÍ

Přehled	13
---------------	----

Monitorování	14
--------------------	----

Stav a ikony	15
--------------------	----

Statistiky	17
------------------	----

Auditní protokol	18
------------------------	----

NÁPOVĚDA


Pokyny	19
--------------	----

ÚVOD



Webový portál TENA SmartCare Change Indicator™ je určený k použití v pečovatelských zařízeních a slouží jako informační centrum pro správce, zdravotní sestry a pečovatele. Portál TENA SmartCare Change Indicator™ nabízí přehled všech údajů souvisejících s péčí o klienty s inkontinencí, jako jsou údaje o stavu klienta, výměnách pomůcek nebo rychlosti reakce personálu a další aktuální i dříve zaznamenané údaje související s používáním nástroje Change Indicator.

V tomto návodu pro správce pečovatelských zařízení najdete pokyny, jak na webovém portálu zřídit uživatele, jak jim přiřadit oddělení a také jak nastavit klienty a zaregistrovat jejich absorpční pomůcky. Dozvíte se tady také to, jak se webový portál využívá k průběžnému sledování péče o inkontinentní osoby v celém pečovatelském zařízení.

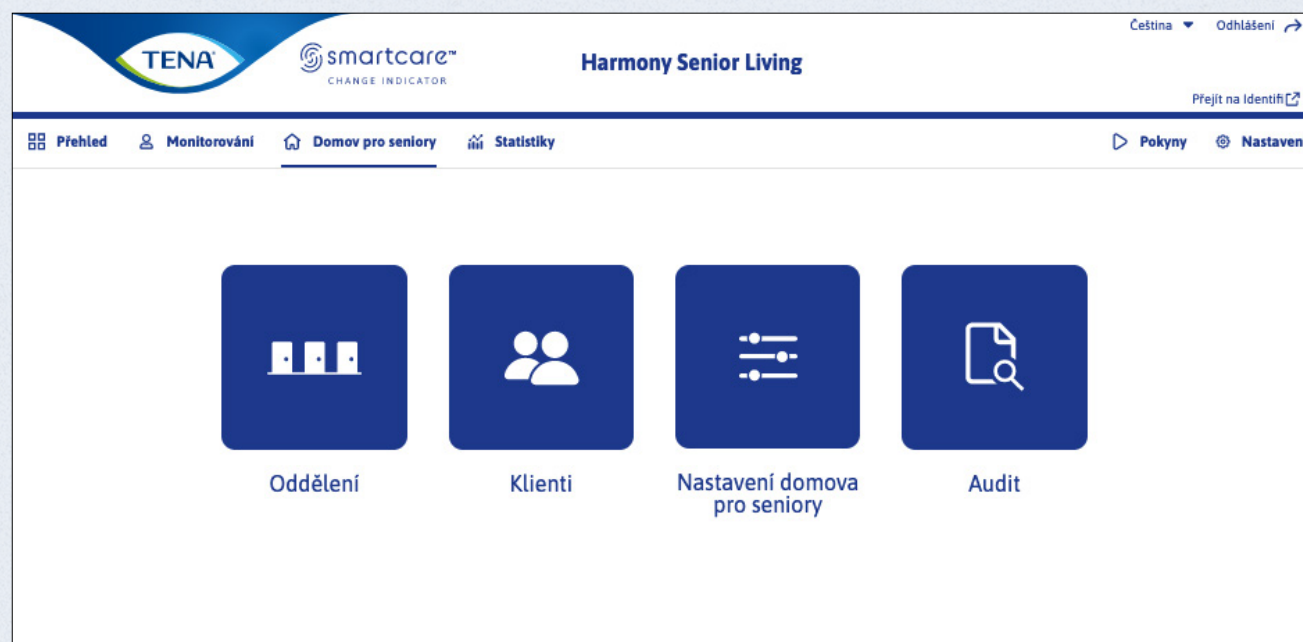

Přechod na webový portál Identifi

V pečovatelských zařízeních, která používají nástroj TENA SmartCare Change Indicator™ i portál TENA SmartCare Identifi™, se na webový portál dostanete kliknutím na možnost **Go to Identifi** (**Přejít na portál Identifi**).

AKTIVACE ÚČTU A PŘIHLÁŠENÍ



Nastavit heslo pro anna.anderson@nursinghome.com

Heslo musí mít alespoň 8 znaků a musí obsahovat nejméně 3 z následujících typů znaků:

- Malé písmeno (a–z)
- Velké písmeno (A–Z)
- Číslice (0–9)
- Speciální znak (@#\$%^& atd.)

Stávající heslo nelze znovu použít.

Heslo

Potvrdit heslo

Obnovit heslo

Účet si aktivujte přes odkaz, který jsme vám odeslali na e-mailovou adresu.

Zadejte heslo.

Klikněte na možnost **Nastavit heslo**.


Po vytvoření účtu stačí zadat e-mail a heslo a kliknout na možnost **Přihlásit se**.

Nevíte, jaké máte heslo? Klikněte na možnost **Obnovit heslo** a budete mít možnost si vytvořit nové heslo.

Dvoufázové ověření


Pokud máte nastavené dvoufázové ověření, dostanete na zadané telefonní číslo nebo e-mailovou adresu ověřovací kód. Abyste se mohli přihlásit, musíte kód zadat.

PŘIDÁNÍ ODDĚLENÍ

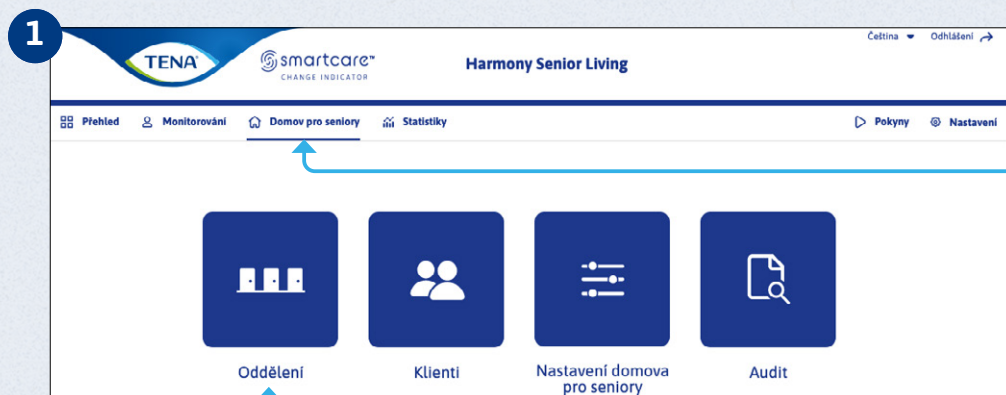

Klikněte na záložku **Domov pro seniory**.

Klikněte na možnost **Oddělení**.

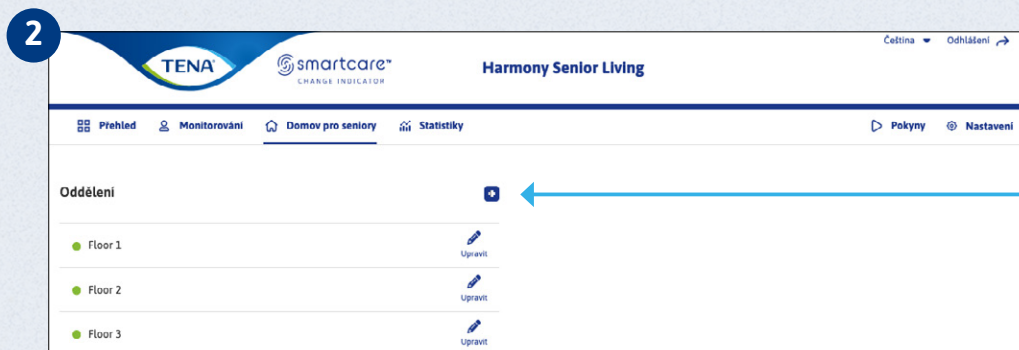

Klikněte na možnost **Přidat**.

3

Přidat oddělení


Název/číslo oddělení

☒ Aktivní

Vyplňte povinná pole a kliknutím na možnost **Uložit** vytvořte nové oddělení.


Pokud chcete oddělení nastavit jako aktivní, označte příslušné políčko. V opačném případě jej ponechte prázdné.

ÚPRAVA NEBO ODSTRANĚNÍ ODDĚLENÍ

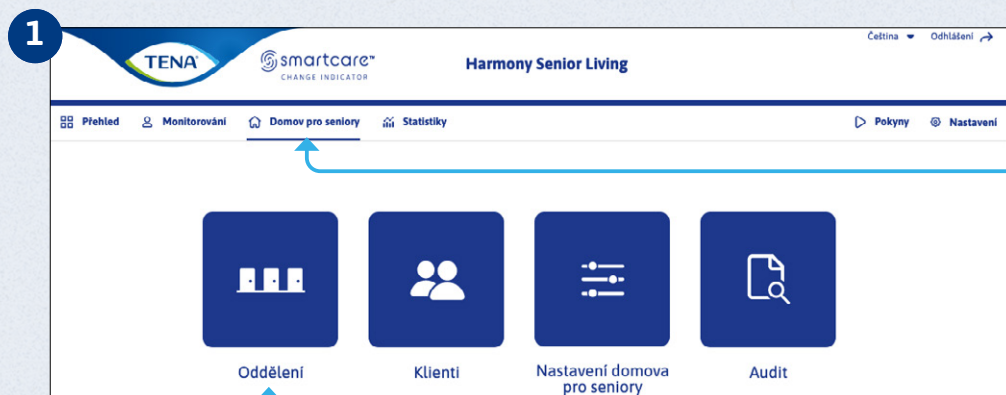


Klikněte na záložku **Domov pro seniory**.

Klikněte na možnost **Oddělení**.

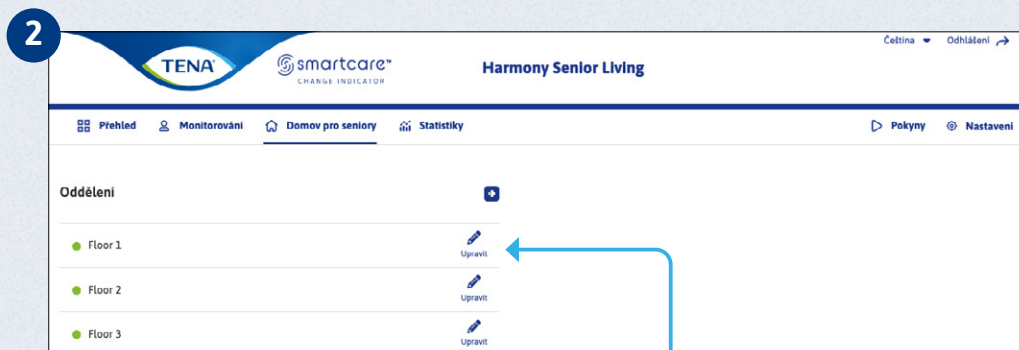


U oddělení, které chcete upravit, klikněte na možnost **Upravit**.

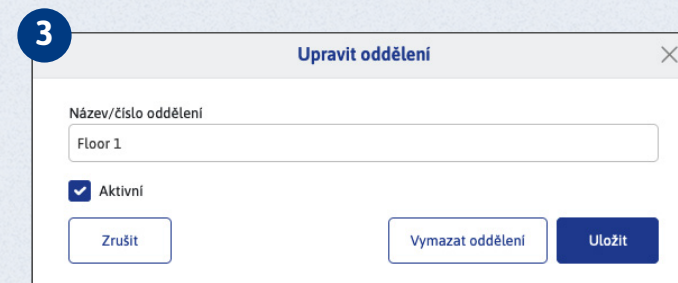


Upravte požadované údaje a klikněte na možnost **Uložit**.
Pokud chcete oddělení odstranit, klikněte na možnost **Vymazat oddělení**.

PŘIDÁNÍ KLIENTA

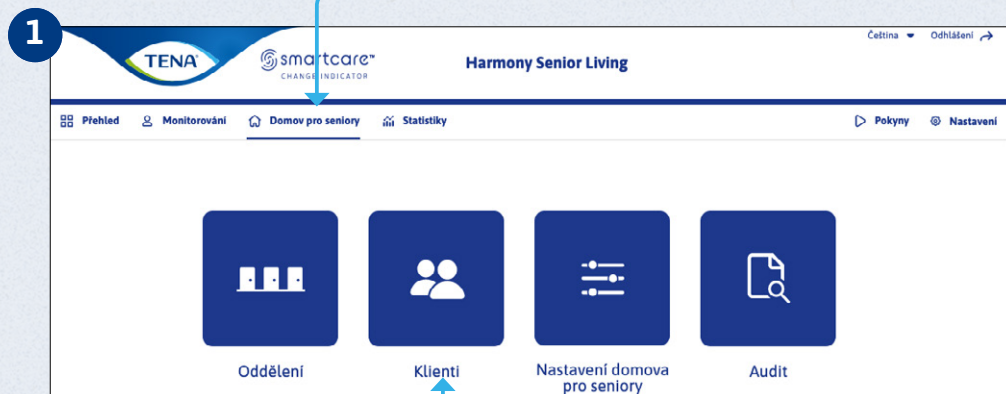


Klikněte na záložku **Domov pro seniory**.

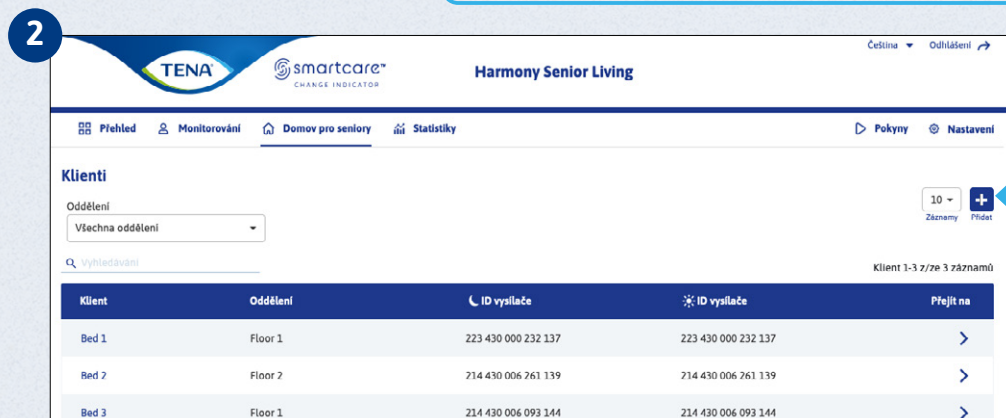

Klikněte na možnost **Klienti**.


Klikněte na možnost **Přidat**.

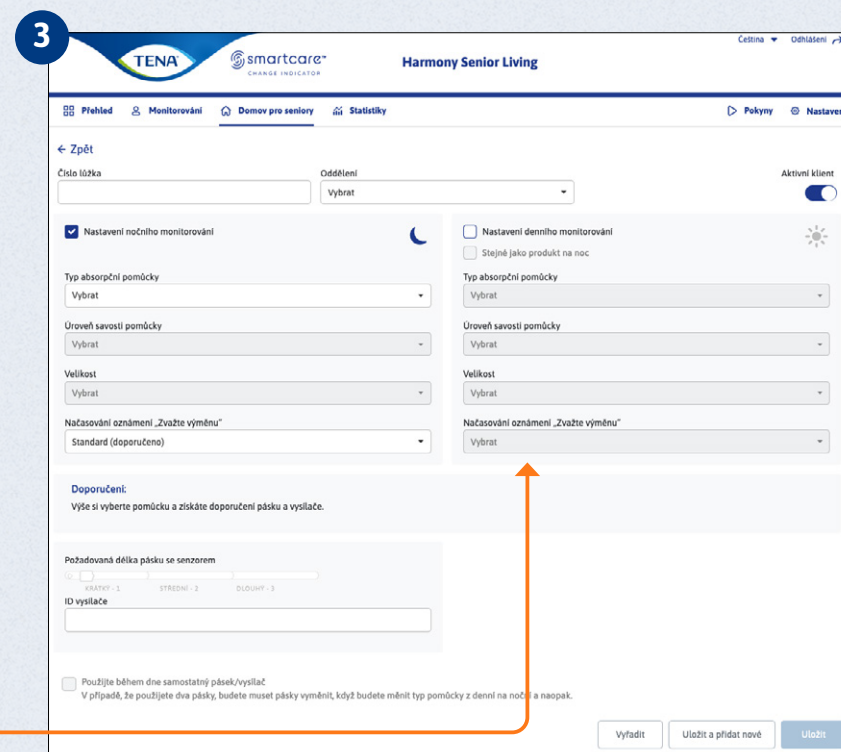

! Možnost Načasování oznámení „Zvažte výměnu“
Tímto parametrem se nastavuje, po jaké době se má
odeslat oznámení, že byste měli zvážit výměnu.


Vyplňte povinná pole a kliknutím na možnost **Uložit**
vytvořte nového klienta.

ZOBRAZENÍ KLIENTA

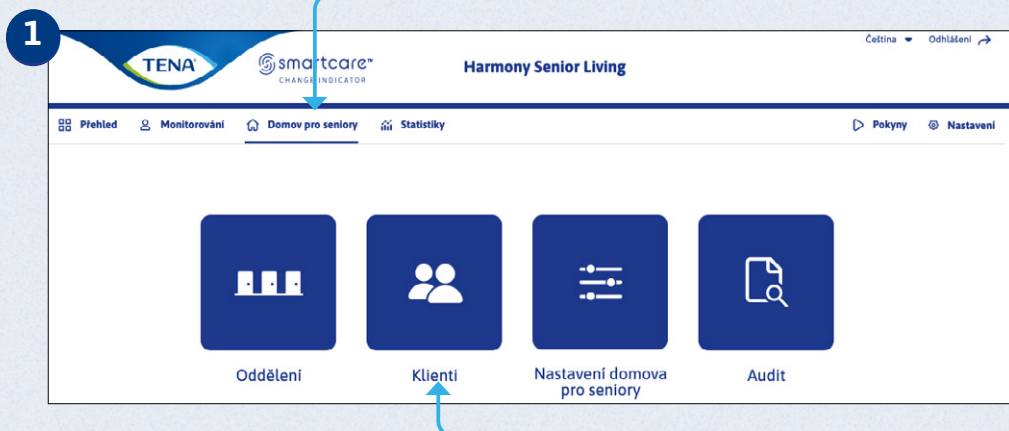


Klikněte na záložku **Domov pro seniory**.

Klikněte na možnost **Klienti**.

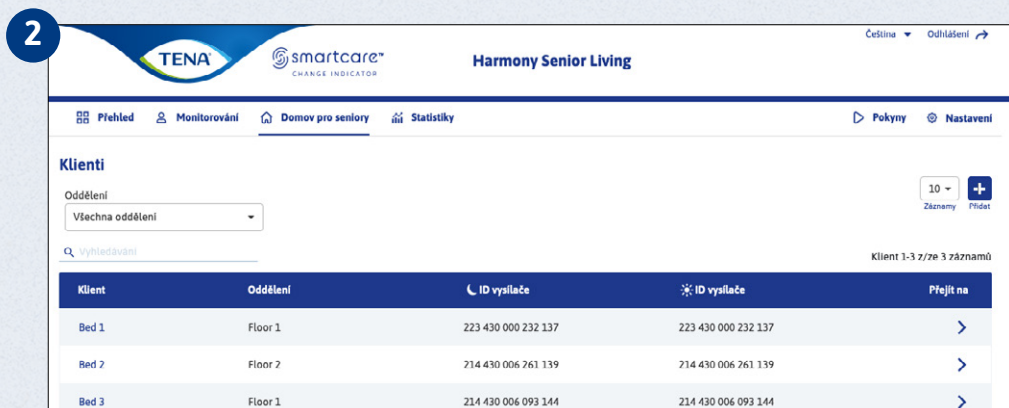

Vyberte klienta, kterého si chcete zobrazit.

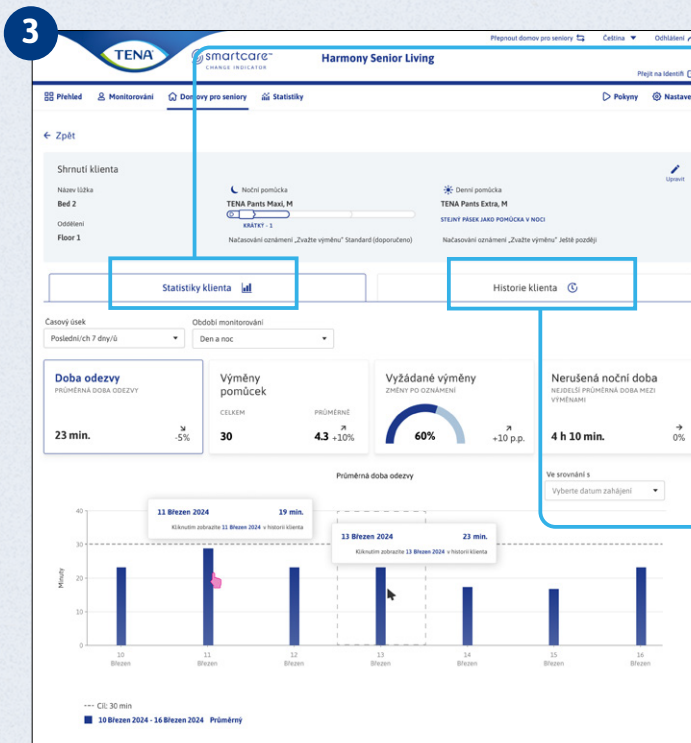


Možnost Statistiky klienta

Tady si můžete prohlédnout údaje o průměrné rychlosti reakce personálu, výměnách pomůcek, výměnách na pokyn a délce nerušeného spánku. Statistiky jsou podrobněji popsány v části [Statistiky](#).

Možnost Historie klienta

Tady najdete soupis výměn pomůcek a pečovatelských úkonů.



ÚPRAVA NEBO ODSTRANĚNÍ KLIENTA

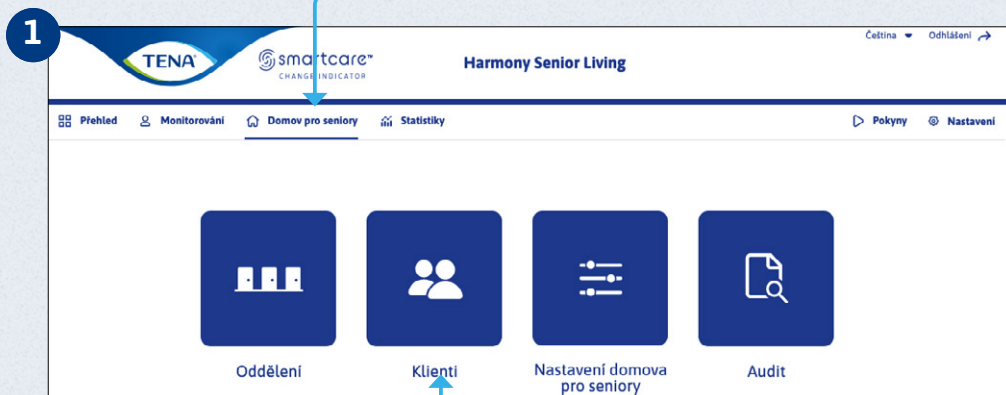


Klikněte na záložku **Domov pro seniory**.

Klikněte na možnost **Klienti**.


Vyberte klienta, kterého chcete upravit nebo odstranit.

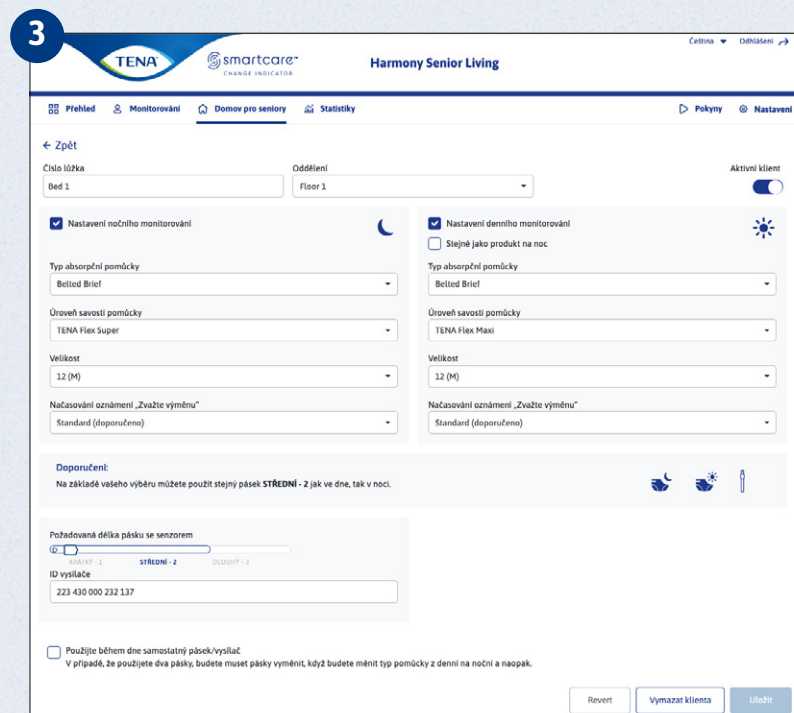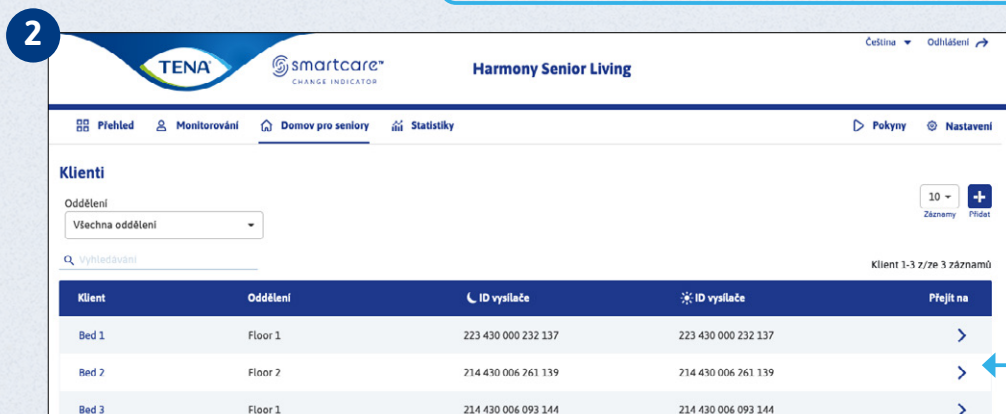


Upravte požadované údaje a klikněte na možnost **Uložit**. Pokud chcete klienta odstranit, klikněte na možnost **Vymazat klienta**.

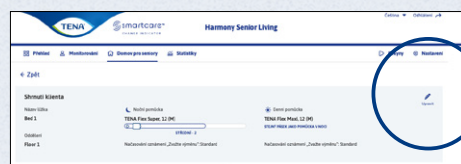

PŘIDÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

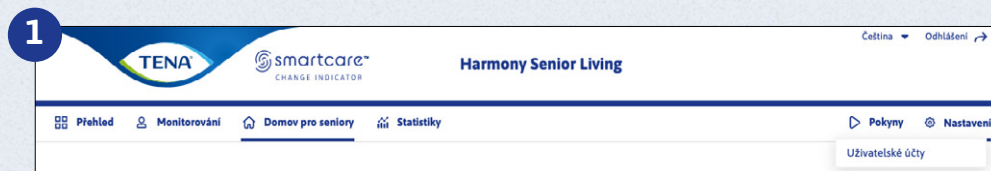

Na úvodní stránce klikněte na možnost **Nastavení** a poté na možnost **Uživatelské účty**.

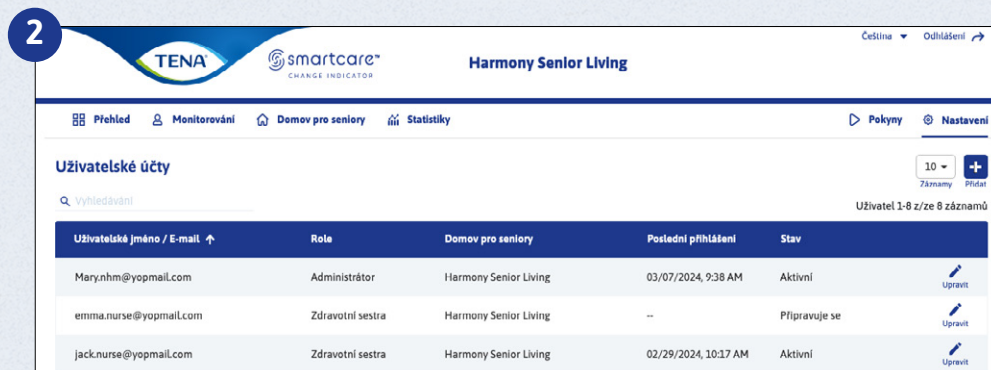

Klikněte na možnost **Přidat**.

Přidat uživatelský účet

Vybrat roli

☐ Administrátor
 ☒ Zdravotní sestra
 ☐ Pečovatel/ka
 ☐ Administrátor podpory

Přístup k domovu pro seniory

☐ Vybrat vše
 ☐ Harmony Senior Living


Obecná nastavení

E-mail *
 Číslo mobilního telefonu


Jazyk *

Vyplňte povinná pole a kliknutím na možnost **Přidat** vytvořte nový uživatelský účet.


ÚPRAVA NEBO ODSTRANĚNÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

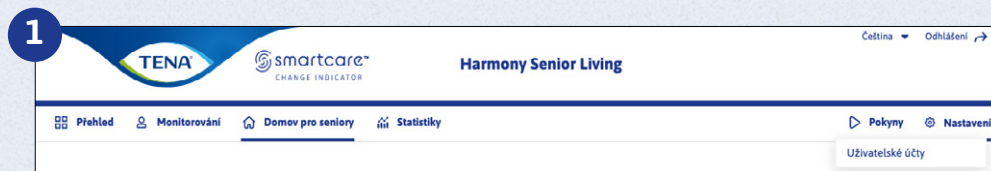

Na úvodní stránce klikněte na možnost **Nastavení** a poté na možnost **Uživatelské účty**.

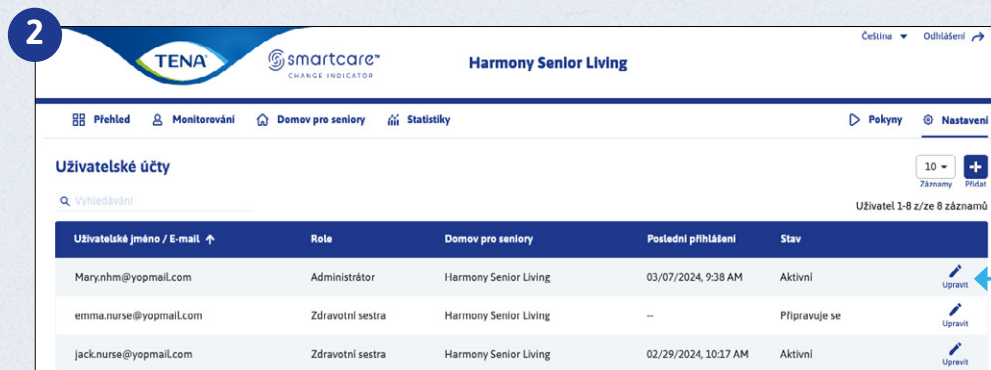

U uživatele, kterého chcete upravit, klikněte na možnost **Upravit**.

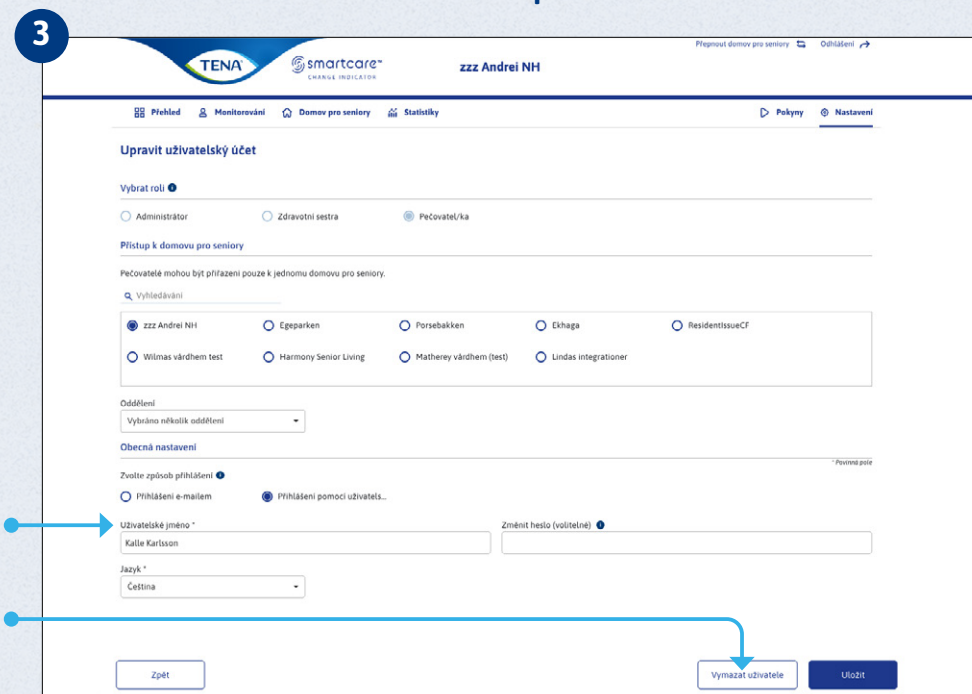

Po přihlášení jako zdravotní sestra můžete sami upravovat jazyk a kontaktní údaje.

Pokud chcete účet odstranit, klikněte na možnost **Vymazat uživatele**.

Pokud máte nastavené dvoufázové ověření, můžete být autorizováni prostřednictvím e-mailu nebo telefonu v závislosti na kontaktních údajích, které jste zadali.

Upravte jednotlivá pole a klikněte na možnost **Uložit**.


ZMĚNA NASTAVENÍ PEČOVATELSKÉHO ZAŘÍZENÍ




Klikněte na záložku
Domov pro seniory.

Klikněte na možnost
Nastavení pro seniory.

Upravte požadovaná pole
a klikněte na možnost **Uložit**.

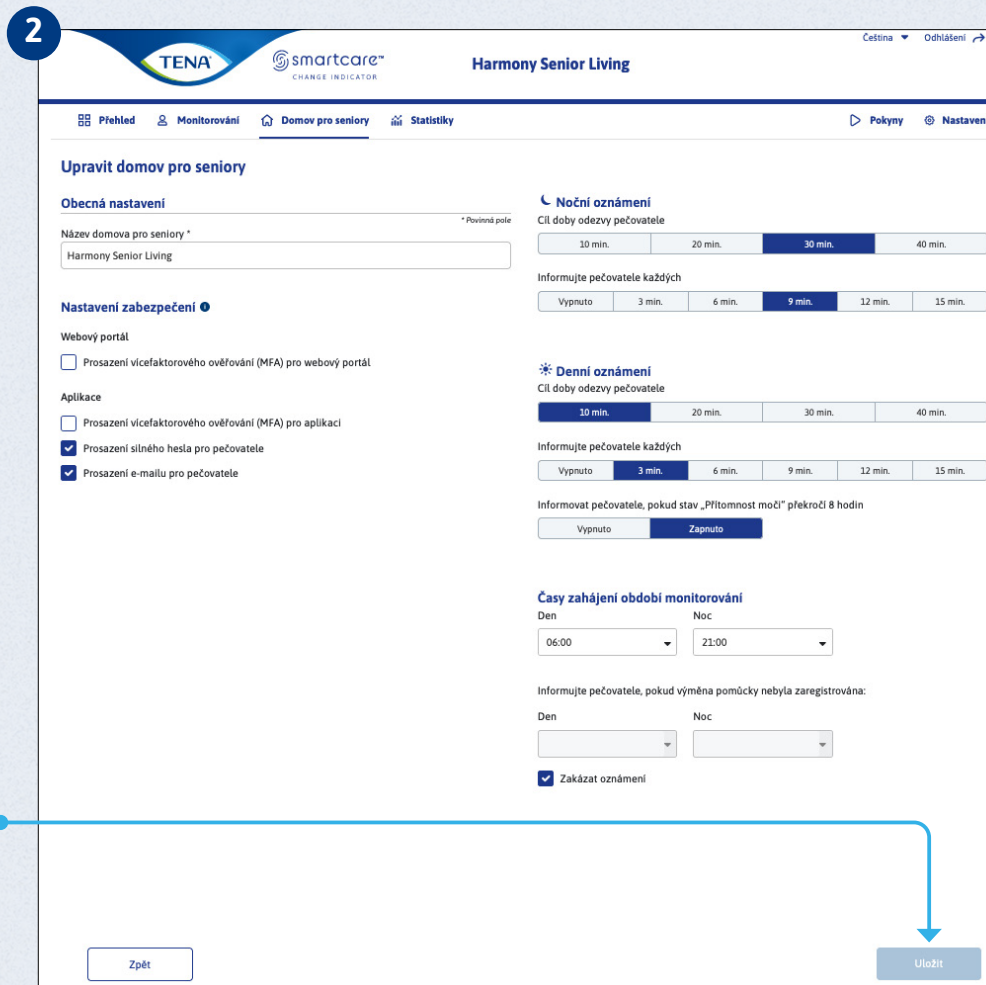

PŘEHLED

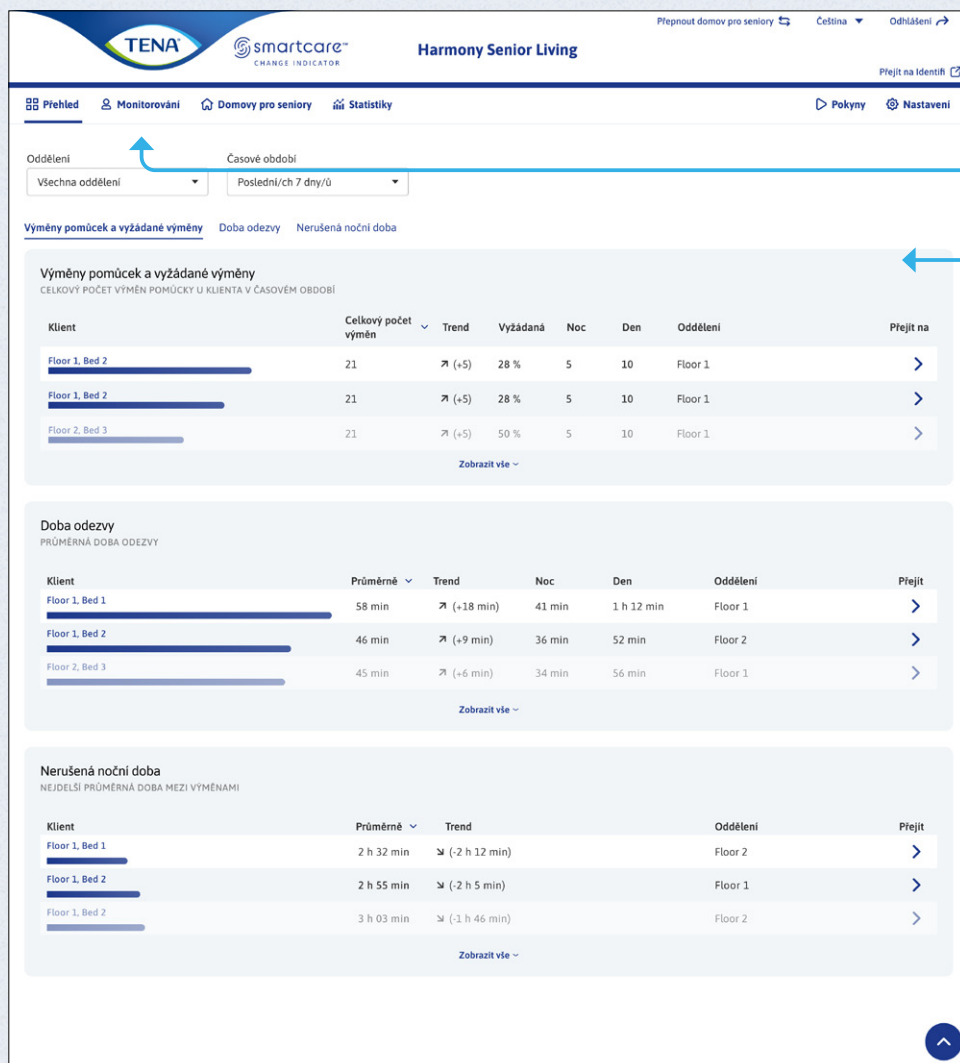

Klikněte na záložku **Přehled**.

Na stránce Přehled najdete vývoj trendů péče za určité období.

Z těchto údajů můžete vyčíst, zda dochází k nepravidelným událostem, které mohou ovlivnit pohodlí klienta.

Může se jednat například o výkyvy následujících parametrů:

- počet výměn pomůcek,
- rychlost reakce personálu,
- délka nerušeného spánku.

MONITOROVÁNÍ



Monitorování

Oddělení: Všechna oddělení

Klienti
AKTIVNÍ/VŠE
3/3

Shrnutí stavu

- 3 - Zvažte výměnu
- 14 - Chyba
- 1 - Přítomnost moči
- 10 - OK

Klient	Aktuální stav	Nastavení monitorování	Aktivní monitorování	Oddělení	Baterie	Přejít na
Bed 1	Zvažte výměnu 10 min	Jeden pásek Dvě pomůcky	[Icon: X, Moon]	Ward C		>
Bed 2	OK 24 min	Jeden pásek Dvě pomůcky	[Icon: X, Moon, Sun]	Floor 2		>
Bed 3	Přítomnost moči 24 min	Jeden pásek Dvě pomůcky	[Icon: X, Moon, Sun]	Floor 1	[Icon: Battery]	>

Klikněte na záložku **Monitorování**.

Na stránce Monitorování se zobrazuje aktuální přehled pomůcek používaných v pečovatelském zařízení.

Na seznamu je znázorněný stav sledovaných absorpčních pomůcek.

STAV A IKONY



V pořádku

Není nutné nic dělat. Absorpční pomůcka klienta je suchá.



Trocha moči

Není nutné nic dělat. Bylo zjištěno malé množství moči, ale povrch pomůcky zůstává suchý.



Zvažte výměnu

Absorpční pomůcka klienta je téměř plná.



Vypnuto

Klient není monitorovaný. Na stránce monitorování použijte přepínač v oblasti Zahájit monitorování ke spuštění monitorování.



Připojování

Nástroj Change Indicator se pokouší připojit k systému.



Chyba

U nástroje Change Indicator nebo u systému došlo k chybě. V oblasti Náповěда přejděte k návodu k použití, kde se dozvíte, jak problém vyřešit.



Neaktivní

Monitorování klienta není aktivní. Aktivovat jej můžete v nabídce určené k úpravě klienta.



Zvažte výměnu

21 m

Doba trvání stavu.



Baterie je téměř vybitá a je nutné ji vyměnit.

STAV A IKONY (POKRAČOVÁNÍ)



Oddíl Nastavení monitorování

Počet pásků a typy absorpčních pomůcek používaných klientem.


Nastavení monitorování	Aktivní monitorování
 Jeden pásek Noční pomůcka	
 Jeden pásek Jedna pomůcka 24 hodin	
 Jeden pásek Dvě pomůcky	
 Dva pásy Jedna pomůcka 24 hodin	
 Dva pásy Dvě pomůcky	

Oddíl Aktivní monitorování

Těmito tlačítky můžete ručně přepínat mezi denním a nočním monitorováním nebo jej úplně vypnout.

1. Klient v noci používá jeden pásek a jednu absorpční pomůcku.
2. Klient ve dne i v noci používá jeden pásek a stejný typ absorpční pomůcky.
3. Klient ve dne a v noci používá jeden pásek a různé typy absorpčních pomůcek.
4. Klient ve dne i v noci používá dva pásy a stejný typ absorpční pomůcky.
5. Klient ve dne a v noci používá dva pásy a různé typy absorpčních pomůcek.

STATISTIKY

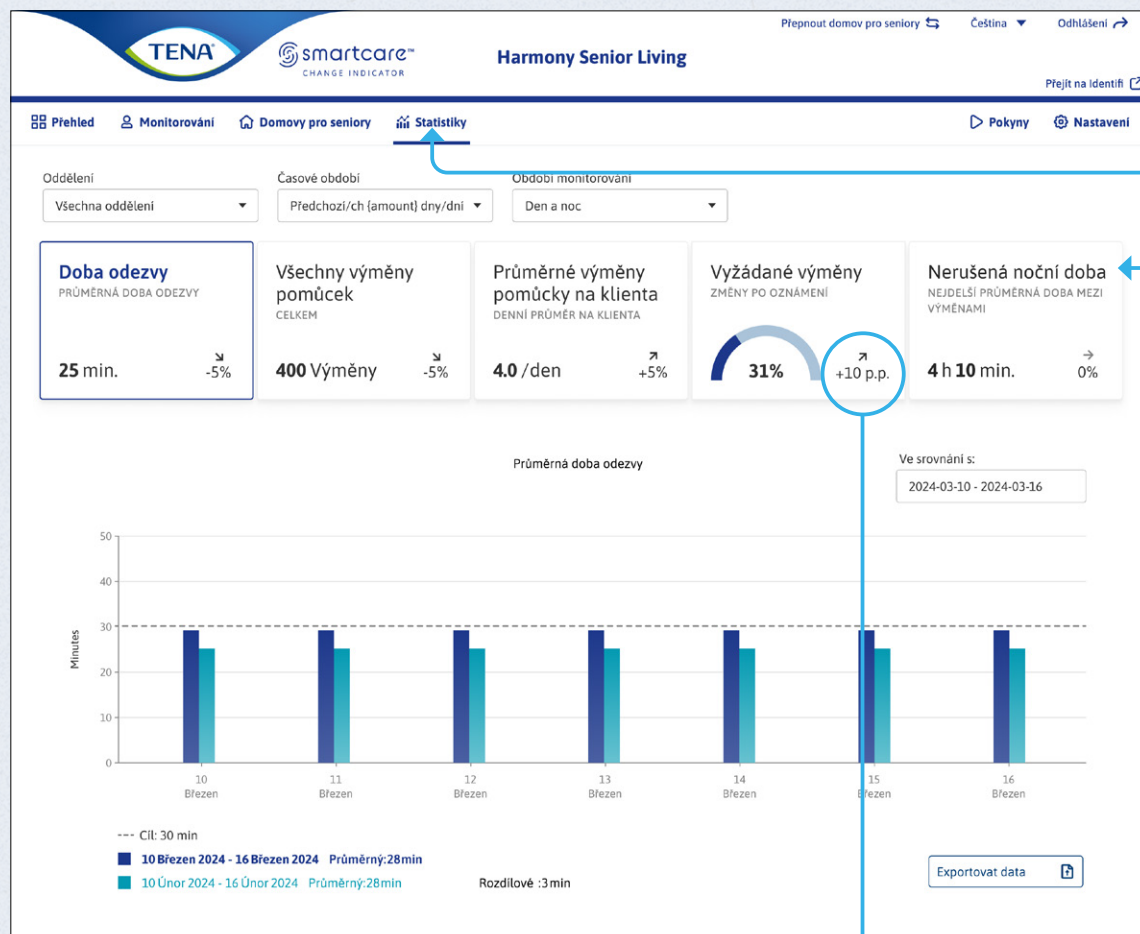

Klikněte na záložku **Statistiky**.

Na této stránce se zobrazují statistiky o pečovatele za vybrané období.

Rychlost reakce personálu: Udává, za jak dlouho pečovatelé reagují na stav Consider Change (Zvažte výměnu).

Všechny výměny pomůcek: Celkový počet výměn absorpčních pomůcek.


Průměrný počet výměn: Průměrný počet vyměněných absorpčních pomůcek za den na jednoho klienta.

Výměny na pokyn: Počet výměn absorpční pomůcky provedených na základě oznámení Consider Change (Zvažte výměnu).

Délka nerušeného spánku: Průměrná nejdelší doba mezi výměnami.


Trend v porovnání s vybraným obdobím.

AUDITNÍ PROTOKOL

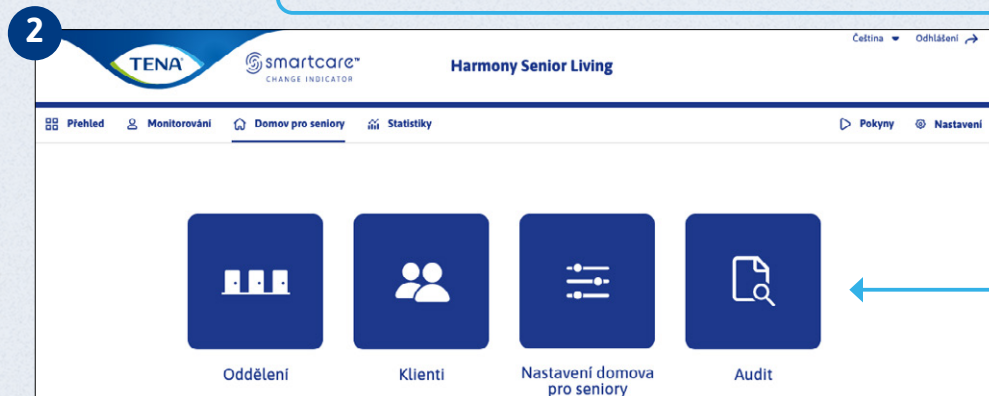

Klikněte na záložku **Domov pro seniory**.

Klikněte na možnost **Audit**.

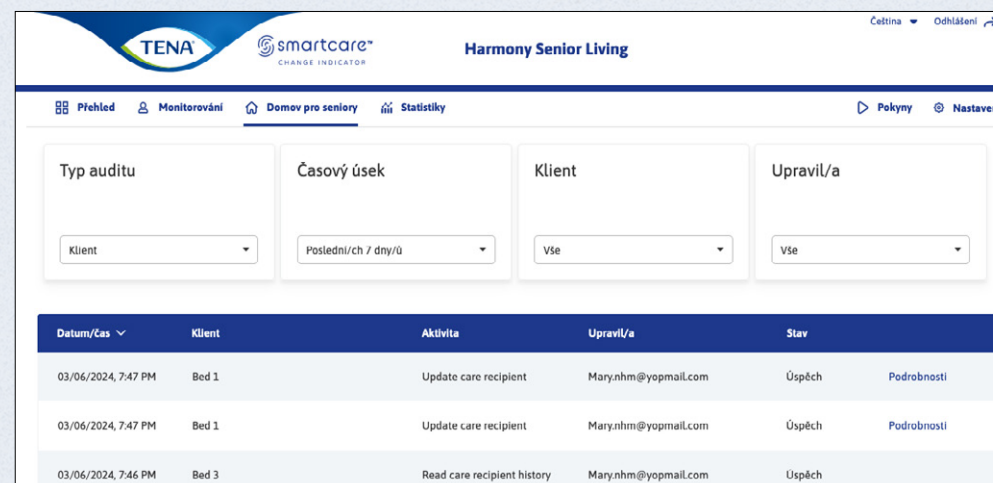

Na znázorněné stránce s auditním protokolem se zobrazují úkony provedené uživateli systému seřazené podle klienta, uživatele nebo relace přihlášení.

POKYNY



1

Čeština ▼ Odhlášení ➔

TENA smartcare™ CHANGE INDICATOR **Harmony Senior Living**

Přehled Monitorování Domov pro seniory Statistiky Pokyny Nastavení

Rychlý návod Abyste mohli začít, zjistěte jako ošetřovatel nebo zdravotní sestra o indikátoru Change Indicator více

Instruktážní videa Podívejte se na krátká videa o tom, jak Change Indicator používat pro své klienty

Prozkoumat ve 3D Komunikujte s indikátorem Change Indicator digitálně a vyzkoušejte produkt

Návod k použití Zjistěte vše o nastavení indikátoru Change Indicator nebo o tom, jak řešit problémy

Rychlý návod Přejít na

Rychlý návod

Pokud stále potřebujete pomoci, obraťte se na podporu TENA SmartCare™.

Klikněte na nabídku **Pokyny**.

Tady můžete přejít k psaným návodům, instruktážním videím a nástrojům.



TENA® je značka
společnosti Essity