

TENA SMARTCARE IDENTIFI™ VEILEDNING FOR BRUK AV WEBPORTALEN



INNHold



INNHold	2
INNLEDNING	3
KOMME I GANG	
Aktiver konto / logg inn	5
KARTLEGGING	
Kartlegging med evalueringsrapport	6
Ny kartlegging	
Starte en ny kartlegging	7
Registrer ny beboer	8
Start kartlegging	9
Pågående kartlegginger	
Manuelle hendelser	10
Forhåndsviser pågående kartlegginger	11
Stopp kartlegginger	12
Fullføre kartlegging	13
Generere kartleggingsrapporter	14
Fullførte kartlegginger	16
Arkiverte kartlegginger	17

EVALUERINGSRAPPORT

Generere evalueringsrapport	18
Hva inneholder rapporten?	19

BRUKER

Legge til en ny konto (Administrator)	20
Redigere eller fjerne brukerkonto	21

INNSTALLINGER

Administrere avdelinger	22
Administrere rom	23
Administrere beboere	24
Administrer sykehjem (Administrator)	25
Innstillinger for evalueringsrapportdata (Administrator)	26

HJELP

Instruksjon og videoer om ofte stilte spørsmål	27
Opplæringsmateriell	28

INNLEDNING



Denne brukermanualen er beregnet for sykepleier og administrator (eller de som skal ha tilgang til weportalen).

TENA SmartCare Identifi™ er et verktøy som kan brukes for å gjøre en 72-timers digital kartlegging av vannlatningsmønsteret til beboer. Basert på resultatene av kartleggingen, kan man opprette en individuelle pleieplan som sikrer riktig bruk av produkt og absorpsjon, riktig tid for toalettbesøk og riktig tid for skift.

TENA SmartCare Identifi™-systemet består av tre deler: TENA Identifi™ Sensor Wear (bleie til bruk ved kartlegging), TENA Identifi™ Logger og TENA Identifi™ Webportal.

Formålet med TENA SmartCare Identifi™ rapport er å samle inn og presentere data mottatt fra loggeren. Webportalen brukes til å sette i gang kartlegginger, og presentere resultatet i rapporter når det er fullført.

Ved å legge inn data i webportalen før og etter kartleggingen, vil man kunne generere en evalueringsrapport som viser konkrete endringer på ulike parametre forklart på neste side i denne brukermanualen.



MERK: TENA SmartCare Identifi™ beregner væskevolum. Systemet skal ikke brukes til å overvåke væskeinntak.



INNLEDNING FORTS.



Evalueringsrapporten er en verdifull funksjon i webportalen som viser samlet endringer etter at kartlegginger er gjennomført.

Sykehjemmet kan få informasjon om endringer i antall toalettbesøk, lekkasjer, søvn, CO2-påvirkning, tid bruk, total absorpsjon og total kostnad. Man kan se data per beboer, sykehjem eller kommune.


Evalueringsrapporten er en funksjon som legges til når du implementer systemet og får brukertilgang. Det kan ikke legges til eller fjernes av administratoren.

Se en oversikt over hva TENA Identifi™ kan gjøre for ditt sykehjem

For å justere innstillingene for å få mest mulig ut av evalueringsrapporten – se side 27.

Få tilgang til skiftindikator-nettportalen

Sykehjem som bruker både TENA SmartCare Identifi™ og TENA SmartCare Change Indicator™ får tilgang til hver nettportal ved å klikke på **Gå til skiftindikator**.

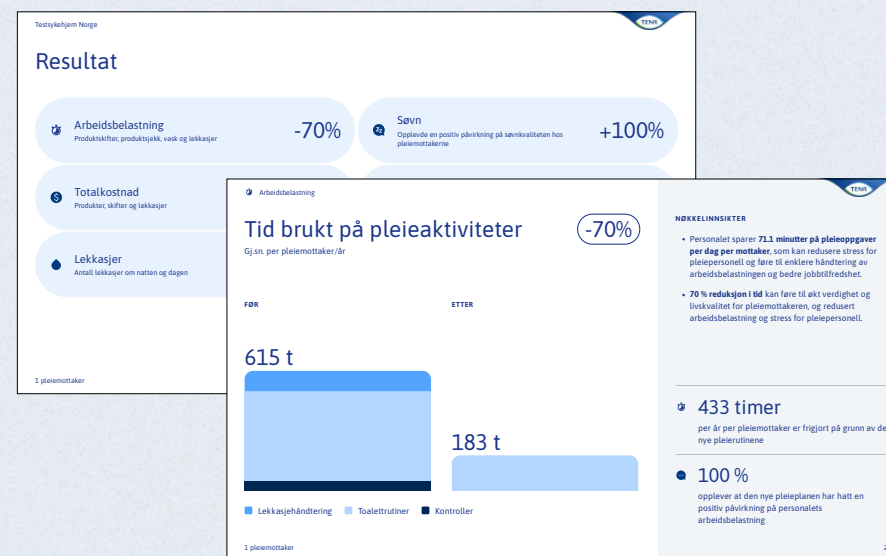

AKTIVER KONTO / LOGG INN



Sett opp passord for anna.anderson@nursinghome.com

Passordet må være på minst 8 tegn og inneholde minst 3 av de følgende tegntypene:

- Liten bokstav (a-z)
- Stor bokstav (A-Z)
- Tall (0-9)
- Spesialtegn (@#\$%^& osv.)

Du kan ikke bruke det samme passordet på nytt.

Passord

Bekreft passord

Sett opp passord

Aktiver kontoen din via lenken som sendes til e-postadressen din.

• **Skriv inn et passord.**

• Klikk på **Sett opp passord.**


Når du er opprettet, skriver du bare inn e-postadressen og passordet ditt og klikker på **Logg inn.**

Har du glemt
passordet?
Klikk på **tilbakestill
passord**, og deretter
kan du opprette et
nytt.

Flerfaktoraутентisering

Hvis du har flerfaktoraутентisering, vil du motta en bekreftelseskode til det registrerte telefonnummeret eller e-postadressen. Skriv inn koden for å logge inn.

BRUK AV EVALUERINGSRAPPORT

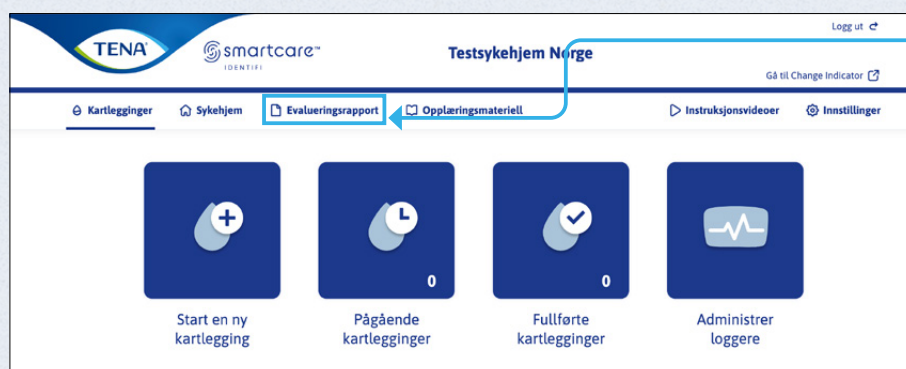


Hvis sykehjemmet har tilgang til evalueringsrapporten, vil dette alternativet vises på linjen øverst. Evalueringsrapporten lar deg sammenligne ulike parametre før og etter kartleggingen.*



Dette symbolet vises når en handling fortsatt er nødvendig for å fullføre kartleggingen når evalueringsrapporten er aktivert.

Hvorfor bør du bruke evalueringsrapporten?

Steg 1

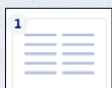

Kontinenspleierutine – før

For å starte en kartlegging loggføres all informasjon om beboerens nåværende rutine, hvilke produkter som brukes, tidspunkter og hyppighet for skift.


Steg 2



Kartlegging og analyse

Etter en 72-timers kartlegging, kan vi se og analysere beboerens vannlatningsmønster i en kartleggingsrapport.

Steg 3

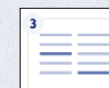

Kontinenspleierutine – etter

Basert på analyse av dataene i steg 2, kan man sette opp en individuelle pleieplan som optimaliserer tiden til pleiepersonellet og gir best mulig inkontinenspleie for beboeren.

*Evalueringssrapport er koblet til brukertilgang og kan ikke legges til eller fjernes av administrator.



Forrige


Neste



Innhold



STARTE NY KARTLEGGING

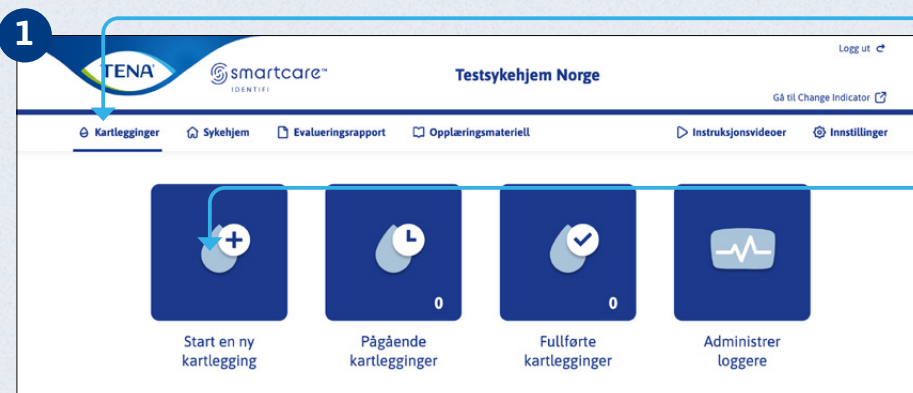

- Klikk på **Kartlegginger** i hovedmenyen
- og klikk deretter på **Start en ny kartlegging**.

Trinn 1 er kun tilgjengelig når sykehjemmet har tilgang til evalueringsrapporten.



3

For å sette i gang en ny kartlegging må beboer først registreres.

Klikk på **Velg** på en eksisterende beboer eller **Legg til** for å registrere en ny beboer.

Start en ny kartlegging Dag * Nat * 🌙

Steg 1: Beboers inkontinenspleie rutine
Vurder beboers inkontinenspleierutine de siste 7 dagene

Beboer ID: 123

Ved å fylle ut beboers inkontinenspleierutine, kan det genereres en evalueringsrapport på slutten av prosessen som viser effekten av Tena SmartCare Identifi lar og etter at endringene er utført.

Produkttype * Produkttype * 🌙
Velg Velg

Produktskift /24 timer * Produktskift /24 timer 🌙
f.eks. 3.5 f.eks. 3.5

Lekkasjer /uke * Lekkasjer /uke 🌙
f.eks. 7 f.eks. 7

Vellykkede toalettbesøk /24 timer Mislykkede toalettbesøk /24 timer
f.eks. 5 f.eks. 5

Antall sjekk uten produktskift /24 timer
f.eks. 2

Neste

Start en ny kartlegging Dag * Nat * 🌙

Steg 2: Starte en ny kartlegging * Dette feltet er obligatorisk

Beboer ID: 123


Logger ID * Produkttype *
Velg Velg

Husk å:

- Informer beboeren om kartleggingen.
- Koble loggeren til Sensor Wear, og kontroller at batteriet er ladet.


Tilbake Avbryt Start

FLYTTE LOGGEREN

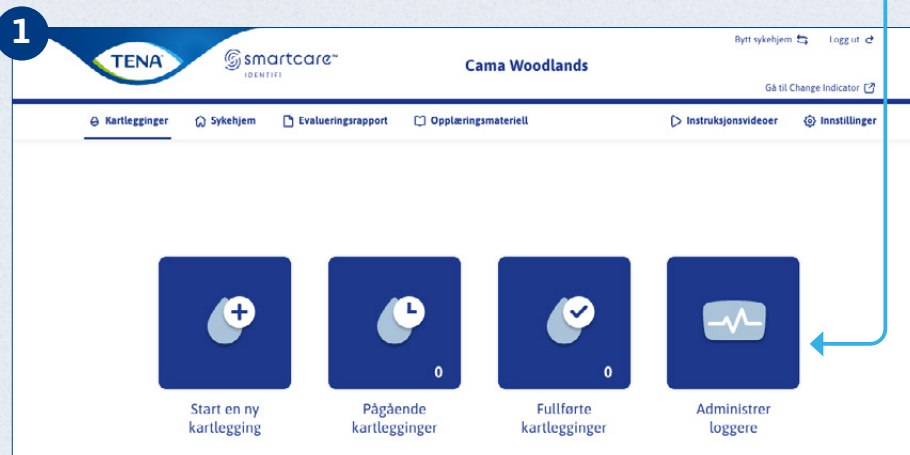


Du kan flytte loggere mellom sykehjem. Velg ganske enkelt **Administrer loggere**, og deretter kan du overføre enheten fra ett sykehjem til et annet, og sørge for at loggeren blir registrert på riktig sykehjem. **Merk: Kun administratorer som har tilgang til hele kommunen kan flytte loggere på tvers av sykehjem.**

Klikk på **Flytt** ved siden av loggeren du vil flytte, og velg deretter det nye sykehjemmet fra rullegardinmenyen i dialogboksen.

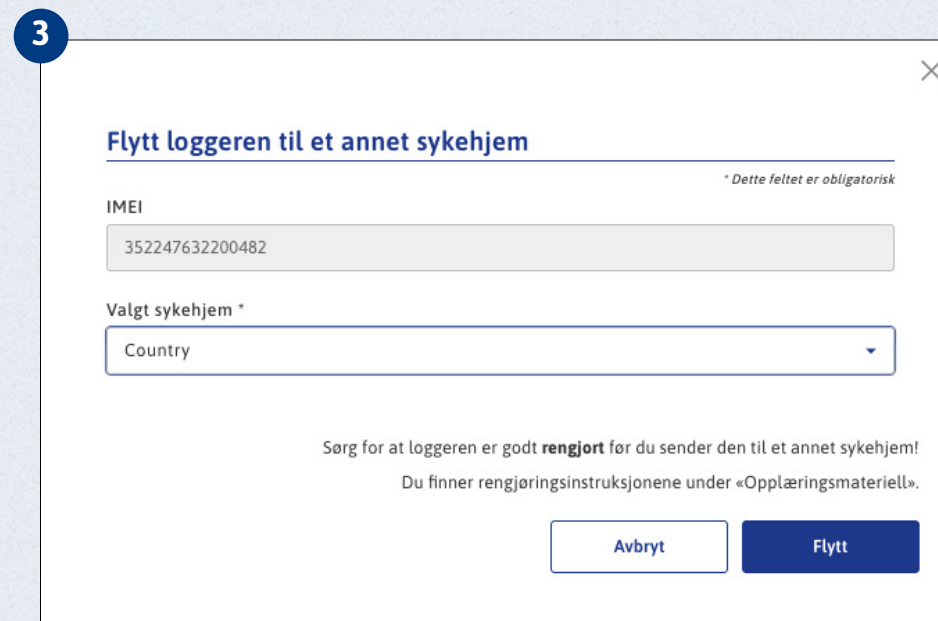

REGISTRER NY BEBOER

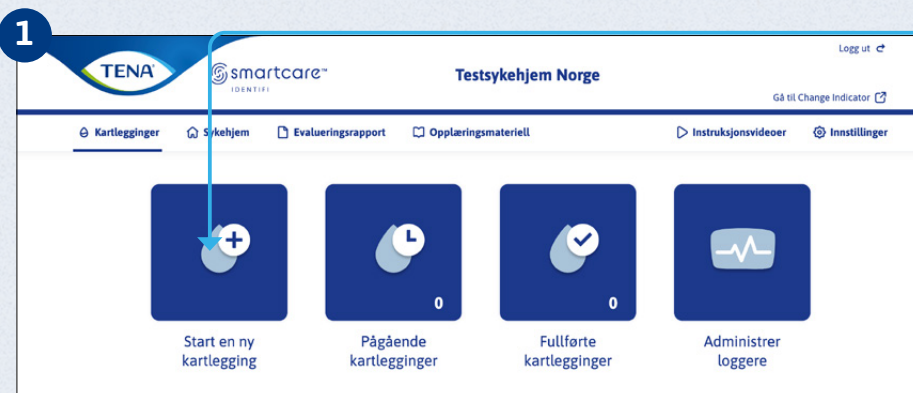

Velg først **Sykehjem** i hovedmenyen, og deretter velger du **Start en ny kartlegging**.

Klikk på **Legg til** for å opprette en ny beboer.

Fyll ut alle obligatoriske felter. **Beboer ID** er kodenavnet for beboeren.



4

3

5

START EN NY KARTLEGGING



1

Klikk på **Kartlegginger** i hovedmenyen

Klikk på **Velg** ved siden av beboeren du vil utføre en kartlegging på.

Fyll inn detaljene for beboeren i dialogboksen **Start en ny kartlegging** for trinn 1* og trinn 2. Klikk deretter på **Start** for å starte kartleggingen.

Start en ny kartlegging

ID	Beboer ID	Rom	Avdeling	Fornavn	Etternavn	Kjenn	Tittel	
31685	123	west	Sonmar	Test	Testson	Mann	Herr	Velg

2

Start en ny kartlegging

Steg 1: Beboers inkontinenspleie rutine

Vurder beboers inkontinenspleierutine de siste 7 dagene

Beboer ID: 123

Ved å fylle ut beboers inkontinenspleierutine, kan det genereres en evalueringsrapport på slutten av prosessen som viser effekten av TENA SmartCare Identifi før og etter at endringene er utført.

Produkttype *

Velg

Produktskift /24 timer *

f.eks. 3,5

Lekkasjer /uke *

f.eks. 7

Vellykkede toalettbesøk /24 timer *

f.eks. 5

Mislykkede toalettbesøk /24 timer *

f.eks. 5

Antall sjekk uten produktskift /24 timer *

f.eks. 2

Neste

3

Start en ny kartlegging

Steg 2: Starte en ny kartlegging

Beboer ID: 123

Logger ID *

Velg

Produkttype *

Velg

Husk å:

- Informer beboeren om kartleggingen.
- Koble loggeren til Sensor Wear, og kontroller at batteriet er ladet.

Tilbake

Avbryt

Start

Kartleggingen startet
Kartleggingen har blitt startet.

4

Kartlegging startet

Kartleggingen er startet på beboer ID 456

Denne pleiemottakerens rutine for kontinenspleie er ufullstendig, og dette vil påvirke evalueringsrapporten. Du kan legge til eller redigere detaljer for trinn 1 senere.

OK

Pågående kartlegginger

*Kun tilgjengelig for sykehjem med tilgang til evalueringsrapporten.

MANUELLE HENDELSER



Hva er manuelle hendelser?

Manuelle hendelser er hendelser om ikke fanges opp av loggeren, som lekkasjer, avføringsepisoder eller toalettbesøk. Disse må legges til manuelt under 72-timerskartleggingen.

1

TENA smartcare IDENTIFI

Testsykehjem Norge

Logg ut

Gå til Change Indicator

Kartlegginger Sykehjem Evalueringsrapport Opplæringsmaterieil Instruksjonsvideoer Innstillinger

Aktive målinger

Søk

Identifikator	Skrutt 1	Sendt
123	Beboers kontinensrutine - før	22 mar 2024
Rom: Room 2	Skrutt 2	Samler inn data fra logger
Avdeling: Floor 1	Vurdering - pågående	Initiert: 22 mar 2024 09:06
Fornavn	Produkttype: TENA Smart Care Identifi Sensor wear Pants	Initiert av: peter.nhm@yopmail.com
Etternavn	Identitet (MEI): BA41 (25531310049626)	
	Skrutt 3	Sendes etter at trinn 1 og trinn 2 er fullført
	Resident's Continence Care Routine - Etter	

Forhåndsvis data Manuelle hendelser

Identifikator 1234

Skrutt 1: Beboers kontinensrutine - før

Sendt: 22 mar 2024

Rom: Room 2

Skrutt 2: Vurdering - pågående

Loggeren er stoppet: 22 mar 2024 08:39

Initiert: 22 mar 2024 08:26

Initiert av: Mary.nhm@yopmail.com

Produkttype: TENA Smart Care Identifi Sensor wear Pants

Identitet (MEI): BA41 (25531310049626)

Forhåndsvis data Manuelle hendelser

Skrutt 3: Resident's Continence Care Routine - Etter

Sendes etter at trinn 1 og trinn 2 er fullført

Administrere manuelle hendelser

Trykk på **Manuelle hendelser** for å legge til manuelle hendelser.

Velg **Dato** og **Klokkeslett** for hendelsen.

Manuelle hendelser - 123

Legg til hendelse

Startdato: 22 mar 2024 09:06

Sluttdato: Pågående

Velg dato: 2024-03-22

Velg tid: 09:00

Velg hendelse: Velg hendelse

Legg til i listen

Avbryt Lagre

Liste over lagt til hendelser (0)

Dato/Tid	Sort	Hendelser
Ingen hendelser er lagt til ennå		

Manuelle hendelser - 123

Legg til hendelse

Startdato: 22 mar 2024 09:06

Sluttdato: Pågående

Velg dato: 2024-03-22

Velg tid: 09:00

Velg hendelse: Flere hendelser er valgt

- ☒ Toalettbesøk med resultat
- ☒ Toalettbesøk uten resultat
- ☒ Avføring
- ☒ Lekkasje
- ☐ Tømming nær skille

Avbryt Lagre

Liste over lagt til hendelser (0)

Dato/Tid	Sort	Hendelser
Ingen hendelser er lagt til ennå		

Velg hendelser fra listen. Du kan velge flere enn én hendelse av gangen. Klikk på **Legg til i liste**.

Når alle hendelser er angitt klikker du på **Lagre**.

Manuelle hendelser - 1234

Legg til hendelse

Startdato: 22 mar 2024 08:39

Sluttdato: Pågående

Velg dato: 2024-03-22

Velg tid: 08:30

Velg hendelse: Velg hendelse


Legg til i listen

Avbryt Lagre

Liste over lagt til hendelser (4)

Dato/Tid	Sort	Hendelser
22 mar 2024 08:30		- Toalettbesøk med resultat - Toalettbesøk uten resultat - Avføring - Lekkasje

FORHÅNDSVISE PÅGÅENDE KARTLEGGINGER

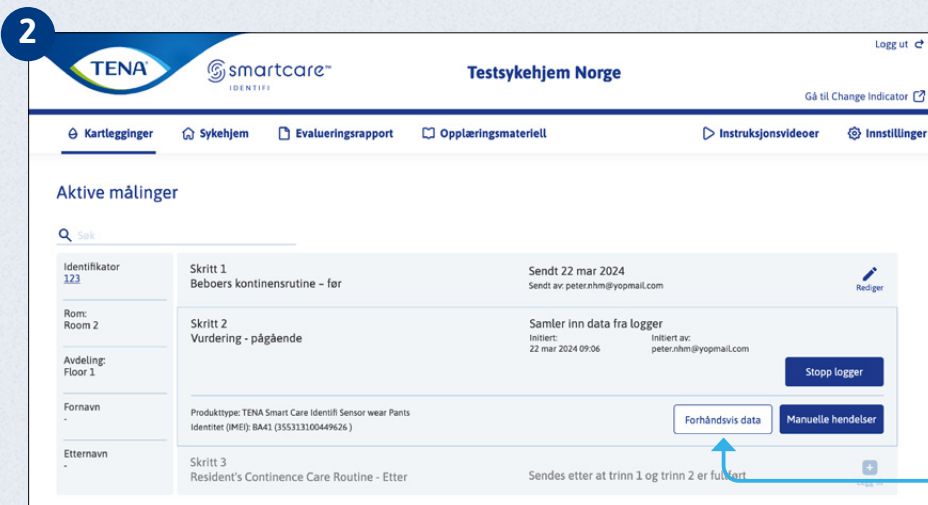


I løpet av de 72 timene kan du forhåndsvisse TENA SmartCare Identifi™-kartleggingsrapporten.

Klikk på **Pågående kartlegginger**


Klikk på **Forhåndsvis data**.

Rapporten åpnes i samme vindu.

Rapporten kan også lastes ned som en PDF-fil.

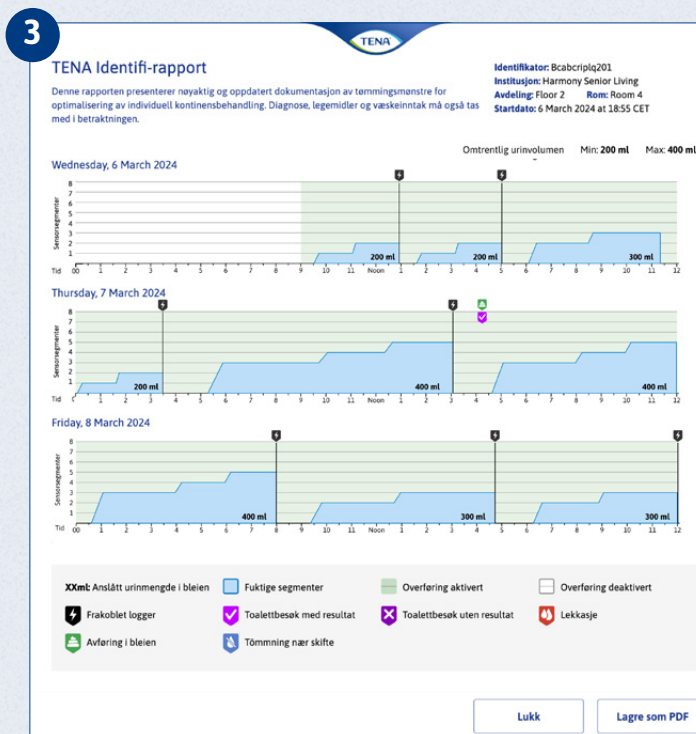


STOPP EN KARTLEGGING

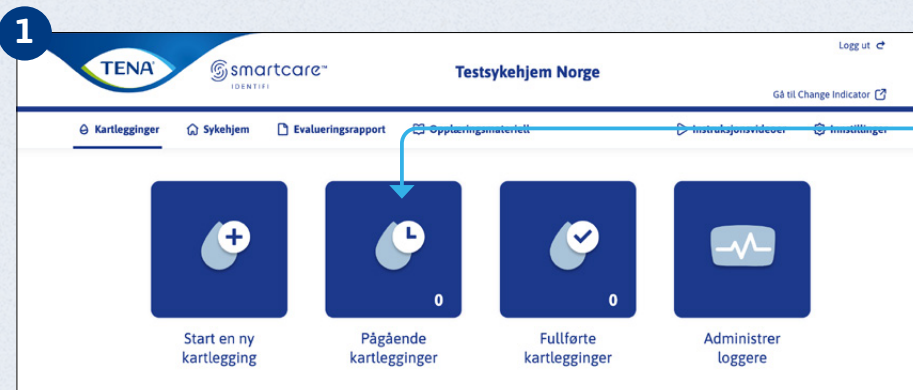

Klikk på **Pågående kartlegginger**.

Stopp kartleggingen etter 72 timer.

For den ønskede kartleggingen klikk på **Stopp logger**.

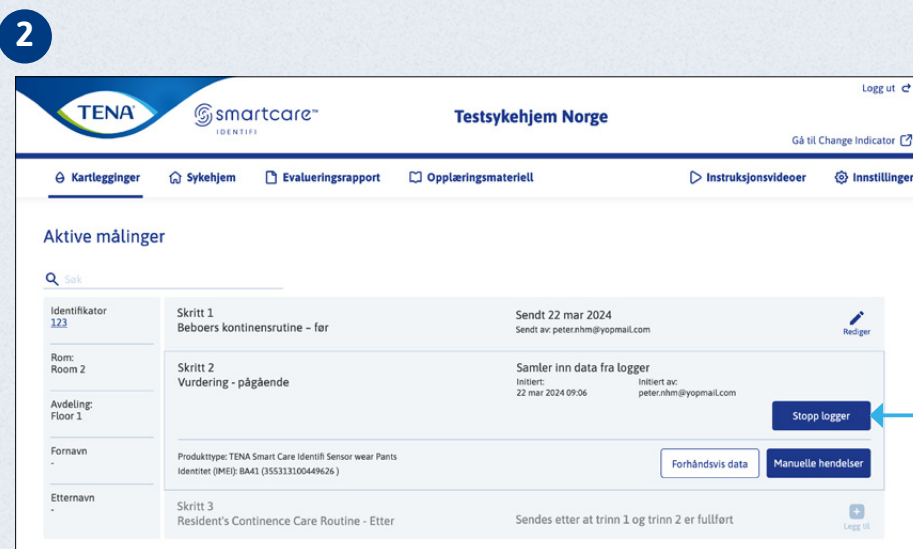

Før du klikker på **Stopp logger** på hurtigmenyskjermen, rengjør og returner loggeren til laderen for å sikre at alle data er overført.

Følg trinnene på side 13 for å fullføre kartleggingen.

FULLFØRE EN KARTLEGGING



1

The screenshot shows the 'Aktive målinger' section of the Tena SmartCare Identifi web interface. It lists three mappings. The first mapping is for 'Skritt 1 Beboers kontinensrutine - før' and 'Skritt 2 Vurdering - pågående'. A blue arrow points to the 'Angi som fullført' button next to the 'Skritt 2' row.

Identifikator	Skritt 1	Skritt 2	Skritt 3
123	Beboers kontinensrutine - før	Vurdering - pågående	Resident's Continence Care Routine - Etter
124	Beboers kontinensrutine - før	Vurdering - pågående	Resident's Continence Care Routine - Etter
125	Beboers kontinensrutine - før		

Angi som fullført

Klikk på **Angi som fullført** for å flytte den ferdige kartleggingen fra **Pågående kartlegginger** til **Fullførte kartlegginger**.

Dette gjøres for å skille pågående kartlegginger fra de som er fullført.

Klikk på **Angi som fullført**.

2

Fullfører kartlegging

Kartleggingen flyttes til Fullførte kartlegginger, og dette kan ikke reverseres. Du kan fortsatt redigere eller legge til trinn 1, trinn 3 og manuelle hendelser.

Avbryt Fullført




En kartlegging vil automatisk angis som fullført dersom dette ikke skjer innen 15 dager.


GENERERE KARTLEGGINGSRAPPORTER



Klikk på **Fullførte kartlegginger**.

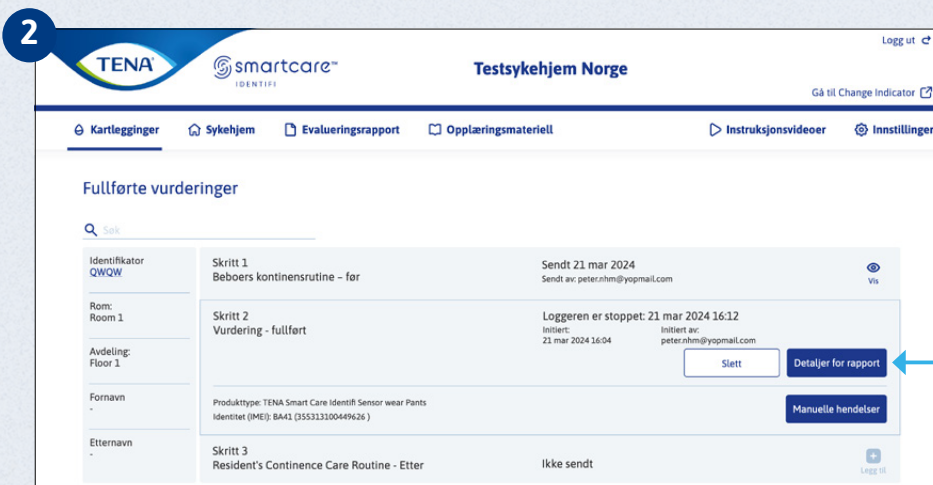


Klikk på **Detaljer for rapport** for den ønskede kartleggingen.
For å generere en fullført kartleggingsrapport

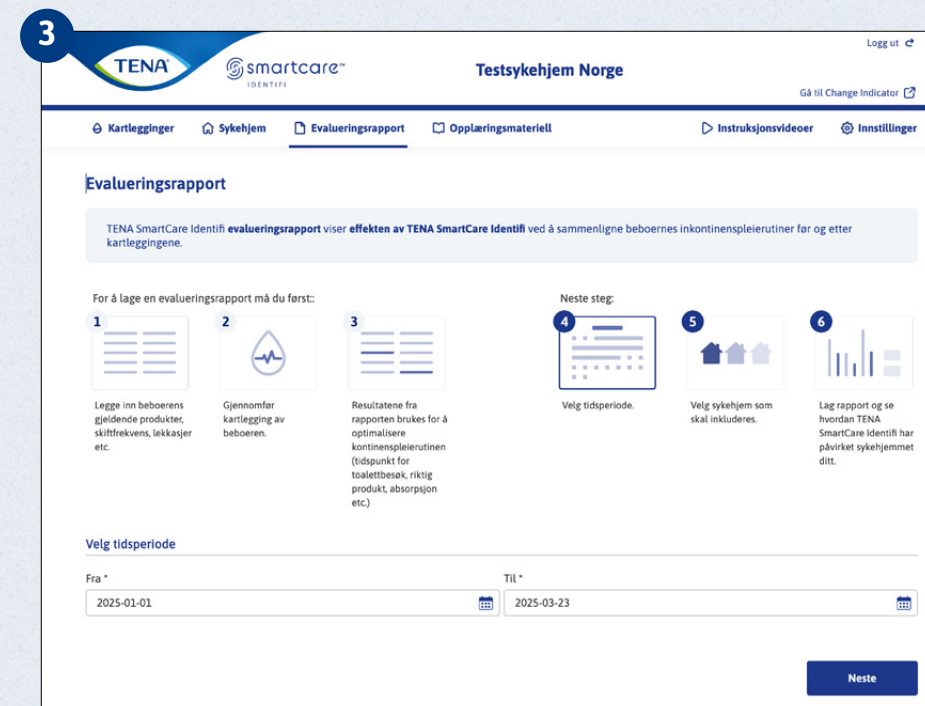

Angi ønskede **Datoer**. De nyligste kartleggingene vises først som standard. Klikk på **Lag rapport**.

GENERER KARTLEGGINGSRAPPORTER

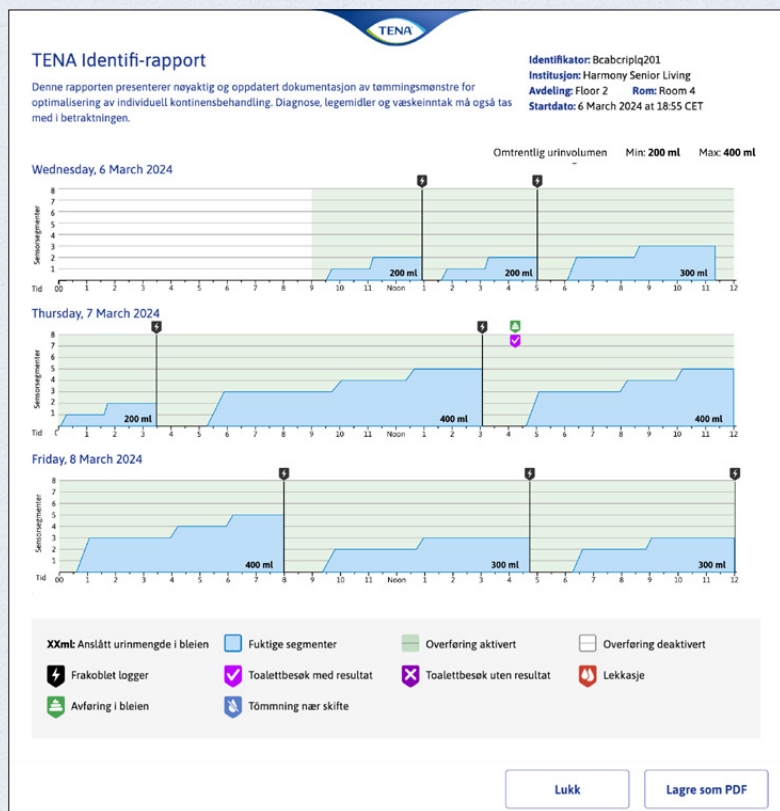

Kartleggingsrapporten gir en oversikt over vannlatningsmønsteret med tidspunkt og volum over en 72-timers periode, time etter time. Dataene som samles inn gjennom loggeren presenteres i en grafisk rapport som viser mønsteret av hvordan produktet har blitt fylt med urin.

Du finner brukermanualen for «hvordan tolke rapporten» under opplæringsmateriell i Webportalen.

TANKER RUNDT EN INDIVIDUELL PLEIEPLAN

Den individuelle pleieplanen har innhold:

- Individuell plan for toalettbesøk for å finne mest optimale tid for skift og toalettbesøk for å unngå forstyrrelser på natt.
- Individuell plan for skift av produkt.
- Riktig inkontinensprodukt - riktig type, riktig absorpsjonsnivå og riktig størrelse.

Hvordan nå målet:

MÅL 1 - Finn de riktige tidspunktene for toalettbesøk

MÅL 2 - Sammenhengende nattesøvn med færrest mulige forstyrrelser

MÅL 3 - Finn det mest egnete produktet og absorpsjon for beboeren behov på dag og natt

Når du setter opp pleieplanen, bør du også vurdere om det er andre ting å ta hensyn til for beboeren, slik som medisinering, hudstatus, mobilitet, personlige vaner og håndtering av avføring.

NESTE STEG?

Kommunikér fordelene

Effektiv kommunikasjon og samarbeid mellom beboer, pårørende og pleiepersonell, øker beboerens sikkerhet og den gode omsorgen.

Vis rapporten

Vis rapporten til personalet og forklar grunnlaget for den nye pleieplanen.

Følg jevnlig opp

Informasjon om hvordan du følger opp.

TOLKNING AV RAPPORTEN BEBOERENS PLEIEPLAN

HVA BØR MAN TENKE I GJENNOM	SVAR
Hvor ofte og når på dagen kommer det urin i følge rapporten?	
Hvor mye urin har kommet i produktet?	
Hva slags mønstre ser du gjennom de tre dagene?	
HVA BØR MAN TENKE I GJENNOM	SVAR
Er det noe annet å ta hensyn til for denne beboeren (medisiner, vaner og alder)?	
Hva er det mest passende tidspunktet for toalettbesøk?	
Når bør produktskifte gjøres for å forstyrre beboer minst mulig?	
Når bør nattproduktet bli satt på?	
Når bør det siste toalettbesøket gjennomføres?	
Hvilket produkt er mest egnet?	Dag: Natt:
Hvilken absorpsjon behøves for dag/natt?	Dag: Natt:

Hver rapport kommer med en del hvor du kan legge inn informasjon fra rapporten for å forbedre pleieplanen for beboeren.

For eksempel: finne riktige toalettider, finne det best egnede produktet og skape lengre perioder med uforstyrret søvn.

Du kan laste ned en redigerbar versjon som lar deg legge til eller endre notater i rapporten


FULLFØRTE KARTLEGGINGER (STEG 3*)



Når kartleggingen er analysert, legg til kontinenspleierutinen for «etter».



Velg **Fullførte kartlegginger** fra menyen.

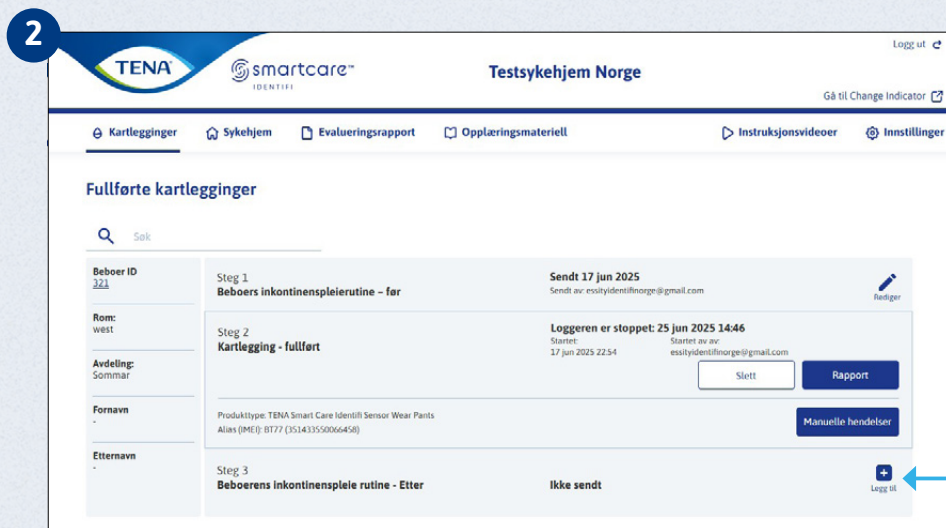

Klikk her for å legge til en kontinenspleierutine til kartleggingen.

3

Legg til detaljer for kontinenspleierutinen og klikk på **OK**.

Dette kan også gjøres under **beboer** – se side 24

* Denne gjelder kun for de med tilgang til evalueringsrapporten.


ARKIVERTE KARTLEGGINGER




Kartlegginger eldre enn 90 dager lagres under **Arkiverte kartlegginger**.

Klikk på **Fullførte kartlegginger**.

Bla ned til slutten av siden for fullførte kartlegginger.

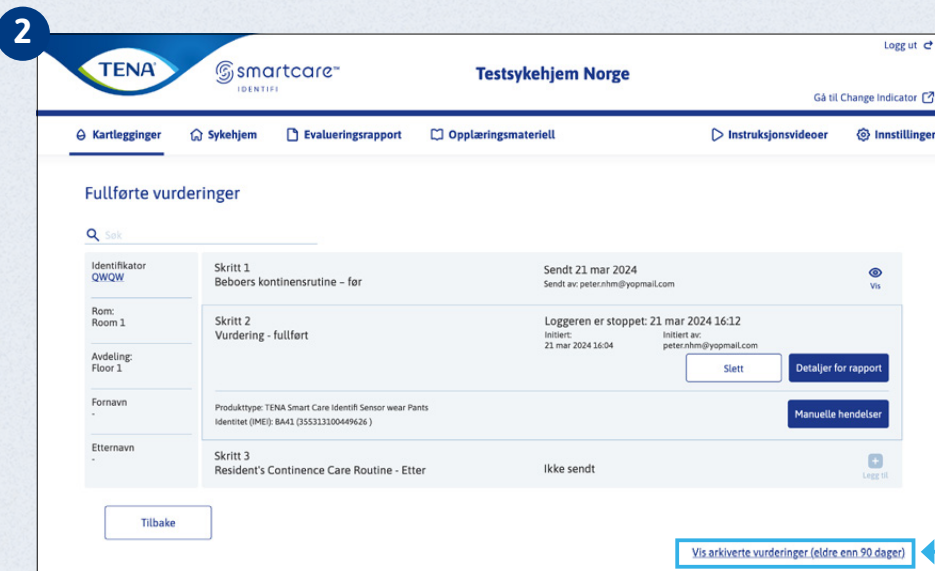

Klikk på **Arkiverte kartlegginger**.

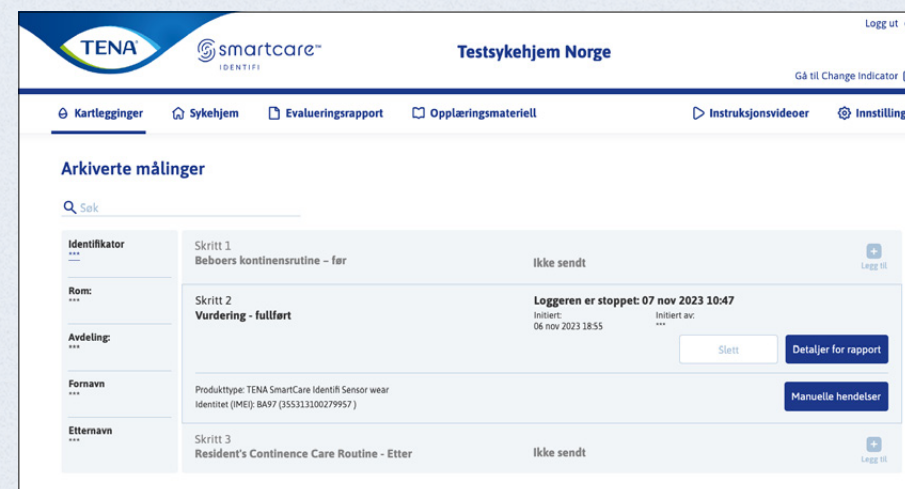

Listen over arkiverte kartlegginger vises. Klikk på **Detaljer for rapport** for å vise en rapport.

GENERER EVALUERINGSRAPPORT



1

2

Testsykehjem Norge

Kartlegginger Sykehjem **Evalueringsrapport** Opplæringsmaterieil Instruksjonsvideoer Innstillinger

Evalueringsrapport

TENA SmartCare Identifi **evalueringssrapport** viser effekten av TENA SmartCare Identifi ved å sammenligne beboernes inkontinenspleierutiner før og etter kartleggingene.

For å lage en evalueringsrapport må du først:

1. Legge inn beboers gjeldende produkter, skiftfrekvens, lekkasjer etc.
2. Gjennomfar kartlegging av beboeren.
3. Resultatene fra rapporten brukes for å optimalisere kontinenspleierutinen (tidspunkt for toalettbesøk, riktig produkt, absorpsjon etc.)

Neste steg:

4. Velg tidsperiode.
5. Velg sykehjem som skal inkluderes.
6. Lag rapport og se hvordan TENA SmartCare Identifi har påvirket sykehjemmet ditt.

Velg tidsperiode

Fra * Til *

2025-01-01 2025-03-23

Velg datoene for perioden du vil vise.

Velg **Evalueringsrapport** fra menyen

3

Testsykehjem Norge

Kartlegginger Sykehjem Evalueringsrapport Opplæringsmaterieil Instruksjonsvideoer Innstillinger

Evalueringsrapport: 2025-01-01 - 2025-03-23

Søk

Sykehjem	Kommune	Antall beboere
Harmony Senior Living	Harmony Senior Living	1/10

Tilbake < 1 >

Via beboere

Generer rapport

Beboere - Harmony Senior Living

ID	Identifikator	Vurderingsdato
☒ 24280	008HSLb7	18 mar 2024 - 18 mar 2024

Avbryt Lagre

Vis **beboere** viser hvilke beboere som inkluderes i rapporten.

Klikk på **Generer rapport** for å opprette en rapport som du kan laste ned.

HVA INNEHOLDER RAPPORTEN?



Rapporten er laget basert på resultatene fra sammenligning av rutineene før og etter kartleggingen, og er tilgjengelig som PDF (Se instruksjonen nedenfor for utskrift av PDF-en).


Rapporten viser ulike data som er samlet inn, og lar deg evaluere endringene før og etter kartleggingen (for eksempel tid bruk, forbedret nattesøvn, mer optimaliserte toalett tider, kostnader, CO2-påvirkning...)

Skrive ut rapporten


Vær oppmerksom på at du kanskje må justere 2 innstillinger når du skriver ut. Klikk på **Lagre som PDF** og **Inkluder bakgrunnsgrafikk** for å se rapporten i sin helhet.

LEGGE TIL EN NY KONTO

ADMINISTRATOR

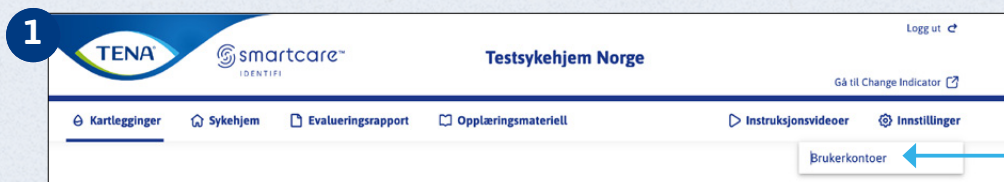

Klikk på **Innstillinger** og deretter på **Brukerkontoer**.

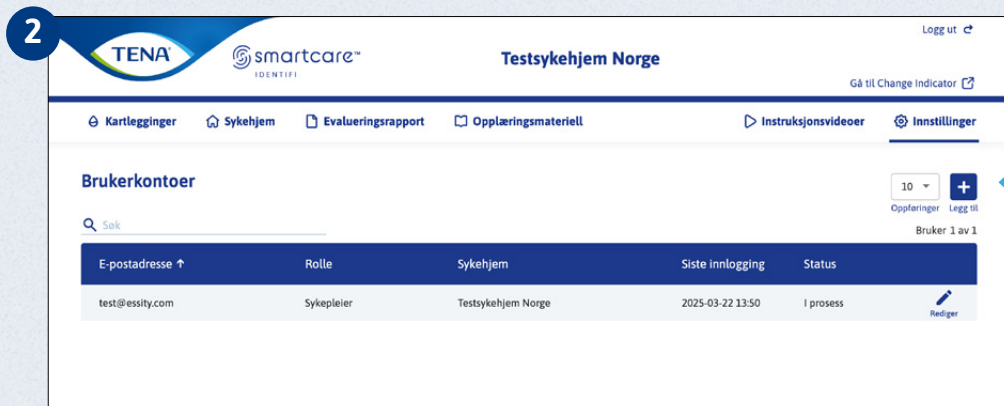

Klikk på **Legg til**.

Fyll inn feltene og klikk på **Send inn** for å opprette en ny brukerkonto.

Opprett ny konto

Tilgang til funksjonalitet

☒ Sykehjemsadministrator ☐ Sykepleier

Tilgang til sykehjem

☒ Velg alle

☒ Harmony Senior Living

Generelle innstillinger

E-postadresse * Mobiltelefonnummer * Dette feltet er obligatorisk

Spåk *


☒ Overvåkingsrapport

Overvåkingsrapporten sammenligner statusen til den enkelte omsorgsmottaker og/eller pleieinstitusjon før og etter at endringene er utført ved hjelp av TENA SmartCare Identifi Assessment. Brukeren vil kunne se endringer i kostnad, personaltid og effektvurderinger har hatt på omsorgsmottakere.


Tilgang til evalueringsrapport kan gis eller tilbakekalles av administratoren.

Hvis du har flerfaktorautentisering, kan du bli autorisert via e-post eller telefon, avhengig av hvilke kontaktopplysninger du har oppgitt.


REDIGERE ELLER FJERNE BRUKERKONTO

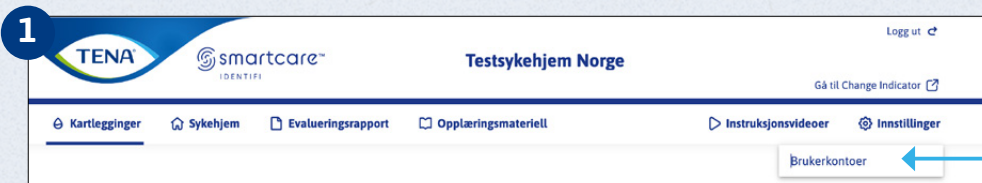

Klikk på **Innstillinger** og deretter på **Brukerkontoer**.

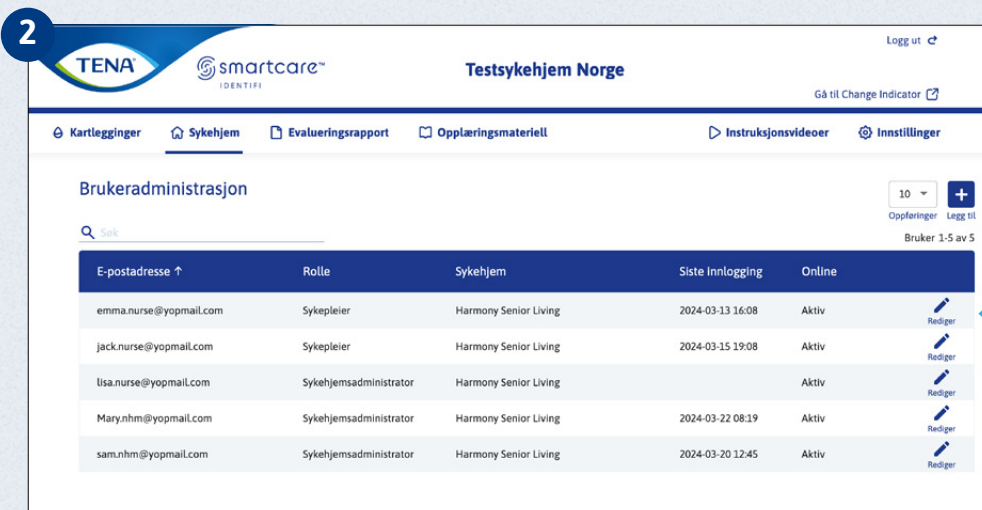

Klikk på brukernavnet du ønsker å redigere. Rediger detaljene og klikk på **Send inn**.

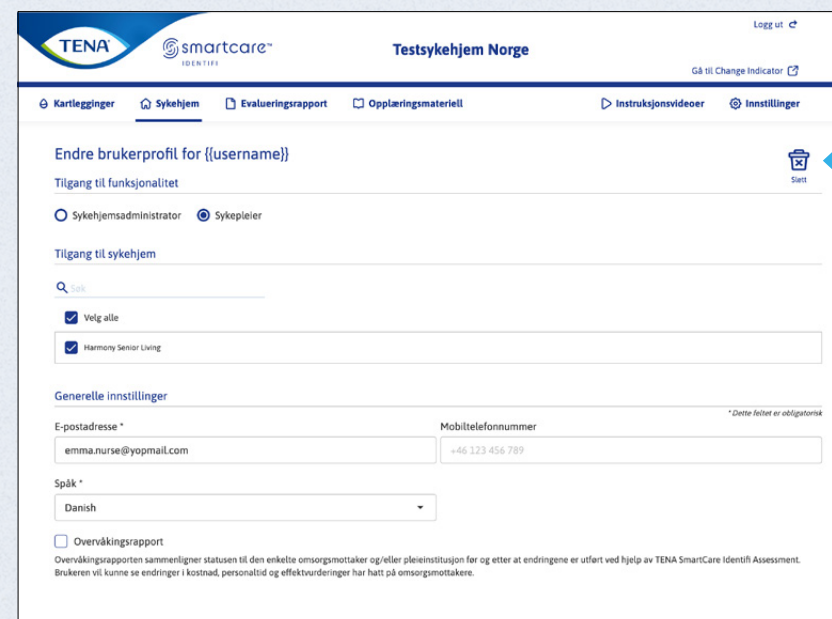

Klikk på **Slett** for å slette en konto og klikk på ikonet øverst i nettleseren.


ADMINISTRERE AVDELINGER



Klikk på **Sykehjem**.



Klikk på **Avdelinger**.

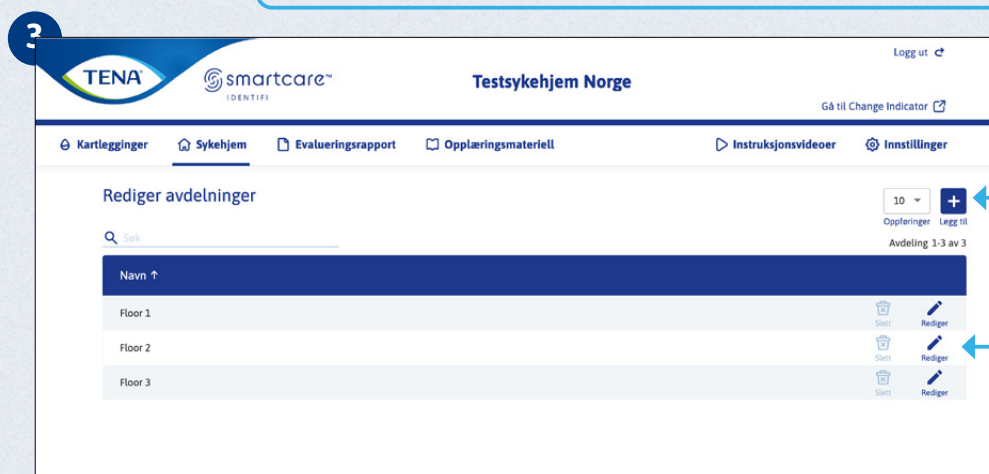


Klikk på **Legg til** for å opprette en ny avdeling.

Eller klikk på **Rediger** ved siden av avdelingen du vil endre.


ADMINISTRERE ROM



Klikk på **Sykehjem**.

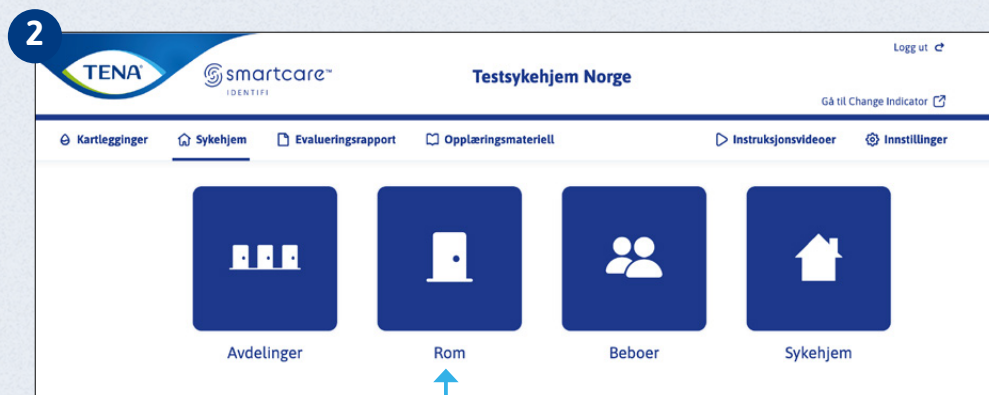

Klikk på **Rom**.

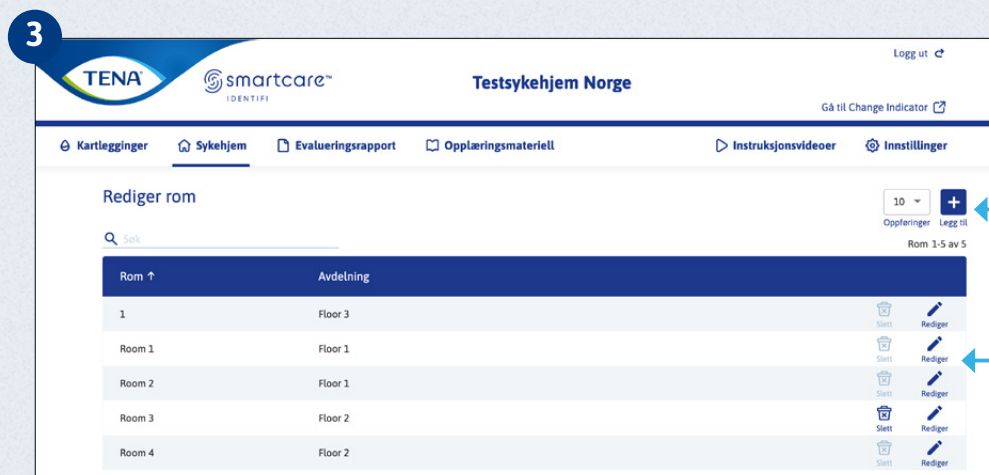

Klikk på **Legg til** for å opprette et nytt rom. Navngi det og angi det til en eksisterende avdeling.

Eller klikk på **Rediger** ved siden av rommet du vil endre.

Legg til rom

* Dette feltet er obligatorisk

Rom *

Navn *




Rediger rom

Du er nå beboere på dette rommet. * Dette feltet er obligatorisk

Rom *

Navn *

ADMINISTRERE BEBOERE

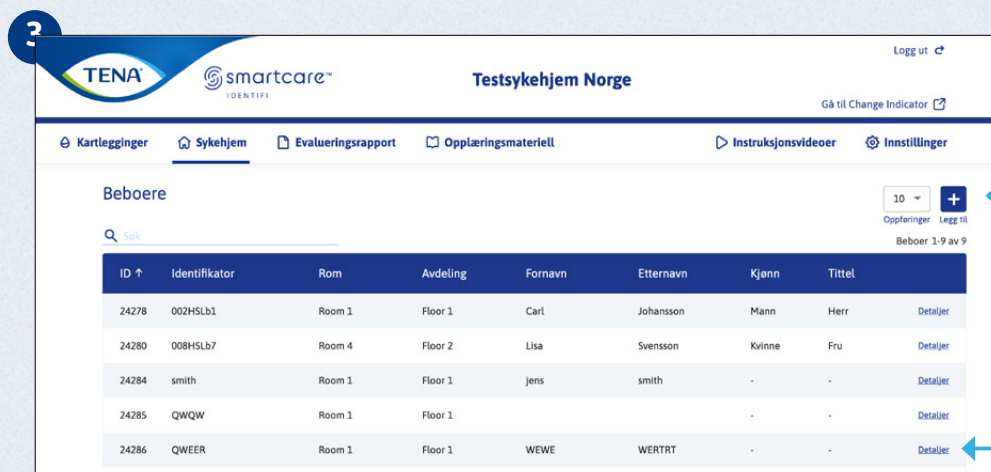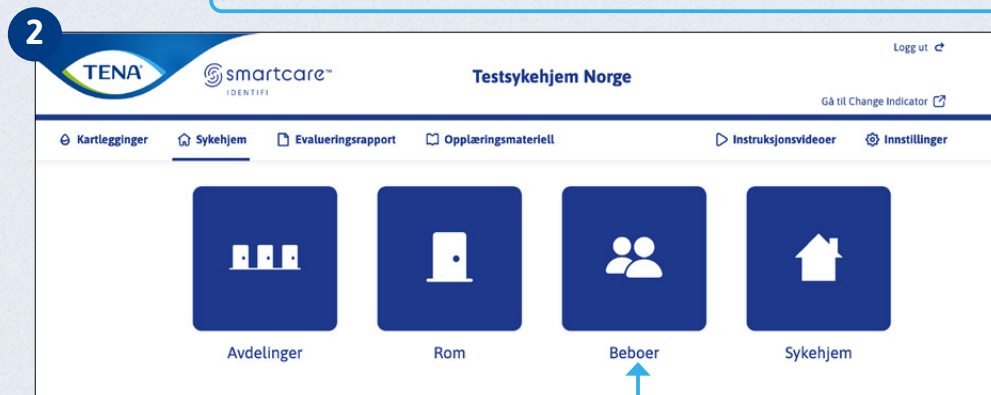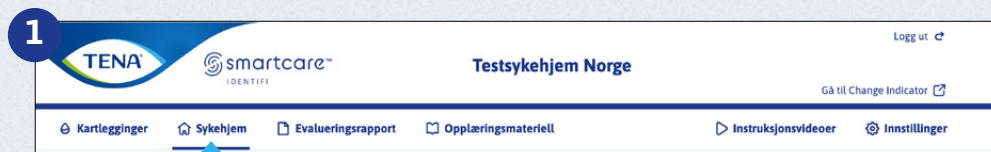


Klikk på **Sykehjem**.

Klikk på **Beboer**.

Klikk på **Legg til** for å opprette en ny beboer. Gi de en Identifikasjon (for å holde det anonymt) og tilordne dem til en eksisterende avdeling.



Eller klikk på **Detaljer** ved siden av beboeren du vil endre.

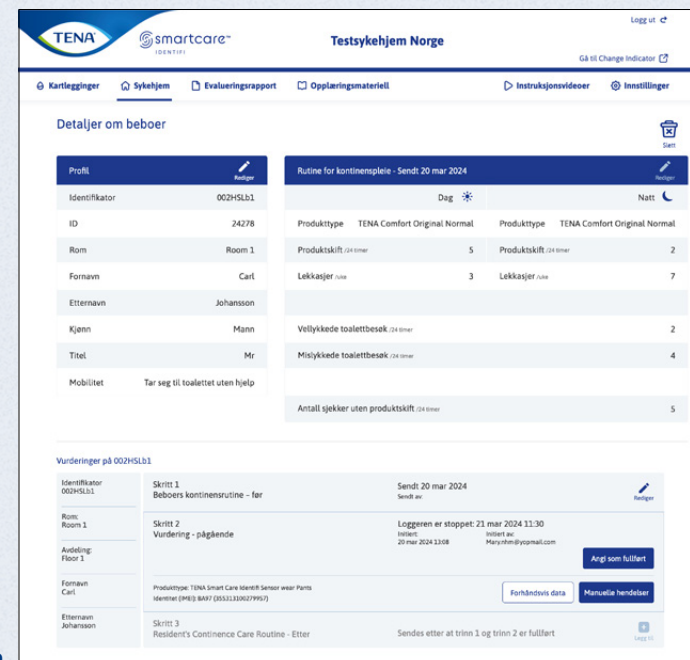

Merk: Opplysningene om beboeren viser alltid sist inn-sendte kontinensrutine dersom sykehjemmet har tilgang til evalueringsrapporten.

ADMINISTRERE SYKEHJEMMET

ADMINISTRATOR

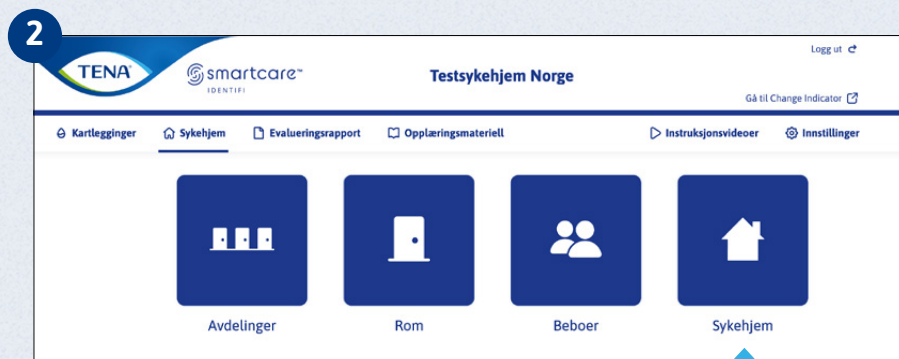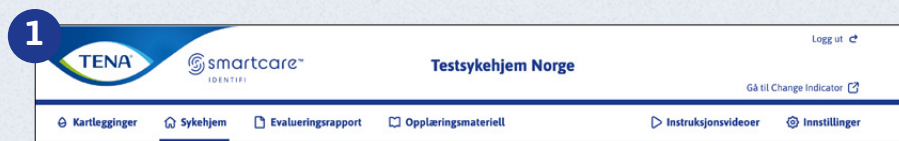

Klikk på ikonet **Sykehjem**.
Du kan deretter oppdatere data for beboere og sykehjemmet.

Klikk på **Sykehjem**.

! Innhente samtykke
Du kan krysse av i boksen for å aktivere en påminnelse om å få samtykke fra beboeren før du starter en kartlegging.

! Flerfaktor-autentisering Dette krever at brukere har registrert mobilnummeret sitt på profilen.


Klikk på **Lagre** nederst på siden.

INNSTILLINGER FOR EVALUERINGSRAPPORT

ADMINISTRATOR



Innstillinger for evalueringsrapporten kan justeres hvis noen verdier endres. Verdiene som er lagt inn i innstillinger for evalueringsrapport, tilgjengelig under **Administrere sykehjem** brukes som grunnlag for å generere resultatene av evalueringsrapporten.

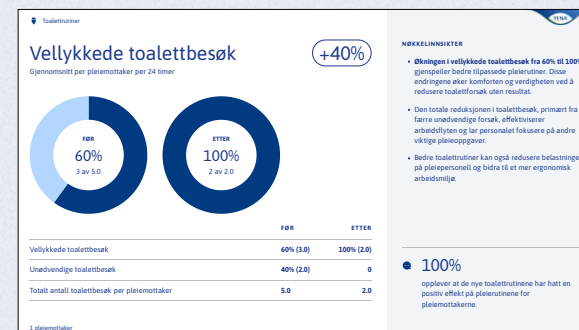

INSTRUKSJONSVIDEOER OM OFTE STILTE SPØRSMÅL



1

Logg ut

Gå til Change Indicator

Kartlegginger Sykehjem Evalueringsrapport Opplæringsmaterieell Instruksjonsvideoer Innstillinger

Hjelp

Søk

Før kartleggingen
Hva du trenger før du starter en kartlegging

Skifte TENA Identifi Sensor Wear
Ikke glem å ta av loggeren før du kaster den brukte TENA Identifi Sensor Wear

TENA Identifi stående fiksering
Brukerinstruksjoner for å feste TENA Identifi Sensor Wear på en person som står oppreist.

TENA Identifi liggende fiksering
Brukerinstruksjoner for å feste TENA Identifi Sensor Wear på en person som ligger.

TENA Identifi Pants
For beboere som selv skifter inkontinensproduktet.

Grønt lys
Etter at TENA Identifi-loggeren er plassert på produktet, blinker det grønt i 15 sekunder. Dette betyr at det fungerer.

Klikk på **Instruksjonsvideoer**.

Klikk på **en video** for å se mer detaljer.

OPPLÆRINGSMATERIELL



1

Logg ut

Testsykehjem Norge

Gå til Change Indicator

Kartlegginger Sykehjem Evalueringsrapport **Opplæringsmateriell** Instruksjonsvideoer Innstillinger

Kilder

Norway

- 1.TENA Identifi Web Portal Brukermanual.pdf
- 2.Ark TENA Identifi - Step-by-step guide.pdf
- 3.Registrering Toalettbesøk.pdf
- 4.Før - Ettermåling.pdf
- 5. Nytt Tilbakemeldingsskjema.pdf
- A4 poster.pdf
- TENA identifi Technical description 2020-06-29.pdf
- TENA Identifi- How to interpret the report_EN.pdf
- TENA_Identifi_tech_description_EN.pdf
- TENA Webportal Instruction Guide NO.pdf
- Diary Smartcare Identifi_nb-NO_final deliverable.pdf
- (TI-1383-02) TENA Identifi Web Portal Guide_NO.pdf

Opplæringssiden inneholder forskjellig materiale for å støtte bruken av TENA SmartCare Identifi.

Fra den øverste menyen klikker du på **Opplæringsmateriell**.

Vise / Last ned en fil

En liste over tilgjengelige filer vises.

Klikk på den ønskede filen for å laste ned / vise.

