

TENA SMARTCARE IDENTIFI™ LEITFADEN FÜR DAS WEBPORTAL



Weiter →

TENA SmartCare Identifi™

INHALT



INHALT	2
EINFÜHRUNG	3
ERSTE SCHRITTE	
Konto aktivieren / Einloggen	5
ASSESSMENT	
Warum braucht es einen Monitoring-Bericht	6
Neues Assessment	
Neues Assessment starten	7
Logger verschieben	8
Neuen Bewohner registrieren	9
Start eines neuen Assessments	10
Laufendes Assessment	
Manuelle Ereignisse hinzufügen	11
Vorschau auf das aktuell laufende Assessment	12
Assessment stoppen	13
Assessment abschließen	14
Abschlussbericht generieren	15
Abschlussbericht interpretieren	17
Archivierte Assessments	18

MONITORING-BERICHT

Monitoring-Bericht generieren	19
Was enthält der Monitoring-Bericht	20

BENUTZER

Neues Benutzerkonto hinzufügen (Nur für Administratoren)	21
Benutzerkonto bearbeiten oder entfernen	22

EINSTELLUNGEN

Wohnbereiche bearbeiten	23
Zimmer bearbeiten	24
Bewohner verwalten	25
Pflegeeinrichtung verwalten (Nur für Administratoren)	26
Dateneinstellungen für Überwachungsberichte (Nur für Administratoren)	27

HILFE

Videos mit Anweisungen und Antworten auf Fragen	28
Bedienungsanleitungen	29

EINFÜHRUNG



Dieses Benutzerhandbuch ist für Pflegekräfte und Administratoren bestimmt.

Das TENA SmartCare Identifi™ System soll bei der Miktionsbeurteilung der Bewohner helfen, damit die geeignetste Produktauswahl getroffen, die Toilettenzeiten geplant und die Routinen zur Kontinenzpflege an den Patienten angepasst werden können. Der Beurteilungszeitraum beträgt 72 Stunden.

Das TENA SmartCare Identifi™ System besteht aus drei Teilen: Sensor Wear, Logger-Kit und Berichtssystem.

Ziel des TENA SmartCare Identifi™ Monitoring-Berichts ist es, die Logger-Daten zu erfassen und zu präsentieren. Das Berichtssystem wird genutzt, um Beurteilungen zu starten und danach das Ergebnis in Berichten darzustellen.

Das TENA SmartCare Identifi™ Berichtssystem ermöglicht die Erfolgskontrolle und -verfolgung mithilfe von Assessments. Die Monitoring-Berichte zeigen den optimalen Versorgungsplan, indem die Routinen zur Kontinenzpflege vor und nach dem Einsatz der Assessments verglichen werden.



HINWEIS: Das TENA SmartCare Identifi™ System misst die Harnmenge in der Inkontinenzversorgung. Das System sollte nicht zur Überwachung der Flüssigkeitszufuhr verwendet werden.



EINFÜHRUNG FORTS.



Eine neue Funktion des TENA SmartCare Identifi™ Systems ist der Monitoring-Bericht. Der Monitoring-Bericht ist eine nützliche Ergänzung für Pflegeeinrichtungen, da er ihnen den Gesamtwert aufzeigt, wenn die Pflege beurteilt wird.


Er liefert der Einrichtung Informationen über die verwendeten Produkte, die Bedürfnisse der Bewohner und sich ändernde Routinen, sodass sie ihre Pflegepläne entsprechend erstellen werden können.

Der Monitoring-Bericht ist eine Funktion, die bei der Implementierung des Systems hinzugefügt wird und an Nutzerzugriffe gekoppelt ist. Er kann nicht von Administratoren hinzugefügt oder gelöscht werden.

Einen Überblick über die Vorteile des Systems für Ihre Pflegeeinrichtung finden Sie auf Seite 6.

Wie Sie die Einstellungen ändern können, um größtmöglichen Nutzen aus dem Monitoring-Bericht zu ziehen, erfahren Sie auf Seite 27.

Zugriff auf das Webportal für den Wechselindikator Pflegeeinrichtungen, die sowohl TENA SmartCare Identifi™ als auch den TENA SmartCare Change Indicator™ verwenden, können auf beide Webportale zugreifen, indem sie auf **Gehe zu Change Indicator klicken**.

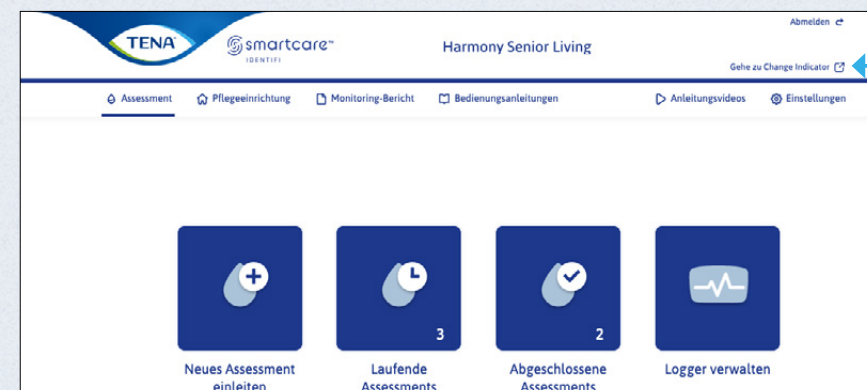

KONTO AKTIVIEREN / EINLOGGEN



Passwort festlegen für anna.anderson@nursinghome.com

Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein und mindestens 3 der folgenden Zeichentypen enthalten:

- Kleinbuchstaben (a–z)
- Großbuchstaben (A–Z)
- Zahlen (0–9)
- Sonderzeichen (@#\$%^& usw.)

Das aktuelle Passwort kann nicht erneut verwendet werden.

Passwort

Passwort bestätigen

Passwort zurücksetzen

Aktivieren Sie Ihr Konto über den Link, den Sie an Ihre E-Mail-Adresse gesendet bekommen haben.

• Geben Sie ein **Passwort** ein.

• Klicken Sie auf **Passwort festlegen**.

Geben Sie nach der Einrichtung des Kontos einfach Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein und klicken Sie auf **Einloggen**.

• Haben Sie Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie auf **Passwort zurücksetzen**, um ein neues Passwort zu erstellen.

Multi-Faktor-Authentifizierung

Beim Login mittels Multi-Faktor-Authentifizierung wird ein Verifizierungscode an eine registrierte Telefonnummer oder E-Mail-Adresse gesendet. Geben Sie den Code ein, um sich anzumelden.

WARUM BRAUCHT ES EINEN MONITORING-BERICHT



Wenn Ihre Pflegeeinrichtung über Zugriff darauf verfügt, wird die Option Monitoring-Bericht im Menü angezeigt. Der Monitoring-Bericht liefert Ihnen zusätzliche Daten, die den Wert von TENA SmartCare Identifi™ zeigen, indem die Kontinenzpflegeroutinen der Bewohner vor und nach Einsatz der Beurteilung verglichen werden.*



Bei aktiviertem Monitoring-Bericht wird dieses Symbol angezeigt, wenn noch eine Maßnahme aussteht, um die Beurteilung abzuschließen.

Warum sollten Sie den Monitoring-Bericht nutzen?

Schritt 1



Kontinenzpflege-Routine – Vorher

Alle Informationen über den Pflegeablauf der Bewohner, die verwendeten Produkte, Wechselzeiten und -häufigkeit werden protokolliert, um eine Beurteilung zu erstellen.


Schritt 2



Beurteilung und Analyse

Nach einer 72-Stunden-Testphase können Sie die vorgenommenen und protokollierten Änderungen einsehen und die im Testzeitraum von TENA SmartCare Identifi™ über den Bewohner gesammelten Daten analysieren.

Schritt 3

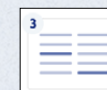


Kontinenzpflege-Routine – Nachher

Anhand der Daten kann ein neuer Ablauf eingerichtet werden, der den Prozess sowohl für Pflegekräfte als auch Bewohner rationalisieren sollte und oftmals mit einem geeigneteren Produkt, selteneren Wechseln und einem besseren Pflegeplan einhergeht. Die Monitoring-Berichte werden gespeichert und jedes Assessment kann mit dem vorherigen verglichen werden.

*Der Monitoring-Bericht ist an den Nutzerzugriff gekoppelt und kann nicht vom Administrator hinzugefügt oder gelöscht werden.

NEUES ASSESSMENT STARTEN

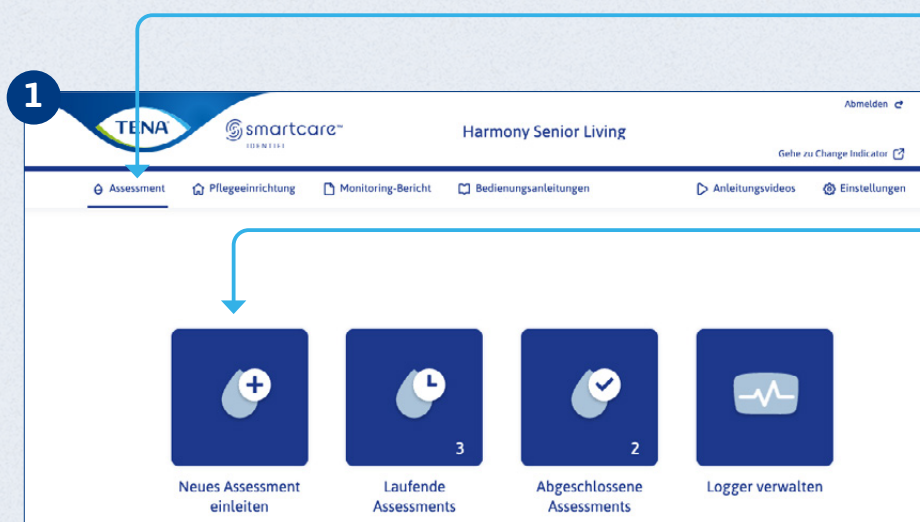


- Klicken Sie im Hauptmenü zunächst auf **Assessment**
- und danach auf **Neues Assessment**.

Schritt 1 ist nur verfügbar, wenn die Pflegeeinrichtung Zugriff auf den Überwachungsbericht hat.



- Damit eine neues Assessment eingeleitet werden kann, müssen Bewohner registriert sein.
- Klicken Sie bei einer bereits registrierten Bewohner auf **Auswählen** oder klicken Sie auf **Hinzufügen**, um einen neuen Bewohner zu registrieren.

LOGGER VERSCHIEBEN

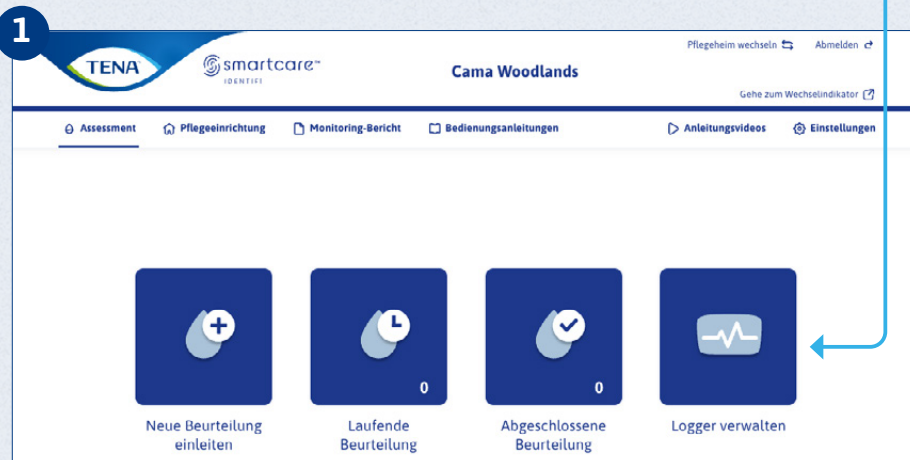


Sie haben die Möglichkeit, Logger zwischen Pflegeeinrichtungen zu verschieben. Wählen Sie einfach **Logger verwalten** aus, um das Gerät von einer Pflegeeinrichtung in eine andere zu übertragen. Stellen Sie dabei sicher, dass der Logger in der richtigen Einrichtung registriert ist. **Hinweis:** Nur ein Administrator kann einen Logger zwischen Pflegeeinrichtungen verschieben, auf die er innerhalb derselben Pflegegruppe Zugriff hat.

Klicken Sie auf den **Verschieben-Pfeil** neben dem Logger, den Sie verschieben möchten, und wählen Sie dann die neue Einrichtung aus dem Dropdown-Menü im Dialogfeld aus.





NEUEN BEWOHNER REGISTRIEREN

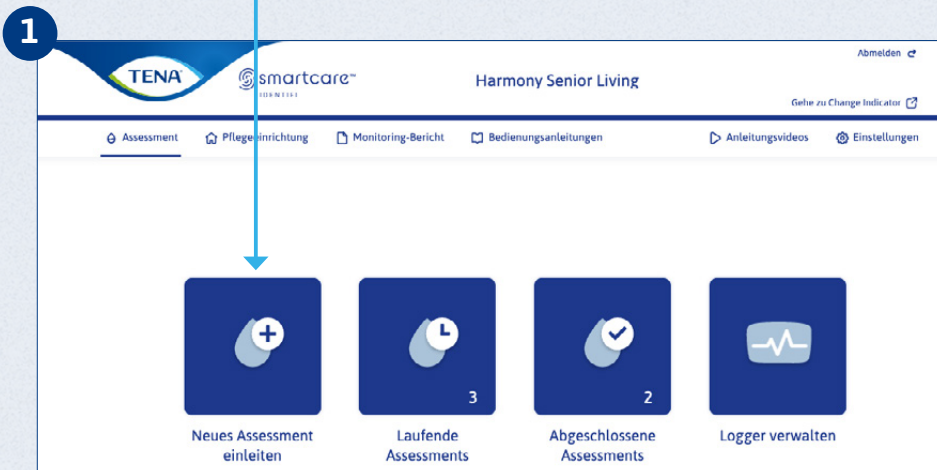

Klicken Sie im Hauptmenü zunächst auf **Pflegeeinrichtung** und dann auf **Neues Assessment einleiten**.

Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um einen neuen Bewohner anzulegen.

Füllen Sie alle Pflichtfelder aus. Bei **Kennung** handelt es sich um den Codenamen für den Bewohner.

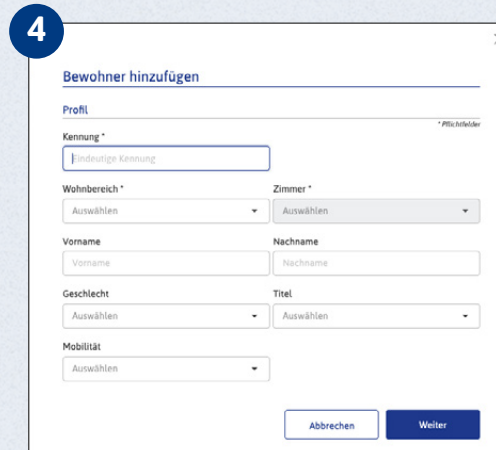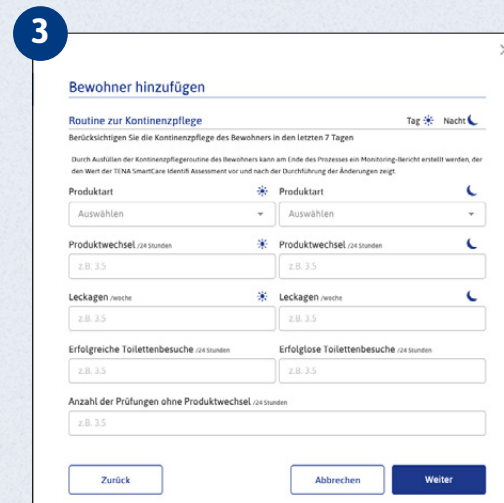

START EINES NEUEN ASSESSMENTS



1

TENA smartcare IDENTIFI Harmony Senior Living

Abmelden

Geh zu Change Indicator

Assessment Pflegeeinrichtung Monitoring-Bericht Bedienungsanleitungen Anleitungsvideos Einstellungen

Neues Assessment - Bewohner auswählen oder hinzufügen

Suchen

10 +

Einträge hinzufügen

Bewohner 1-3 von 3

ID ↑	Kennung	Zimmer	Wohnbereich	Vorname	Nachname	Geschlecht	Titel	
24284	smith	Room 1	Floor 1	jens	smith	-	-	Auswählen
24285	QWQW	Room 1	Floor 1	-	-	-	-	Auswählen
24286	QWEER	Room 1	Floor 1	WEWE	WEERT	-	-	Auswählen

Klicken Sie im Hauptmenü zunächst auf **Assessment**.

Klicken Sie auf **Auswählen** neben dem Bewohner, für die Sie eine Beurteilung starten möchten.

Tragen Sie im Dialogfenster Neues Assessment für Schritt 1* und 2 die Angaben zum Bewohner ein. Klicken Sie anschließend auf **Einleiten**, um das Assessment zu starten.

2

Neues Assessment Tag Nacht

Schritt 1: Kontinenzpflegeroutine des Bewohners

Berücksichtigen Sie die Kontinenzpflege des Bewohners in den letzten 7 Tagen

Kenntnis: QWQW

Durch Ausfüllen der Kontinenzpflegeroutine des Bewohners kann am Ende des Prozesses ein Monitoring-Bericht erstellt werden, der den Wert der TENA SmartCare Identifi Assessment vor und nach der Durchführung der Änderungen zeigt.

Produktart Produktart

Auswählen Auswählen

Produktwechsel: 24 Stunden Produktwechsel: 24 Stunden

z.B. 3.5 z.B. 3.5

Leckagen: Leckagen:

z.B. 3.5 z.B. 3.5

Erfolgreiche Toilettenbesuche: 24 Stunden Erfolgreiche Toilettenbesuche: 24 Stunden

z.B. 3.5 z.B. 3.5

Anzahl der Prüfungen ohne Produktwechsel: 24 Stunden

z.B. 3.5

Weiter

Neues Assessment Tag Nacht

Schritt 2: Neues Assessment einleiten

Kenntnis: QWQW * Pflichtfelder

Logger * Art der Sensor Wear *

Auswählen Auswählen

Erinnere dich an

- Informieren Sie den Bewohner über die Bewertung.
- Schließen Sie das Logger-Gerät an die Sensor Wear an und vergewissern Sie sich, dass die Batterie aufgeladen ist.

Zurück Abbrechen Einleiten

Assessment gestartet

Das Assessment wurde nun eingeleitet.

3

Vurdering er startet

Vurderingen er igangsæt på identifikator 002HSLb1

OK Igangværende vurderinger

*Nur für Pflegeeinrichtungen mit Zugriff auf den Überwachungsbericht verfügbar.

MANUELLE EREIGNISSE HINZUFÜGEN



Was sind manuelle Ereignisse?

Manuelle Ereignisse sind Ereignisse, die nicht vom Logger erfasst werden, wie z. B. Auslaufen, Stuhlgang oder Toilettengänge. Sie müssen während der 72-stündigen Testphase manuell hinzugefügt werden.

The screenshot shows the 'Laufende Assessments' section with two assessment cards. The second card, for 'Kenntung 008HSLb7', has the 'Manuelle Ereignisse' button highlighted with a blue arrow. The interface includes navigation tabs for Assessment, Pflegeeinrichtung, Monitoring-Bericht, Bedienungsanleitungen, Anleitungsvideos, and Einstellungen.

Manuelle Ereignisse verwalten

Klicken Sie auf **Manuelle Ereignisse**, um manuelle Ereignisse hinzuzufügen.

Wählen Sie **Datum** und **Uhrzeit** des Ereignisses aus.

The dialog box shows the 'Ereignis hinzufügen' section with fields for 'Anfangsdatum' (17 Mär 2024 13:26), 'Endtermin' (17 Mär 2024 13:34), 'Datum auswählen' (2024-03-17), and 'Wählen Sie die Uhrzeit' (13:30). The 'Ereignis auswählen' dropdown is open, showing 'Ereignis auswählen'. The 'Liste der hinzugefügten Ereignisse (0)' section is empty.



Wählen Sie **Ereignisse aus der Liste** aus. Sie können mehrere Ereignisse gleichzeitig auswählen. Klicken Sie auf **Zur Liste hinzufügen**.

The dialog box shows the 'Ereignis auswählen' dropdown open, displaying 'Mehrere Ereignisse ausgewählt' and 'Toilettengang erfolgreich'. The 'Liste der hinzugefügten Ereignisse (0)' section is empty.

The dialog box shows the 'Liste der hinzugefügten Ereignisse (3)' section with three events: '17 Mär 2024 13:30 Toilettengang erfolgreich', '17 Mär 2024 13:30 Toilettengang nicht erfolgreich', and '17 Mär 2024 13:30 Stuhl'. The 'Zur Liste hinzufügen' button is visible.

Wenn alle Ereignisse eingegeben wurden, klicken Sie auf **Speichern**.

VORSCHAU AUF DAS AKTUELL LAUFENDE ASSESSMENT

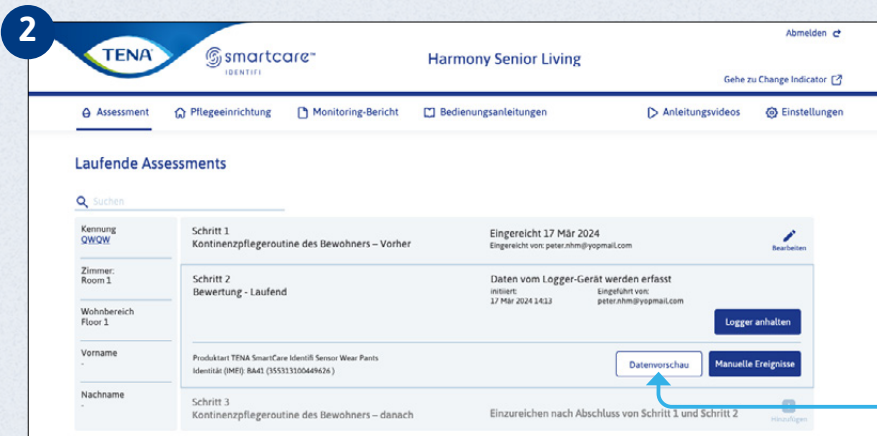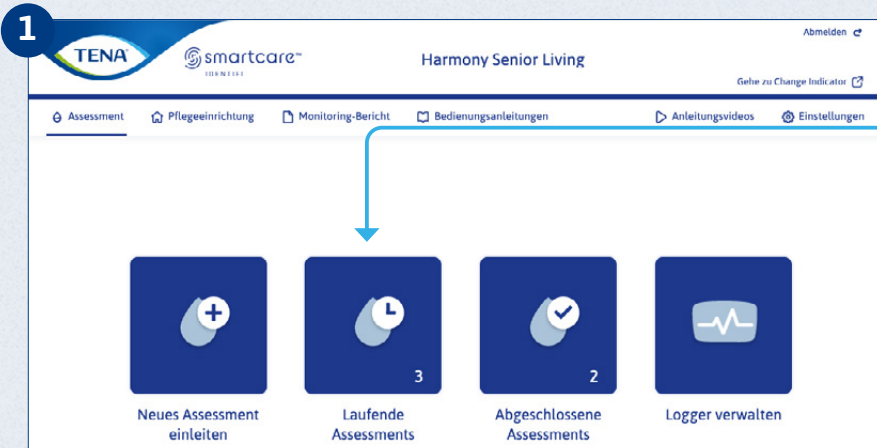


Während der 72 Stunden können Sie den TENA SmartCare Identifi™ Testbericht vorab einsehen.

Klicken Sie auf **Laufende Assessments**.

Klicken Sie auf **Datenvorschau**.

Der Bericht wird im selben Fenster geöffnet.


Der Bericht kann auch als PDF heruntergeladen werden.

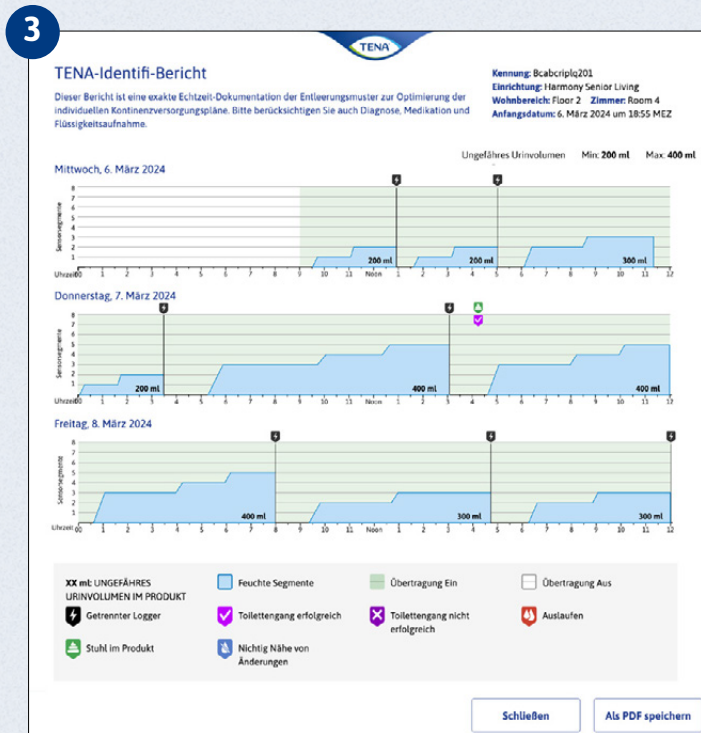

ASSESSMENT STOPPEN



1

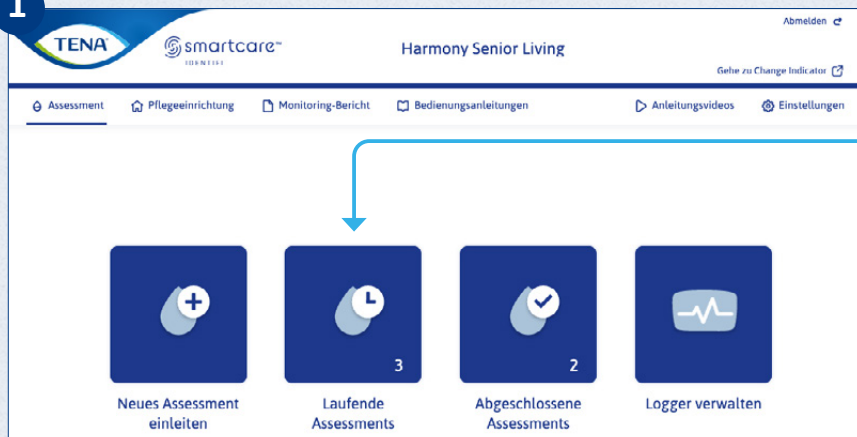


Klicken Sie auf **Laufende Assessments**.

Beenden Sie die Beurteilung nach 72 Stunden.

Klicken Sie für die gewünschte Beurteilung auf **Logger anhalten**.

2

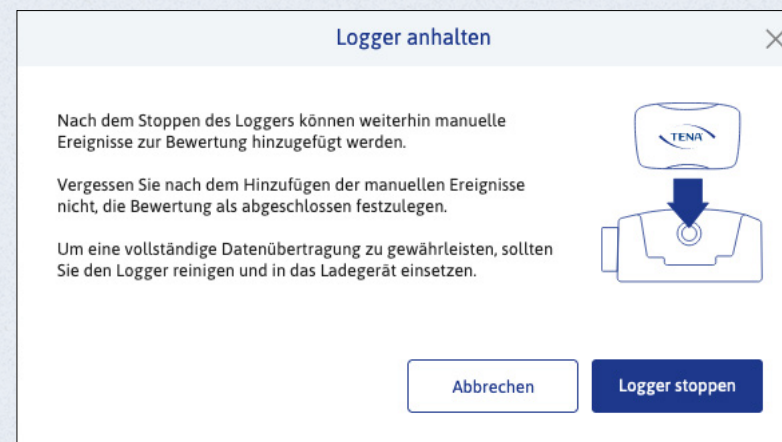

Bevor Sie auf dem Pop-up-Bildschirm auf **Logger stoppen** klicken, reinigen Sie den Logger und setzen Sie ihn in das Ladegerät zurück, um sicherzustellen, dass alle Daten übertragen wurden.

Bitte folgen Sie den Schritten auf Seite 12, um den Test abzuschließen.

ASSESSMENT ABSCHLIESSEN



1

TENA smartcare™ IDENTIFI Harmony Senior Living

Abmelden

Gehe zu Change Indicator

Assessment Pflegeeinrichtung Monitoring-Bericht Bedienungsanleitungen Anleitungsvideos Einstellungen

Laufende Assessments

Suchen

Kennung QWQW Zimmer: Room 1 Wohnbereich Floor 1 Vorname - Nachname -	Schritt 1 Kontinenzpflegeroutine des Bewohners – Vorher Schritt 2 Bewertung - Laufend Schritt 3 Kontinenzpflegeroutine des Bewohners – danach	Eingereicht 17 Mär 2024 Eingereicht von: peter.nhm@yopmail.com Logger angehalten 17 Mär 2024 14:57 initiert: 17 Mär 2024 14:13 eingeführt von: peter.nhm@yopmail.com Abschließen
Kennung 000151517 Zimmer: Room 4 Wohnbereich Floor 2 Vorname Lisa Nachname Svensson	Schritt 1 Kontinenzpflegeroutine des Bewohners – Vorher Schritt 2 Bewertung - Laufend Schritt 3 Kontinenzpflegeroutine des Bewohners – danach	Eingereicht 17 Mär 2024 Eingereicht von: peter.nhm@yopmail.com Logger angehalten 17 Mär 2024 13:34 initiert: 17 Mär 2024 13:26 eingeführt von: peter.nhm@yopmail.com Abschließen

Produktart TENA SmartCare Identifi Sensor Wear Pants Identifik (IMEI): 8A41 (3553333100449624)

Datenvorschau Manuelle Ereignisse

Einzureichen nach Abschluss von Schritt 1 und Schritt 2

Abschließen

Klicken Sie auf **Abschließen**, um die fertiggestellte Beurteilung von den **Laufenden Assessments** in die **Abgeschlossene Assessment** zu verschieben.

Damit sollen die laufenden von den abgeschlossenen Assessment getrennt werden.

Klicken Sie auf **Abschließen**.

2

Bewertung abschließen

Sie können die früheren Informationen zur Kontinenzpflegeroutine des Bewohners nicht mehr bearbeiten, sobald eine Bewertung als abgeschlossen festgelegt wurde.

Die Bewertung wird nach Abgeschlossene Bewertungen verschoben. Sie können der Bewertung weiterhin manuell Ereignisse hinzufügen.

Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Abbrechen Abschließen



Wird ein Assessment nicht abgeschlossen, geschieht dies nach 15 Tagen automatisch.



ABSCHLUSSBERICHT GENERIEREN



Klicken Sie auf **Abgeschlossene Assessments**.


Klicken Sie auf **Einzelheiten anzeigen**, um die gewünschte Beurteilung zu erhalten.

Einen Bericht für eine abgeschlossene Beurteilung generieren.

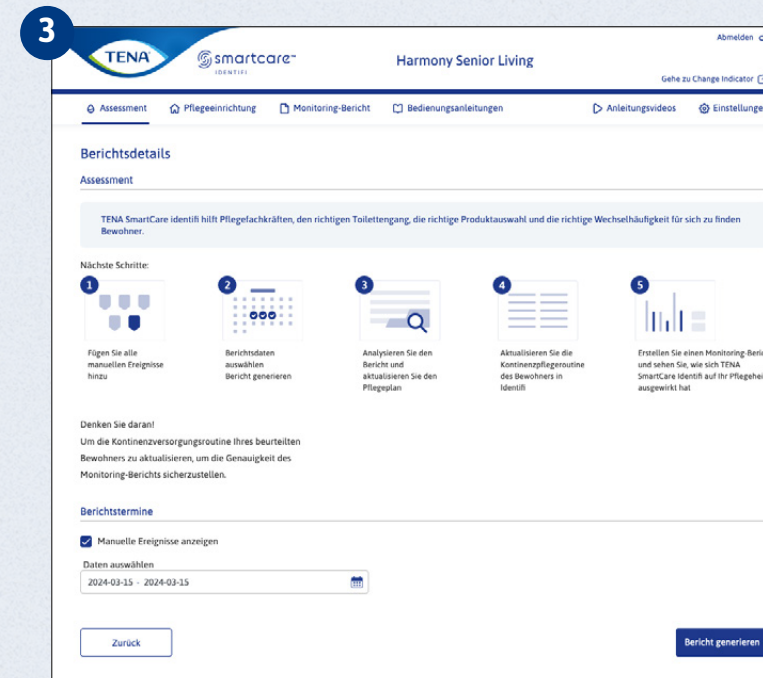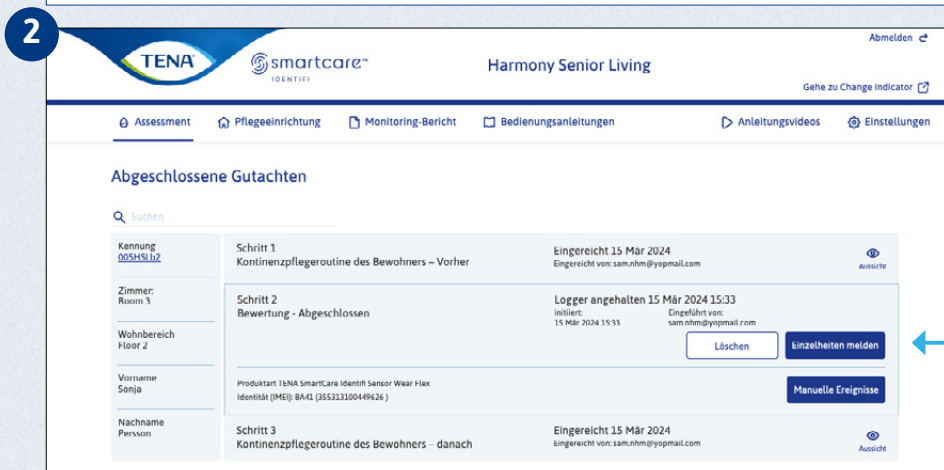

Geben Sie die gewünschten **Datumsangaben** ein. Standardmäßig werden die Datumsangaben der letzten Beurteilung angezeigt. Klicken Sie auf **Bericht generieren**.

ABSCHLUSSBERICHT GENERIEREN

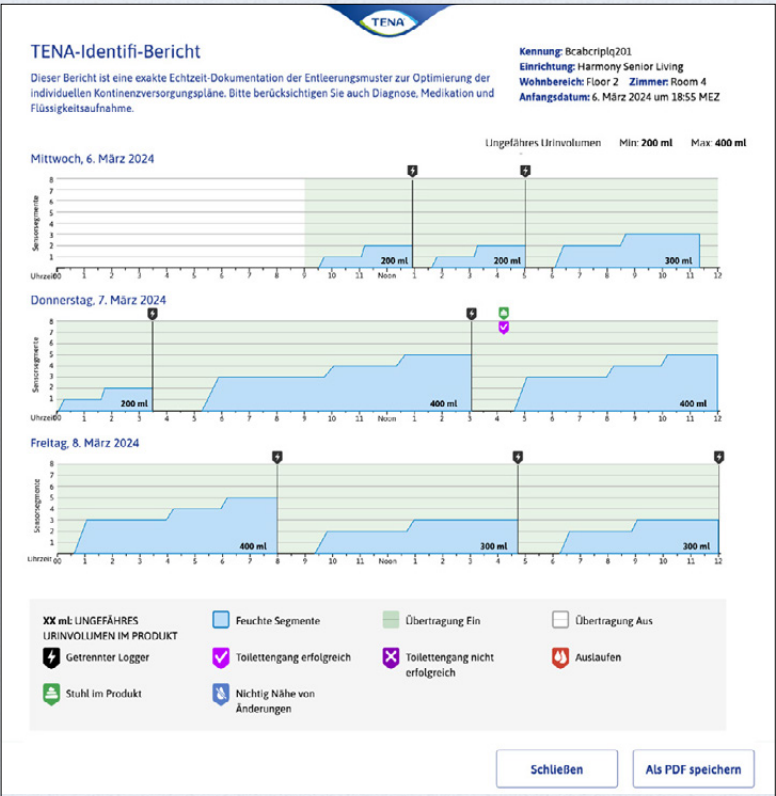

Der Beurteilungsbericht liefert einen in Stunden gestaffelten Überblick über Miktionsmuster und -menge innerhalb des 72-stündigen Zeitraums. Die mithilfe des Loggers erfassten Daten werden in grafischer Form dargestellt und zeigen das Muster, nach dem das Produkt mit Urin gefüllt wurde.

Das Handbuch zur „Deutung des Berichts“ finden Sie in der Anwendung unter Bedienungsanleitungen..

Vorbereitungen für einen individuellen Pflegeplan

Der personenbezogene Plan sollte folgende Bestandteile haben:

- Individueller Toilettensplan zur Bestimmung der passenden Produktwechsel- und Toilettengangszeiten und zur Vermeidung von nächtlichen Störungen
- Individueller Produktwechselplan
- Die richtigen Inkontenzprodukte – richtiger Typ, richtige Saugstärke und richtige Größe

Diese Punkte bilden die Grundlage für folgende Ziele:

- Ziel 1 – Bestimmung der richtigen Toilettenszeiten
- Ziel 2 – Längere Phasen ungestörter Nachtruhe
- Ziel 3 – Bestimmung des am besten geeigneten Produktes für den Bewohner

Berücksichtigen Sie bei der Erstellung des Kontinenzpflegeplans auch andere Aspekte, die den Bewohner betreffen, wie z. B. seine Medikation, seinen Hautstatus, seine Mobilität, persönliche Gewohnheiten und sein Darmmanagement.

Ziel 1 – Bestimmung der richtigen Toilettenszeiten

Ziel 2 – Längere Phasen ungestörter Nachtruhe

Und wie geht es weiter?

Mitteilung der Vorteile

Eine effiziente Kommunikation und Kooperation mit dem Bewohner, der Familie des Bewohners und den Mitarbeitern verbessert die Sicherheit und die Versorgung des Bewohners.

Aushandlung des Berichts

Zeigen Sie den Bericht den Pflegekräften und erklären Sie, warum die neuen Routinen für den Bewohner sinnvoll sind.

Planung eines Folgetreffens

Deutung des Berichts

Inkontinenzplan für Bewohner

Überlegungen

Wie häufig und zu welcher Tageszeit tritt laut Bericht Urin aus?

Wie viel Urin ist während des Wechsels in das Produkt ausgelaufen?

Welche Muster sind Ihnen im Verlauf von drei Tagen aufgefallen?

Angemessen für das Pflegesystem

Sollten noch andere Aspekte in Bezug auf die Person berücksichtigt werden (Medikamente, Gewohnheiten, Verhaltensweisen)?

Welche Zeiten sind besonders sinnvoll für Toilettengänge?

Wann sollten andere Veränderungen stattfinden, um einen guten Tagesrhythmus gewährleisten zu können?

Wann sollte das Nachtprodukt angelegt werden?

Wann sollte der letzte Toilettengang stattfinden?

Welche Art von Schutz ist angemessen?

Welche Saugstärke wird für den Tag/die Nacht benötigt?

Antwort

In jedem Bericht gibt es einen Abschnitt, in den Sie im Bericht erhobene Informationen eintragen können, um den Pflegeplan für den Bewohner zu optimieren.

Zum Beispiel: die richtigen Toilettenszeiten finden, das am besten geeignete Produkt finden und für längere ungestörte Schlafphasen sorgen.

Sie können eine bearbeitbare Version herunterladen, in der Sie Notizen zum Bericht hinzufügen oder ändern können.


ABGESCHLOSSENE BEURTEILUNGEN (SCHRITT 3*)



Nachdem die Beurteilung analysiert wurde, können Sie die neue Kontinenzpflegeroutine hinzufügen.



Klicken Sie im Menü auf **Abgeschlossene Assessments**.

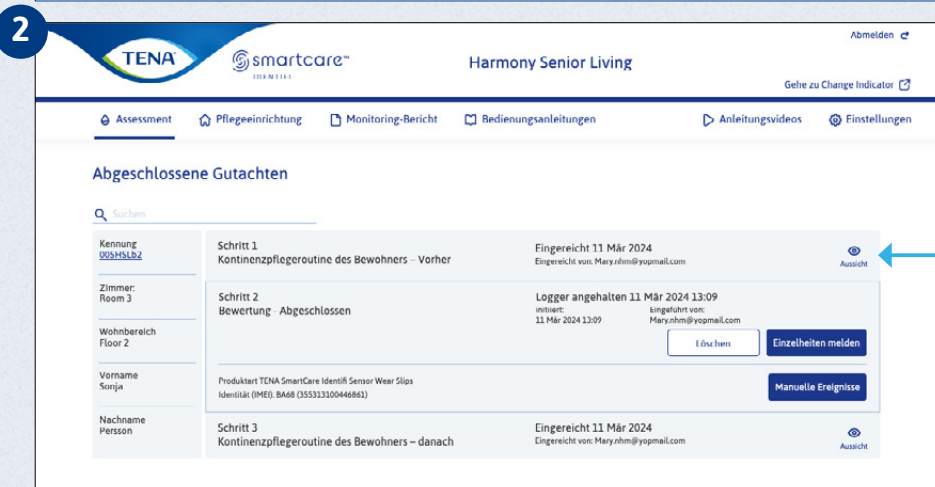

Klicken Sie hier, um eine Kontinenzpflegeroutine zur Beurteilung hinzuzufügen.

3

Routine zur Kontinenzpflege Tag: * Na, Li, * ✕

Berücksichtigen Sie die Kontinenzpflege des Bewohners in den letzten 7 Tagen

Durch Ausfüllen der Kontinenzpflegeroutine des Bewohners kann am Ende des Prozesses ein Monitoring-Bericht erstellt werden, der den Wert der TENA SmartCare Identifi Assessment vor und nach der Durchführung der Änderungen zeigt.

Produktart	Produktart
TENA Comfort Original Super	TENA Comfort Original Super
Produktwechsel /24 Stunden	Produktwechsel /24 Stunden
4	3
Leckagen /woche	Leckagen /woche
24	21
Erfolgreiche Toilettenbesuche /24 Stunden	Erfolgreiche Toilettenbesuche /24 Stunden
0	0
Anzahl der Prüfungen ohne Produktwechsel /24 Stunden	
10	

OK

Geben Sie die Einzelheiten der Kontinenzpflegeroutine ein und beantworten Sie die Fragen. Klicken Sie anschließend auf **Einreichen**.

Dieser Schritt kann auch unter **Pflegebedürftigen verwalten** durchgeführt werden – siehe Seite 24.

*Gilt nur für Einrichtungen mit Zugriff auf den Überwachungsbericht.

ARCHIVIERTE ASSESSMENTS




Beurteilungen, die älter als 90 Tage sind, werden unter **archivierte Beurteilungen** gespeichert.

Klicken Sie auf **abgeschlossene Assessments**.


Scrollen Sie auf der Seite Abgeschlossene Assessments ganz nach unten.

Klicken Sie auf **archivierte Assessments**.

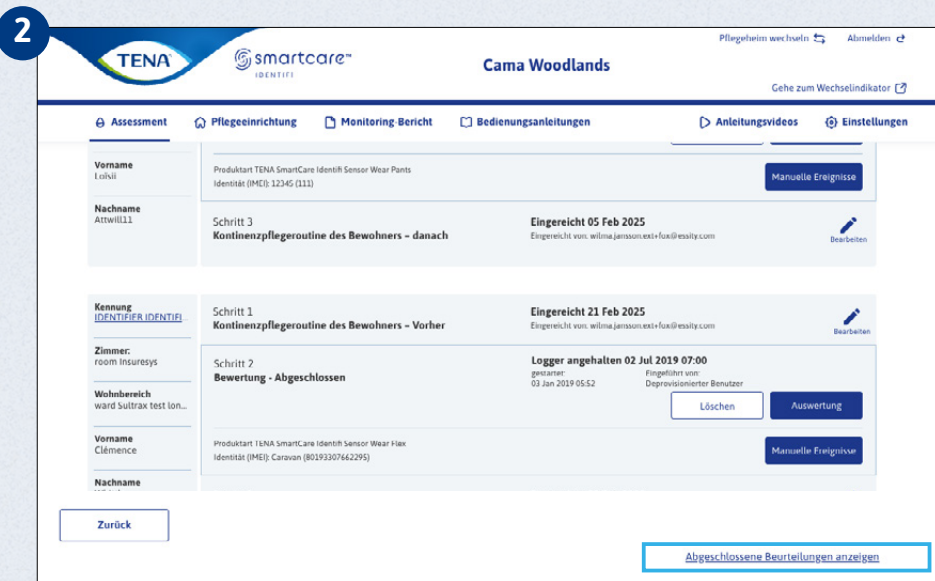


Daraufhin wird die Liste der archivierten Beurteilungen angezeigt. Klicken Sie auf **Einzelheiten melden**, um einen Bericht anzuzeigen.

MONITORING-BERICHT GENERIEREN

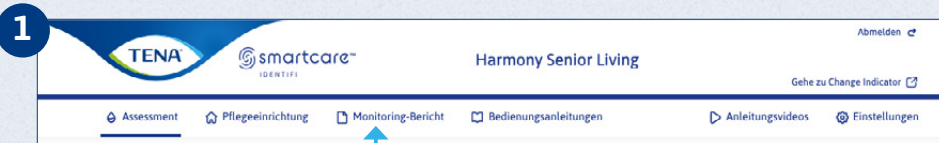

Klicken Sie im Menü auf **Monitoring-Bericht**.

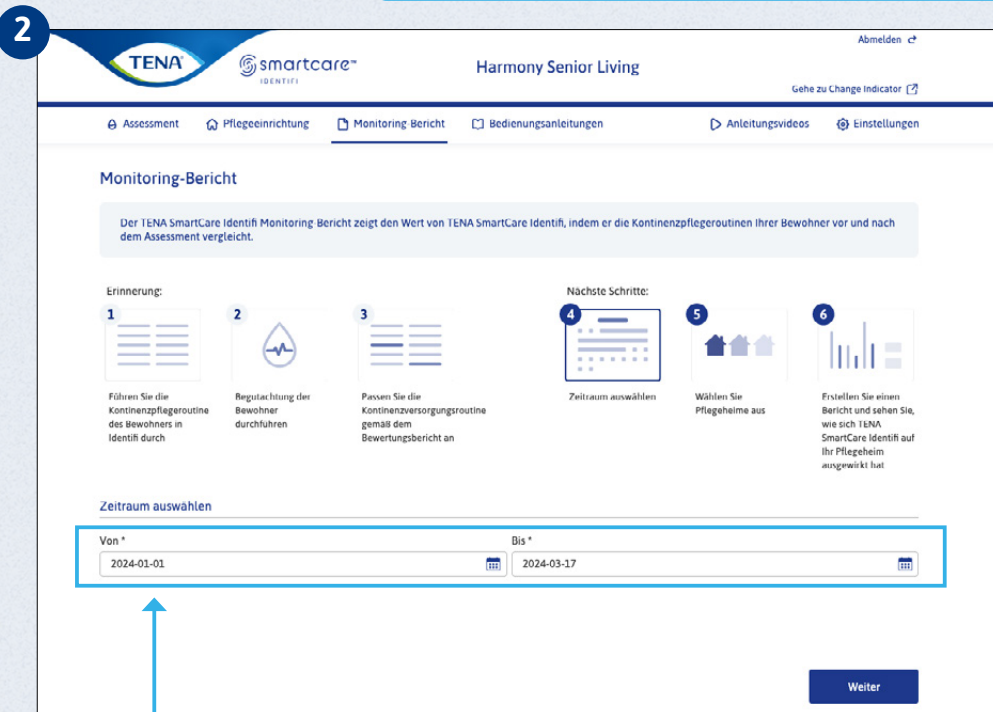


Wählen Sie den gewünschten Zeitraum aus.



Pflegergebnisse ansehen zeigt, welche Bewohner im Bericht enthalten sind.

Klicken Sie auf **Bericht erzeugen**, um einen Bericht zu erstellen und bei Bedarf herunterzuladen.

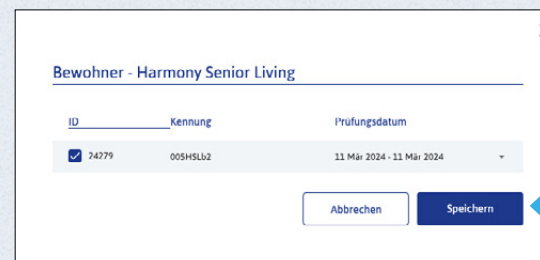



WAS ENTHÄLT DER MONITORING-BERICHT




Bontouch Test Facility
Bewertung von 1 Pflegebedürftigen
durchgeführt 7. Jan. 2026 – 7. Jan. 2026

Überwachungsbericht

Ergebnis	1
Pflegezeit	2-3
Produkte	4-5
Toilettengänge	6
Leckage	7-8
Gesamtkosten	9-10
CO ₂ -Auswirkung	11
Zentrale Erkenntnisse	12
Anhang	13-14

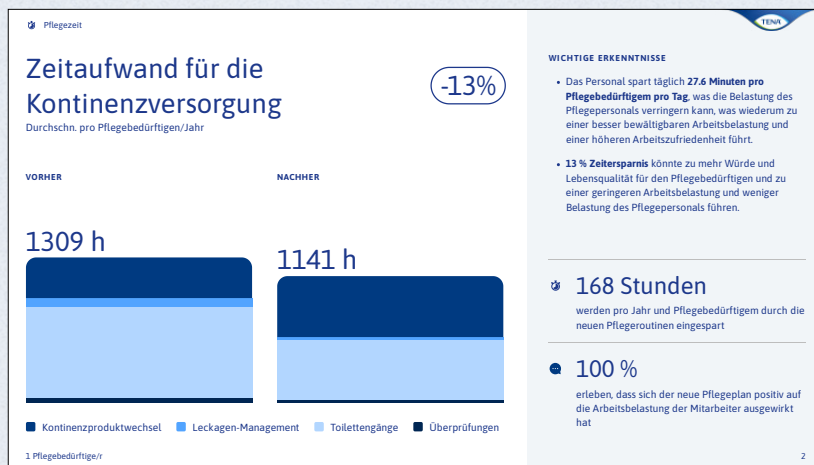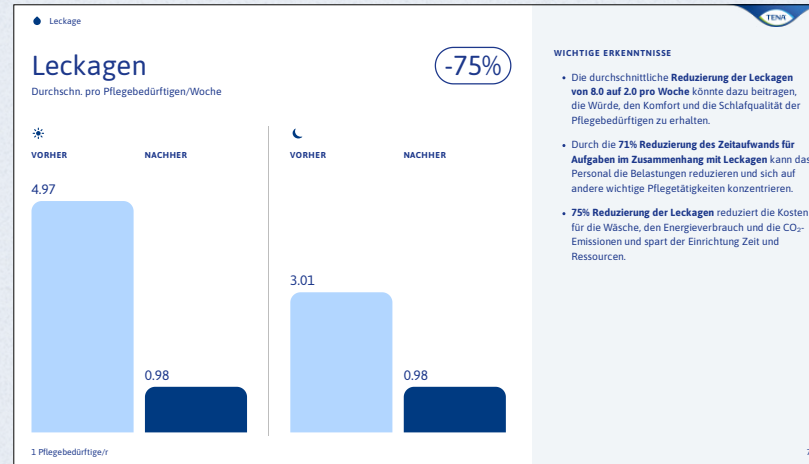

Der Bericht wird auf Grundlage des Vergleichs zwischen der bisherigen und der neuen Kontinenzpflegeroutine generiert und als PDF zur Verfügung gestellt (siehe Anleitung unten zum Ausdrucken des PDFs).

Der Bericht umfasst mehrere Seiten mit den erhobenen Daten und ermöglicht es Ihnen, die Leistung des Produkts in Hinblick auf die Kontinenzpflege, andere Bewohner der Pflegeeinrichtung, die verwendeten Produkte und die Umweltverträglichkeit zu beurteilen.

Ausdrucken des Berichts


Bitte beachten Sie, dass Sie beim Drucken ggf. 2 Einstellungen ändern müssen. Klicken Sie auf **Als PDF speichern** und setzen Sie ein Häkchen bei **Hintergrundgrafiken**, um den gesamten Bericht einzusehen.

NEUES BENUTZERKONTO HINZUFÜGEN

NUR FÜR ADMINISTRATOREN



Klicken Sie auf **Einstellungen** und anschließend auf **Benutzerkonten**.

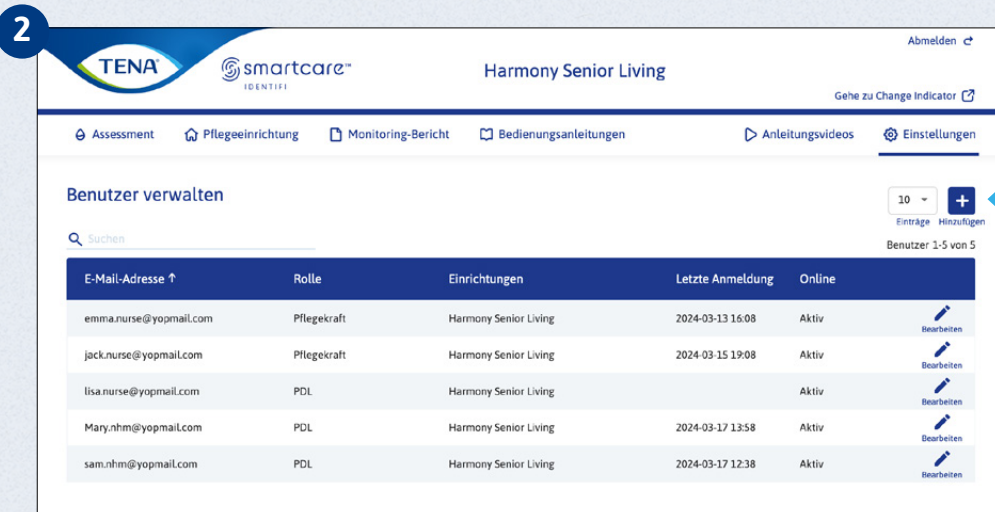


Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Füllen Sie die Felder aus und klicken Sie auf **Einreichen**, um ein neues Benutzerkonto zu erstellen.


Der Zugriff auf den Monitoring-Bericht kann vom Administrator gewährt oder widerrufen werden.

Wenn Sie die Multi-Faktor-Authentifizierung verwenden, können Sie sich je nach den von Ihnen angegebenen Kontaktdaten per E-Mail oder Telefon autorisieren lassen.

BENUTZERKONTO BEARBEITEN ODER ENTFERNEN

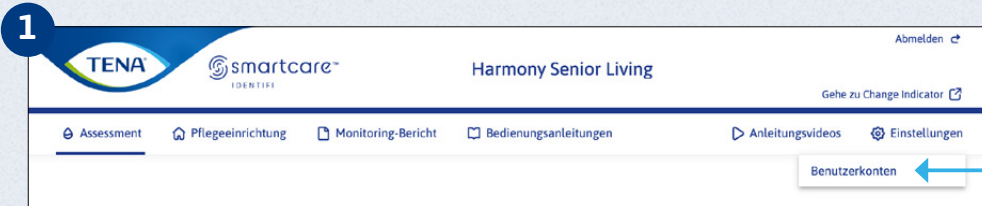

Klicken Sie auf **Einstellungen** und anschließend auf **Benutzerkonten**.

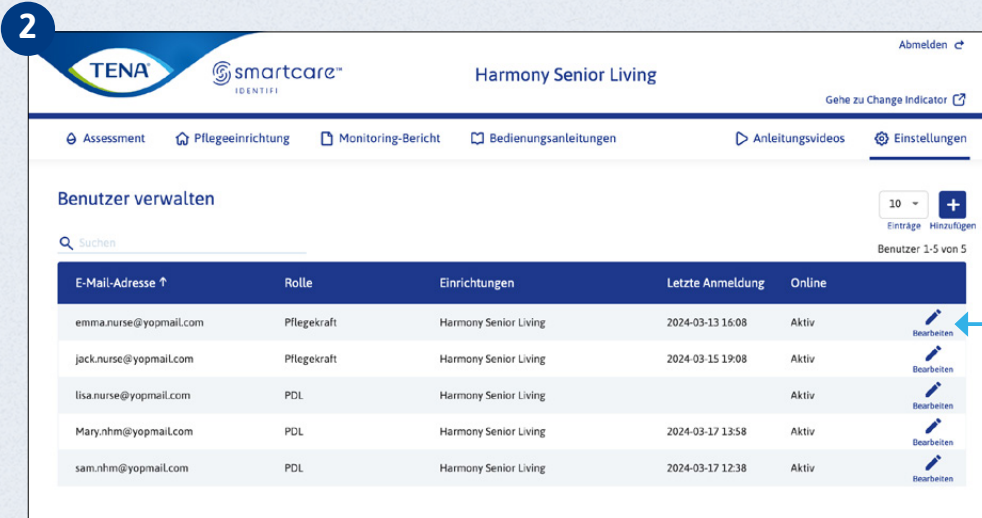

Klicken Sie auf den Benutzernamen, den Sie bearbeiten möchten. Bearbeiten Sie die Einzelheiten und klicken Sie auf **Einreichen**.

Benutzerprofil für {{username}} ändern

Funktionszugriff

☐ Pflegeheimadministrator ☒ Krankenschwester

Zugang zum Pflegeheim

☒ Wählen Sie Alle

☒ Harmony Senior Living

Allgemeine Einstellungen

E-Mail-Adresse * Mobiltelefonnummer


Sprache *

☒ Monitoring-Bericht


Der Überwachungsbericht vergleicht den Status des einzelnen Pflegebedürftigen und/oder der Pflegeeinrichtung vor und nach der Durchführung der Änderungen mithilfe von TENA SmartCare Identifi Assessment. Der Benutzer kann Änderungen bei den Kosten, der Personalzeit und den Auswirkungen der Bewertungen auf die Pflegebedürftigen sehen.

Zum **Löschen** eines Benutzerkontos klicken Sie auf das Symbol am oberen Rand der Seite.


WOHNBEREICHE BEARBEITEN

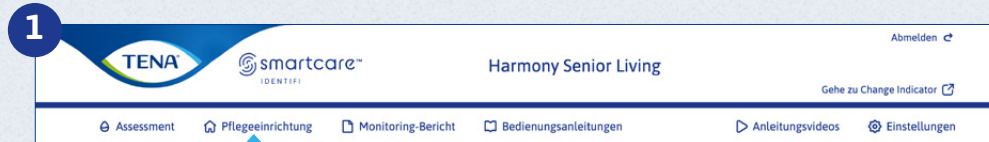

Klicken Sie auf **Pflegeeinrichtung**.

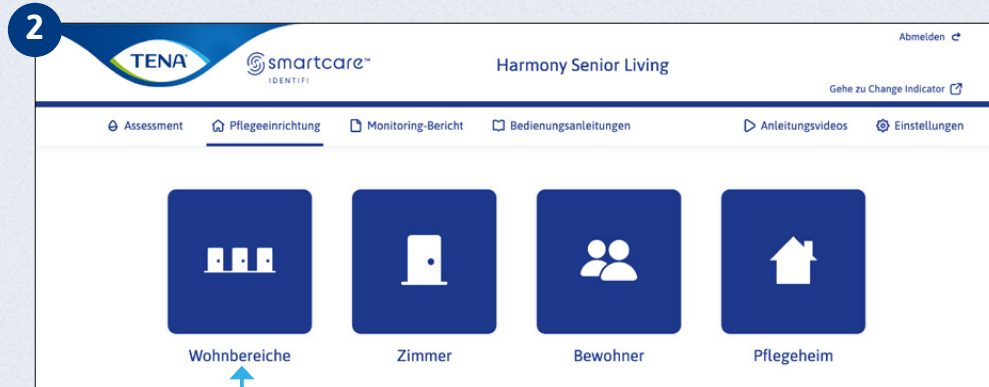

Klicken Sie auf **Wohnbereiche**.

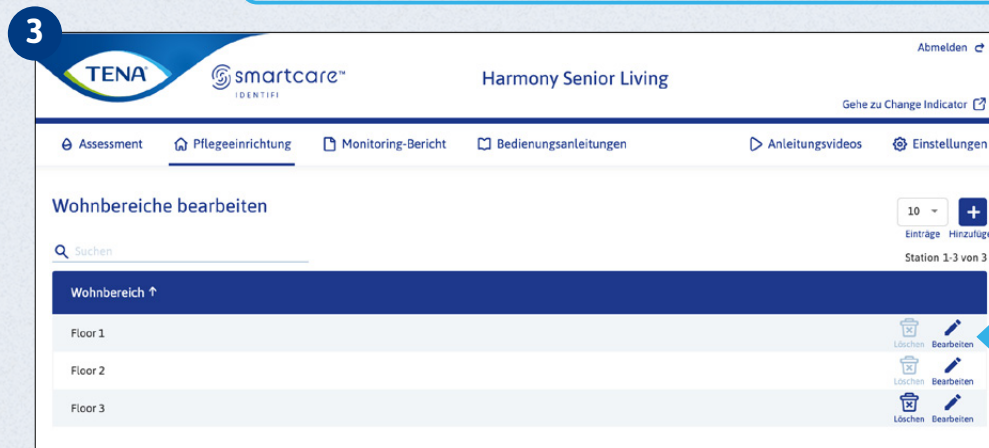

Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um einen neuen Wohnbereich hinzuzufügen.

Wohnbereich hinzufügen

Wohnbereich * * Pflichtfelder

Wohnbereich

Abbrechen Hinzufügen

Oder klicken Sie auf **Bearbeiten** neben dem Wohnbereich, den Sie ändern möchten.


Wohnbereiche bearbeiten

Wohnbereich * * Pflichtfelder


Floor 1

Abbrechen Speichern


ZIMMER BEARBEITEN

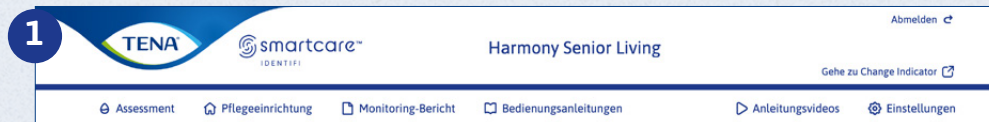

Klicken Sie auf **Pflegeeinrichtung**.

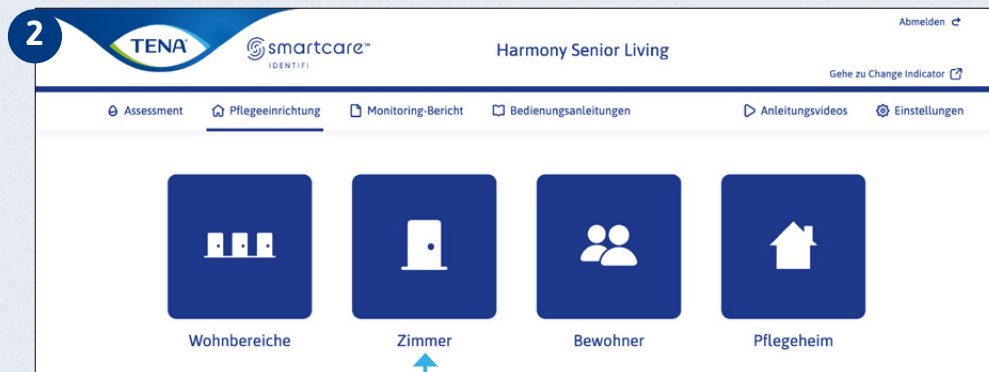

Klicken Sie auf **Zimmer**.

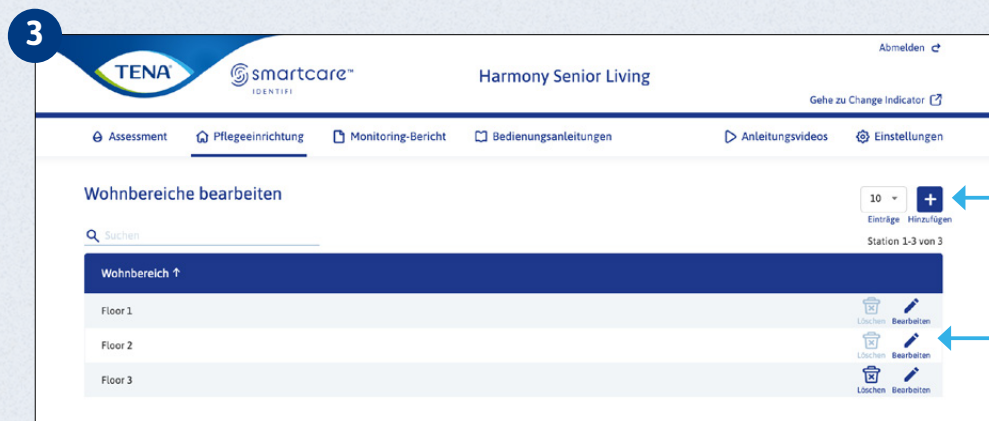

Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um ein neues Zimmer anzulegen. Geben Sie ihm einen Namen und weisen Sie es einem bestehenden Wohnbereich zu.

Wohnbereich hinzufügen

Wohnbereich * * Pflichtfelder

Oder klicken Sie auf **Bearbeiten** neben dem Zimmer, das Sie ändern möchten.



Zimmer bearbeiten

Sie gibt Beschriftungen in diesem Raum.

Zimmer * * Pflichtfelder

Wohnbereich *

BEWOHNER VERWALTEN

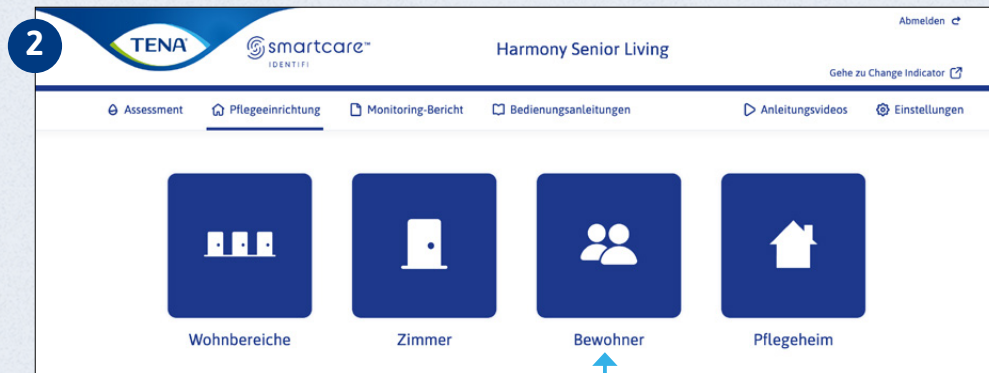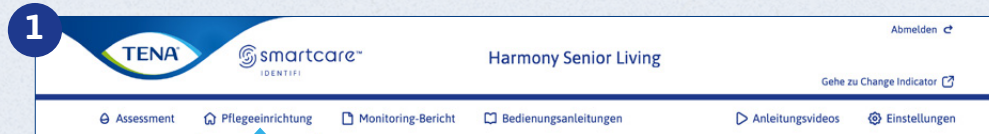

Klicken Sie auf **Pflegeeinrichtung**.

Klicken Sie auf **Bewohner**.

Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um neue Bewohner anzulegen. Geben Sie ihm einen Namen und weisen Sie ihn einem bestehenden Wohnbereich zu.


Oder klicken Sie auf **Details** neben dem Bewohner, bei dem Sie etwas ändern möchten.




Hinweis: In den Details zu den Bewohnern finden Sie stets die zuletzt eingeleitete Kontinenzpflegeroutine, sofern die Pflegeeinrichtung Zugriff auf den Monitoring-Bericht hat.

PFLEGEEINRICHTUNG VERWALTEN

NUR FÜR ADMINISTRATOREN

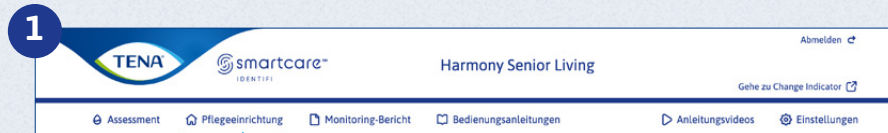

Klicken Sie auf **Pflegeeinrichtung**.

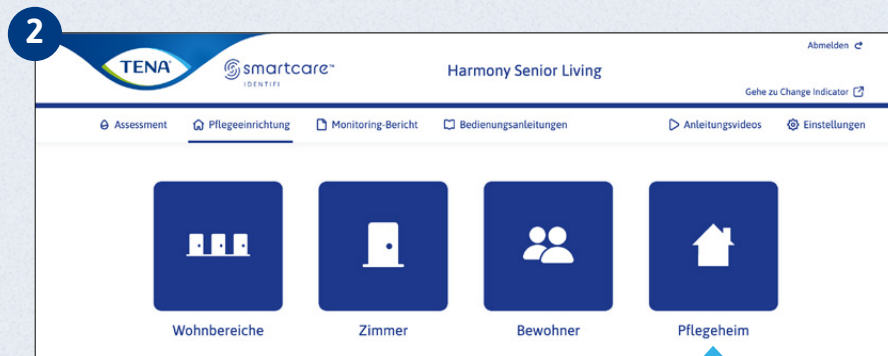

Klicken Sie auf das Symbol für die **Pflegeeinrichtung**.

Anschließend können Sie die Einstellungen für die Daten der Bewohner und für die Einrichtung aktualisieren.

Zustimmung einholen
Sie können dieses Kästchen ankreuzen, um eine Erinnerung zu aktivieren, vor Beginn der Beurteilung die Zustimmung des Bewohners einzuholen.

Multi-Faktor-Authentifizierung
Dazu müssen die Nutzer ihre Mobilfunknummer in ihrem Profil hinterlegen.

Klicken Sie auf **Speichern** am unteren Rand der Seite.

Einrichtungen bearbeiten Harmony Senior Living

Pflegeheim-Einstellungen

Einrichtungen *
Harmony Senior Living

Kontaktname
Name

E-Mail-Adresse
name@email.com

Telefonnummer
+49 123 456 789

Mobiltelefonnummer
+49 123 456 789

Zielwert
5

Datenschutz-Einstellungen

☐ Zustimmung einholen
Diese Funktion aktiviert eine Erinnerung, um die Einwilligung des Bewohners einzuholen, bevor eine Bewertung gestartet wird.

☒ 2-Faktor-Authentifizierung
Für die 2-Faktor-Authentifizierung müssen die Benutzer ihre Mobilfunknummern in ihrem Profil registrieren, um sich beim System anmelden zu können.

Residenten-Dateneinstellungen

In diesem Abschnitt können Sie anpassen, welche Bewohnerdaten Kunden in Ihrem Pflegeheim verwenden sollen. Der Bezeichner ist obligatorisch und kann nicht als Einstellung geändert werden.

Kennung	Mobilität	Vorname	Nachname
☒ Sichtbar	☒ Sichtbar	☒ Sichtbar	☒ Sichtbar
☒ Verpflichtend	☐ Verpflichtend	☐ Verpflichtend	☐ Verpflichtend
☐ 3-Zeichen-Limit		☐ 3-Zeichen-Limit	☐ 3-Zeichen-Limit

Geschlecht:

Geschlecht	Titel
☒ Sichtbar	☒ Sichtbar
☐ Verpflichtend	☐ Verpflichtend
☒ Männlich	☒ Herr
☒ Weiblich	☒ Frau
☒ Unbestimmt	☐ Frau
	☐ Unbestimmt

Überwachungsprotokoll Daten-Einstellungen

Arbeitszeit Kosten (Stunde) *
200 SEK

Arbeitszeit Kosten (Stunde) *
500 SEK

Wäschekosten - Kleidung (Gesamt) *
45 SEK

Wäschekosten - Bettwäsche (Gesamt) *
60 SEK

Für einen Produktwechsel aufgewendete Zeit *
20 min

Für einen Produktwechsel aufgewendete Zeit *
30 min

Zeitaufwand für das Umziehen - Leckage (minuten) *
30 min

Zeitaufwand für das Wechseln der Bettwäsche - Leckage (minuten) *
30 min

Zeitaufwand für eine Prüfung ohne Produktwechsel (min) *
5 min

Zurück Abbrechen Speichern

DATENEINSTELLUNGEN FÜR ÜBERWACHUNGSBERICHTE

NUR FÜR ADMINISTRATOREN



Die Monitoring-Berichtseinstellungen können angepasst werden, sobald sich einzelne Werte ändern. Die in den Einstellungen eingegebenen Werte, wie sie unter **Pflegeeinrichtung bearbeiten** abrufbar sind, dienen als Grundlage für die Generierung des Monitoring-Berichts.

TENA SmartCare Harmony Senior Living

Assessment **Pflegeeinrichtung** Monitoring-Bericht Bedienungsanleitungen Anleitungsvideos Einstellungen

Einrichtungen bearbeiten Harmony Senior Living

Pflegeeinrichtungseinstellungen

Einrichtungen* *Pflichtfelder

E-Mail-Adresse Telefonnummer

Mobilteléfononummer Ziel

Datenschutz-Einstellungen

☐ Zustimmung einholen
Diese Funktion aktiviert eine Erinnerung, um die Einwilligung des Bewohners einzuholen, bevor eine Bewertung gestartet wird.

☐ 2-Faktor-Authentifizierung
Für die 2-Faktor-Authentifizierung müssen die Benutzer ihre Mobiltelefonnummern in ihrem Profil registrieren, um sich beim System anmelden zu können.

Residente Dateneinstellungen

In diesem Abschnitt können Sie anpassen, welche Bewohnerdaten Kunden in Ihrem Pflegeheim verwenden sollen. Der Bezeichner ist obligatorisch und kann nicht als Einstellung geändert werden.

Kennung	Mobilität	Vorname	Nachname
☒ Sichtbar	☒ Sichtbar	☒ Sichtbar	☒ Sichtbar
☒ Verpflichtend	☐ Verpflichtend	☐ Verpflichtend	☐ Verpflichtend
☐ 3-Zeichen-Limit		☐ 3-Zeichen-Limit	☐ 3-Zeichen-Limit

Geschlecht

Geschlecht	Titel
☒ Sichtbar	☒ Sichtbar
☐ Verpflichtend	☐ Verpflichtend
☒ Männlich	☒ Herr
☒ Weiblich	☒ Frau
☒ Unbestimmt	☐ Frau

Überwachungsprotokoll Daten-Einstellungen

Arbeitszeit Kosten Arbeitszeit Kosten



Wäschekosten - Kleidung (Gesamt) Wäschekosten - Bettwäsche (Gesamt)

Für einen Produktwechsel aufgewendete Zeit Für einen Produktwechsel aufgewendete Zeit

Zeitaufwand für das Umziehen - Leckage Zeitaufwand für das Wechseln der Bettwäsche - Leckage

Zeitaufwand für eine Prüfung ohne Produktwechsel

Zurück Abbrechen Speichern

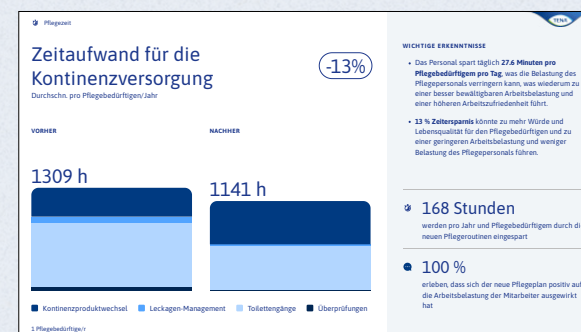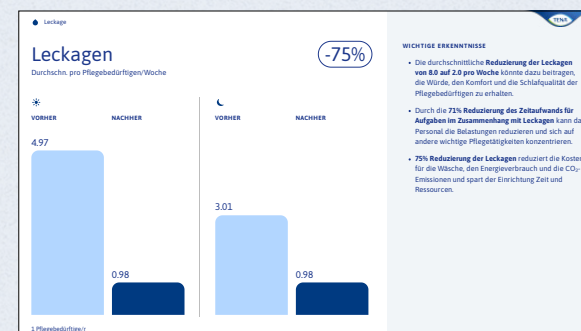

VIDEOS MIT ANWEISUNGEN UND ANTWORTEN AUF FRAGEN




1

Klicken Sie auf **Anleitungsvideos**.


Klicken Sie auf **das Video**, um sich die Anleitung für diesen Abschnitt anzusehen.

BEDIENUNGSANLEITUNGEN

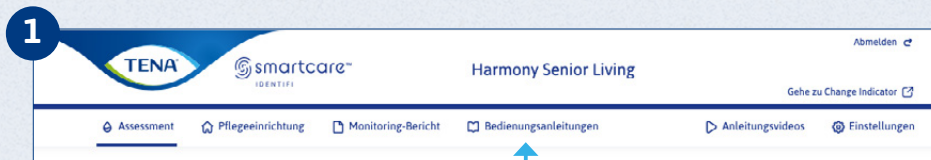

Auf der Seite „Bedienungsanleitungen“ finden Sie verschiedene Materialien rund um die Nutzung von TENA SmartCare Identifi.

Klicken Sie oben im Menü auf **Bedienungsanleitungen**.

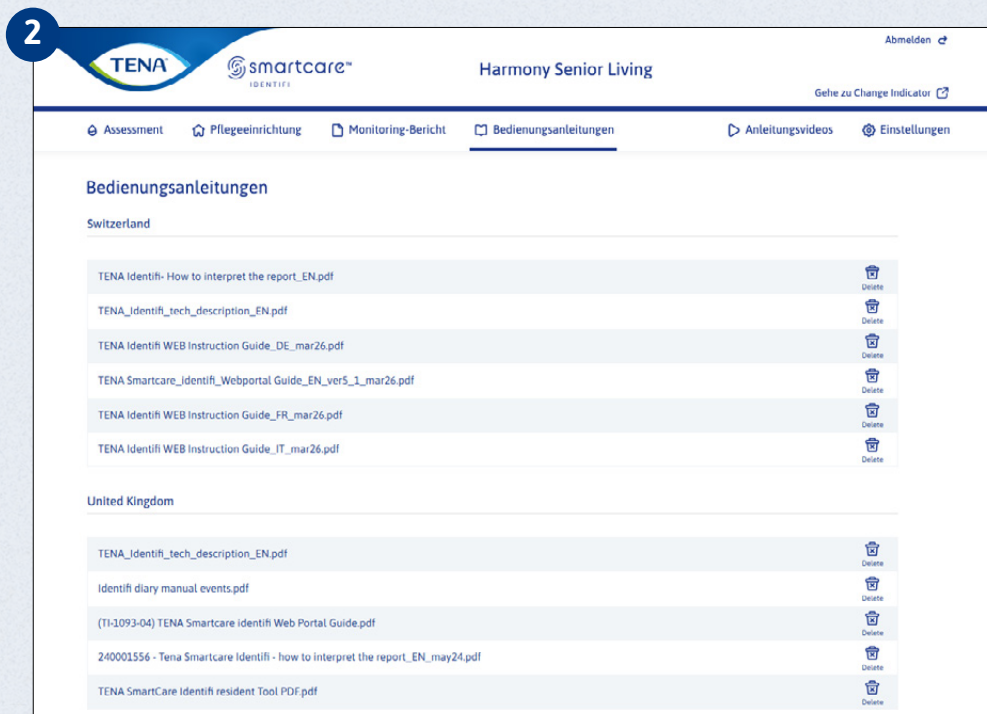

Eine Datei aufrufen/herunterladen

Es wird eine Liste mit den verfügbaren Dateien angezeigt.

Klicken Sie auf die gewünschte Datei, die heruntergeladen/ aufgerufen werden soll.

