

TENA SMARTCARE IDENTIFI™ VEJLEDNING TIL WEBPORTAL



INDHOLD



INDHOLD	2
INTRODUKTION	3
KOM GODT I GANG	
Aktivér konto/Log ind	5
VURDERING	
Vurdering med TENA Identifi Statusrapport	6
Ny vurdering	
Opret en ny vurdering	7
Flyt logger	8
Registrer ny borger	9
Start vurdering.....	10
Igangværende	
Manuelle hændelser	11
Forhåndsvisning af den igangværende vurdering.....	12
Stop vurdering	13
Fuldfør vurderingen.....	14
Generer vurderingsrapport.....	15
Fuldførte vurderinger	17
Arkiverede vurderinger	18

TENA IDENTIFI STATUSRAPPORT

Hent TENA Identifi Statusrapport	19
Hvad er inkluderet i rapporten?	20

BRUGER

Tilføj ny konto (Kun for superbruger)	21
Rediger eller fjern bruger.....	22

INDSTILLINGER

Administrer afdelinger	23
Administrer boliger	24
Administrer borgere.....	25
Administrer center (Kun for superbruger).....	26
Indstillinger for data til TENA Identifi Statusrapport (Kun for superbruger).....	27

HJÆLP

Vejledningsvideoer og ofte stillede spørgsmål.....	28
Materialer	29

INTRODUKTION



Denne brugervejledning er beregnet til medarbejdere og superbrugere.

TENA SmartCare Identifi™ er beregnet som et hjælpemiddel til vurdering af borgeres vandladningsmønster med henblik på finde de bedste tidspunkter til toiletbesøg, sugееvnebehov og tidspunkter for skift af produkt. Vurderingsperioden er 72 timer.

TENA SmartCare Identifi™ består af tre dele: Sensor Wear, loggersæt og webportal.

Formålet med TENA SmartCare Identifi™ webportal er indsamling og præsentation af de data, som modtages fra loggerne. I webportalen igangsætter man vurderingerne, og tilgår dem, når vurderingerne er fuldførte.

TENA SmartCare Identifi™ giver mulighed for opfølgning og visning af samlede forandringer med en TENA Identifi Statusrapport. TENA Identifi Statusrapport viser forandringerne ved at sammenligne data før og efter løsningen har været i brug i nogen tid.



BEMÆRK: TENA SmartCare Identifi™-systemet beregner væskemængden. Systemet bør ikke bruges til overvågning af væskeindtag.



INDLEDNING FORTSAT



TENA Identifi Statusrapport er en funktion i TENA SmartCare Identifi™. TENA Identifi Statusrapport er et værdifuldt værktøj for kunden, og viser værdier for et eller flere centre i en given periode.

Den giver information om, hvilke produkter der bruges, borgernes behov og tid brugt på kontinensrelaterede opgaver. Der indgår ligeså en miljømæssig og økonomisk kalkulering i rapporten.

TENA Identifi Statusrapport er en funktion, der vælges til, når du implementerer TENA Identifi. Det er Essitys administrator, der tilføjer eller fjerner funktionen.

På side 6 kan du se en oversigt over, hvad TENA Identifi Statusrapport kan gøre for jer.

Få mere at vide om, hvordan du tilpasser indstillingerne, så du får mest muligt ud af TENA Identifi Statusrapport på side 27.

Tilgå Change Indicator-webportalen

Center, der bruger både TENA SmartCare Identifi™ og TENA SmartCare Change Indicator™, kan tilgå hver webportal ved at klikke på **Gå til Change Indicator**.



AKTIVÉR KONTO/LOG IND



Indstil adgangskode for anna.anderson@nursinghome.com

Adgangskoden skal bestå af mindst 8 tegn og indeholde mindst 3 af følgende:

- Små bogstaver (a-z)
- Store bogstaver (A-Z)
- Nummer (0-9)
- Specialtegn (@#\$%^& osv.)

Du kan ikke genbruge en aktuel adgangskode.

Adgangskode

Bekræft adgangskode

Indstil adgangskode

Aktivér din konto via det link, der er blevet sendt til din e-mailadresse.

• Indtast en adgangskode.

Klik på **Angiv adgangskode**.

• Når adgangskoden er oprettet, kan du bare indtaste din e-mailadresse og adgangskode og klikke på **Log ind**.

TENA SmartCare login

E-mailadresse
example@email.com

Adgangskode
Adgangskode

Log ind

[Nulstil adgangskode](#)

• Har du glemt din adgangskode?
Klik på **Nulstil adgangskode**, hvorefter du vil kunne oprette en ny.

Nulstil adgangskoden

E-mailadresse
example@email.com

Send bekræftelseskode

[Annuller](#)

Multifaktorgodkendelse

Hvis du bruger multifaktorgodkendelse, modtager du en bekræftelseskode til et registreret telefonnummer eller en registreret e-mailadresse. Indtast koden for at logge ind.

VURDERING MED TENA IDENTIFI STATUSRAPPORT



Hvis I har valgt TENA Identifi Statusrapport, vises denne mulighed i menuen. TENA Identifi Statusrapport giver dig ekstra data, der viser værdien af TENA SmartCare Identifi™, ved at sammenligne kontinensplejen før og efter vurderingen.*



Dette symbol vises, når en handling stadig er påkrævet for at fuldføre vurderingen, når TENA Identifi Statusrapport er aktiveret.

Derfor skal du bruge TENA Identifi Statusrapport

Trin 1



Kontinensplejerutine – før

Alle oplysninger om borgernes aktuelle rutine, hvilke produkter der anvendes samt tider for skift og hyppighed logges for at oprette en vurdering.


Trin 2



Vurdering og analyse

Efter en vurdering på 72 timers kan vi se de ændringer, der blev foretaget og logget, og analysere de data, der blev indsamlet af TENA SmartCare Identifi™ for borgeren i vurderingsperioden.

Trin 3

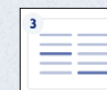

Kontinensplejerutine – efter

Der kan etableres en ny individuel kontinenspleje på baggrund af vurderingen, som skal indarbejdes af medarbejderne. Det vil ofte betyde et mere velegnet produkt, færre skift og en bedre skiftetidsplan. Vurderingerne bliver gemt, og hver rapport kan sammenlignes med den forrige.


*TENA Identifi Statusrapport er forbundet med brugeradgang og kan ikke tilføjes eller fjernes af superbruger.

OPRET EN NY VURDERING



- Vælg først **vurderinger** i hovedmenuen,
- og klik derefter på **igangsæt ny vurdering**.


Trin 1 er kun tilgængeligt, når et center har adgang til TENA Identifi Statusrapport.

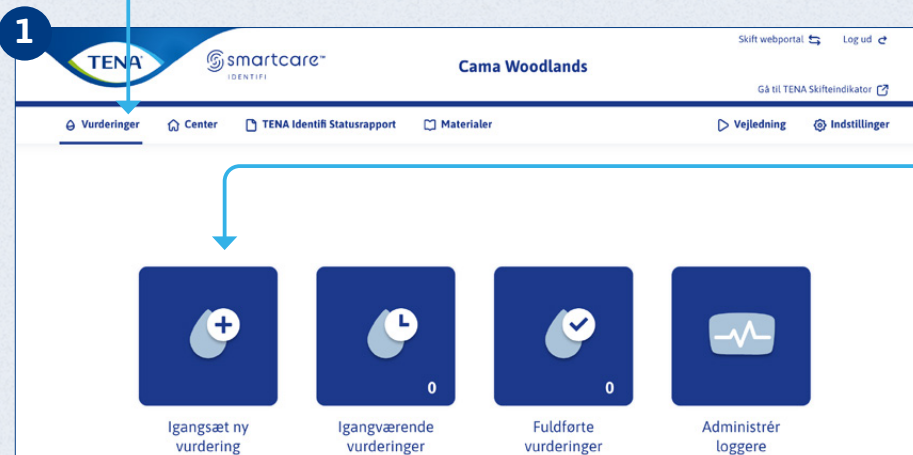

Borgerne skal registreres, før en ny vurdering kan igangsættes.

Klik **vælg** på en eksisterende borger eller **tilføj** for at registrere en ny borger.

3

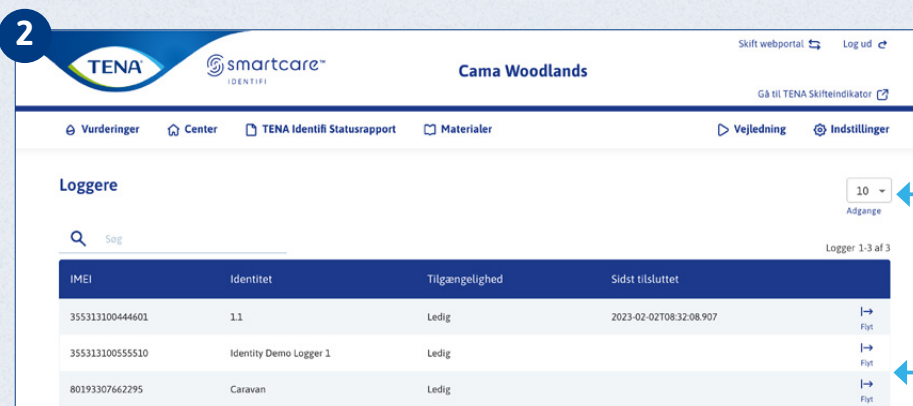

Ny vurdering Dag Nat

Trin 1: Beboersens kontinensplejerutine - Forelagt 17 mar 2024

Overvej borgerens kontinensplejerutine i de sidste 7 dage

Identifikator: 00SHSLb2

Ved at udfylde borgerens kontinensplejerutine kan der i slutningen af processen genereres en opfølgingsrapport, der viser værdien af TENA SmartCare Identifi vurdering for og efter udførelsen af ændringerne.

Produkttype * Produkttype *

TENA Comfort Original Super * TENA Flex Normal Large *

Skift /dage Skift /dage

3 * 2 *

Lækager /dage Lækager /dage

3 * 3 *

Toiletbesøg med resultat /dage Toiletbesøg uden resultat /dage

3 * 0 *

Antal manuelle kontrol af lade uden skift /dage

2 *

Næste

Ny vurdering Dag Nat

Trin 2: Trin 2: Start ny vurdering

Identifikator: 00SHSLb2 * Påkrævet felt

LoggerDevice * Produkttype *


Vælg * Vælg *

Husk at:

- Informer beboeren om vurderingen.
- Sæt logger i kontakten på Sensor Wear og kontroller, at batteriet er opladet.


Tilbage * Slet Igangsat

FLYT LOGGER

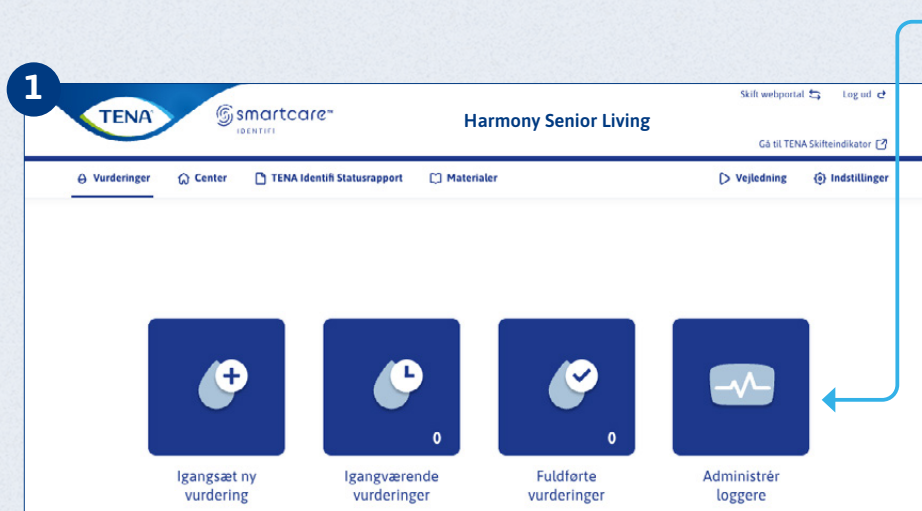


Du kan flytte loggere mellem plejecenter. Du skal ganske enkelt vælge **Administrér loggere** hvorefter du kan flytte enheden fra ét center til en anden og sikre, at loggeren er registreret til det rette center. **Bemærk, at det kun er superbruger som kan flytte logger, hvis denne har adgang til det/de centre, logger skal flyttes til.**


Klik på **flyttepilen** ved siden af den logger, du vil flytte, og vælg derefter den nye center fra rullemenuen i dialogboksen.

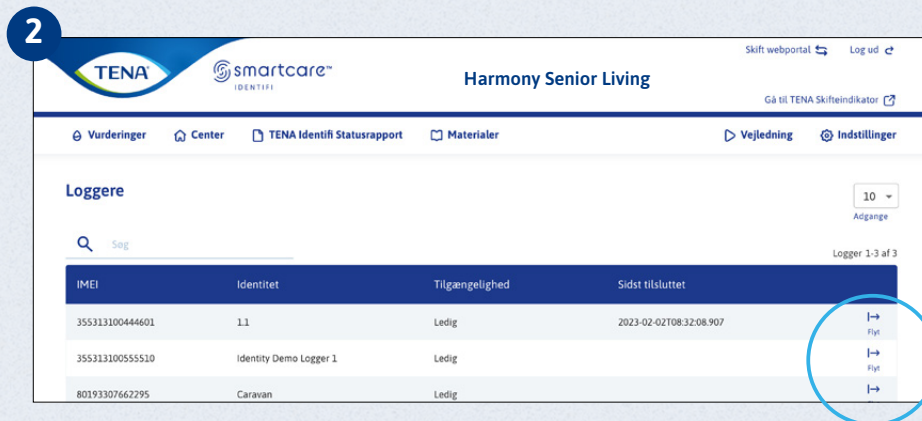

REGISTRER NY BORGER



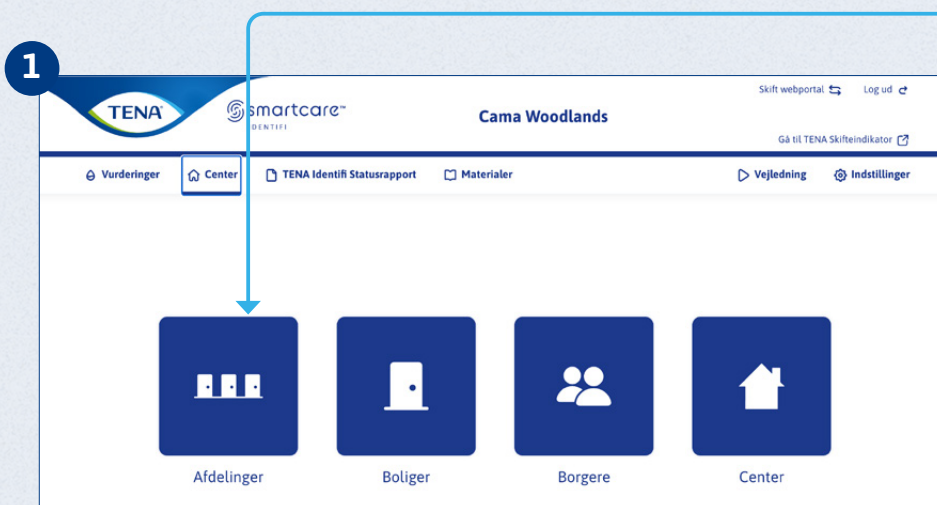


Vælg først **center** i hovedmenuen og derefter **ny vurdering**.

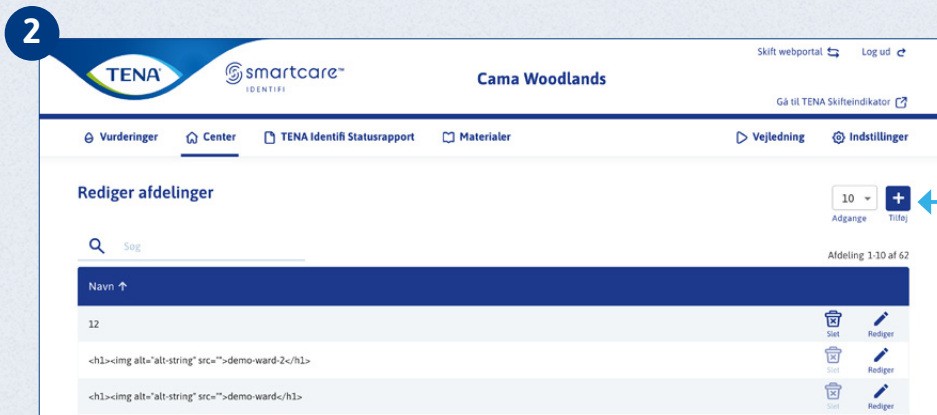

Klik **Tilføj** for at oprette en ny borger

Udfyld alle obligatoriske felter. **Identifikatoren** er et anonymt kodeord for borger, som du kun du kan genkende borger på.

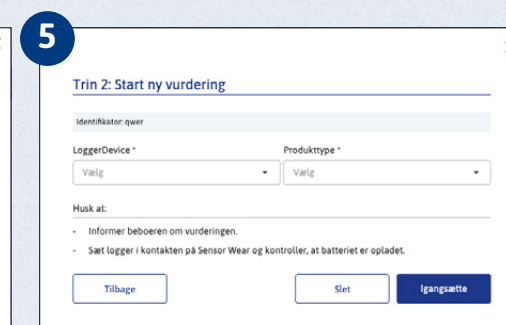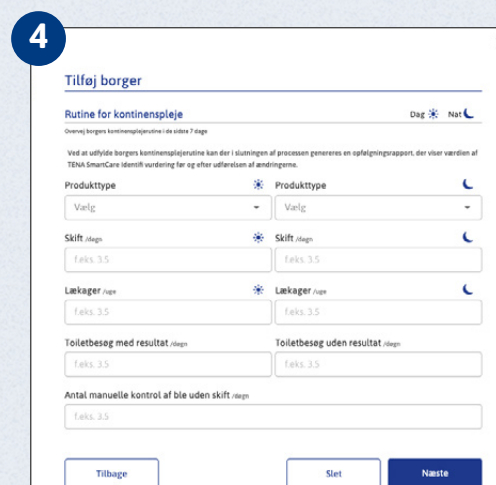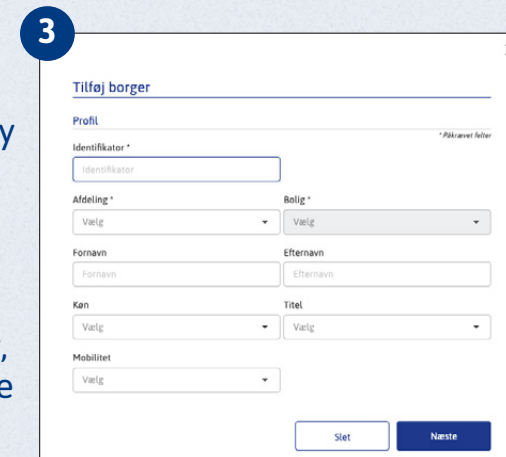

MANUELLE HÆNDELSE



Hvad er manuelle hændelser?

Manuelle hændelser er hændelser, der ikke registreres af loggeren, såsom lækager, afføring eller toiletbesøg. Disse skal tilføjes manuelt under vurderingen på 72 timer.

1

TENA smartcare IDENTIFI Cama Woodlands

Vurderinger Center TENA Identifi Statusrapport Materialer Vejledning Indstillinger

Igangværende vurderinger

Identifikator: [H01uegdyv548](#)

Bolig: room Insuresys

Afdeling: ward Sultrax test lon...

Fornavn: Régine

Efternavn: Leban

Trin 1: Borgers kontinenspleje - før

Trin 2: Vurdering - igangværende

Trin 3: Borgers kontinenspleje - efter vurdering

Gennemført 03 jun 2026

Udfyldt af: nurseadmin_005@yopmail.com

Igangværende

Vurderingen er nu igangsat: 03 jun 2026 07:20

Vurdering startet af: nurseadmin_005@yopmail.com

Stop logger

Vis foreløbig rapport

Manuelle hændelser

Identifikator: [IDENTIFIER IDENTIFI...](#)

Bolig: room Insuresys

Afdeling: ward Sultrax test lon...

Trin 1: Borgers kontinenspleje - før

Trin 2: Vurdering - igangværende

Trin 3: Borgers kontinenspleje - efter vurdering

Gennemført 03 jun 2026

Udfyldt af: nurseadmin_005@yopmail.com

Igangværende

Vurderingen er nu igangsat: 03 jun 2026 07:33

Vurdering startet af: nurseadmin_005@yopmail.com

Stop logger

Administrer manuelle hændelser

Tryk på **Manuelle hændelser** for at tilføje manuelle hændelser.

Vælg **Dato** og **Tidspunkt** for hændelsen.

Manuelle hændelser - 005HSLb2

Tilføj hændelser

Startdato: 17 mar 2024 12:51

Slutdato: Igangværende

Vælg dato: 2024-03-17

Vælg tidspunkt: 12:45

Vælg hændelser: Vælg hændelse

Tilføj

Liste med tilføjede hændelser (0)

Dato/Tid	Type	Handlinger
Ingen hændelser tilføjet endnu		

Slet Gem

Manuelle hændelser - 002HSLb1

Tilføj hændelser

Startdato: 15 mar 2024 09:00

Slutdato: Igangværende

Vælg dato: 2024-03-17

Vælg tidspunkt: 12:45

Vælg hændelser: Vælg hændelse

Tilføj

Liste med tilføjede hændelser (10)

Dato/Tid	Type	Handlinger
17 mar 2024 12:45	Toiletbesøg uden resultat	
13 mar 2024 12:45	Toiletbesøg uden resultat	

Slet Gem

Vælg **hændelser** i listen. Du kan vælge mere end én hændelse ad gangen. Klik på **Føj til liste**.

Når alle hændelser er angivet, skal du klikke på **Gem**.

Manuelle hændelser - 002HSLb1

Tilføj hændelser

Startdato: 15 mar 2024 09:00

Slutdato: Igangværende

Vælg dato: 2024-03-17

Vælg tidspunkt: 12:45

Vælg hændelser: Vælg hændelse



Tilføj

Liste med tilføjede hændelser (2)

Dato/Tid	Type	Handlinger
17 mar 2024 12:45	Toiletbesøg uden resultat	
13 mar 2024 12:45	Toiletbesøg uden resultat	

Slet Gem

FORHÅNDSVISNING AF DEN IGANGVÆRENDE VURDERING

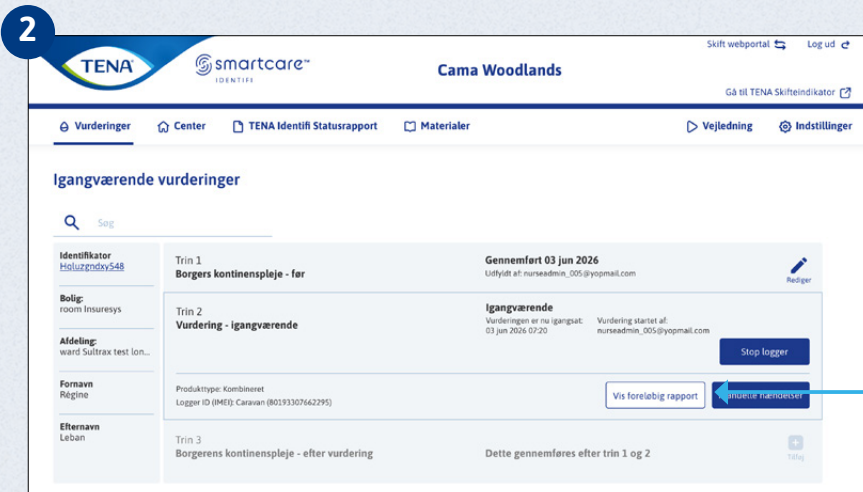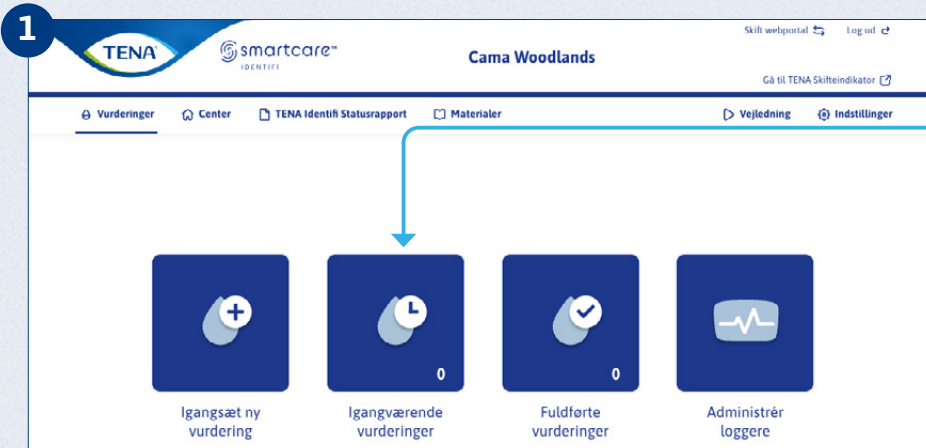


I løbet af de 72 timer kan du se en forhåndsvisning af TENA SmartCare Identifi-vurderingsrapporten.

Klik på **igangværende vurdering**.


Klik på **vis foreløbig rapport**.

Rapporten åbnes i samme vindue.

Rapporten kan også downloades som PDF.

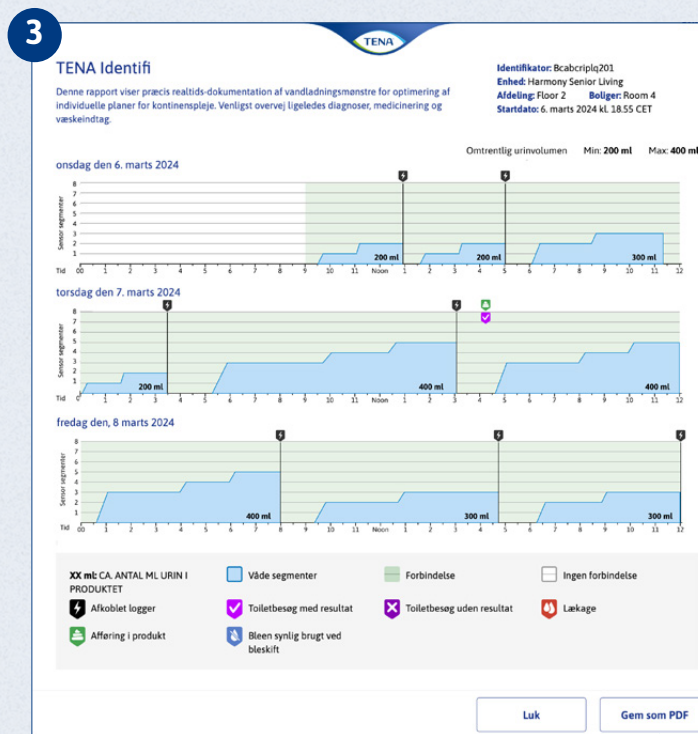


STOP VURDERING

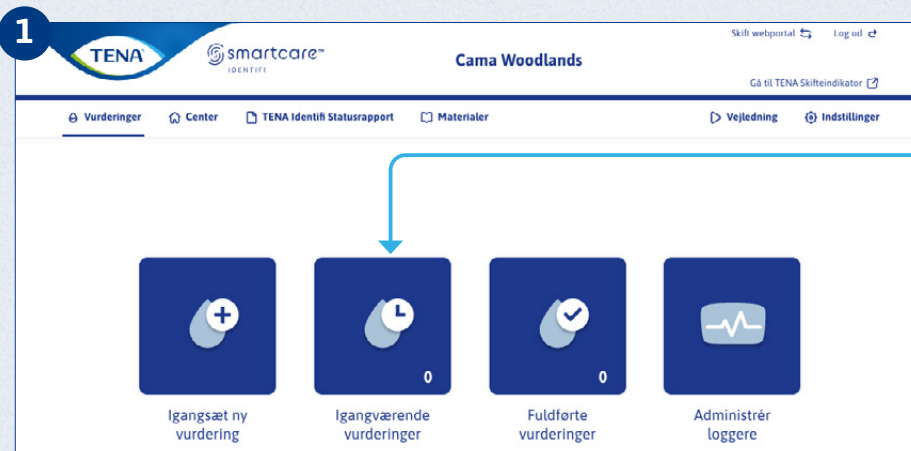

Klik på **igangværende vurderinger**.

Stop vurderingen efter 72 timer.

Klik på **Stop logger** for den ønskede vurdering.

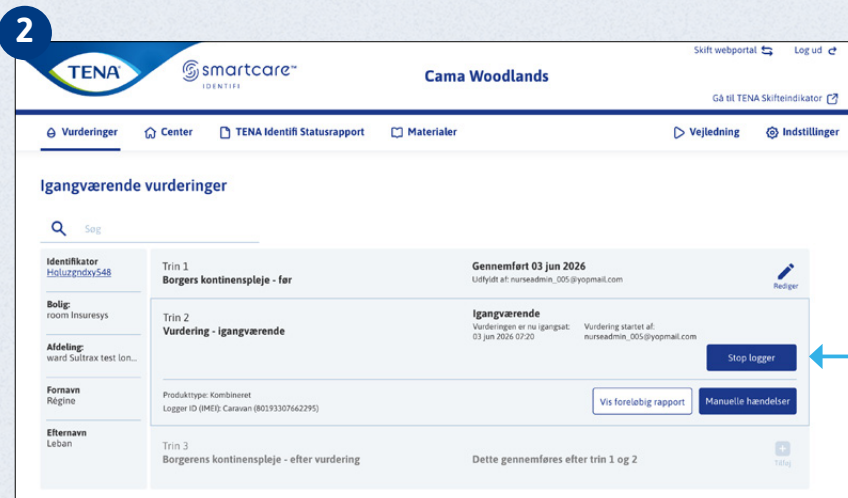

Før du klikker på **Stop logger** på pop op-skærmen, skal du rense loggeren og sætte den i opladeren for at sikre, at alle data er blevet overført.

Følg trinnene på side 12 for at fuldføre vurderingen.

FULDFØR VURDERINGEN



1

The screenshot shows the Tena SmartCare Identifi web portal for 'Cama Woodlands'. The 'Igangværende vurderinger' (Ongoing assessments) section is active. It displays a list of assessments for a patient named 'Borgers kontinenspleje - før'. The assessment is currently in 'Igangværende' (Ongoing) status. A 'Marker fuldført' button is visible next to the assessment details.

Markér som fuldført

Klik på **markér som fuldført** for at flytte den fuldførte vurdering fra **igangværende vurderinger** til **fuldførte vurderinger**.

Dette gøres for at adskille de igangværende vurderinger fra de afsluttede evalueringer.


Klik på **markér som fuldført**.

2

The dialog box titled 'Afslutning af vurderingen' (End of assessment) is shown. It contains the following text: 'Du kan ikke længere redigere borgers tidligere plejerutine forkontinenspleje, når en vurdering er sat som afsluttet. Vurderingen flyttes til Afsluttede Vurderinger. Du kan stadig føje hændelser til bedømmelsen manuelt. Denne handling kan ikke omstødes.' At the bottom, there are two buttons: 'Slet' (Delete) and 'Marker fuldført' (Mark as completed).

! Hvis en vurdering ikke er markeret som fuldført, fuldføres den automatisk efter 15 dage.


GENERER VURDERINGSRAPPORT

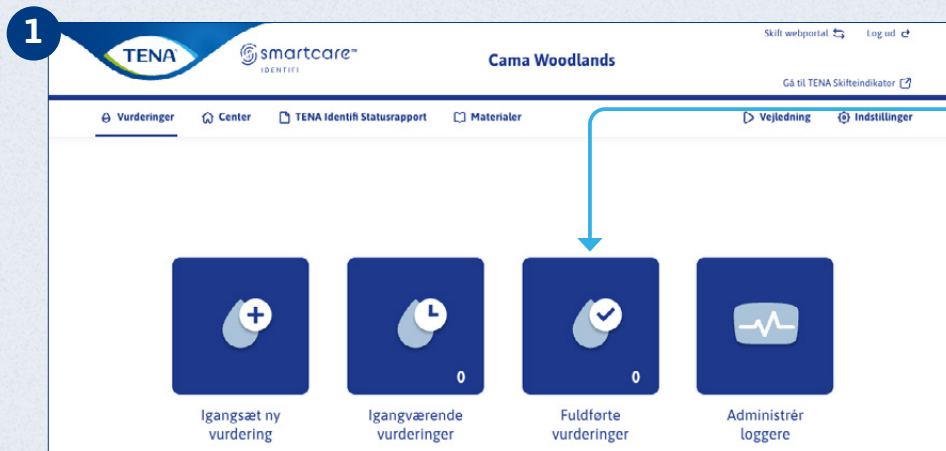

Klik på **fuldførte vurderinger**.


Klik på **skab rapport** for den ønskede vurdering.

For at generere en rapport over en fuldført vurdering

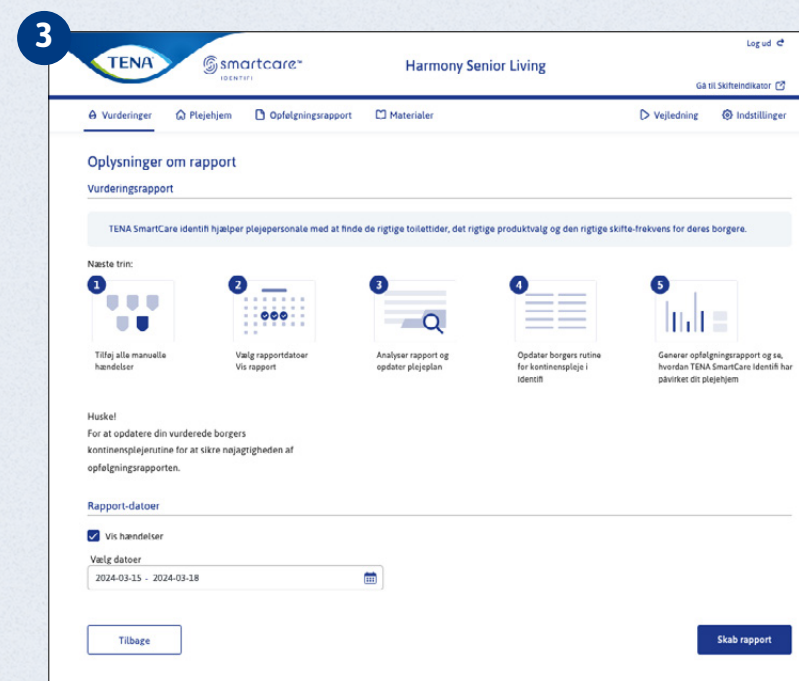

Indtast de ønskede **datoer**. Datoerne for den seneste vurdering vises som standard. Klik på **opret rapport**.

GENERER VURDERINGSRAPPORT

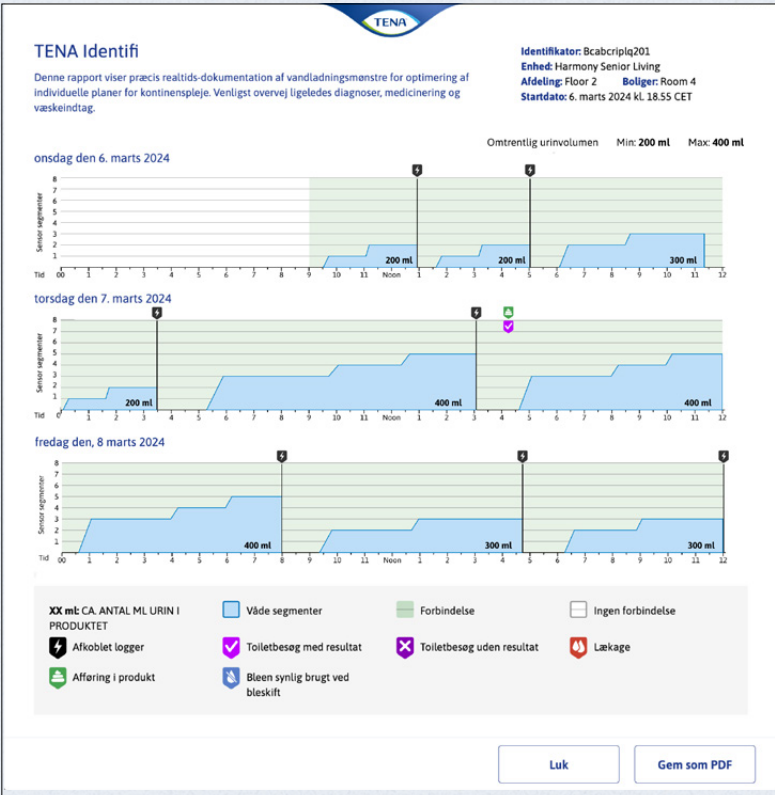

Vurderingsrapporten viser borgers vandladningsmønstre og -volumen over en 72-timers periode, time for time. De data, der indsamles gennem loggeren, præsenteres i en grafisk form, hvor vandladningsmønstret vises.

Du kan finde vejledningen til at fortolke rapporten ("Guide let analyse") under Materialer i webportalen.

Forbered dig på at lave en individuel plejeplan

Den individuelle plan bør omfatte:

- Individuel toiletplan for at finde de rigtige tidspunkter for skift og toiletbesøg og undgå forstyrrelser om natten
- Individuel skifteplan
- De rette inkontinensprodukter - korrekt type med korrekt sugeniveau og i den rigtige størrelse

Dette er grundlaget for at nå målene:

- MÅL 1 - Find de rette toiletter
- MÅL 2 - Længere perioder med uforstyrret søvn om natten
- MÅL 3 - Find det mest passende produkt til borgeren

Når du laver en kontinensplejeplan, skal du også overveje, om der er andre ting, du skal tage hensyn til for borgeren, eksempelvis medicin, hudens tilstand, bevægelighed, personlige vaner og tarmkontrol.

MÅL 1 - Find de rette toiletter

MÅL 2 - Længere perioder med uforstyrret søvn om natten

MÅL 3 - Find det mest passende produkt til borgeren

Hvad er det næste?

Tal om fordelene

Effektiv kommunikation og samarbejde mellem borgeren, borgers familie og plejepersonalet fremmer borgers sikkerhed og gode pleje.

Vis rapporten til plejerne og forklær, hvorfor de nye rutiner passer til borgeren.

Alt et opløgende møde

Kontinenspleje kan ofte ændre sig hurtigt.

Fortolkning af rapporten

Borgers inkontinensplan

Hvad skal du overveje	Svar
Hvor tit og på hvilket tidspunkt af dagen kommer urinen i følge rapporten?	
Hvor meget urin er absorberet af produktet i løbet af skiftet?	
Hvilke mønstre ser du i løbet af de tre dage?	

Input til plejeplan

Hvad er de mest velegnede tidspunkter til toiletbesøg?	Svar
Hvornår har andre ændringer foretages for at opnå en god dagstid?	
Hvornår har natproduktet tages i brug?	
Hvornår har det sidste toiletbesøg funde sted?	
Hvilken type beskyttelse er hensigtsmæssig?	Dag: Nat:
Hvilken sugenive er nødvendig om dagen/natten?	Dag: Nat:

essity

TENA at Essity-brand



Hver rapport indeholder et afsnit, hvor du kan indtaste de oplysninger, der er indsamlet i rapporten, så du kan forbedre borgers individuelle kontinensplan. Eksempelvis finde de rette toilettider, finde det mest egnede produkt og skabe længere perioder med uforstyrret søvn.

Du kan downloade en redigerbar version, som lader dig tilføje eller ændrer noter til rapporten.

FULDFØRTE VURDERINGER (TRIN 3*)



Når vurderingen er analyseret, tilføjes borgers nye data i Trin 3 / "efter".

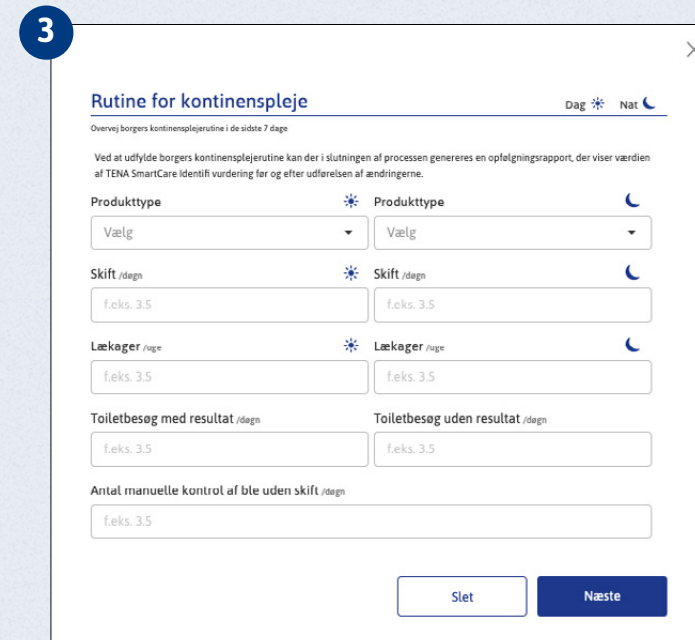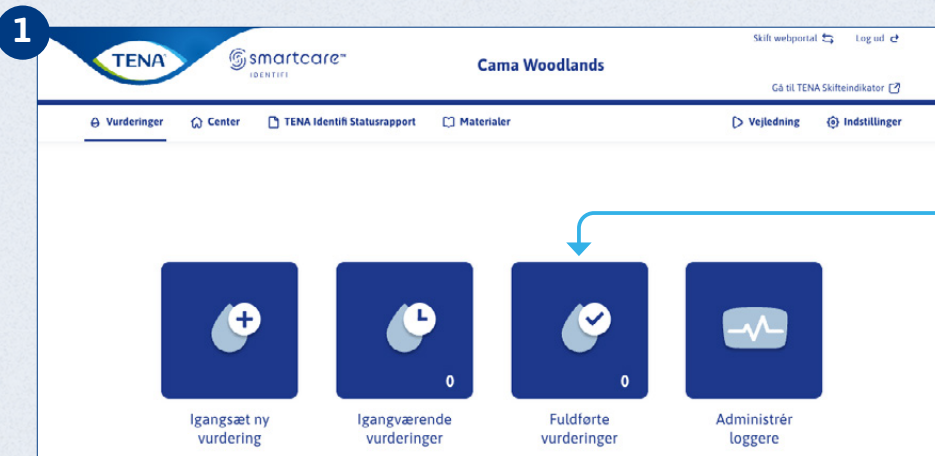


Tilføj "efter"-data og de kvalitative spørgsmål og klik derefter på send.

Dette kan også gøres under **administrer borger** – Se side 24

*Dette gælder kun for superbrugere med adgang til TENA Identifi Statusrapport.

ARKIVEREDE VURDERINGER


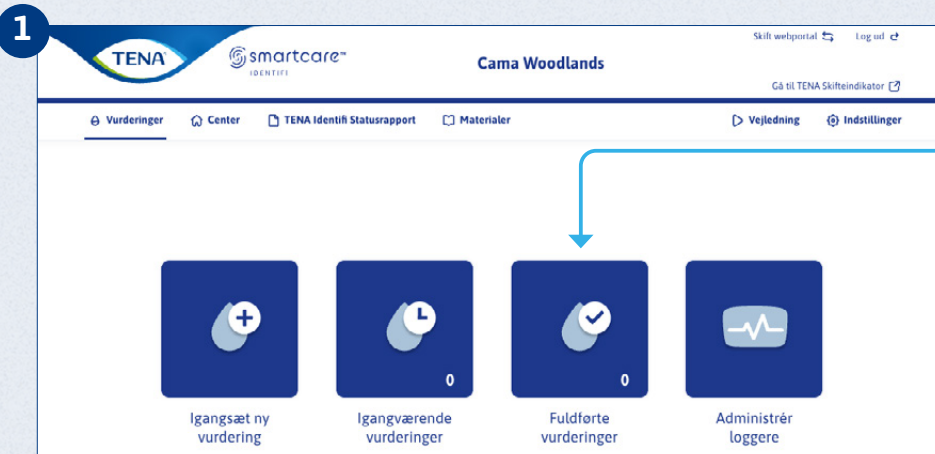


Vurderinger, der er ældre end 90 dage, gemmes under **arkiverede vurderinger**.

Klik på **fuldførte vurderinger**.

Rul ned til bunden af siden **fuldførte vurderinger**.

Klik på **arkiverede vurderinger**.

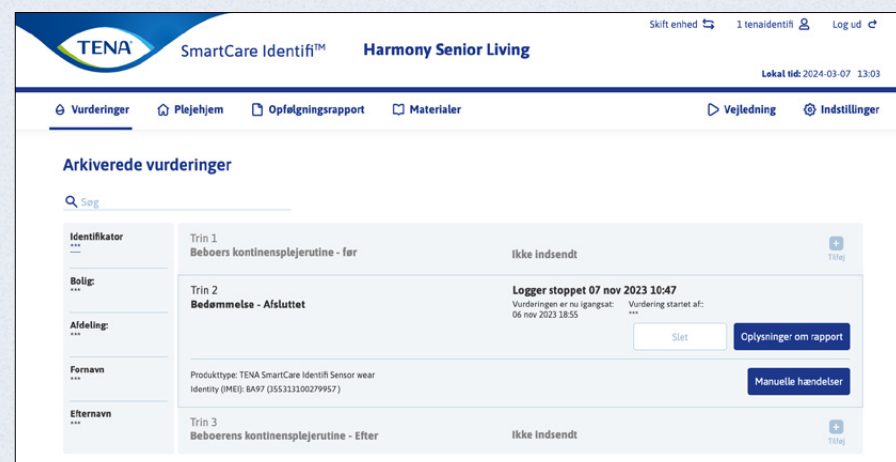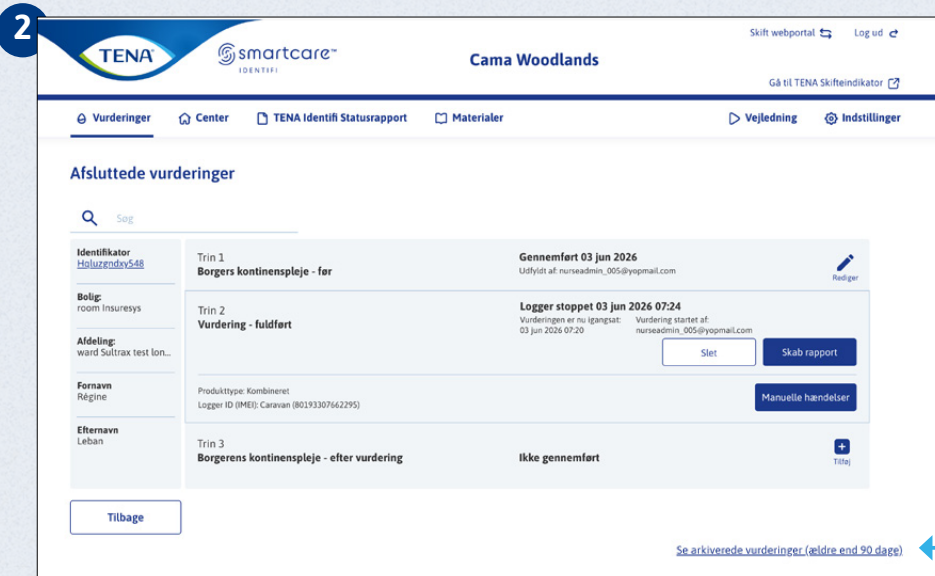

En oversigt over de arkiverede vurderinger vises. Klik på **rapportoplysninger** for at se en rapport.

HENT TENA IDENTIFI STATUSRAPPORT



1

TENA smartcare™ IDENTIFI Cama Woodlands

Skift webportal Log ud

Gå til TENA Skifteindikator

Vurderinger Center **TENA Identifi Statusrapport** Materialer Vejledning Indstillinger

2

TENA smartcare™ IDENTIFI Cama Woodlands

Skift webportal Log ud

Gå til TENA Skifteindikator

Vurderinger Center **TENA Identifi Statusrapport** Materialer Vejledning Indstillinger

Påmindelse:

- 1 Færdiggør borgers plan for kontinenspleje i Identifi
- 2 Gennemfør vurdering hos borger
- 3 Tilpas borgers plan for kontinenspleje iht. vandladningsrapporten
- 4 Vælg tidsperiode
- 5 Vælg centre, der skal inkluderes
- 6 Generér rapport og se hvilken effekt TENA SmartCare Identifi har haft på dit center

Næste trin:

Vælg periode

Fra * 2026-01-01 TIL * 2026-06-03

Næste

[Generér en statusrapport for alle plejecentre](#)

Vælg TENA Identifi Statusrapport i menuen

3

TENA smartcare™ IDENTIFI Cama Woodlands

Skift webportal Log ud

Gå til TENA Skifteindikator

Vurderinger Center **TENA Identifi Statusrapport** Materialer Vejledning Indstillinger

TENA Identifi Statusrapport: 2026-01-01 - 2026-06-03

10 Adgange

Søg

1 af 1

Center	Kommune	Antal af borgere
Cama Woodlands	Test group	1/72 Se borgere

Tilbage < 1 >

Generér statusrapport

Borgere- Harmony Senior Living

ID	Identifikator	Dato for vurdering
☒ 24279	005490 h2	15 mar 2024 - 15 mar 2024

Slet Gem


Vælg datoerne for den periode, du ønsker at se.

Hvis du har adgang til mere end ét center, kan du finde disse her for at generere en samlet rapport.

Vis borgere viser, hvilke borgere der medtages i rapporten.

Klik på **generér statusrapport** for at oprette en rapport, som du kan downloade.



HVAD ER INKLUDERET I TENA IDENTIFI STATUSRAPPORT?

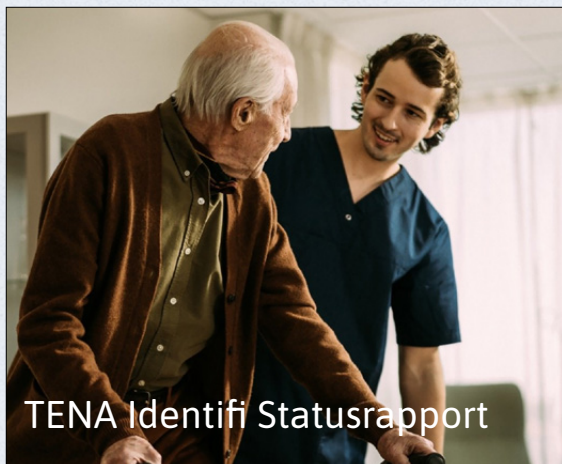TENA Identifi Statusrapport

Bontouch Test Facility
Vurderinger af 1 borger udført 7. jan. 2026 - 7. jan. 2026

Resultater	1
Plejepersonalets arbejdsområde	2-3
Absorberende produkter	4-5
Toiletbesøg	6
Lækager	7-8
Samlede omkostninger	9-10
CO ₂ -udledning	11
Pointer til refleksion	12
Bilag	13-14

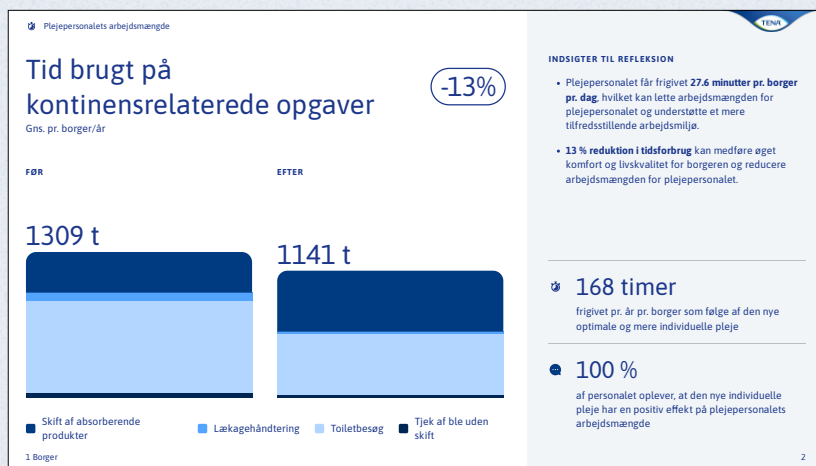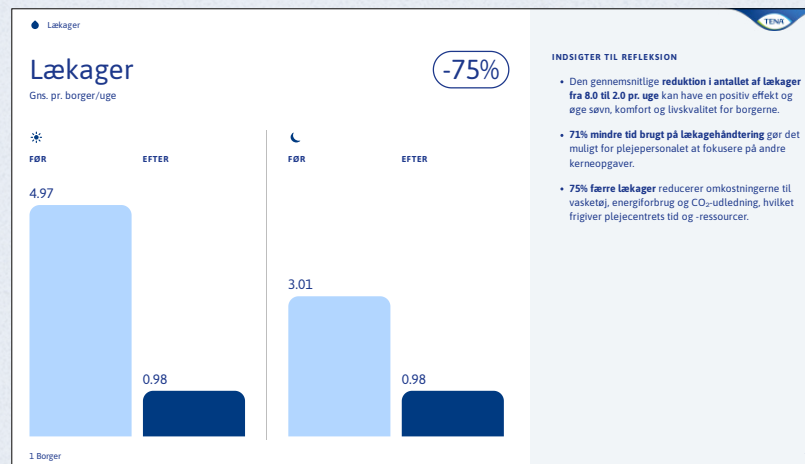

TENA Identifi Statusrapport udarbejdes på baggrund af resultaterne af sammenligningen af kontinensplejen før og efter, og den er tilgængelig som PDF (se vejledningen herunder for udskrivning af PDF'en).


Rapporten har flere sider, der viser de indsamlede data, og som giver dig mulighed for at se hvilke forandringer, det har medført at anvende TENA Identifi.

Udskrivning af rapporten


Bemærk, at det kan være nødvendigt at tilpasse 2 indstillinger ved udskrivning. Klik på **gem som PDF** samt **medtag baggrundsgrafik** for at se rapporten i sin helhed.

TILFØJ NY BRUGER

KUN FOR SUPERBRUGER

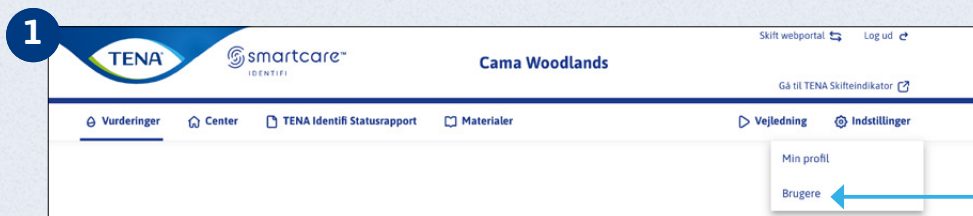

Klik på **indstillinger** og derefter på **brugere**.

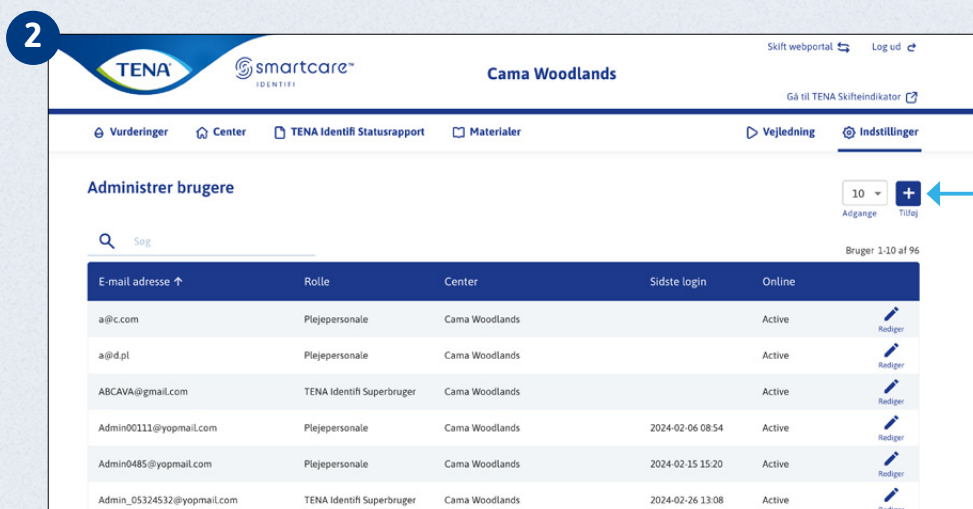

Klik på **tilføj**.

Udfyld felterne, og klik på **send** for at oprette en ny bruger.

Opret ny konto

Adgang til funktion

☒ TENA Identifi Superbruger ☐ Plejepersonale

Vælg center

☐ Vilmar Care Facility ☐ Bentouch Test Facility ☒ Cama Woodlands ☐ Country

Generelle indstillinger

E-mail adresse * Mobilnummer

Sprog *

☒ Adgang til TENA Identifi Statusrapport

TENA Identifi Statusrapport sammenligner den enkelte borgers og/eller centers status før og efter at have gennemført TENA Identifi vurderinger. Brugeren vil få vist ændringer i omkostninger, personaletid og effekter, som vurderinger har haft for borgeren.

Superbrugeren kan give eller fjerne adgangen til TENA Identifi Statusrapport.

Hvis du anvender multifaktorgodkendelse kan du autorisere dig med e-mail eller telefon, alt efter hvilke kontaktoplysninger du har angivet.

REDIGER ELLER FJERN BRUGER



1

TENA smartcare™ IDENTIFI Cama Woodlands

Skift webportal Log ud

Gå til TENA Skifteindikator

Vurderinger Center TENA Identifi Statusrapport Materialer Vejledning Indstillinger

Min profil Brugere

2

TENA smartcare™ IDENTIFI Cama Woodlands

Skift webportal Log ud

Gå til TENA Skifteindikator

Vurderinger Center TENA Identifi Statusrapport Materialer Vejledning Indstillinger

Administrer brugere

10 Adgange Tildel

Bruger 1-10 af 96

E-mail adresse ↑	Rolle	Center	Sidste login	Online	
a@c.com	Plejepersonale	Cama Woodlands		Active	Rediger
a@d.pl	Plejepersonale	Cama Woodlands		Active	Rediger
ABCAVA@gmail.com	TENA Identifi Superbruger	Cama Woodlands		Active	Rediger
Admin00111@yopmail.com	Plejepersonale	Cama Woodlands	2024-02-06 08:54	Active	Rediger
Admin0485@yopmail.com	Plejepersonale	Cama Woodlands	2024-02-15 15:20	Active	Rediger
Admin_05324532@yopmail.com	TENA Identifi Superbruger	Cama Woodlands	2024-02-26 13:08	Active	Rediger

Klik på **indstillinger** og derefter på **brugere**.

Klik på den bruger, som du vil redigere. Rediger derefter oplysningerne, og klik på **send**.

TENA smartcare™ IDENTIFI Cama Woodlands

Skift webportal Log ud

Gå til TENA Skifteindikator

Vurderinger Center TENA Identifi Statusrapport Materialer Vejledning Indstillinger

Rediger brugerprofil

Adgang til funktion

☐ TENA Identifi Superbruger ☒ Plejepersonale

Vælg center

Søg

☐ Vælg alle

☐ Wilmas Care Facility ☐ Bontouch Test Facility ☒ Cama Woodlands ☐ Country

Generelle indstillinger

E-mail adresse * Mobilnummer

a@c.com +45 91 23 45 67

Sprog *

Engelsk (UK)


Slet

Hvis du vil **slette** en bruger, skal du klikke på ikonet øverst på siden.


ADMINISTRER AFDELINGER



Klik på **center**.

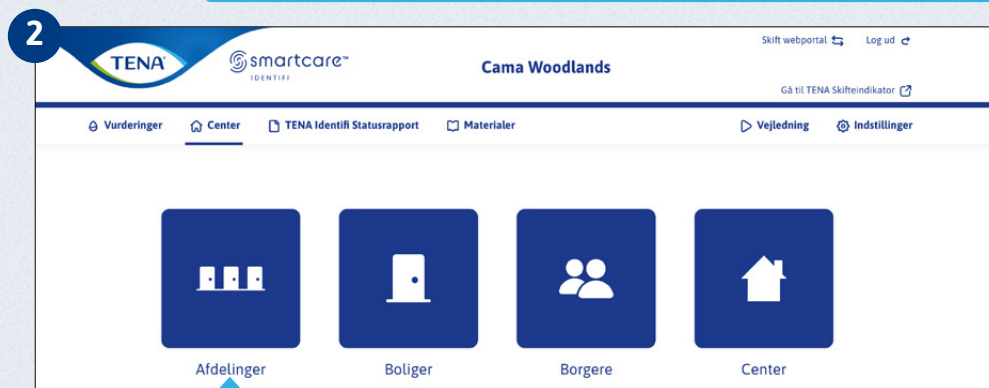

Klik på **afdelinger**.

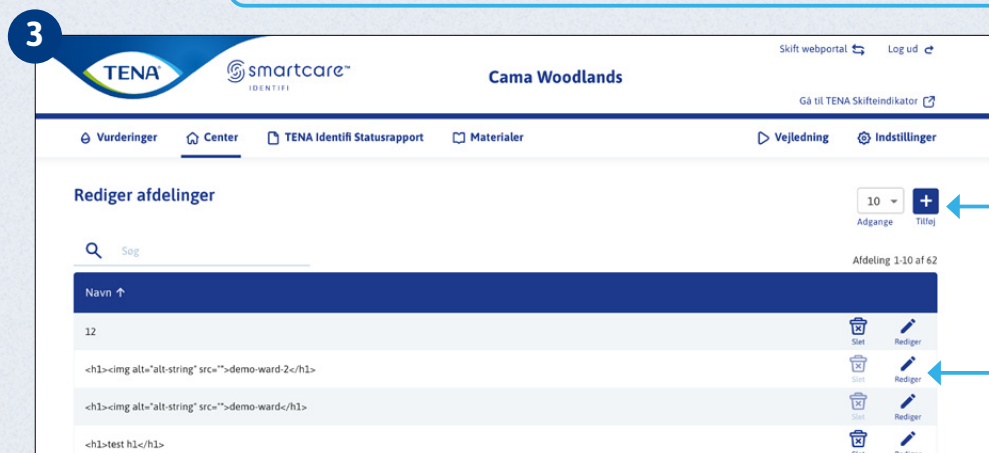

Klik på **tilføj** for at oprette en ny afdeling.

Tilføj afdeling

Afdeling *

Navn på afdeling

Slet Tilføj

Eller klik på **rediger** ved siden af den afdeling, som du ønsker at ændre.



Rediger afdelinger

Afdeling *

Floor 2

Slet Gem

ADMINISTRER BOLIGER

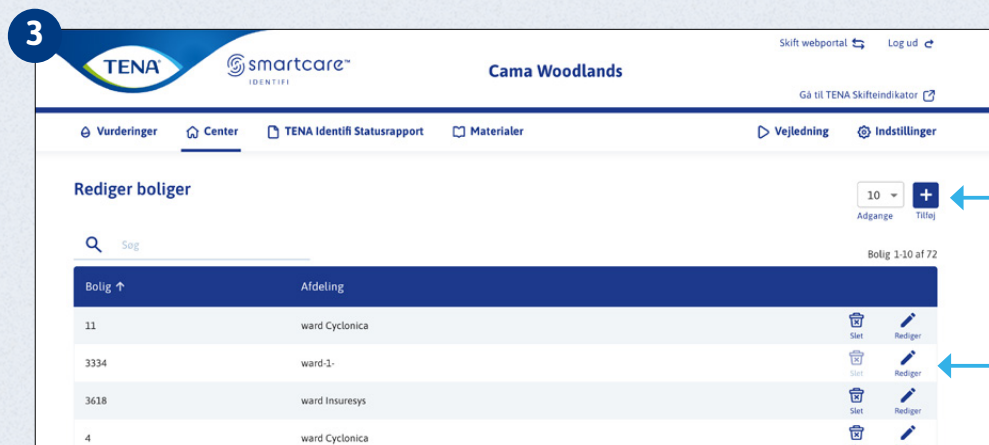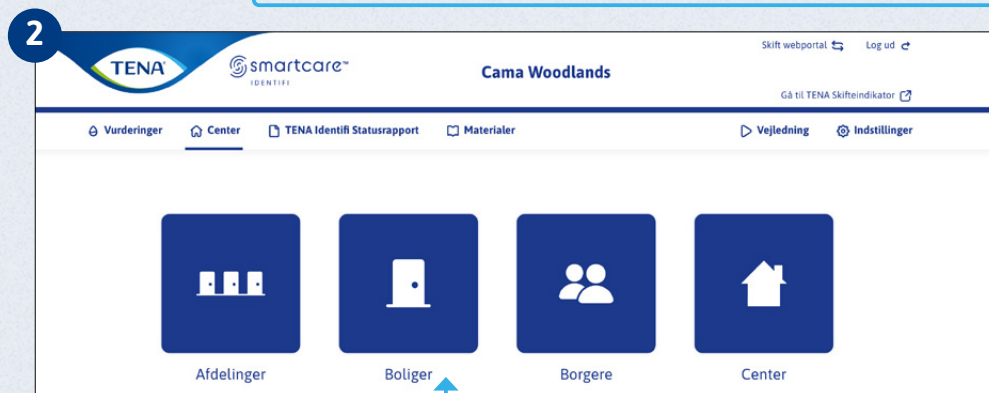Klik på **center**.Klik på **boliger**.Klik på **tilføj** for at oprette en ny bolig. Giv den et navn, og tildel den til en eksisterende afdeling.Eller klik på **rediger** ved siden af den bolig, som du ønsker at ændre.

Tilføj bolig

Bolig *

Bolig nr.

Navn på afdeling *

Vælg

Rediger boliger




Bolig *

Room 2

Navn på afdeling *

Floor 1



ADMINISTRER BORGERE

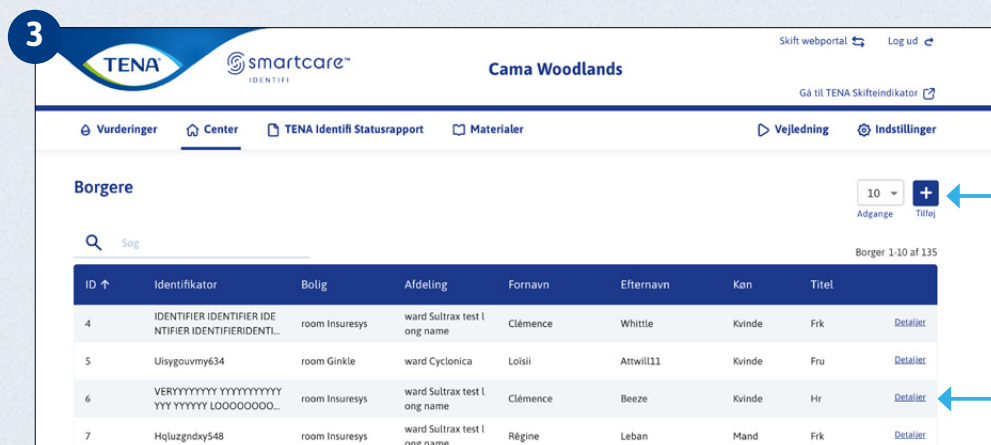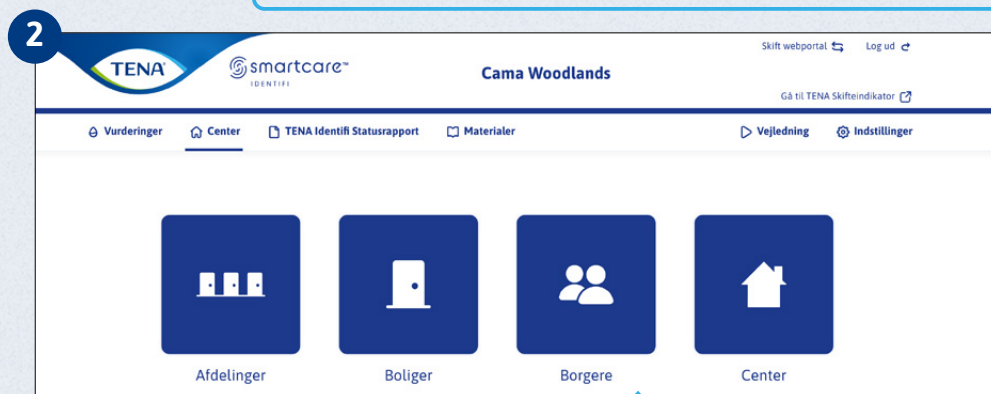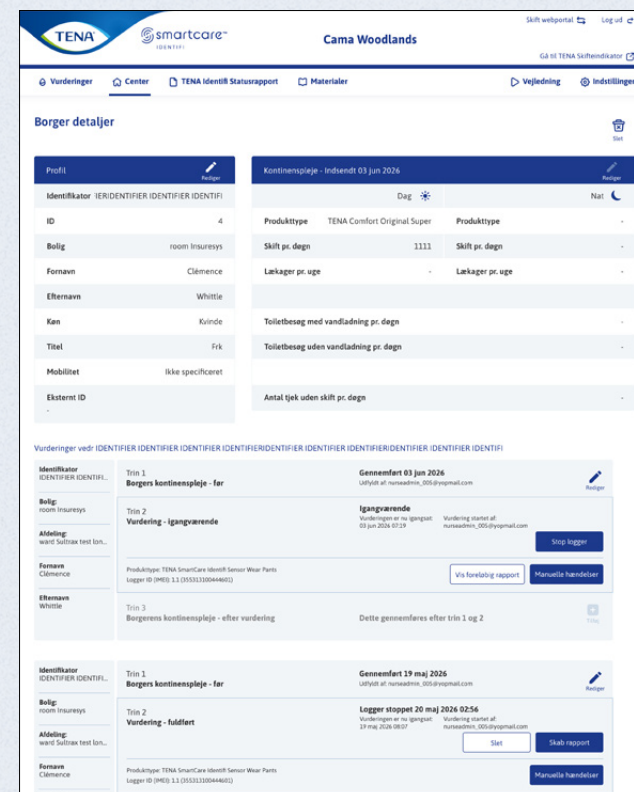Klik på **center**.Klik på **borgere**.Klik på **tilføj** for at oprette en ny borger. Giv borger et navn, og tildel vedkommende til en eksisterende afdeling.Eller klik på **detaljer** ved siden af den borgere, som du ønsker at ændre.

Bemærk: Oplysninger om borgere viser altid de sidst indsendte data, hvis centeret har adgang til vurderingen.

ADMINISTRER CENTER

KUN FOR SUPERBRUGER

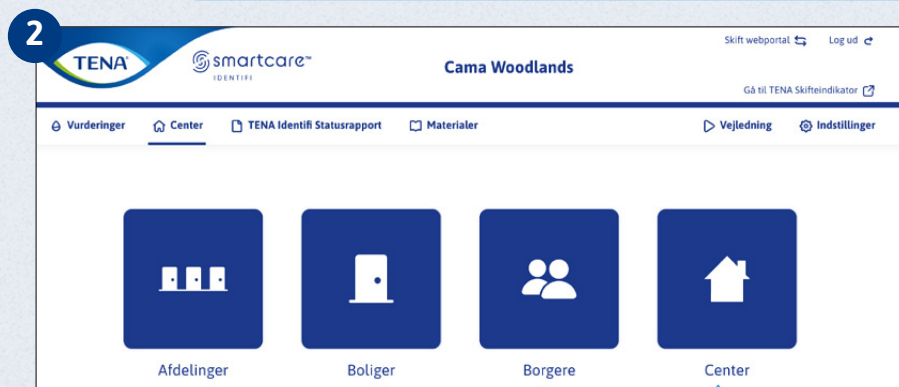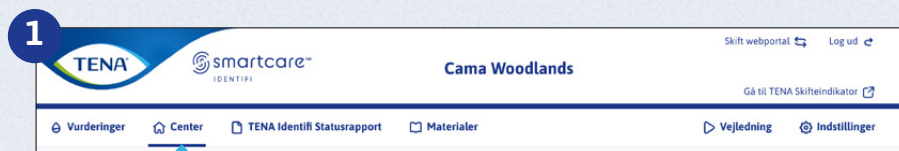

Klik på ikonet **center**

Du kan derefter opdatere indstillingerne for borger data og centeret.

Klik på **center**.

! Indhent samtykke

Du kan markere afkrydsningsfeltet for at aktivere en påmindelse om at indhente samtykke fra borgeren, inden du starter en vurdering.

! Multifaktor-godkendelse

Dette kræver, at brugerne har registreret deres mobiltelefonnummer på deres profil.

Klik på **Gem** nederst på siden.

INDSTILLINGER FOR DATA TIL TENA IDENTIFI STATUSRAPPORT

KUN FOR SUPERBRUGER



Indstillinger for TENA Identifi Statusrapport kan tilpasses, hvis nogle værdier ændres. De værdier, der er angivet i indstillingerne for opfølgingsrapporten, som åbnes under **center**, anvendes som grundlag til at generere rapportens resultater.

TENA smartcare Cama Woodlands

Vurderinger Center Tena Identifi Statusrapport Materialer Vejledning Indstillinger

Rediger Cama Woodlands

Indstillinger for center

Center * Cama Woodlands Kontaktperson John Coveyrtt

E-mail adresse test@email.com Telefonnummer +01 22288882

Mobilnummer +48 111 111 111 Mål / måned 1

Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger

☒ Indhent samtykke
Denne funktion aktiverer en påmindelse om at få samtykke fra borger inden du starter en vurdering.

☐ Anvend multifaktor godkendelse (MFA)

Indstillinger for borger oplysninger

Dette afsnit giver dig mulighed for at tilpasse, hvilke borgerdata der skal anvendes på dette center. Identifikator er obligatorisk og kan ikke ændres.

Identifikator ☒ Synlig ☐ Obligatorisk ☐ Grænse på 3 tegn

Mobilitet ☒ Synlig ☐ Obligatorisk

Fornavn ☒ Synlig ☐ Obligatorisk ☐ Grænse på 3 tegn

Efternavn ☒ Synlig ☐ Obligatorisk ☐ Grænse på 3 tegn

Køn ☒ Synlig ☐ Obligatorisk ☒ Mand ☒ Kvinde ☒ Ikke specificeret

Titel ☒ Synlig ☐ Obligatorisk ☒ Hr ☒ Fru ☐ Frk ☐ Ikke specificeret

Indstillinger for Tena Identifi Statusrapport

Lænomkostninger /time * 200 SEK Lænomkostninger /time * 500 SEK



Vasketøjssomkostninger - tøj (fuldt sæt) * 45 SEK Vasketøjssomkostninger - sengetøj (fuldt sæt) * 40 SEK

Tid anvendt på et skift * 20 Min. Tid anvendt på et skift * 30 Min.

Tid anvendt på tøjskift - Lækage /min/borger * 30 Min. Tid anvendt på skift af sengetøj - Lækage /min/en seng * 30 Min.

Tid anvendt til tøj af/ben uden et skift /min * 5 Min.

Tilbage Annuller Gem

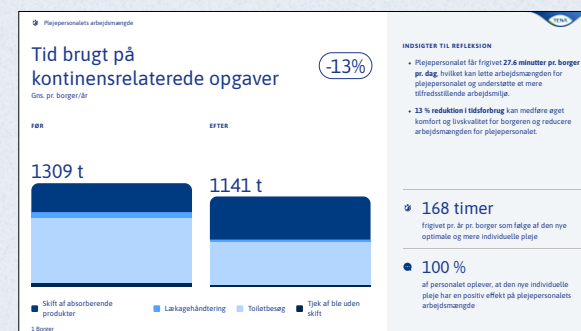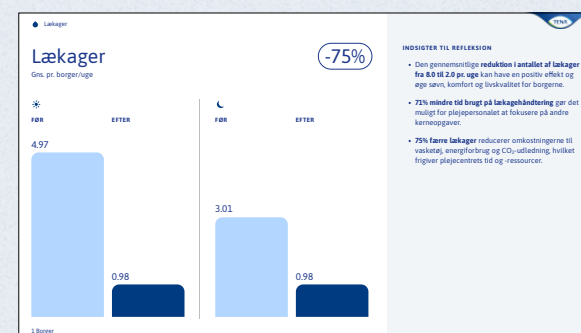

VEJLEDNINGSVIDEOER OG OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL



1

Skift webportal ↻ Log ud ↗

Gå til TENA Skifteindikator ↗

Vurderinger Center TENA Identifi Statusrapport Materialer **Vejledning** Indstillinger

Hjælp

Søg

Før vurdering igangsættes
Hvad du har brug for, før du starter en TENA Identifi vurdering

TENA Identifi stående påsætning
Instruktion til påsætning af TENA Identifi loggeren på en stående person.

TENA Identifi liggende påsætning
Instruktion til påsætning af TENA Identifi logger på en liggende person.

TENA Identifi Pants
For borgere, der selv skifter sit absorberende produkt.


Grønt lys
Når loggeren er sat i SensorWear, blinker TENA Identifi-loggeren et grønt lys i 45 sekunder. Det betyder, at alt er OK.

Orange lys
Et orange lys betyder, at batteriet er lavt og loggeren skal i oplader.

Klik på **vejledning**.


Klik på **en video** for at se vejledningen til dette afsnit.

MATERIALER

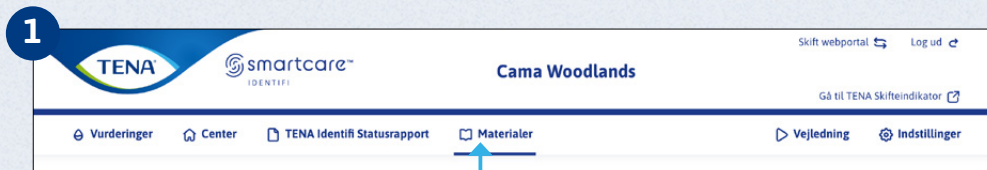

Materialer indeholder forskelligt materiale, der understøtter brugen af TENA SmartCare Identifi.

Klik på **Materialer** øverst i menuen

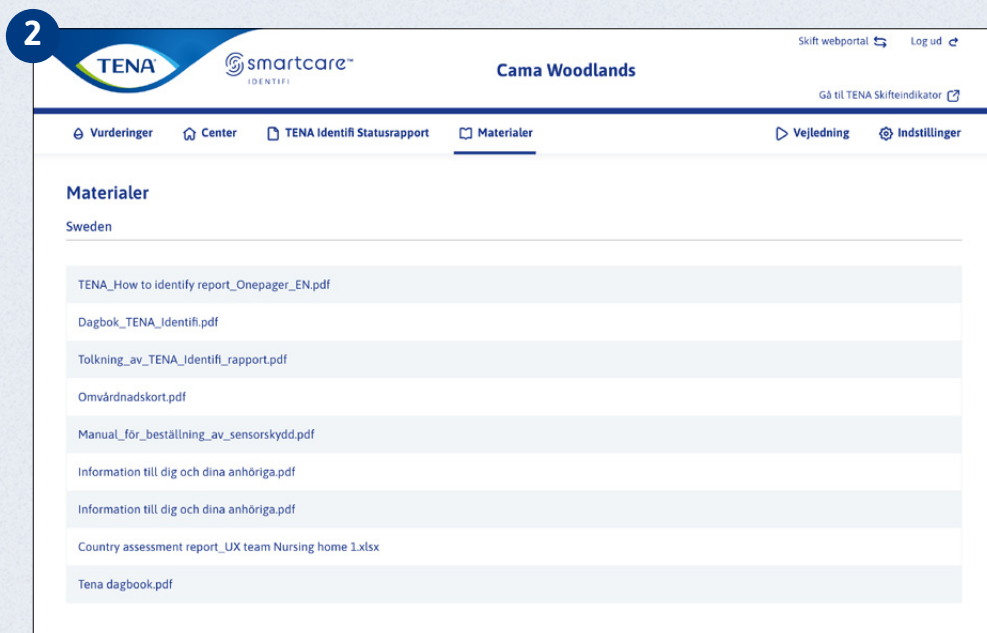

Se/download en fil

Der vises en oversigt over de tilgængelige filer.

Klik på den ønskede fil for at downloade/se den.

