

TENA SMARTCARE IDENTIFI™ VERKKOPORTAALI



SISÄLTÖ



SISÄLTÖ	2
JOHDANTO	3
KÄYTÖN ALOITUS	
Käyttäjätilin aktivointi ja sisäänkirjautuminen	5
ARVIOINTI	
Arviointi ja seurantaraportti	6
Uusi arviointi	
Aloita uusi arviointi	7
Kirjauslaitteen siirtäminen	8
Uuden hoidettavan henkilön rekisteröiminen	9
Arvioinnin aloittaminen	10
Käynnissä oleva	
Manuaaliset tapahtumat	11
Käynnissä olevan arvioinnin esikatselu	12
Arvioinnin pysäyttäminen	13
Arvioinnin viimeistely	14
Arviointiraportin luominen	15
Valmiit arvioinnit	17
Arkistoidut arvioinnit	18

SEURANTARAPORTTI

Seurantaraportin luonti	19
Raportin sisältö	20

KÄYTTÄJÄ

Uuden käyttäjätilin lisääminen (Vain ylläpitäjä)	21
Käyttäjätilin muokkaaminen tai poistaminen	22

AKSETUKSET

Osastojen hallinta	23
Huoneiden hallinta	24
Hoidettavien henkilöiden hallinta	25
Hoitolaitoksen hallinta (Vain ylläpitäjä)	26
Seurantaraportin tietoasetukset (Vain ylläpitäjä)	27

OHJE

Ohje- ja vastausvideot	28
Resurssit	29

JOHDANTO



Tämä käyttöopas on tarkoitettu sairaanhoitajille ja ylläpitäjille.

TENA SmartCare Identifi™ -järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi apuvälineenä hoidettavien henkilöiden kontinenssin arvioinnissa sekä sopivimpien inkontinenssisuojien, vessassa käynnin ajankohtien ja potilaan kontinenssinhoitorutiinien määrittämisessä. Arviointijakso on 72 tuntia.

TENA SmartCare Identifi™ -järjestelmä koostuu kolmesta osasta: Sensor wear -tuote, lukija ja raportointijärjestelmä.

TENA SmartCare Identifi™ -raportointijärjestelmän tarkoitus on kerätä ja esittää kirjauslaitteista vastaanotettuja tietoja. Raportointijärjestelmää käytetään arvioinnin käynnistämiseen ja arvioinnin valmistuttua tulosten esittämiseen raporteissa.

TENA SmartCare Identifi™ -raportointijärjestelmä mahdollistaa valvonnan ja edistymisen seurannan seurantaraportilla. Seurantaraportti näyttää ratkaisun käytön arvon vertailemalla kontinenssinhoitorutiineja ennen ratkaisun käyttöä ja sen jälkeen.



HUOMAUTUS: TENA SmartCare Identifi™ -järjestelmä arvioi nesteiden määrän. Järjestelmää ei saa käyttää nesteensaannin seurantavälineenä.



JOHDANTO (JATKUU)



TENA SmartCare Identifi™ -järjestelmän uusi toiminto on seurantaraportti. Seurantaraportti on arvokas lisäys hoitolaitoksen työkaluihin. Se näyttää hoitolaitoksen kokonaisarvon, kun hoidettavien henkilöiden hoitoarviot on suoritettu.

Se antaa hoitolaitokselle tietoa käytetyistä tuotteista, hoidettavien henkilöiden tarpeista ja muuttuvista rutiineista, jolloin hoitolaitos voi suunnitella sairaanhoitajien aikatauluja tehokkaasti, ja se näyttää lisäksi jokaisen laitoksen ympäristönäkökohdat.



Seurantaraportti on toiminto, joka lisätään, kun järjestelmä otetaan käyttöön. Se on käyttöoikeusperusteinen. Ylläpitäjä ei voi lisätä tai poistaa sitä.

Sivulla 6 on yleiskatsaus toiminnon hoitolaitoksille tarjoamista eduista.

Hyödynnä seurantaraporttia tehokkaasti säätämällä asetuksia. Ohjeet sivulla 27.

Change Indicator -vaihtoilmaisimen verkkoportaalin käyttö

Sekä TENA SmartCare Identifi™ -järjestelmää että TENA SmartCare Change Indicator™ -vaihtoilmaisinta käyttävät hoitolaitokset voivat käyttää verkkoportaaleja napsauttamalla **Siirry Change Indicator -alustalle**.

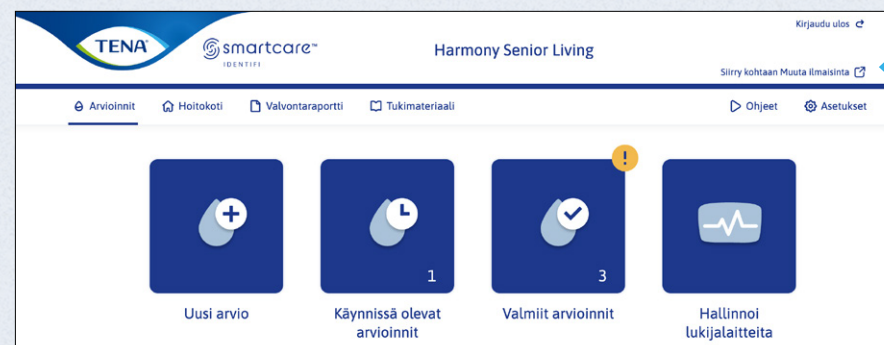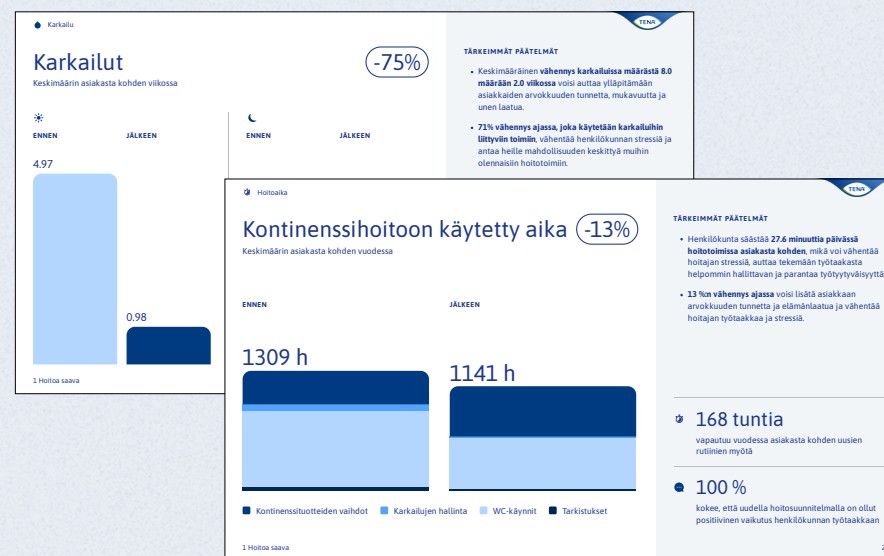

KÄYTTÄJÄTILIN AKTIVOINTI JA SISÄÄNKIRJAUTUMINEN



Aseta salasana käyttäjätunnukseksi anna.anderson@nursinghome.com

Salasanan tulee olla vähintään kahdeksan merkkiä pitkä ja sisältää vähintään kolme seuraavista merkkityypeistä:

- pieni kirjain (a–z)
- iso kirjain (A–Z)
- numero (0–9)
- erikoismerkki (@#\$%^& jne.)

Et voi käyttää nykyistä salasanaa uudelleen.

Salasana

Vahvista salasana

Aseta salasana

Aktivoi käyttäjätili sähköpostiin lähetetyn linkin avulla.

Anna salasana.

Napsauta **Aseta salasana**.

Kun käyttäjätili on luotu, anna sähköpostiosoite sekä salasana ja napsauta sitten **Kirjaudu sisään**.

Unohditko salasana?
Napsauta **Palauta salasana**, niin voit luoda uuden.

Monivaiheinen todennus

Vahvistuskoodi lähetetään sinulle rekisteröityyn puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen. Kirjaudu sisään antamalla salasana.

ARVIOINTI JA SEURANTARAPORTTI



Jos seurantaraportti on käytössä hoitolaitoksessasi, tämä vaihtoehto näkyy valikossa. Seurantaraportti antaa lisätietoja, jotka osoittavat TENA SmartCare Identifi™-järjestelmän arvon vertailemalla hoidettavan henkilön kontinenssinhoitorutiineja ennen arviointia ja sen jälkeen.*



Tämä symboli tulee näkyviin, kun toimia tarvitaan arvioinnin loppuun suorittamiseksi seurantaraportin ollessa käytössä.

Miksi seurantaraportin käyttäminen on kannattavaa?

Vaihe 1



Kontinenssinhoitorutiini – ennen

Arvioinnin tekemiseksi kirjataan kaikki tiedot hoidettavan henkilön nykyisestä rutiinista, käytetyistä tuotteista sekä virtsausajan ja -tiheyden muutoksista.

Vaihe 2



Arviointi ja analyysi

72 tunnin arvioinnin jälkeen voimme tarkastella tehtyjä ja kirjattuja muutoksia sekä analysoida TENA SmartCare Identifi™-järjestelmän arviointijakson aikana keräämiä hoidettavan henkilön tietoja.

Vaihe 3



Kontinenssinhoitorutiini – jälkeen

Tietojen perusteella voidaan luoda uusi rutiini, jonka pitäisi yksinkertaistaa prosessia sekä hoitajan että hoidettavan henkilön kannalta, mikä tarkoittaa usein sopivampaa suojaa, pienempää vaihtomäärää sekä parempaa vaihtoaikataulua. Seurantaraportit tallennetaan ja kutakin raporttia voidaan vertailla edelliseen.



*Seurantaraportti on käyttöoikeusperusteinen, eikä ylläpitäjä voi lisätä tai poistaa sitä.

ALOITA UUSI ARVIOINTI




- Valitse ensin päävalikossa **Arviointi**
- ja napsauta sitten **Uusi arviointi**.

Vaihe 1 on saatavilla vain, jos seurantaraportti on käytössä hoitolaitoksessa.

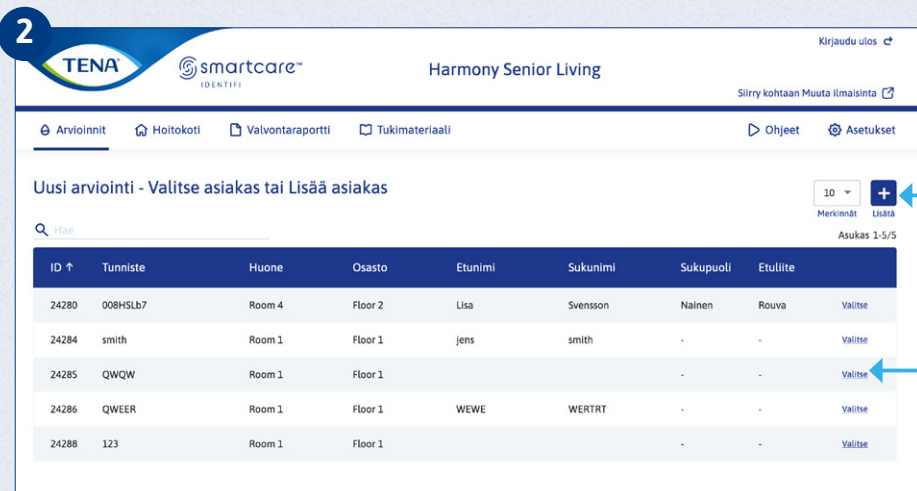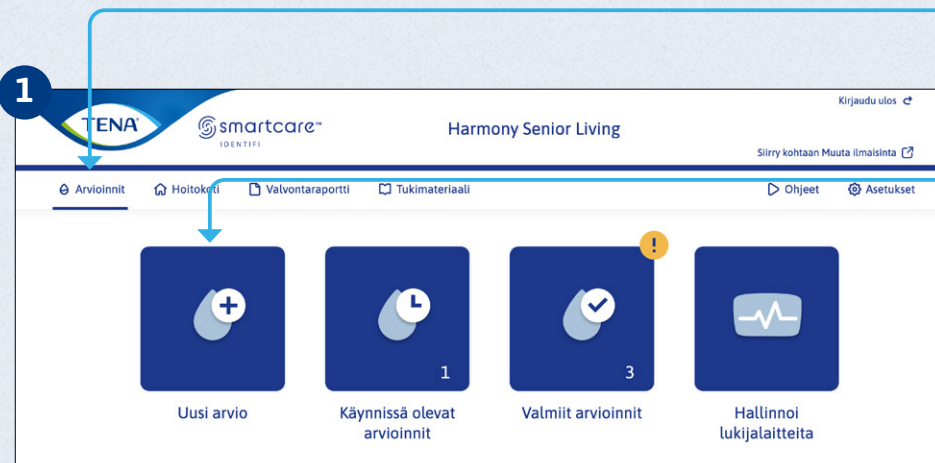


- Hoidettava henkilö on rekisteröitävä, jotta uusi arviointi voidaan aloittaa.
- Napsauta olemassa olevan hoidettavan henkilön kohdalla **Valitse** tai rekisteröi uusi hoidettava henkilö napsauttamalla **Lisää**.

KIRJAUSLAITTEEN SIIRTÄMINEN

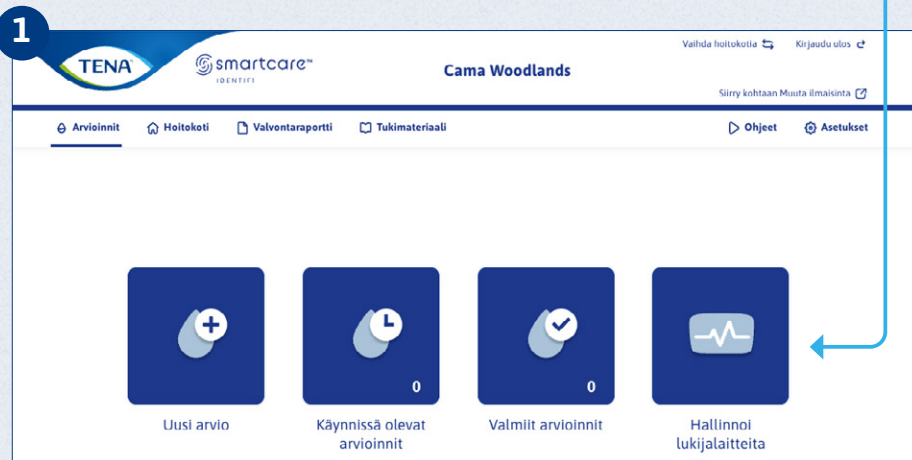

Voit siirtää kirjauslaitteita hoitolaitosten välillä. Valitse **Hallitse kirjauslaitetta**, niin voit siirtää laitteen hoitolaitoksesta toiseen ja varmistaa samalla, että kirjauslaite on rekisteröity oikealle hoitolaitokselle. **Huom: Vain järjestelmänvalvoja voi siirtää loggerin (laitteen) hoitoyksiköiden välillä saman hoito-organisaation (care group) sisällä, joihin hänellä on käyttöoikeus.**

Napsauta **Siirrä** -nuolikuvaketta siirrettävän kirjauslaitteen vieressä ja valitse sitten uusi hoitolaitos ikkunassa näkyvästä pudotusvalikosta.

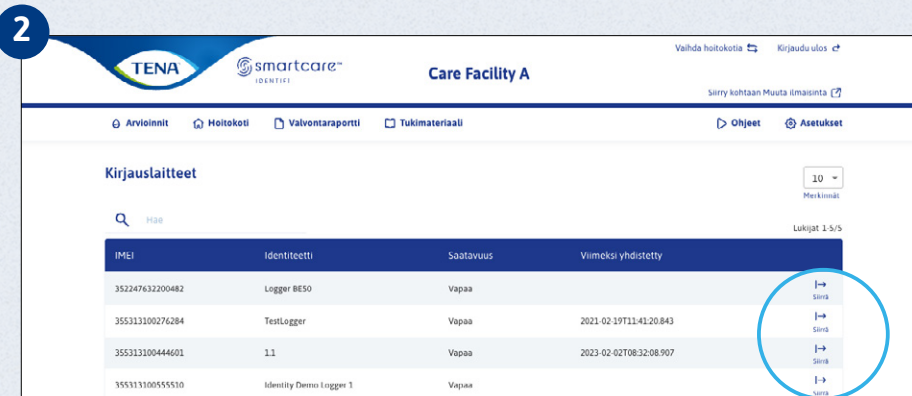

3

Siirrä lukija toiseen hoitokotiin

* Pakolliset kentät

IMEI
352247632200482

Nimetty hoitokoti *
Country

Varmista, että lukija on kunnolla **puhdistettu**, ennen kuin lähetät sen toiseen hoitokotiin!
Puhdistusohjeet löytyvät materiaalisivosta.

Peruuta **Siirrä**

UUSI | KÄYNNISSÄ OLEVA | ARVIOINTIRAPORTIN LUOMINEN | ARKISTOITU ARVIOINTI

— Aloita uusi arviointi | Kirjauslaitteen siirtäminen | Uuden hoidettavan henkilön rekisteröiminen | Arvioinnin aloittaminen





UUDEN HOIDETTAVAN HENKILÖN REKISTERÖIMINEN



Valitse ensin päävalikossa **Hoitolaitos** ja sitten **Uusi arviointi**.

Luo uusi hoidettava henkilö napsauttamalla **Lisää**.

Täytä kaikki pakolliset kentät. **Tunniste** on hoidettavan henkilön koodinimi.

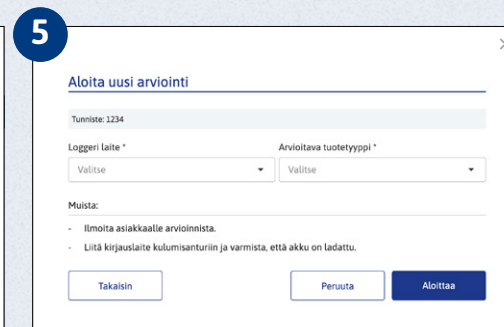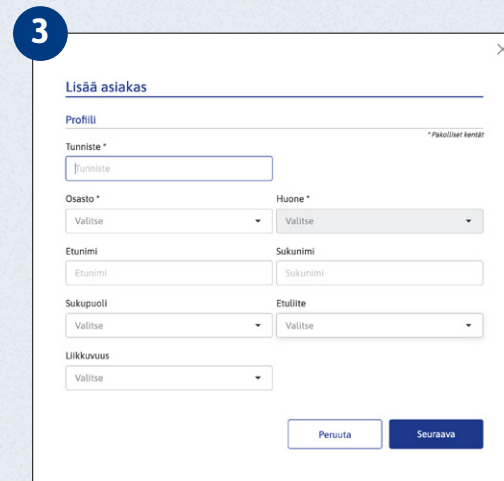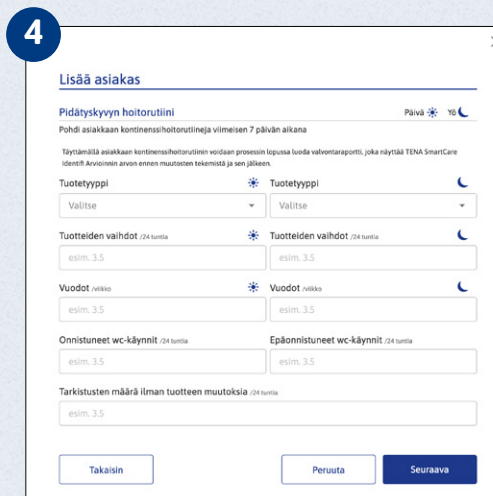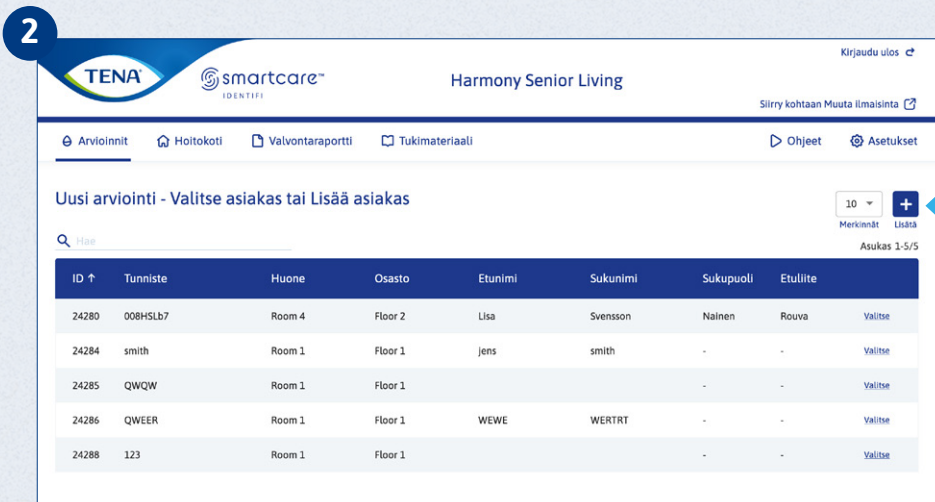

UUSI | KÄYNNISSÄ OLEVA | ARVIOINTIRAPORTIN LUOMINEN | ARKISTOITU ARVIOINTI

— Aloita uusi arviointi | Kirjauslaitteen siirtäminen | Uuden hoidettavan henkilön rekisteröiminen | Arvioinnin aloittaminen

ARVIOINNIN ALOITTAMINEN



1

TENA smartcare IDENTIFI Harmony Senior Living

Kirjaudu ulos

Siirry kohtaan Muuta ilmaisinta

Arvioinnit Hoitokoti Valvontaraportti Tukimateriaali Ohjeet Asetukset

Uusi arviointi - Valitse asiakas tai Lisää asiakas

10 + Merkinnyt Lisää Asukas 1-5/5

ID ↑	Tunniste	Huone	Osasto	Etunimi	Sukunimi	Sukupuoli	Etuliite	
24280	008HSLb7	Room 4	Floor 2	Lisa	Svensson	Nainen	Rouva	Valitse
24284	smith	Room 1	Floor 1	jens	smith	-	-	Valitse

Valitse ensin päävalikossa **Arviointi**.

Napsauta **Valitse** sen hoidettavan henkilön kohdalla, jonka arvioinnin haluat aloittaa.

Täytä hoidettavan henkilön tiedot Uusi arviointi -ikkunassa vaiheessa 1* ja 2. Aloita sitten arviointi napsauttamalla **Aloita**.

2

Uusi arvio Päivä 10 10

Vaihe 1: Asiakkaan kontinenssihoitorutiini

Pohdi asiakkaan kontinenssihoitorutiineja viimeisen 7 päivän aikana

Tunniste: smith

Täyttämällä asiakkaan kontinenssihoitorutiinin voidaan prosessin lopussa luoda valvontaraportti, joka näyttää TENA SmartCare Identifi Arvioinnin arvon ennen muutosten tekemistä ja sen jälkeen.

Tuotetyyppi * Tuotetyyppi

Valitse Valitse

Tuotteiden vaihdot /24 tuntia * Tuotteiden vaihdot /24 tuntia

esim. 3,5 esim. 3,5

Vuodot /viikko * Vuodot /viikko

esim. 3,5 esim. 3,5

Onnistuneet wc-käynnit /24 tuntia Epäonnistuneet wc-käynnit /24 tuntia

esim. 3,5 esim. 3,5

Tarkistusten määrä ilman tuotteen muutoksia /24 tuntia

esim. 3,5

Seuraava

Uusi arvio Päivä 10 10

Vaihe 2: Aloita uusi arviointi * Pakolliset kentät

Tunniste: smith

Loggeri laite * Arvioitava tuotetyyppi *

Valitse Valitse

Muista:

- Ilmoita asiakkaalle arvioinnista.
- Liitä kirjauslaite kulumisanturiin ja varmista, että akku on ladattu.

Takaisin Peruuta Aloittaa

Arviointi aloitettu

Arviointi on nyt aloitettu.

3

Arviointi aloitettu

Arviointi on aloitettu tunnisteella smith

Asiakkaan kontinenssihoitoa ei ole toimitettu kokonaan, mikä voi johtaa puutteelliseen seurantaraporttiin. Tietoja voidaan edelleen lisätä Arviointi/Käynnissä olevat arvioinnit-valikon tai Hoitokoti/Asiakkaat-valikon kautta.

OK Jatkuvat arvioinnit

*Saatavilla vain hoitolaitoksissa, joissa seurantaraportti on saatavilla.

MANUAALISET TAPAHTUMAT



Mitä manuaaliset tapahtumat ovat?

Manuaaliset tapahtumat ovat tapahtumia, joita kirjauslaite ei tallenna, kuten vuodot, ulostamisepisodit tai vessassa käynti. Ne on lisättävä manuaalisesti 72 tunnin arvioinnin aikana.

1

TENA smartcare IDENTIFI Harmony Senior Living

Kirjaudu ulos

Siirry kohtaan Muuta ilmaisinta

Arvioinnit Hoitokoti Valvontaraportti Tukimateriaali Ohjeet Asetukset

Jatkuvat arvioinnit

Hae

Tunniste	Vaihe	Lähetetty	Muokkaa
smith	Vaihe 1 Asiakkaan kontinenssihoitorutiini - ennen	Lähetetty 21 maa 2024 Lähetäjä: peter.nhm@yopmail.com	Muokkaa
Huone Room 1	Vaihe 2 Arviointi - käynnissä	Tietojen kerääminen loggerista Aloitettu: 21 maa 2024 11:51 Arvioinnin aloitti: peter.nhm@yopmail.com	Pysäytä lukija
Osasto Floor 1	Tuotetyyppi: TENA SmartCare Identifi Sensor wear Alias (IMEI): BA41 (35531310049626)	Esikatsela tietoja	Manuaaliset tapahtumat
Etu nimi jens	Vaihe 3 Asiakkaan kontinenssihoitorutiini - jälkeen	Lähetetään vaiheiden 1 ja 2 suorittamisen jälkeen	Lisää
Sukunimi smith			
Tunniste 002HSLb1	Vaihe 1 Asiakkaan kontinenssihoitorutiini - ennen	Lähetetty 20 maa 2024 Lähetäjä:	Muokkaa
Huone Room 1	Vaihe 2 Arviointi - käynnissä	Lukija pysäytetty 21 maa 2024 11:30 Aloitettu: 20 maa 2024 13:08 Arvioinnin aloitti: Mary.nhm@yopmail.com	Sarja valmis
Osasto Floor 1	Tuotetyyppi: TENA SmartCare Identifi Sensor wear Pants Alias (IMEI): BA97 (355313100279957)	Esikatsela tietoja	Manuaaliset tapahtumat
Etu nimi Carl	Vaihe 3 Asiakkaan kontinenssihoitorutiini - jälkeen	Lähetetään vaiheiden 1 ja 2 suorittamisen jälkeen	Lisää
Sukunimi Johansson			

Takaisin

Manuaalisten tapahtumien hallinta

Lisää manuaalisia tapahtumia painamalla **Manuaaliset tapahtumat**.

Valitse tapahtumalle **Päivämäärä** ja **Aika**.

Manuaaliset tapahtumat - smith

Lisää tapahtuma

Aloituspäivämäärä: 21 maa 2024 11:51
Päätymispäivä: Menetillään

Valitse päivämäärä: 2024-03-21 Valitse aika: 11:45

Valitse tapahtumat: Valitse tapahtuma

Lisää listaan

Peruuta Tallenna

Lista lisätyistä tapahtumista (0)

Päivämäärä/aika	Tyyppi	Toiminnot
Ei tapahtumia		

Manuaaliset tapahtumat - smith

Lisää tapahtuma

Aloituspäivämäärä: 21 maa 2024 11:51
Päätymispäivä: Menetillään

Valitse päivämäärä: 2024-03-21 Valitse aika: 11:45

Valitse tapahtumat: Valitse tapahtuma

Uusilla tapahtumilla valittu

- ☒ WC-käynti onnistui
- ☒ WC-käynti epäonnistui
- ☒ Ulostetta
- ☒ Reunavuoto
- ☐ Void

Peruuta Tallenna

Lista lisätyistä tapahtumista (0)

Päivämäärä/aika	Tyyppi	Toiminnot
Ei tapahtumia		

Valitse **tapahtumat luettelosta**. Voit valita useamman kuin yhden tapahtuman kerrallaan. Napsauta **Lisää luetteloon**.

Manuaaliset tapahtumat - 002HSLb1

Lisää tapahtuma

Aloituspäivämäärä: 21 maa 2024 11:30
Päätymispäivä: Menetillään

Valitse päivämäärä: 2024-03-21 Valitse aika: 11:30

Valitse tapahtumat: Valitse tapahtuma

Lisää listaan


Peruuta Tallenna

Lista lisätyistä tapahtumista (3)

Päivämäärä/aika	Tyyppi	Toiminnot
21 maa 2024 11:30	WC-käynti onnistui	✖ ✎
21 maa 2024 11:30	WC-käynti epäonnistui	✖ ✎
21 maa 2024 11:30	Ulostetta	✖ ✎

Kun kaikki tapahtumat on kirjattu, napsauta **Tallenna**.

KÄYNNISSÄ OLEVAN ARVIOINNIN ESIKATSELU

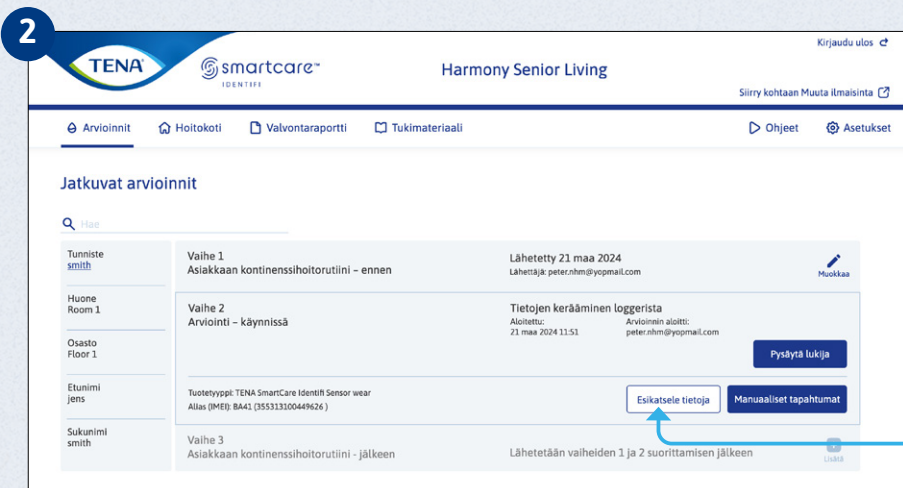


Voit esikatsella TENA SmartCare Identifi -arviointiraporttia 72 tunnin aikana.

Napsauta **Käynnissä oleva arviointi**.


Napsauta **Esikatselu** tietoja.

Raportti avautuu samaan ikkunaan.

Raportti voidaan ladata myös PDF-muodossa.

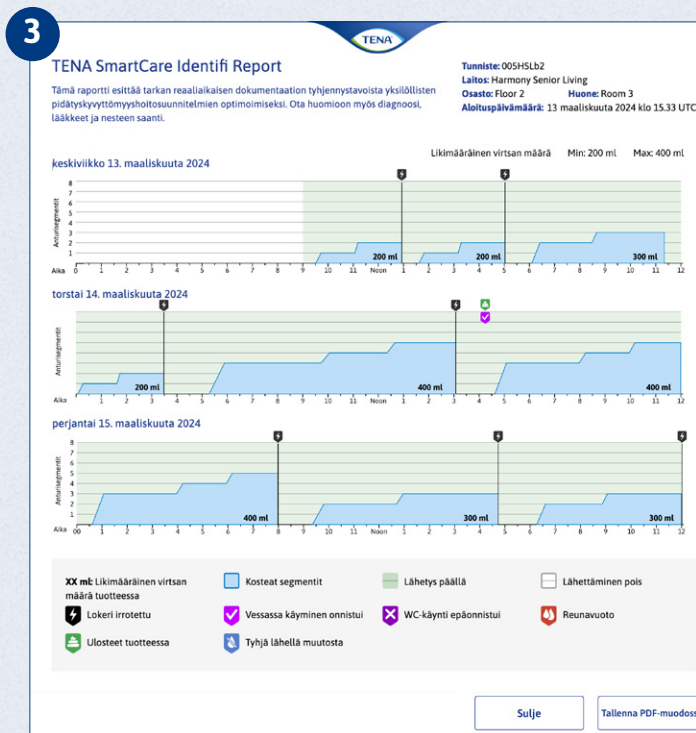


ARVIOINNIN PYSÄYTTÄMINEN

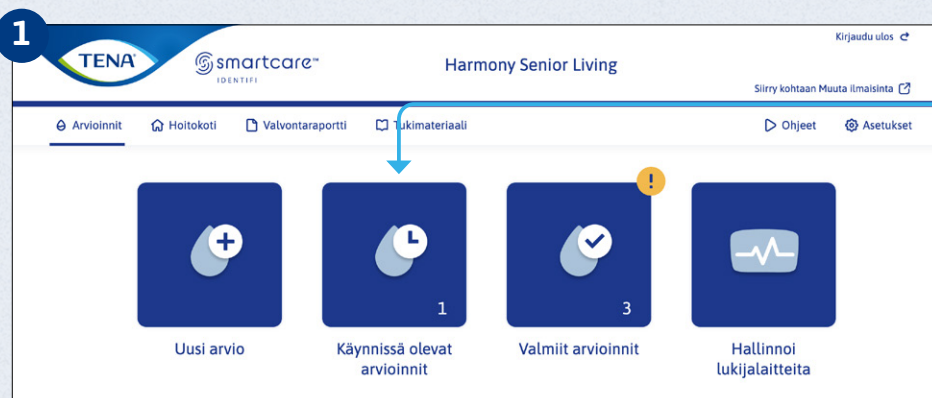

Napsauta **Käynnissä olevat arvioinnit**.

Pysäytä arviointi 72 tunnin kuluttua.

Etsi haluamasi arviointi napsauttamalla **Pysäytä kirjauslaite**.

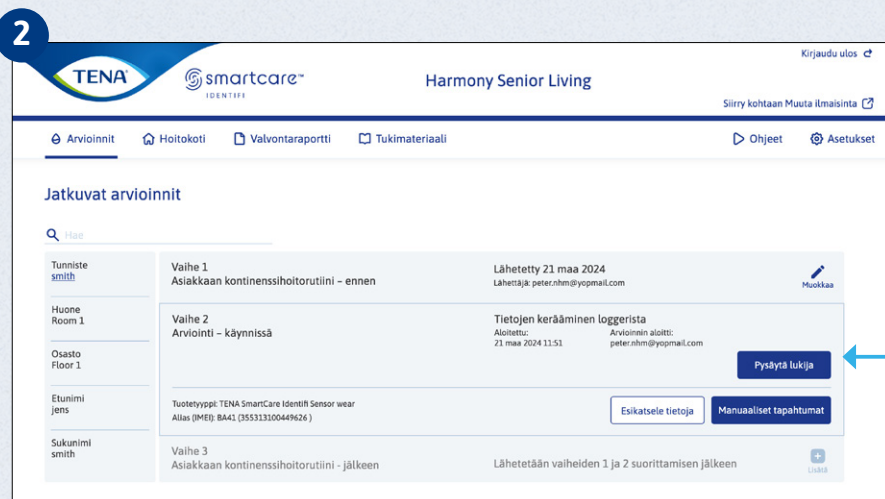

Puhdista ja palauta kirjauslaite laturiin ennen **Pysäytä kirjauslaite** -vaihtoehdon napsauttamista, jotta voit varmistaa kaikkien tietojen siirtämisen.

Suorita arviointi loppuun noudattamalla sivulla 13 olevia vaihteita.

ARVIOINNIN VIIMEISTELY



1

TENA smartcare IDENTIFI Harmony Senior Living

Kirjaudu ulos

Siirry kohtaan Muuta ilmaisinta

Arvioinnit Hoitokoti Valvontaraportti Tukimateriaali Ohjeet Asetukset

Jatkuvat arvioinnit

Hae

Tunniste smith	Vaihe 1 Asiakkaan kontinenssihoitorutiini - ennen	Lähetetty 21 maa 2024 Lähetäjä: peter.nhm@yopmail.com	Muokkaa
Huone Room 1	Vaihe 2 Arviointi - käynnissä	Lukija pysäytetty 21 maa 2024 12:02 Aloitettu: 21 maa 2024 11:51 Arvioinnin aloitti: peter.nhm@yopmail.com	Sarja valmis
Osasto Floor 1	Tuotetyyppi: TENA SmartCare Identifi Sensor wear Alias (IMEI): BA41 (355313100449626)		
Etu nimi jens	Esikatselue tietoja Manuaaliset tapahtumat		
Sukunimi smith	Vaihe 3 Asiakkaan kontinenssihoitorutiini - jälkeen	Lähetetään vaiheiden 1 ja 2 suorittamisen jälkeen	Uusi

Tunniste 002751b3	Vaihe 1 Asiakkaan kontinenssihoitorutiini - ennen	Lähetetty 20 maa 2024 Lähetäjä:	Muokkaa
Huone Room 1	Vaihe 2 Arviointi - käynnissä	Lukija pysäytetty 21 maa 2024 11:30 Aloitettu: 20 maa 2024 13:08 Arvioinnin aloitti: Mary.nhm@yopmail.com	Sarja valmis
Osasto Floor 1	Tuotetyyppi: TENA SmartCare Identifi Sensor wear Pants Alias (IMEI): BA97 (355313100279957)		
Etu nimi Carl	Esikatselue tietoja Manuaaliset tapahtumat		
Sukunimi Johansson	Vaihe 3 Asiakkaan kontinenssihoitorutiini - jälkeen	Lähetetään vaiheiden 1 ja 2 suorittamisen jälkeen	Uusi

Takaisin

Merkitse valmiiksi

Siirrä valmis arviointi **Käynnissä olevat arvioinnit** -kohdasta **Valmiit arvioinnit** -kohtaan napsauttamalla **Aseta valmiiksi** -vaihtoehtoa.

Tämä tehdään valmiiden arviointien erottamiseksi käynnissä olevista.

Napsauta **Aseta valmiiksi**.

2

Suoritetaan arviointia

Et voi enää muokata asiakkaan aiempia kontinenssihoitorutiinitietoja, kun arviointi on määritetty valmiiksi.

Arviointi siirretään suoritettuihin arviointeihin. Voit silti lisätä tapahtumia arviointiin manuaalisesti.


Tätä toimintoa ei voi peruuttaa.

Peruuta Sarja valmis





Jos arviointia ei aseteta valmiiksi, se tehdään automaattiseksi 15 päivän kuluttua.

ARVIOINTIRAPORTIN LUOMINEN

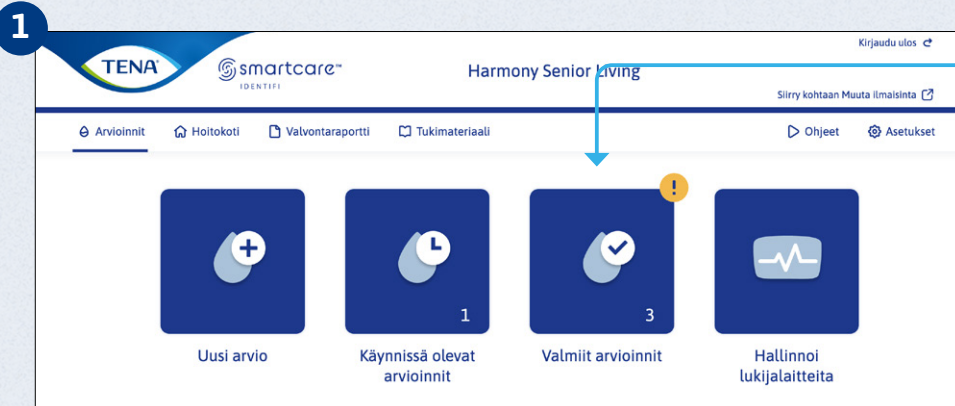


Napsauta **Valmiit arvioinnit**.

Valitse haluamasi arviointi napsauttamalla **Raportin tiedot**.
Valmiin arviointiraportin luominen

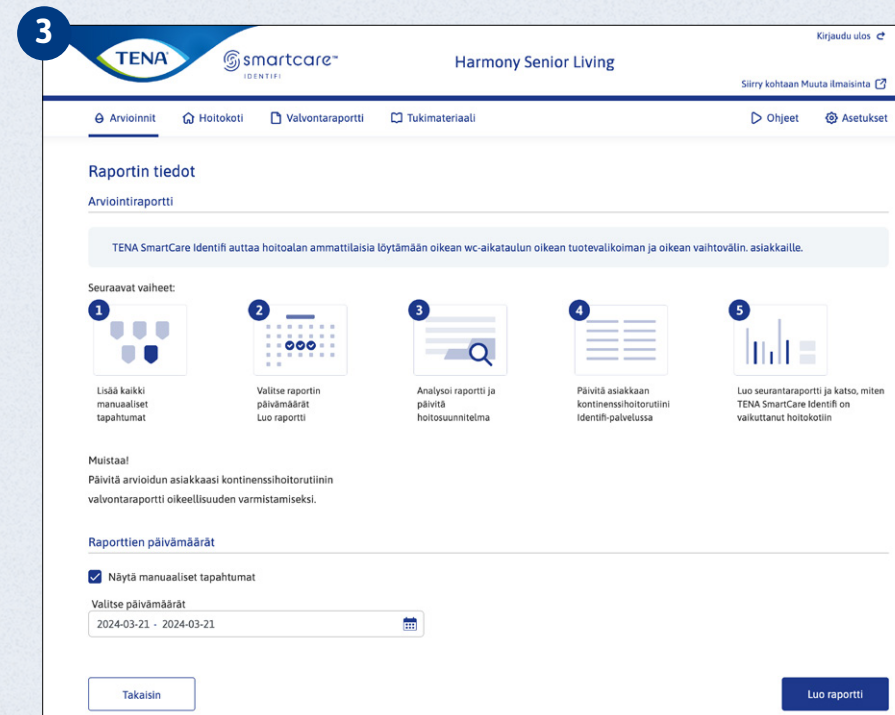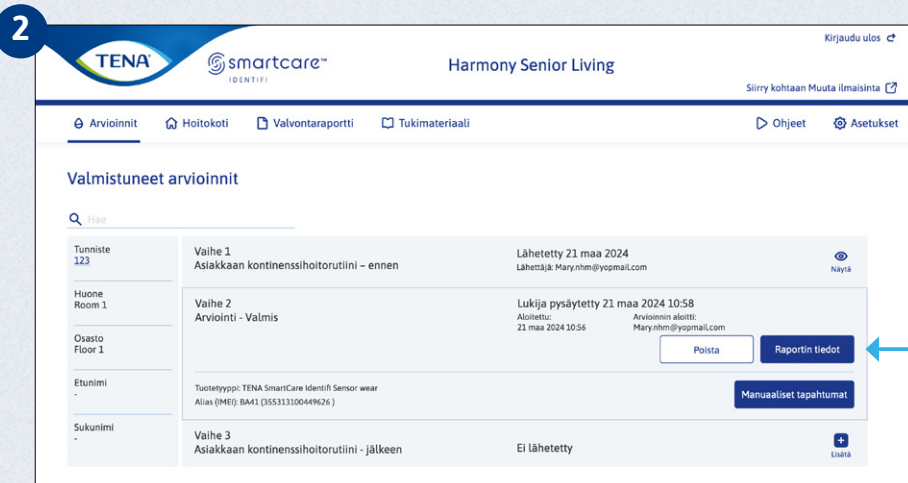

Anna haluamasi **päivämäärät**. Viimeisimpien arviointien päivämäärät näytetään oletusarvoisesti. Napsauta **Luo raportti**.

ARVIOINTIRAPORTIN LUOMINEN

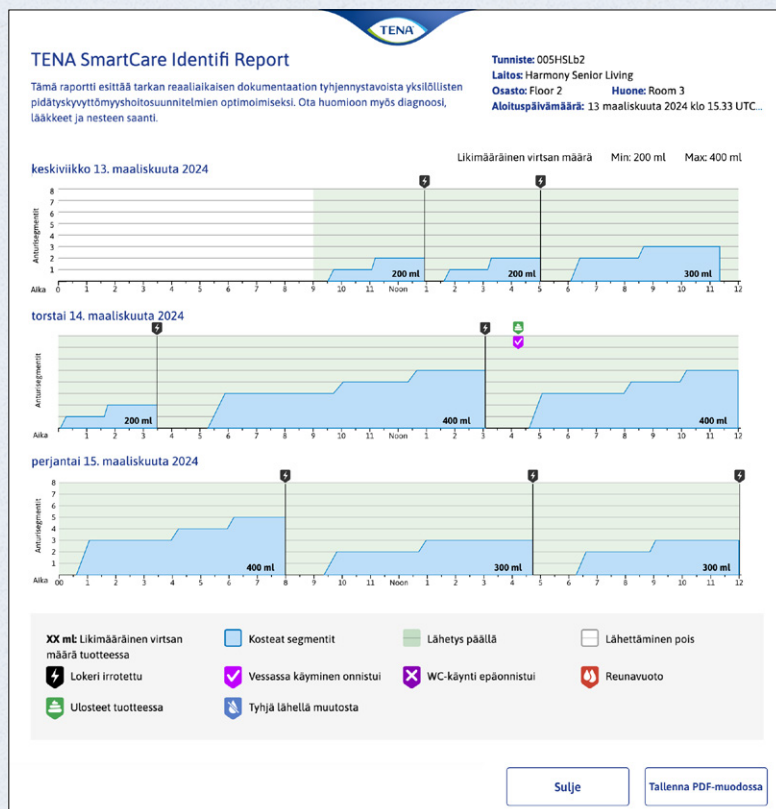

Arviointiraportti antaa tietoa virtsausmallista ja virtsamäärästä 72 tunnin ajalta tunti kerrallaan. Kirjauslaitteella kerätyt tiedot esitetään graafisessa muodossa, joka näyttää mallin siitä, kuinka inkontinenssisuoja on täyttynyt virtsasta.

Raportin tulkitsemisopas löytyy sovelluksen resurssiosiesta.


Jokaisessa raportissa on hoidettavan henkilön hoitosuunnitelman parantamisen vuoksi osio, johon voit antaa raporttiin kerättyjä tietoja. Esimerkiksi sopivien vessassa käyntiaikojen löytäminen, sopivimman tuotteen löytäminen ja pidempien häiriöttömien nukkumisjaksojen mahdollistaminen.

Voit ladata muokattavissa olevan version, jonka avulla voit lisätä tai muuttaa raportissa olevia huomautuksia.


VALMIIT ARVIOINNIT (VAIHE 3*)




Arvioinnin analysoinnin ja kontinenssinhoitorutiinin jälkeen.

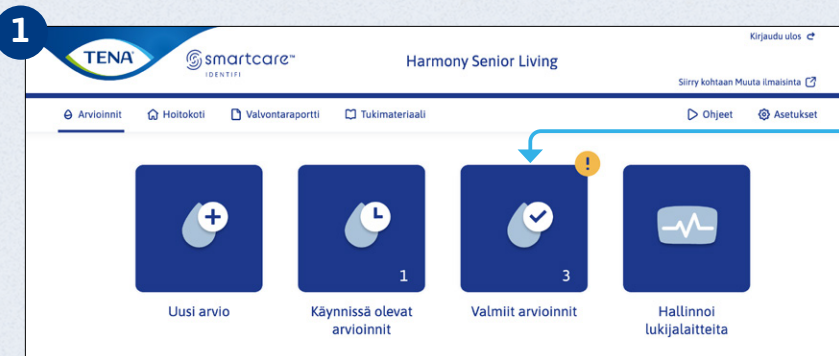

Valitse valikosta **Valmiit arvioinnit**.

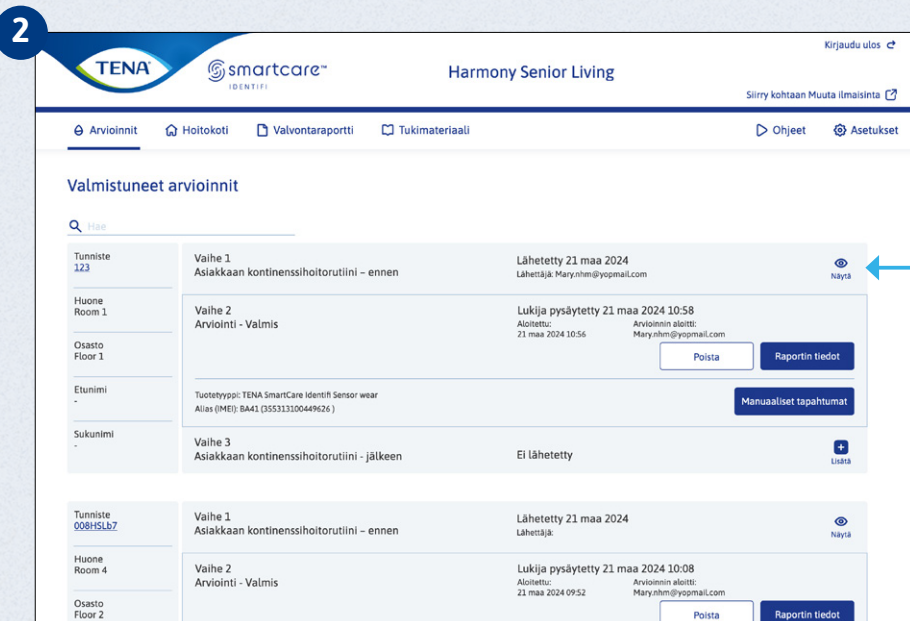

Lisää arviointiin kontinenssinhoitorutiini napsauttamalla tästä.

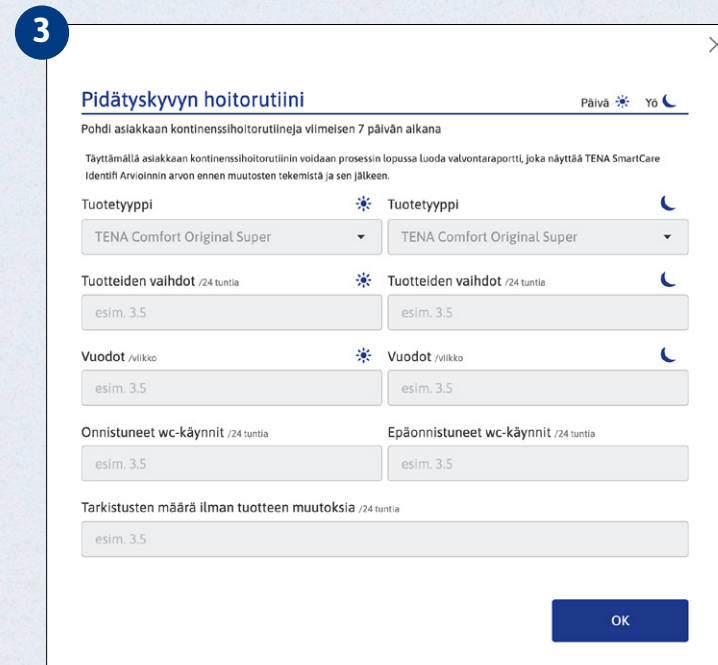

Lisää kontinenssinhoitorutiinin tiedot, vastaa kysymyksiin ja napsauta sitten **Lähetä**.

Tämän voi tehdä myös kohdassa **Hoidettavan henkilön hallinta**. Ohjeet sivulla 24.

*Tämä koskee vain sellaisia henkilöitä, joilla on mahdollisuus käyttää seurantaraporttia.



ARKISTOIDUT ARVIOINNIT



Yli 90 päivää vanhat arvioinnit siirretään kohtaan **Arkistoidut arvioinnit**.


Napsauta **Valmiit arvioinnit**.

Vieritä Valmiit arvioinnit -sivun alaosaan.

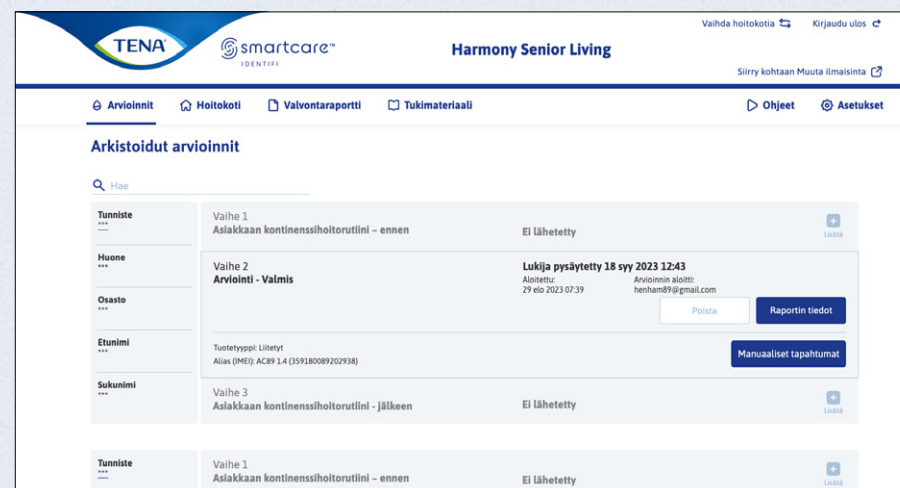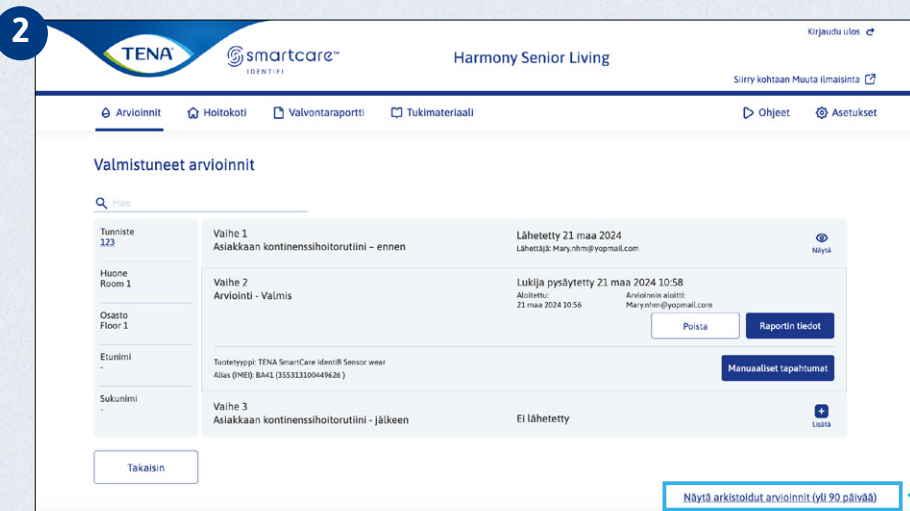


Arkistoitujen arviointien luettelo näytetään. Tarkastele raporttia napsauttamalla **Raportin tiedot**.

SEURANTARAPORTIN LUONTI

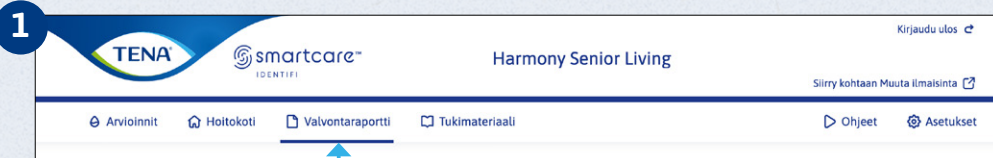

Valitse valikosta **Seurantaraportti**.

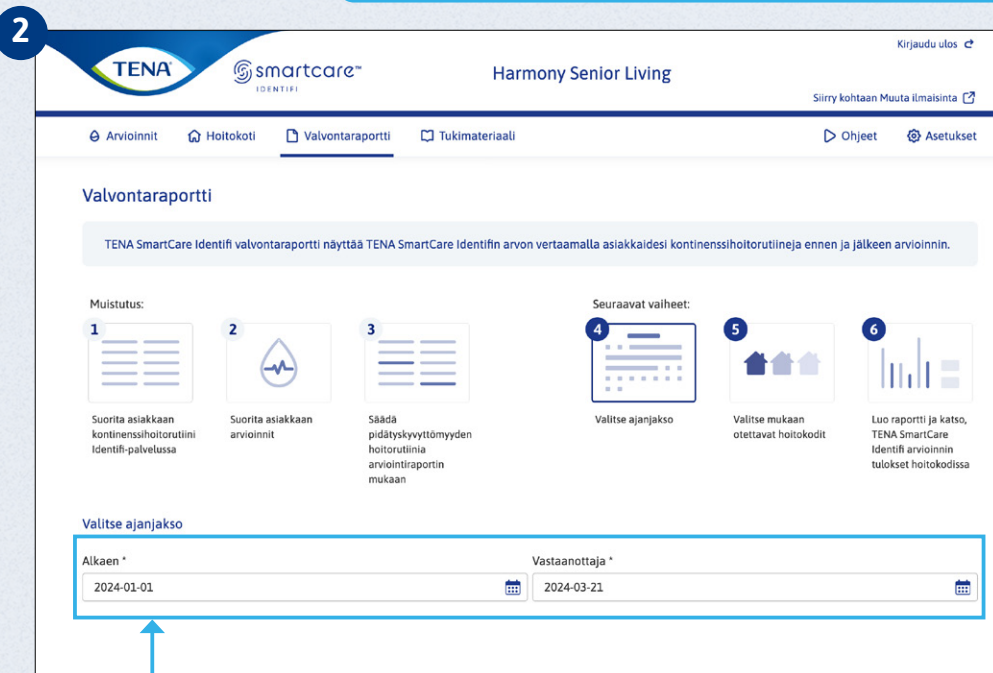

Valitse päivämäärät ajanjaksolle, jota haluat tarkastella.




Luo ladattava raportti napsauttamalla **Luo raportti**.



Tarkastele hoidettavia henkilöitä -vaihtoehto näyttää, mitkä hoidettavat henkilöt sisällytetään raporttiin.



RAPORTIN SISÄLTÖ

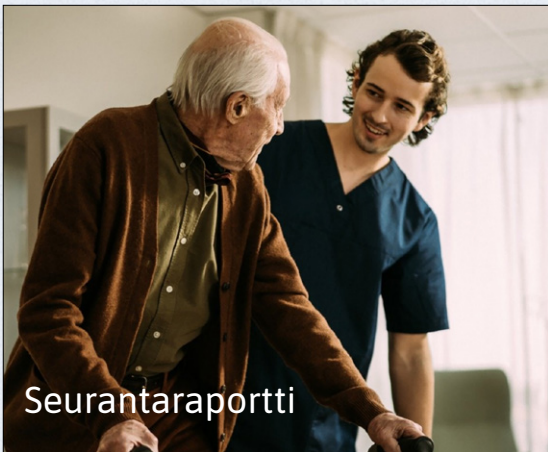Seurantaraportti

Bontouch Test Facility
Arvioinnit koskien 1 asiakasta suoritettu
7.1.2026-7.1.2026

Tulos	1
Hoitoaika	2-3
Tuotteet	4-5
WC-käynnit	6
Karkailu	7-8
Kustannukset yhteensä	9-10
CO ₂ -vaikutus	11
Tärkeimmät muistettavat seikat	12
Liite	13-14

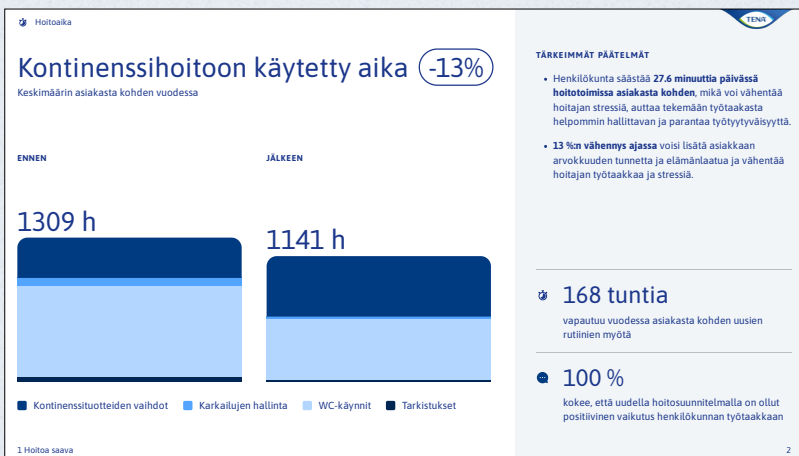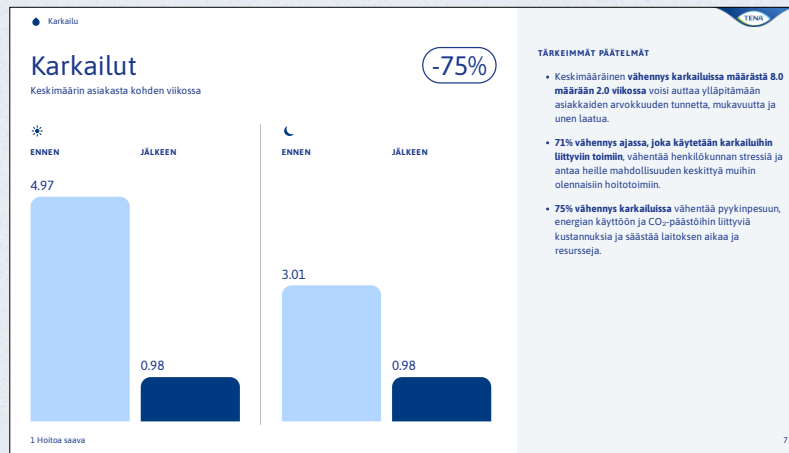

Raportti luodaan kontinenssinhoitorutiinien vertailun tulosten perusteella. Se on saatavilla PDF-muodossa (katso PDF-tulostuksen ohjeet jäljempänä).


Raportissa on useita sivuja, joissa näytetään kerätyt tiedot, ja sen avulla voit mitata kontinenssinhoitorutiiniin liittyvän inkontinenssisuojan tehokkuutta, muita hoitolaitoksessa hoidettavia henkilöitä, käytettyjä inkontinenssisuojia sekä ympäristövaikutuksia.

Raportin tulostaminen


Huomaa, että sinun on mahdollisesti säädettävä kahta asetusta tulostettaessa. Napsauta **Save as PDF** (Tallenna PDF-muodossa) ja **Include background graphics** (Sisällytä taustagrafiikat), jotta voit tarkastella koko raporttia.

UUDEN KÄYTTÄJÄTILIN LISÄÄMINEN

VAIN YLLÄPITÄJÄ

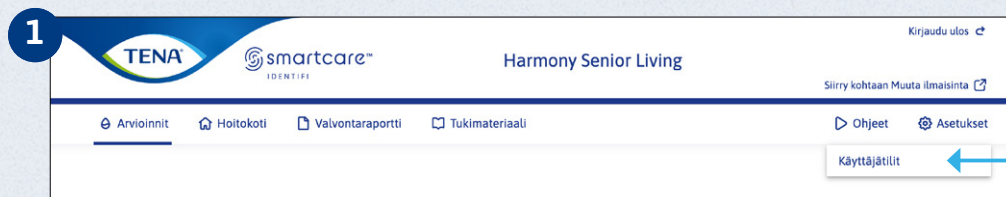

Napsauta **Asetukset** ja sitten **Käyttäjät**.

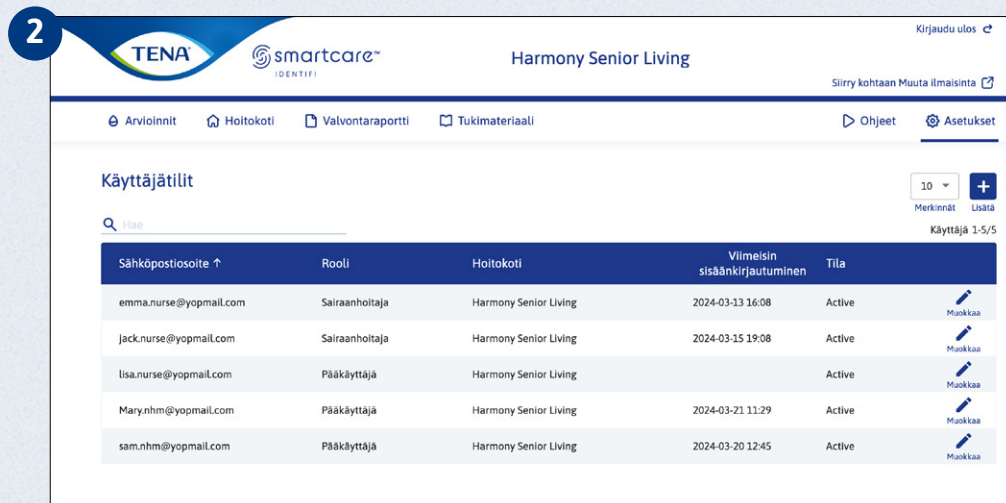


Napsauta **Lisää**.

Luo uusi käyttäjätili täyttämällä kentät ja napsauttamalla **Lähetä**.


Ylläpitäjä myöntää tai epää seurantaraportin käyttöoikeuden.

Jos monivaiheinen todennus on otettu käyttöön, vahvistus suoritetaan antamiesi yhteystietojen perusteella joko sähköpostitse tai puhelimitse.


KÄYTTÄJÄTILIN MUOKKAAMINEN TAI POISTAMINEN

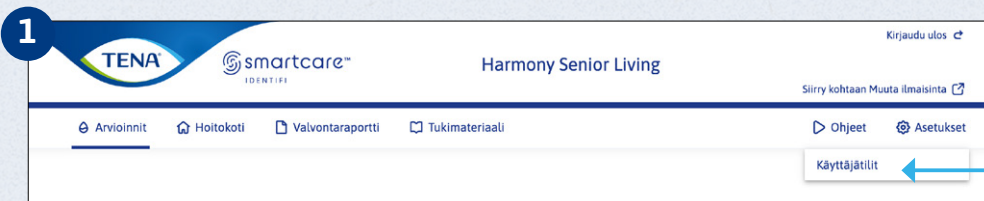

Napsauta **Asetukset** ja sitten **Käyttäjätilit**.

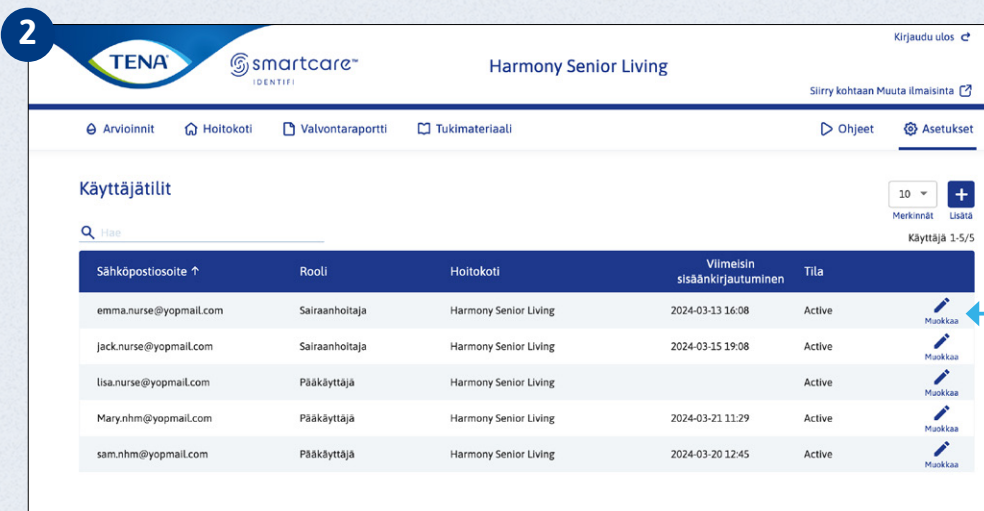


Valitse muokattava käyttäjätunnus. Muokkaa sitten tietoja ja napsauta **Lähetä**.

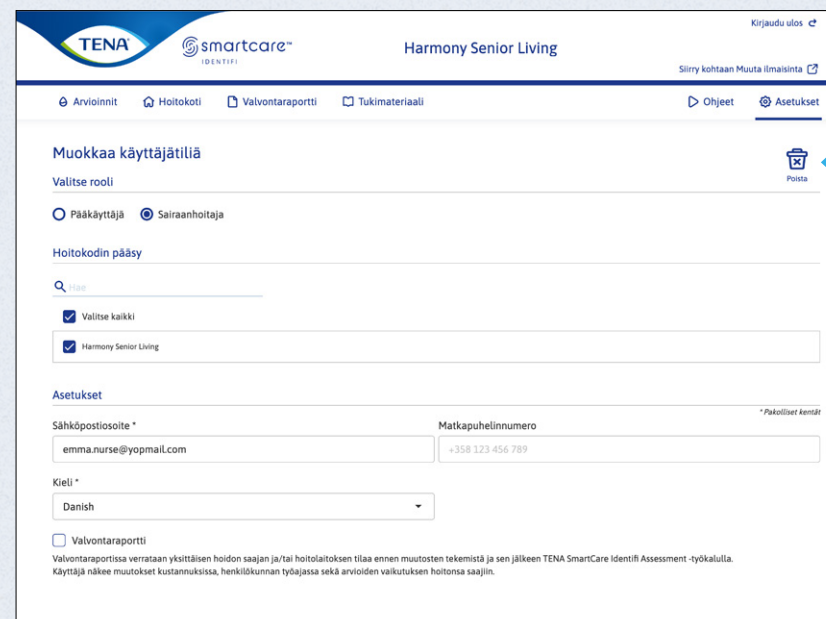


Poista käyttäjätili napsauttamalla sivun yläkulmassa olevaa **Poista** -kuvaketta.


OSASTOJEN HALLINTA

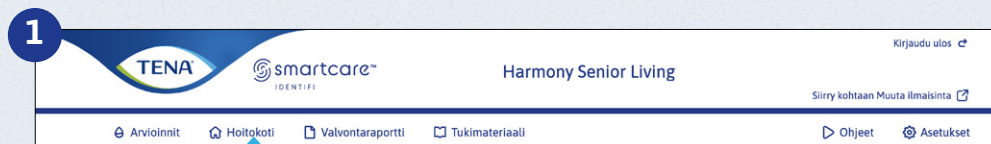

Napsauta **Hoitolaitos**.

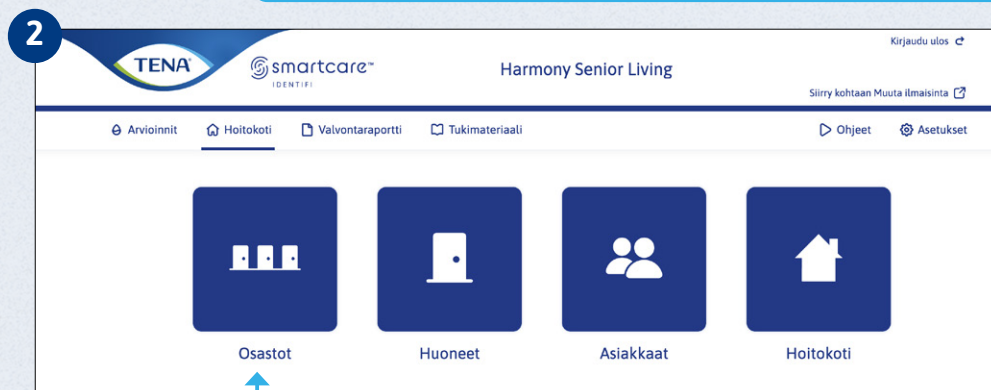

Napsauta **Osastot**.

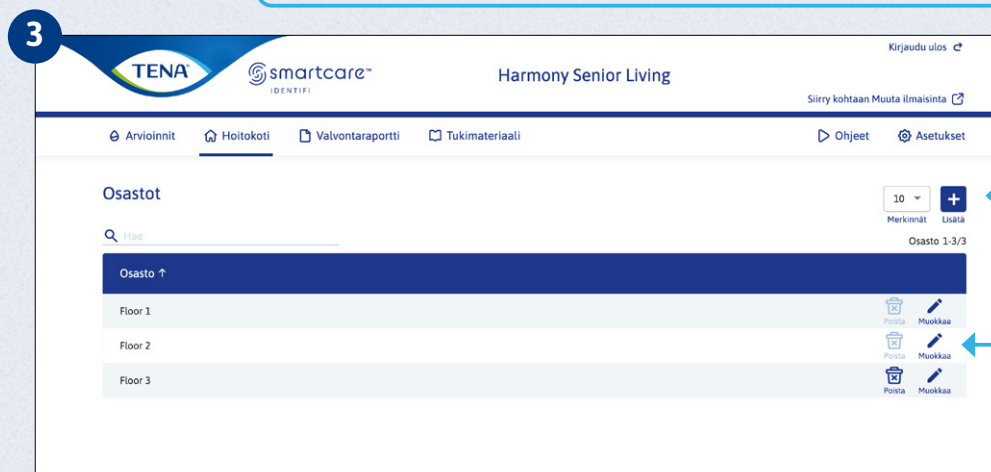

Luo uusi osasto napsauttamalla **Lisää**.

Lisää osasto

Osasto * * Pakolliset kentät

Seurakunnan nimi

Peruuta Lisää

Tai napsauta **Muokkaa** muokattavan osaston kohdalla.


Muokkaa osastoa

Osasto * * Pakolliset kentät


Floor 1

Peruuta Tallenna


HUONEIDEN HALLINTA

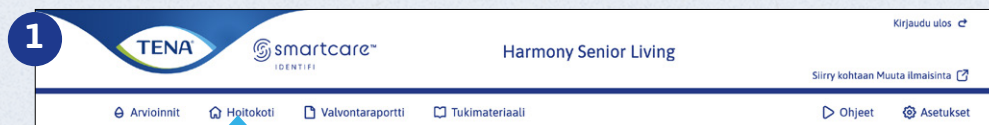

Napsauta **Hoitolaitos**.

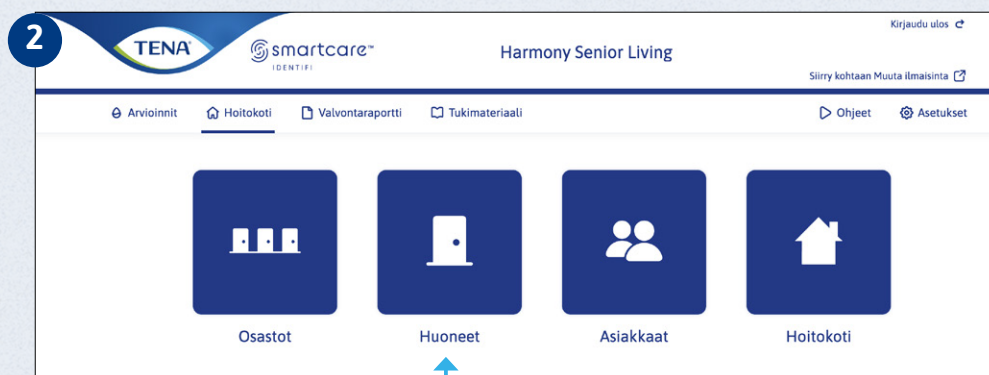

Napsauta **Huoneet**.

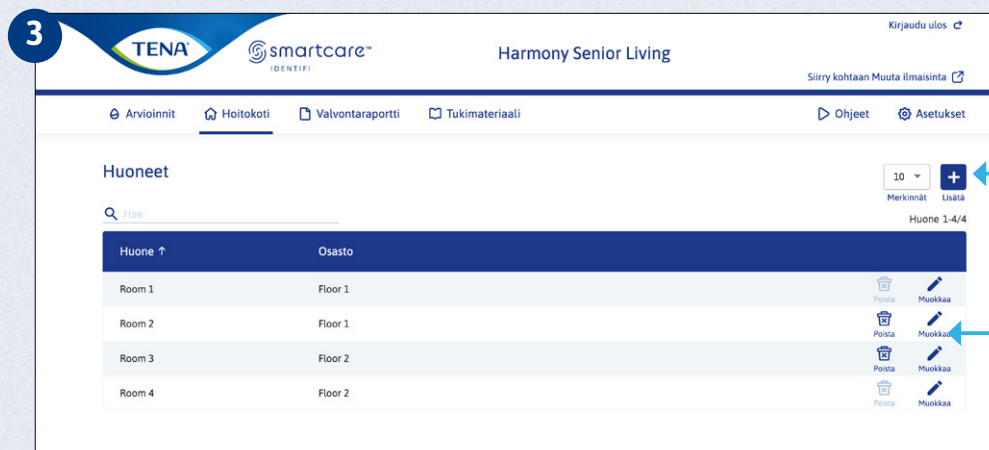

Luo uusi huone napsauttamalla **Lisää**. Anna sille nimi ja määrää se olemassa olevalle osastolle.

Tai napsaut **Muokkaa** muokattavan huoneen kohdalla.

Lisää huone

* Pakolliset kentät

Huone *

Huoneen nimi

Seurakunnan nimi *

Valitse

Peruuta Lisää

Muokkaa Huone

Tässä huoneessa on asukkaita.

* Pakolliset kentät

Huone *



Room 1

Seurakunnan nimi *

Floor 1

Peruuta Tallenna

HOIDETTAVIEN HENKILÖIDEN HALLINTA

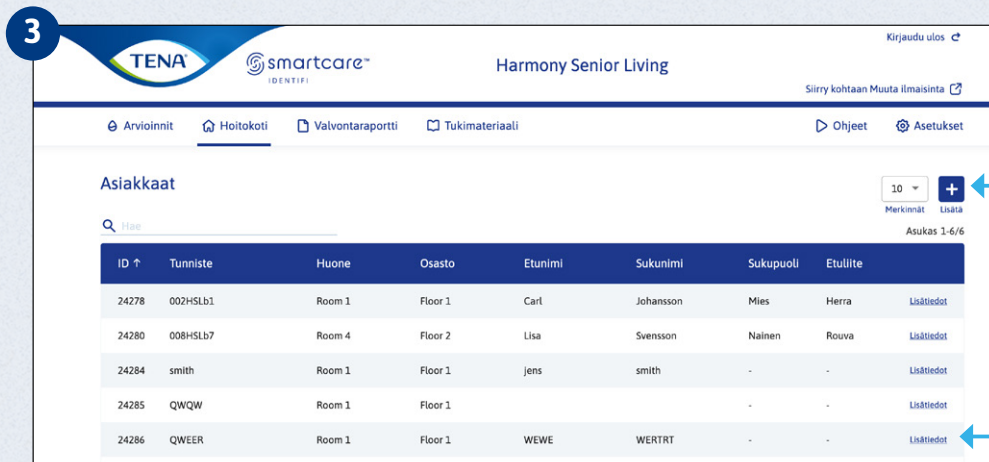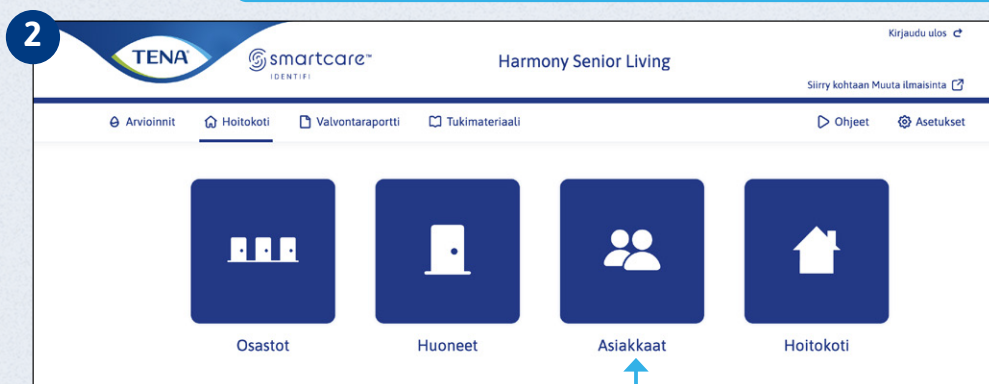


Napsauta
Hoitolaitos.

Napsauta **Hoidon
vastaanottajat.**

Luo uusi
hoidettava henkilö
napsauttamalla
Lisää. Anna
henkilölle nimi ja
määrää se olemassa
olevalle osastolle.


Tai napsauta **Tiedot**
muokattavan hoidettavan
henkilön kohdalla.

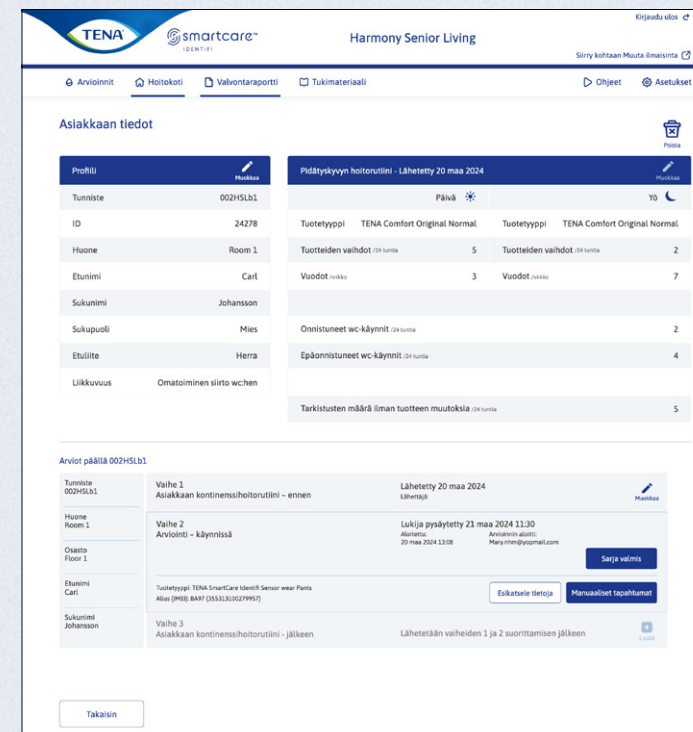


Huomautus: Hoidettavan
henkilön tiedoissa näkyy
aina viimeksi lähetetty
kontinenssinhoitorutiini,
jos hoitolaitoksella on
seurantaraportin käyttöoikeus.

HOITOLAITOKSEN HALLINTA

VAIN YLLÄPITÄJÄ

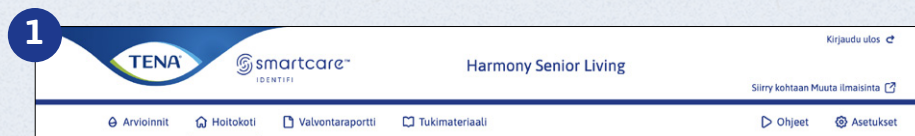

Napsauta
Hoitolaitos.

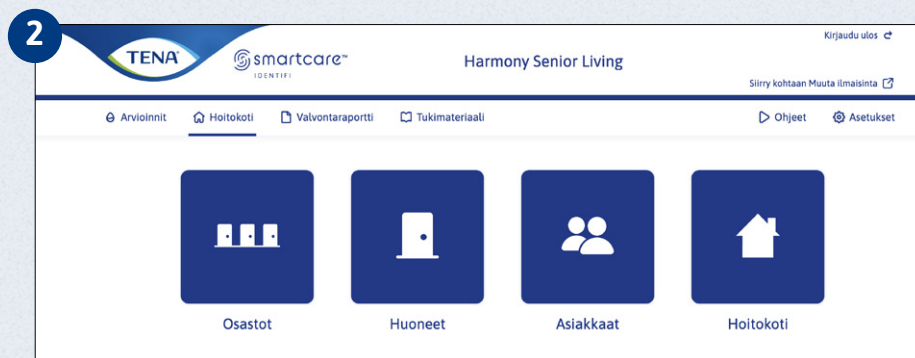

Napsauta **Hoitolaitos** -kuvaketta.
Voit sitten päivittää hoidettavan
henkilön tietojen ja hoitolaitoksen
asetuksia.

! Pyydä suostumus
Voit laittaa valinnan
valintaruutuun, jos haluat
muistutuksen pyytää
hoidettavalta henkilöltä
suostumus arvioinnin
aloittamiseen.

**! Monivaiheinen
todennus** Tämä
edellyttää, että käyttäjän
puhelinnumero on
rekisteröity hänen
profiiliinsa.

Napsauta sivun alaosassa
Tallenna.

Hallitse Harmony Senior Living
Hoitokodin asetukset

Hoitolaitos *
Harmony Senior Living

Yhteyshenkilön nimi
Name

Sähköpostiosoite
simi@gmail.com

Puhelinnumero
+358 123 456 789

Matkapuhelinnumero
+358 123 456 789

Kohde
S

Tietosuojasetukset

☐ Kerää suostumus
Tämä ominaisuus aktivoi muistutuksen kerätä suostumus asukkaalta ennen arvioinnin aloittamista.

☐ 2 Factor Authentication
2 Factor Authentication edellyttää, että käyttäjät rekisteröivät matkapuhelinnumeron profiliinsa, jotta he voivat kirjautua järjestelmään.

Asiakastietojen asetukset

Tiedot on esillä vain muutama, mikä auttaa nopeasti löytämään oikeat tiedot. Tunnus on pakollinen, eikä sitä voi muuttaa automaattisesti.

Tunnus	Liikkuvuus	Etunimi	Sukunimi
☒ Näkyvä	☒ Näkyvä	☒ Näkyvä	☒ Näkyvä
☐ Pakollinen	☐ Pakollinen	☐ Pakollinen	☐ Pakollinen
☐ 3 merkin rajoitus	☐ 3 merkin rajoitus	☐ 3 merkin rajoitus	☐ 3 merkin rajoitus

Sukupuoli	Etunimi
☒ Näkyvä	☒ Näkyvä
☐ Pakollinen	☐ Pakollinen
☐ Mies	☒ Mies
☒ Nainen	☒ Nainen
☐ Ei määritetty	☐ Ei määritetty

Valvontaraportin tietoa asetukset

Työvoimakustannukset / vuosi *

200 SEK

Pesulakulut - vaatteet (koko sarja) *

45 SEK

Tuotteen vaihtamiseen käytetty aika *

20 min

Vaatteiden vaihtoon käytetty aika - vuotanut / vuotanut *

30 min

Sekäkin käytetty aika ilman tuotteen vaihtoa *

5 min

Työvoimakustannukset / vuosi *

500 SEK

Pesulamaksu - linavaatteet (käysi setti) *

60 SEK

Tuotteen vaihtamiseen käytetty aika *

30 min

Linavaatteiden vaihtoon käytetty aika - vuotanut / vuotanut *

30 min

Takaisin

Peruuta

Tallenna

SEURANTARAPORTIN TIETOASETUKSET

VAIN YLLÄPITÄJÄ



Seurantaraportin asetuksia voidaan muuttaa, jos arvot muuttuvat. Seurantaraportin asetuksissa annetut arvot, joita voi käyttää kohdassa **Hoitolaitoksen hallinta**, käytetään seurantaraportin tulosten luomisen perustana.

TENA smartcare Harmony Senior Living

Kirjautu ulos

Sirry kohtaan Muuta tilausta

Arvioinnit Hoitokoti Seurantaraportti Tukimateriaali Ohjeet Asetukset

Hallitse Harmony Senior Living

Hoitokodin asetukset

Hoitokoti * Yhteyshenkilön nimi * Pakolliset kentät

Harmony Senior Living Name

Sähköpostiosoite Puhelinnumero

harmony@tena.fi +358 123 456 789

Markapuhelinnumero Kohde

+358 123 456 789 5

Tietosuojasetukset

☐ Kerää suostumus
Tämä ominaisuus aktivoi muutoksen kerätä suostumus asukkaalta ennen analysoinnin aloittamista.

☐ 2 Factor Authentication
2 Factor Authentication edellyttää, että käyttäjät rekisteröivät markapuhelinnumeron profiliinsa, josta he voivat kirjautua järjestelmään.

Asiakastietojen asetukset

Tämä osio on ainoa, jota voit muokata, mikä vaikuttaa asiakkaan tuloksiin hoitolaitoksesi. Tunniste on pakollinen, eikä sitä voi muuttaa myöhemmin.

Tunniste	Liikkuvuus	Etu nimi	Sukunimi
☒ Näkyvä	☒ Näkyvä	☒ Näkyvä	☒ Näkyvä
☒ Pakollinen	☐ Pakollinen	☐ Pakollinen	☐ Pakollinen
☐ 3 merkin rajoitus		☐ 3 merkin rajoitus	☐ 3 merkin rajoitus

Sukupuoli	Etu lute
☒ Näkyvä	☒ Näkyvä
☐ Pakollinen	☐ Pakollinen
☒ Mies	☒ Herra
☒ Nainen	☒ Rouva
☒ Ei määritetty	☐ Neiti
	☐ Ei määritetty

Valvontaraportin tietoa asetukset

Työvoimakustannukset * Työvoimakustannukset / vuosi *

200 SEK 500 SEK

Pesulakulut - vaatteet (koko sarja) * Pesulamaksu - linavaatteet (täysi setti) *

45 SEK 60 SEK

Tuotteen vaihtamiseen käytetty aika * Tuotteen vaihtamiseen käytetty aika *

20 min 30 min




Vaatteiden vaihtoon käytetty aika - vuotunen / vuosi * Linavaatteiden vaihtoon käytetty aika - vuotunen / vuosi *

30 min 30 min

Sekäkin käytetty aika ilman tuotteen vaihtoa * *

5 min

Takaisin Peruuta Tallenna

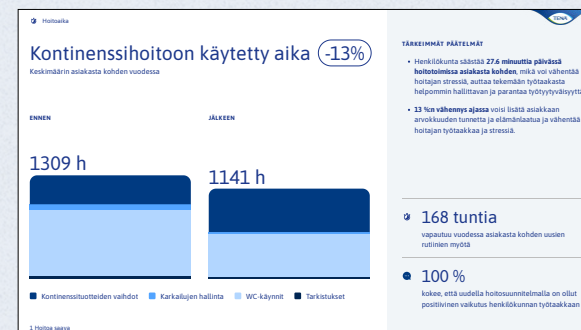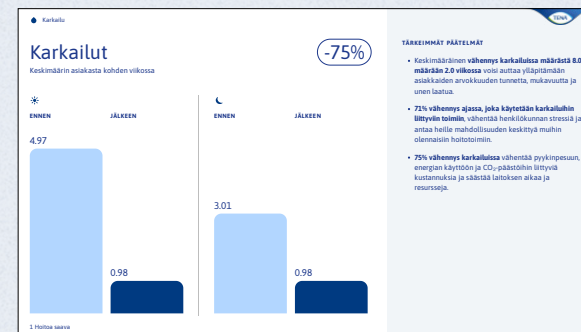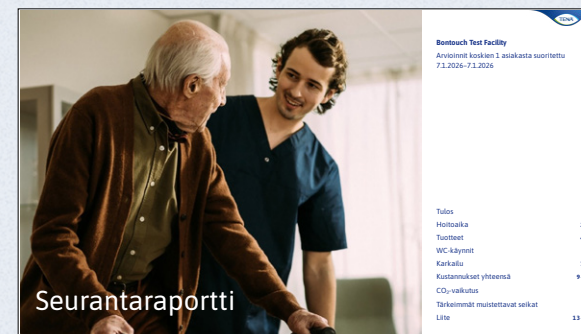

OHJE- JA VASTAUSVIDEOT



1

Vaihtokoti Kirjautu ulos

Cama Woodlands

Siirry kohtaan Muuta ilmaisinta

Arvioinnit Hoitokoti Valvontaraportti Tukimateriaali Ohjeet Asetukset

Ohjeet

Hae

Ennen arviointia
Mitä tarvitset ennen arvioinnin aloittamista

TENA SmartCare Identifi seisomakiinnitys
Käyttöohjeet TENA SmartCare Identifi -anturin kiinnittämiseen seisovaan henkilöön.

TENA SmartCare Identifi makaava kiinnitys
Käyttöohjeet TENA SmartCare Identifi -anturin kiinnittämiseen makuulla olevaan henkilöön.


TENA SmartCare Identifi Pants
Asiakkaalle, jotka vaihtavat inkontinenssituotteensa itse.

Vihreä valo
Tuotteen päälle asettamisen jälkeen TENA SmartCare Identifi -loggeri vilkkuu vihreää valoa 45 sekunnin ajan. Tämä tarkoittaa, että se toimii.

Oranssi valo
Oranssi valo tarkoittaa, että akku on vähissä ja se on ladattava.


Napsauta **Ohjeet**.Katso osiokohtaiset ohjeet napsauttamalla **videota**.

RESURSSIT

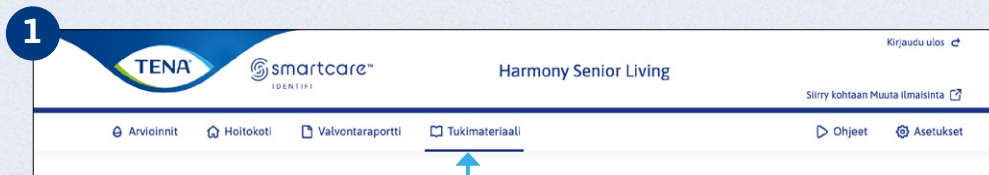

Resurssisivulta löytyy paljon TENA SmartCare Identifi -järjestelmän tukimateriaalia.

Napsauta ylävalikosta **Resurssit**.

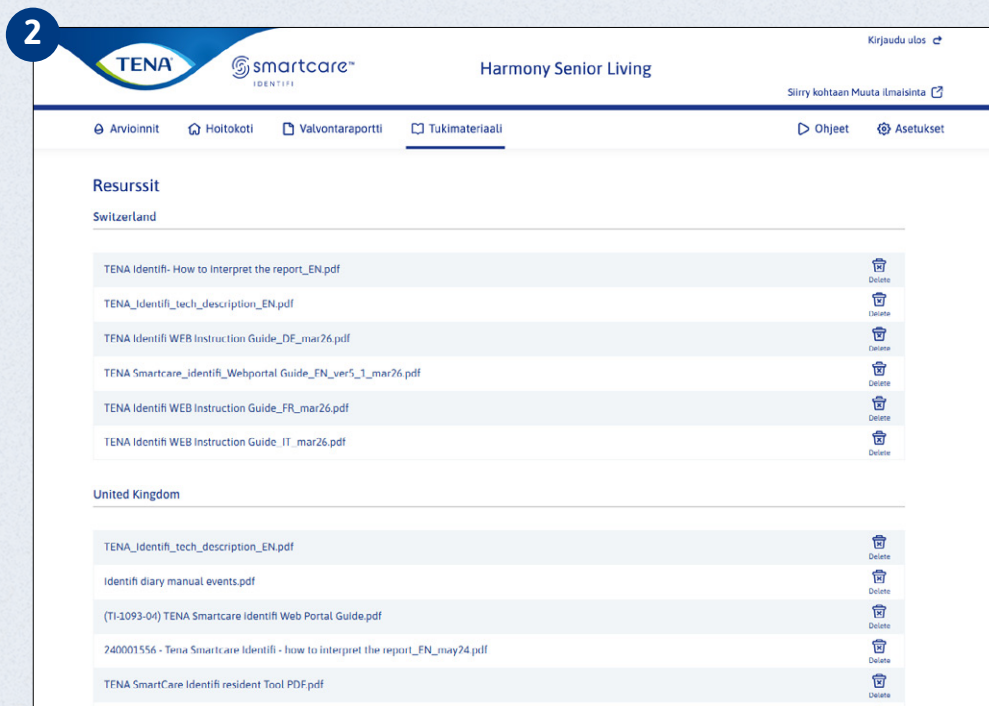

Tiedoston tarkastelu/lataaminen

Saatavilla olevien tiedostojen luettelon näytetään.

Napsauta tiedostoa, jonka haluat ladata tai jota haluat tarkastella.

