

TENA SMARTCARE IDENTIFI™ GIDS VOOR WEBPORTALEN



Volgende →

TENA SmartCare Identifi™

INHOUD



INHOUD	2
INTRO	3
AAN DE SLAG	
Account activeren/Inloggen	5
BEOORDELING	
Beoordeling met controlerapport	6
Nieuw	
Nieuwe beoordeling starten	7
Logger verplaatsen	8
Nieuwe zorgvrager inschrijven	9
Beoordeling starten	10
Lopend	
Handmatige gebeurtenissen	11
Voorbeeld van lopende beoordeling	12
Beoordeling stoppen	13
Beoordeling voltooien	14
Een beoordelingsrapport genereren	15
Voltooide beoordelingen	17
Gearchiveerde beoordelingen	18

CONTROLLERAPPORT

Een controlerapport genereren	19
Welke gegevens worden opgenomen in het rapport?	20

GEBRUIKER

Nieuw account toevoegen (Alleen voor beheerder)	21
Gebruikersaccount bewerken of verwijderen	22

INSTELLINGEN

Afdelingen beheren	23
Kamers beheren	24
Zorgvragers beheren	25
Zorgorganisatie beheren (Alleen voor beheerder)	26
Instellingen voor de gegevens in het controlerapport (Alleen voor beheerder)	27

HULP

Instructie- en Vraag-en-antwoord-filmpjes	28
Bronnen	29

INLEIDING



Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor de zorgverlener en de beheerder.

TENA SmartCare Identifi™-systeem is bedoeld als hulpmiddel bij de beoordeling van de continëntie van zorgvragers. Hiermee worden de meest geschikte absorberende producten, aanbevolen toiletbezoektijden en aanpassingen van continëntiezorgroulines voor de cliënt bepaald. De beoordelingsperiode is 72 uur.

Het TENA SmartCare Identifi™-systeem bestaat uit drie onderdelen: Sensordracht, Logger-set en het rapportagesysteem.

Het doel van het TENA SmartCare Identifi™-rapportagesysteem is het verzamelen en presenteren van gegevens die van loggers zijn ontvangen. Via het rapportagesysteem worden beoordelingen gestart en de uiteindelijke resultaten in rapporten gepresenteerd.

Het TENA SmartCare Identifi™-rapportagesysteem kan worden gebruikt voor het opvolgen en bijhouden van de voortgang met een controlerapport. Het controlerapport toont de waarde van het gebruik van de oplossing door continëntiezorgroulines voor en na gebruik van de oplossing te vergelijken.



OPMERKING: Het TENA SmartCare Identifi™-systeem schat het vloeistofvolume in. Het systeem mag niet worden gebruikt om de vochtinname te monitoren.



INLEIDING VERVOLG



Een nieuwe functie van het TENA SmartCare Identifi™-systeem is het controlerapport. Het controlerapport is een waardevolle aanvulling voor de zorgorganisatie. Het laat de totale waarde voor zorgorganisaties zien wanneer zorgbeoordelingen voor zorgvragers zijn voltooid.

Het rapport geeft de zorgorganisatie informatie over de gebruikte producten, de behoeften van de zorgvragers en veranderende routines, zodat de zorgorganisatie de verpleegschema's dienovereenkomstig kan plannen. Daarnaast biedt het rapport inzicht in het milieuaspect voor elke zorgorganisatie.



Het controlerapport is een functie die wordt toegevoegd wanneer u het systeem implementeert en is gekoppeld aan gebruikerstoegang. De functie kan niet worden toegevoegd of verwijderd door de beheerder.

Op pagina 6 ziet u een overzicht van wat het systeem voor uw zorgorganisatie kan betekenen.

Ga naar pagina 27 als u de instellingen wilt aanpassen om het maximum uit het controlerapport te halen.

Toegang tot het Change Indicator-webportaal

Zorgorganisaties die zowel TENA SmartCare Identifi™ als TENA SmartCare Change Indicator™ gebruiken, hebben toegang tot het andere webportaal door te klikken op **Ga naar Change Indicator**.

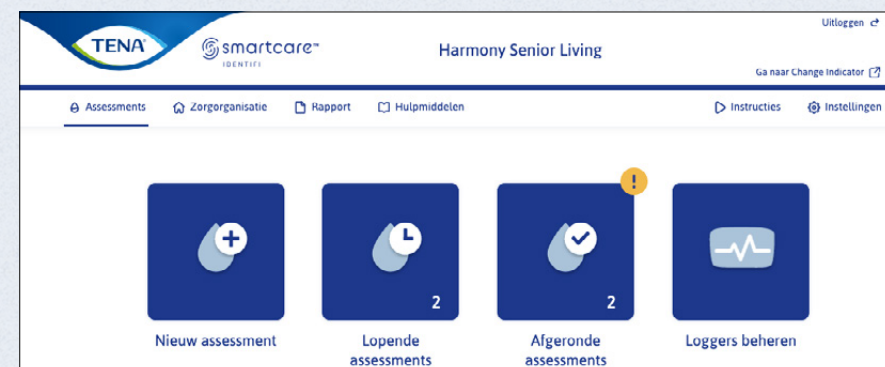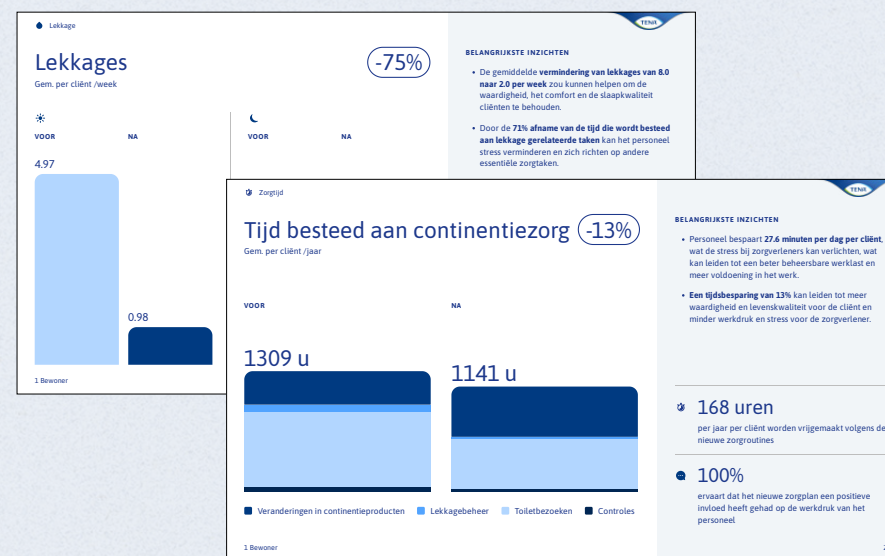

ACCOUNT ACTIVEREN/INLOGGEN



Stel wachtwoord in voor anna.anderson@nursinghome.com

Het wachtwoord dient minimaal 8 karakters te bevatten en minimaal 3 van de volgende tekens:

- Kleine letter (a-z)
- Hoofdletter (A-Z)
- Nummer (0-9)
- Speciaal teken (@#\$%^& etc.)

U kunt het huidige wachtwoord niet opnieuw gebruiken.

Wachtwoord

Bevestig wachtwoord

Stel een wachtwoord in

Activeer uw account via de link die naar uw e-mailadres wordt gestuurd.

Voer een wachtwoord in.

Klik op **stel een wachtwoord in**.

Als u deze hebt aangemaakt, voert u uw e-mailadres en wachtwoord in en klikt u op **log in**.

Bent u uw wachtwoord vergeten? Klik op **Wachtwoord opnieuw instellen**. Hierna kunt u een nieuw wachtwoord maken.

Wachtwoord opnieuw instellen


Verificatiecode verzenden

Annuleren

Meervoudige verificatie

Als u meervoudige verificatie gebruikt, ontvangt u een verificatiecode op een geregistreerd telefoonnummer of e-mailadres. Voer de code in om in te loggen.

BEOORDELING MET CONTROLLERAPPORT

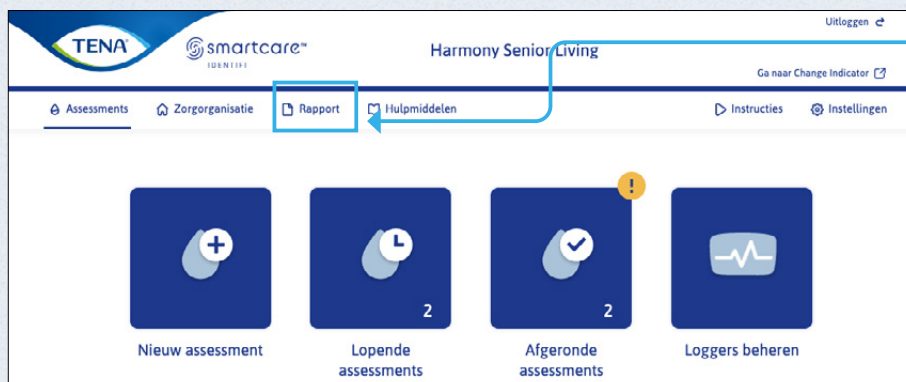

Als uw zorgorganisatie over de controllerapportfunctie beschikt, dan wordt deze optie in het menu weergegeven. Het controllerapport biedt u extra gegevens die de waarde tonen van het gebruik van TENA SmartCare Identifi™ door de continenzorgrountines van zorgvragers voor en na een beoordeling te vergelijken.



Dit symbool wordt weergegeven wanneer er actie moet worden ondernomen om een beoordeling te voltooien wanneer de controllerapportfunctie is ingeschakeld.

Wat is het nut van het controllerapport?

Stap 1



Continenzorgroutine - Voor

Alle informatie over de huidige routine van de zorgvragers wordt geregistreerd, zoals de gebruikte producten, tijd van verschoning en frequentie, om een beoordeling te maken.

Stap 2



Beoordeling en analyse

Na een beoordeling van 72 uur kunnen we de wijzigingen zien die zijn aangebracht en geregistreerd en kunnen we de gegevens analyseren die tijdens de beoordelingsperiode door TENA SmartCare Identifi™ over de zorgvrager zijn verzameld.

Stap 3



Continenzorgroutine - Na

Op basis van de gegevens kan een nieuwe routine worden vastgesteld die het proces voor zowel zorgverlener als zorgvrager stroomlijnt, wat vaak leidt tot een geschikter product, minder verschoningen en een beter vervangingsschema. De controllerapporten worden opgeslagen en elk rapport kan worden vergeleken met het vorige rapport.

*Het controllerapport is gekoppeld aan de gebruikerstoegang en kan niet worden toegevoegd of verwijderd door de beheerder.

NIEUWE BEOORDELING STARTEN





- Kies eerst **beoordeling** in het hoofdmenu
- en klik vervolgens op **nieuwe beoordeling**.

Stap 1 is alleen beschikbaar als de zorgorganisatie toegang heeft tot het controlerapport.

Voordat een nieuwe beoordeling kan worden gestart, moeten de zorgvrager eerst worden ingeschreven.

Klik op **selecteren** bij een bestaande zorgvrager of op **toevoegen** om een nieuwe zorgvrager in te schrijven.

3

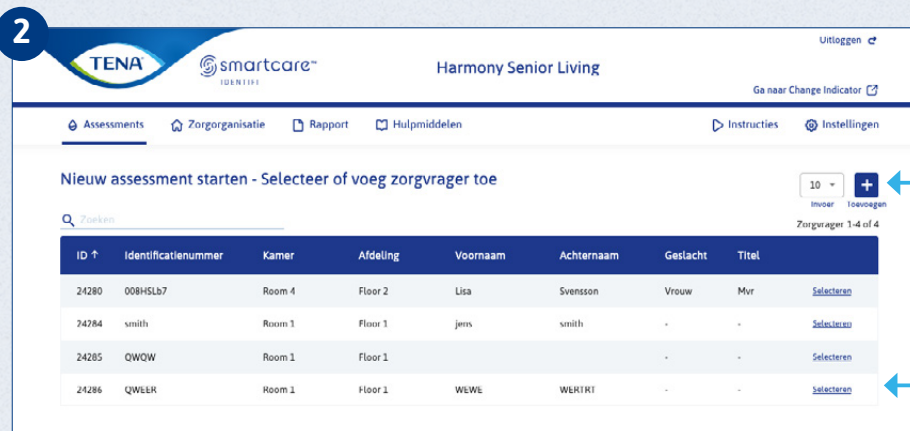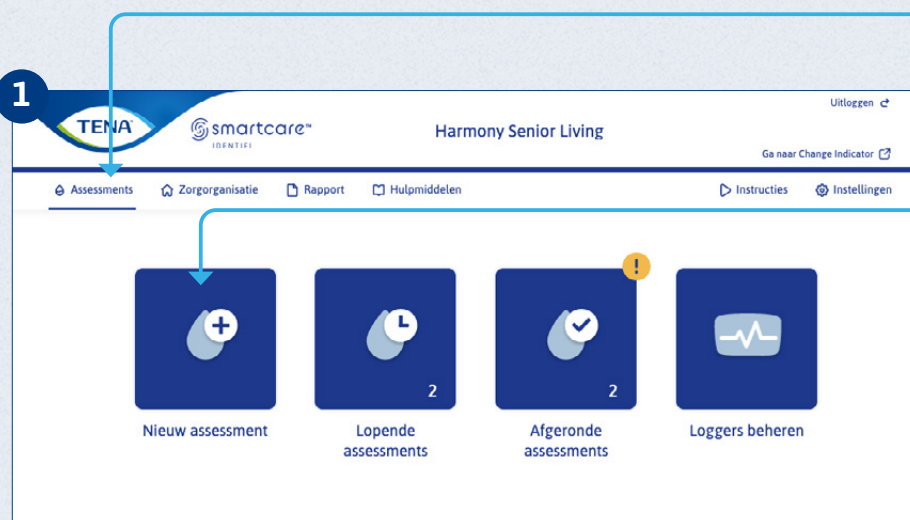

Nieuw assessment starten Dag * Nacht

Stap 1: Continentiezorgroutine zorgvrager - Verzonden 17 mrt 2024
Beoordeel de continenzorgroutine van de zorgvrager in de afgelopen 7 dagen

Identificeerder: QWEER

Door de continenzorgroutine van de zorgvrager in te vullen, kan aan het einde van het proces een rapport worden gegenereerd dat de waarde van TENA SmartCare Identifi Assessment voor en na het uitvoeren van de wijzigingen laat zien.

Producttype	Producttype
TENA Comfort Original Plus	TENA Comfort Original Plus
Productveranderingen /dag/week	Productveranderingen /dag/week
e.g. 3.5	e.g. 3.5
Lekkages /week	Lekkages /week
e.g. 3.5	e.g. 3.5
Succesvolle toiletbezoeken /dag/week	Niet succesvolle toiletbezoeken /dag/week
e.g. 3.5	e.g. 3.5
Aantal controles zonder productwissel /dag/week	
e.g. 3.5	

Volgende

Nieuw assessment starten Dag * Nacht

Stap 2: Start Nieuw Assessment

Identificeerder: QWEER

Logger * Assessment productgroep *


Selecteren Selecteren

Onthoud om:

- Informeer de zorgvrager over het assessment.
- Bevestig de logger aan Sensor Wear en controleer of de batterij is opgeladen.


Terug Annuleer Start

LOGGER VERPLAATSEN

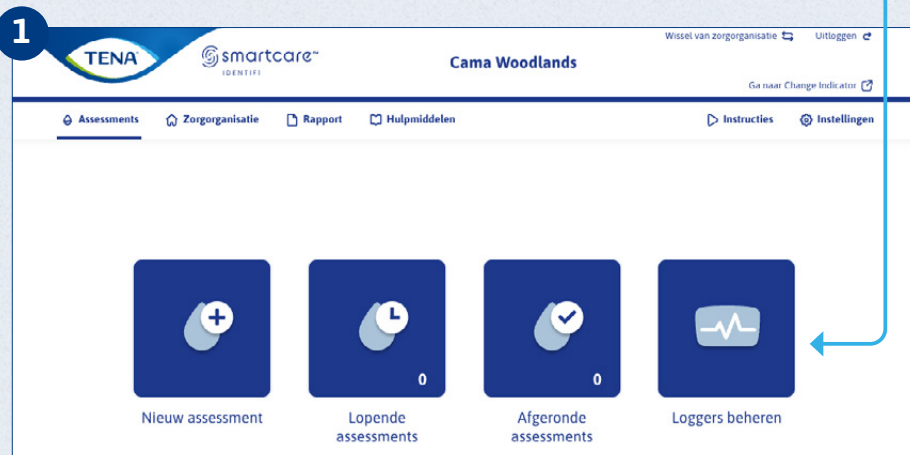

U kunt loggers verplaatsen tussen zorginstellingen. Selecteer gewoon **Logger beheren**. Daarna kunt u het apparaat overzetten van de ene naar de andere zorginstelling om te zorgen dat de logger bij de juiste instelling is geregistreerd. **Note: Only an administrator can move a logger between care facilities they have access to within the same care group.**

Klik op de **pijl Verplaatsen** naast de logger die u wilt verplaatsen en selecteer daarna de nieuwe instelling in het vervolgkeuzemenu in het dialoogvenster.

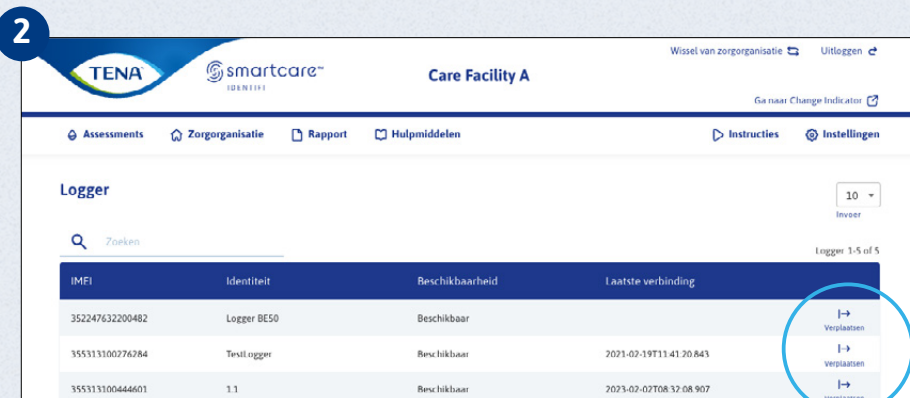

3

Logger verplaatsen naar een andere zorglocatie

* Verplichte velden

IMEI

352247632200482

Toegewezen zorglocatie *


Country

Zorg ervoor dat de logger goed is **gereinigd** voordat u deze naar een andere zorglocatie stuurt.

U kunt de reinigingsinstructies vinden in de sectie met hulpmiddelen.

Annuleer Verplaatsen


NIEUWE ZORGVRAGER INSCHRIJVEN

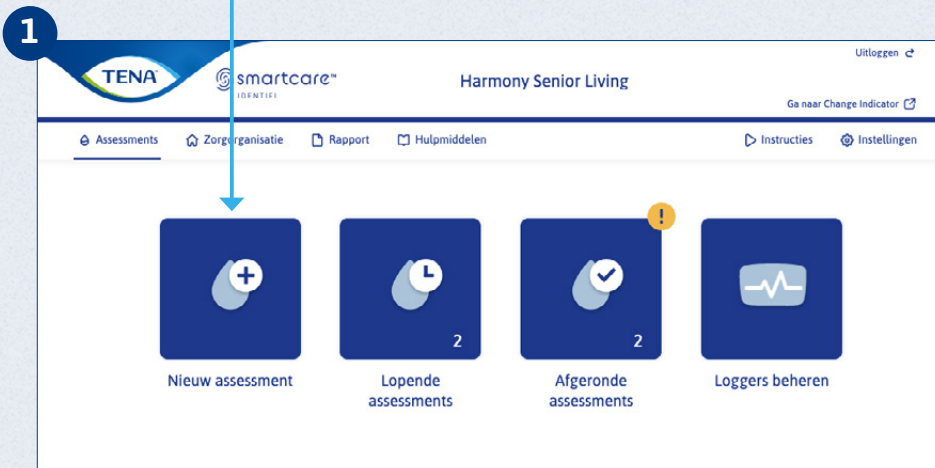

Kies eerst **zorgorganisatie** in het hoofdmenu en vervolgens **nieuwe beoordeling**.

Klik op **toevoegen** om een nieuwe zorgvrager aan te maken.

Vul alle verplichte velden in. **Identifier (ID)** is de codenaam voor de zorgvrager.

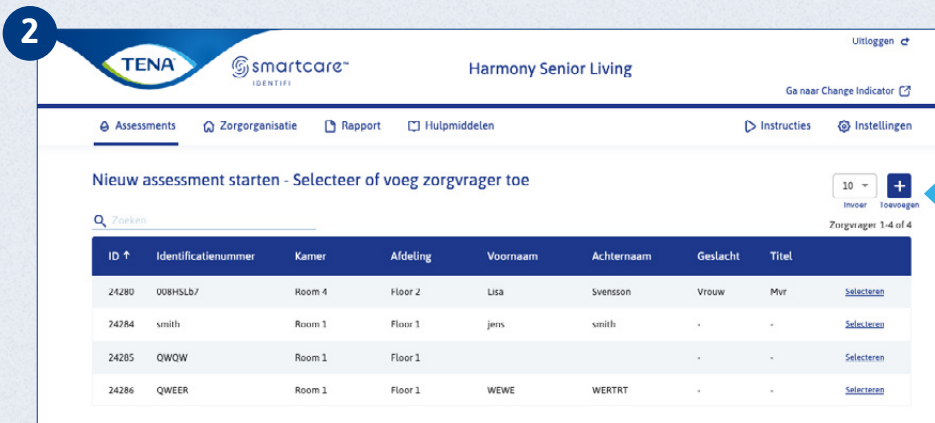

3

Zorgvrager toevoegen

Profiel

Identificeerder *

Unieke identificatie

Afdeling *

Kamer *

Voornaam

Achternaam

Geslacht

Titel

Mobiliteit

Annuleer Volgende

4

Zorgvrager toevoegen

Continëntiezorgroutine

Beoordeel de continëntiezorgroutine van de zorgvrager in de afgelopen 7 dagen

Door de continëntiezorgroutine van de zorgvrager in te vullen, kan aan het einde van het proces een rapport worden gegenereerd dat de waarde van TENA SmartCare Identifi Assessment voor en na het uitvoeren van de wijzigingen laat zien.

Producttype

Productveranderingen (dag/week)

Lekkages (week)

Succesvolle toiletbezoeken (dag/week)

Niet succesvolle toiletbezoeken (dag/week)

Aantal controles zonder productwissel (dag/week)

Terug Annuleer Volgende

5

Start Nieuw Assessment

Identificeerder: 1234

Logger *

Assessment productgroep *

Onthoud om:

- Informeer de zorgvrager over het assessment.
- Bevestig de logger aan Sensor Wear en controleer of de batterij is opgeladen.

Terug Annuleer Start

BEOORDELING STARTEN



1

Uitloggen

Harmony Senior Living

Assessments Zorgorganisatie Rapport Hulpmiddelen Instructies Instellingen

Nieuw assessment starten - Selecteer of voeg zorgvrager toe

10 +

Invoer Toevoegen

Zorgvrager 1-4 of 4

ID ↑	Identificatienummer	Kamer	Afdeling	Voornaam	Achternaam	Geslacht	Titel	
24280	008HSLb7	Room 4	Floor 2	Lisa	Svensson	Vrouw	Mvr	Selecteren
24284	smith	Room 1	Floor 1	jens	smith	-	-	Selecteren

Kies eerst **beoordeling** in het hoofdmenu

Klik op **selecteren** naast de zorgvrager voor wie u een beoordeling wilt starten.

2

Nieuw assessment starten

Stap 1: Continëntiezorgroutine zorgvrager - Verzonden 18 mrt 2024

Beoordeel de continëntiezorgroutine van de zorgvrager in de afgelopen 7 dagen

Identificeerder: 008HSLb7

Door de continëntiezorgroutine van de zorgvrager in te vullen, kan aan het einde van het proces een rapport worden gegenereerd dat de waarde van TENA SmartCare Identifi Assessment voor en na het uitvoeren van de wijzigingen laat zien.

Producttype

TENA Flex Normal Large

Productveranderingen (dag/week)

3

Lekkages (week)

0

Succesvolle toiletbezoeken (dag/week)

Niet succesvolle toiletbezoeken (dag/week)

e.g. 2.5

Aantal controles zonder productwissel (dag/week)

2

Volgende

Nieuw assessment starten

Stap 2: Start Nieuw Assessment

Identificeerder: 008HSLb7

Logger *

Selecteren

Assessment productgroep *

Selecteren

Onthoud om:

- Informeer de zorgvrager over het assessment.
- Bevestig de logger aan Sensor Wear en controleer of de batterij is opgeladen.

Terug

Annuleer

Start

Vervolledig de gegevens van de zorgvrager in het dialoogvenster voor Stap 1* en Stap 2. Klik vervolgens op **starten** om de beoordeling te starten.

Beoordeling gestart

De beoordeling is nu in gang gezet.

3

Assessment gestart

Het assessment is geïnitieerd met ID 008HSLb7

De continëntiezorg van de zorgvrager is niet volledig verzonden. Dit kan leiden tot een incompleet rapport. De informatie kan alsnog worden toegevoegd via het menu Assessments/Lopende Assessments of Zorgorganisatie/Zorgvragers.

OK

Lopende assessments

*Alleen beschikbaar voor zorgorganisaties met toegang tot het controllerapport.

HANDMATIGE GEBEURTENISSEN



Wat zijn handmatige gebeurtenissen?

Handmatige gebeurtenissen zijn gebeurtenissen die niet door de logger worden vastgelegd, zoals lekkages, ontlasting of toiletbezoek. Deze moeten handmatig worden toegevoegd tijdens de 72-uurs beoordeling.

1

TENA smartcare IDENTIFI

Harmony Senior Living

Assessments | Zorgorganisatie | Rapport | Hulpmiddelen | Instructies | Instellingen

Lopende assessments

Zoeken

Identificatie	Stap 1	Verzonden
123	Incontinentiezorgroutine van de zorgvrager - Voor	Verzonden 20 mrt 2024 Verzonden door: peter.nhm@yopmail.com
Kamer Room 1	Stap 2 Assessment - Lopend	Gegevens verzamelen van logger Geslacht: 20 mrt 2024 21:50 Geslacht door: peter.nhm@yopmail.com
Afdeling Floor 1		
Voornaam -	Producttype: TENA SmartCare Identifi Sensor wear Flex Identifi (IMEI): BA41 (35531210049626)	Gegevens inzien Handmatige gebeurtenissen
Achternaam -	Stap 3 Continëntiezorgroutine - Achteraf	Te verzenden na afronding stap 1 en 2

Identificatie	Stap 1	Verzonden
005154b2	Incontinentiezorgroutine van de zorgvrager - Voor	Verzonden 20 mrt 2024 Verzonden door: Mary.nhm@yopmail.com
Kamer Room 3	Stap 2 Assessment - Lopend	Logger gestopt 20 mrt 2024 14:22 Geslacht: 20 mrt 2024 14:11 Geslacht door: Mary.nhm@yopmail.com
Afdeling Floor 2		
Voornaam Sonja	Producttype: TENA SmartCare Identifi Sensor wear Flex Identifi (IMEI): BA41 (35531210049626)	Ingevuld en afgerond Gegevens inzien Handmatige gebeurtenissen
Achternaam Persson	Stap 3 Continëntiezorgroutine - Achteraf	Te verzenden na afronding stap 1 en 2

Handmatige gebeurtenissen beheren

Klik op **handmatige gebeurtenissen** om handmatige gebeurtenissen toe te voegen.

Selecteer de **datum** en **tijd** voor de gebeurtenis.

Handmatige gebeurtenissen - 123

Gebeurtenis toevoegen

Startdatum: 20 mrt 2024 21:50
Einddatum: Lopend

Datum selecteren: 2024-03-20 Tijd selecteren: 22:00

Selecteer gebeurtenissen: Selecteer een gebeurtenis

Voeg toe aan lijst

Lijst met toegevoegde gebeurtenissen (0)

Datum/Tijd	Sorteer	Acties
Nog geen gebeurtenissen toegevoegd		

Annuleer Opslaan

Kies gebeurtenissen uit de **lijst**. U kunt meer dan één gebeurtenis tegelijk kiezen. Klik op **aan lijst toevoegen**.

Handmatige gebeurtenissen - 123

Gebeurtenis toevoegen

Startdatum: 20 mrt 2024 21:50
Einddatum: Lopend

Datum selecteren: 2024-03-20 Tijd selecteren: 22:00

Selecteer gebeurtenissen: Meerdere gebeurtenissen geselecteerd

- ☒ Toiletgang succesvol (urine)
- ☒ Toiletgang niet succesvol (urine)
- ☒ Toiletgang (ontlasting)
- ☒ Lekkage
- ☒ Ontlasting in product

Annuleer Opslaan

Lijst met toegevoegde gebeurtenissen (0)

Datum/Tijd	Sorteer	Acties
Nog geen gebeurtenissen toegevoegd		

Als alle gebeurtenissen zijn ingevoerd, klikt u op **opslaan**.

Handmatige gebeurtenissen - 123

Gebeurtenis toevoegen

Startdatum: 20 mrt 2024 21:50
Einddatum: Lopend

Datum selecteren: 2024-03-20 Tijd selecteren: 22:00

Selecteer gebeurtenissen: Meerdere gebeurtenissen geselecteerd

- ☒ Toiletgang succesvol (urine)
- ☒ Toiletgang niet succesvol (urine)
- ☒ Toiletgang (ontlasting)
- ☒ Lekkage
- ☒ Ontlasting in product


Voeg toe aan lijst

Lijst met toegevoegde gebeurtenissen (5)

Datum/Tijd	Sorteer	Acties
20 mrt 2024 22:00	✓ Toiletgang succesvol (urine)	
	✗ Toiletgang niet succesvol (urine)	
	✓ Toiletgang (ontlasting)	
	✗ Lekkage	
	✗ Ontlasting in product	

Annuleer Opslaan

VOORBEELD VAN LOPENDE BEOORDELING

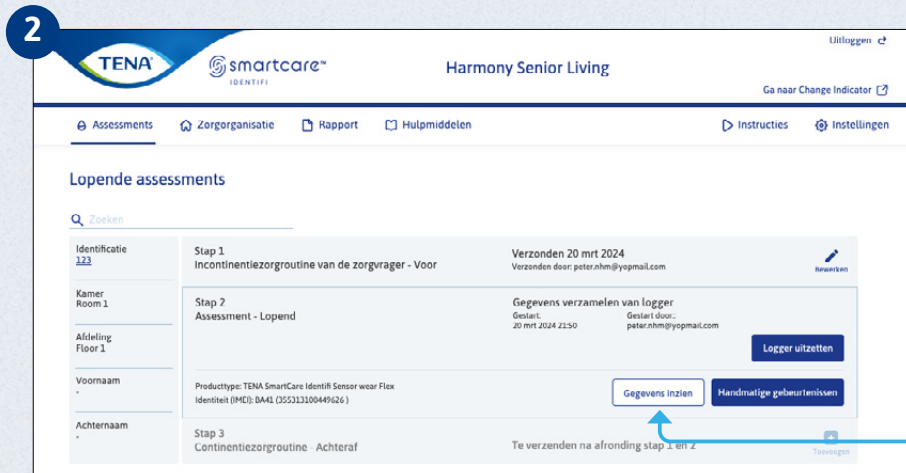


Tijdens de 72 uur kunt u een voorbeeld van het TENA SmartCare Identifi™-beoordelingsrapport bekijken.


Klik op **lopende beoordeling**.

Klik op **gegevens inzien**.

Het rapport wordt in hetzelfde venster geopend. Het rapport kan ook worden gedownload als pdf.

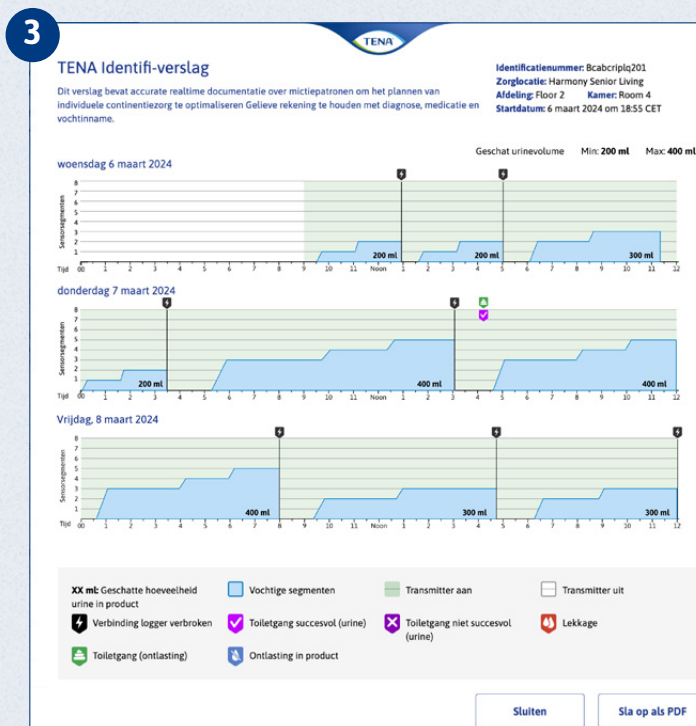


BEOORDELING STOPPEN

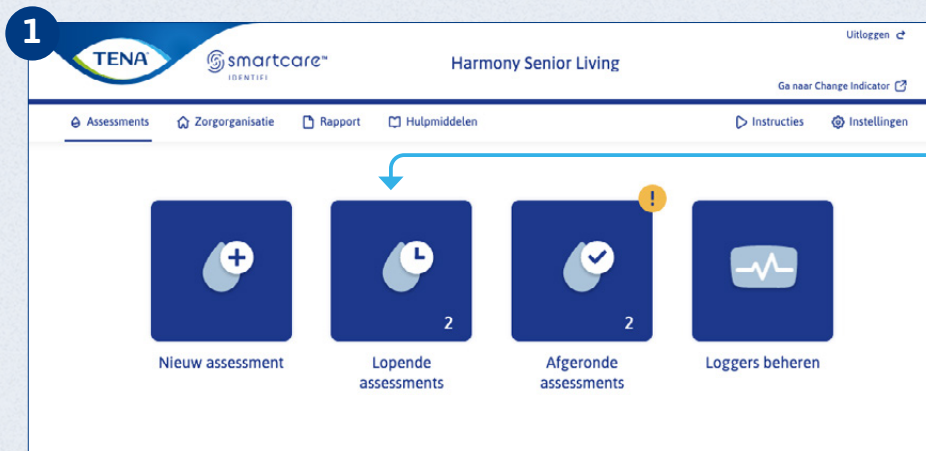

Klik op **lopende beoordelingen**.

Stop de beoordeling na 72 uur.

Klik voor de gewenste beoordeling op **logger uitzetten**

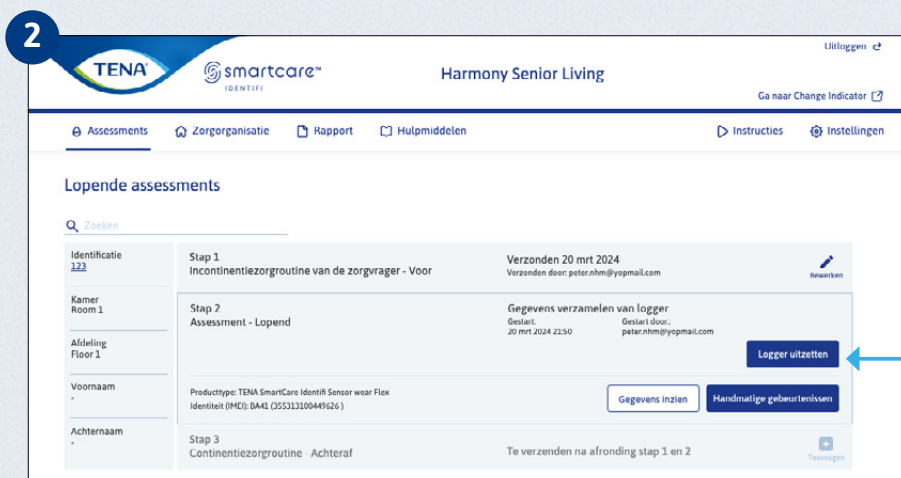

Voordat u in het pop-upscherf op **logger uitzetten** klikt, reinigt u de logger en plaatst u deze terug in de lader om ervoor te zorgen dat alle gegevens zijn verzonden.

Volg de stappen op pagina 13 om de beoordeling te voltooien.

BEOORDELING VOLTOOIEN



1

TENA smartcare™ IDENTIFI

Harmony Senior Living

Uitloggen

Assessments Zorgorganisatie Rapport Hulpmiddelen Instructies Instellingen

Go naar Change Indicator

Lopende assessments

Zoeken

Identificatie 111	Stap 1 Incontinentiezorgroutine van de zorgvrager - Voor	Verzonden 20 mrt 2024 Verzonden door: peter.nhm@yopmail.com	Bewerken
Kamer Room 1	Stap 2 Assessment - Lopend	Logger gestopt 20 mrt 2024 22:23 Gestart: 20 mrt 2024 21:50 Gestart door: peter.nhm@yopmail.com	Ingevoerd en afgerond
Afdeling Floor 1	Producttype: TENA SmartCare Identifi Sensor wear Flex Identiteit (IMEI): 8A42 (355313100449626)		
Voornaam -	Gegevens inzien Handmatige gebeurtenissen		
Achternaam -	Stap 3 Continëntiezorgroutine - Achteraf	Te verzenden na afronding stap 1 en 2	
Toevoegen			
Identificatie 005HSL112	Stap 1 Incontinentiezorgroutine van de zorgvrager - Voor	Verzonden 20 mrt 2024 Verzonden door: Mary.nhm@yopmail.com	Bewerken
Kamer Room 3	Stap 2 Assessment - Lopend	Logger gestopt 20 mrt 2024 14:22 Gestart: 20 mrt 2024 14:11 Gestart door: Mary.nhm@yopmail.com	Ingevoerd en afgerond
Afdeling Floor 2	Producttype: TENA SmartCare Identifi Sensor wear Flex Identiteit (IMEI): 8A42 (355313100449626)		
Voornaam Sonja	Gegevens inzien Handmatige gebeurtenissen		
Achternaam Persoon	Stap 3 Continëntiezorgroutine - Achteraf	Te verzenden na afronding stap 1 en 2	
Toevoegen			

Instellen als voltooid

Klik op **ingevuld en voltooid** om de voltooide beoordeling te verplaatsen van **lopende beoordelingen** naar **voltooide beoordelingen**.

Zo worden de lopende beoordelingen gescheiden van de beoordelingen die al voltooid zijn.

Klik op **ingevuld en voltooid**.

2

Assessment afronden

Let op! Controleer of stap 1 'continentiezorgroutine zorgvrager - huidig' volledig is ingevuld. Als u op 'ingevuld en afgerond' klikt, kan het niet meer ingevuld of aangepast worden.

Het assessment wordt verplaatst naar Afgeronde Assessments. U kunt nog steeds handmatig gebeurtenissen toevoegen.


Deze actie kan niet worden teruggedraaid.

Annuleer Ingevoerd en afgerond




Als een beoordeling niet als voltooid wordt ingesteld, wordt dit na 15 dagen automatisch gedaan.

EEN BEOORDELINGSRAPPORT GENEREREN

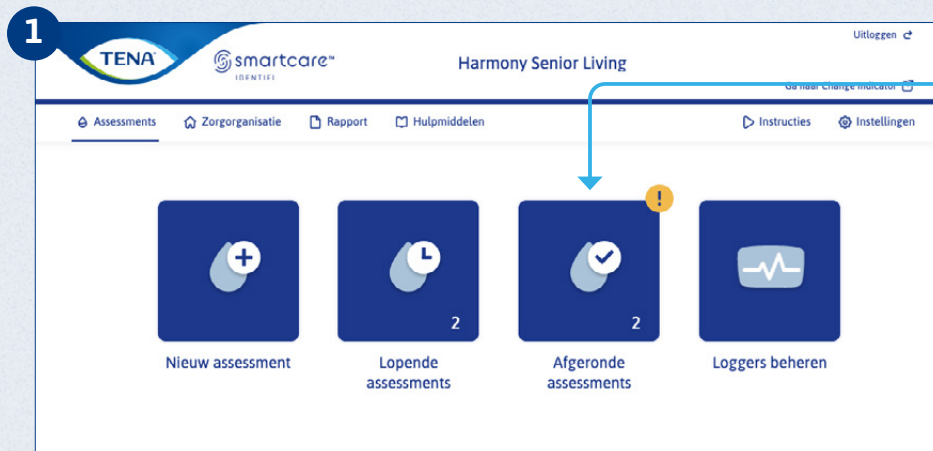


Klik op **voltooide beoordelingen**.

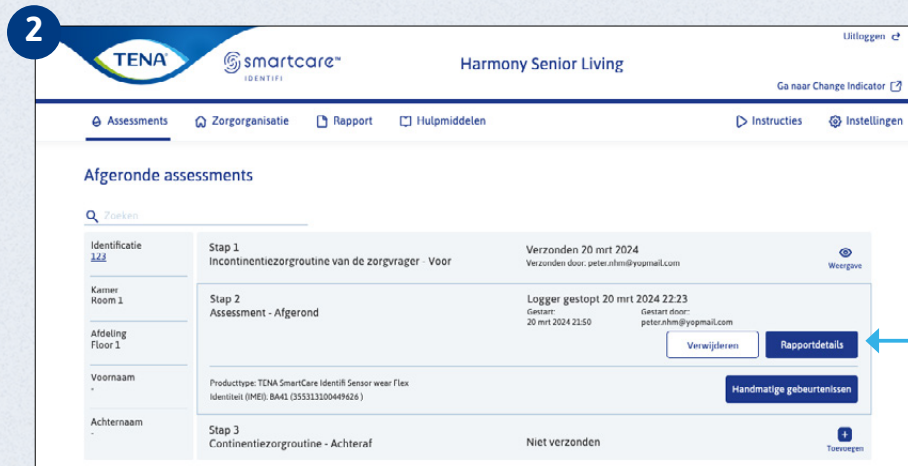


Klik op **rapportdetails** voor de gewenste beoordeling.

Een rapport voor een voltooide beoordeling genereren

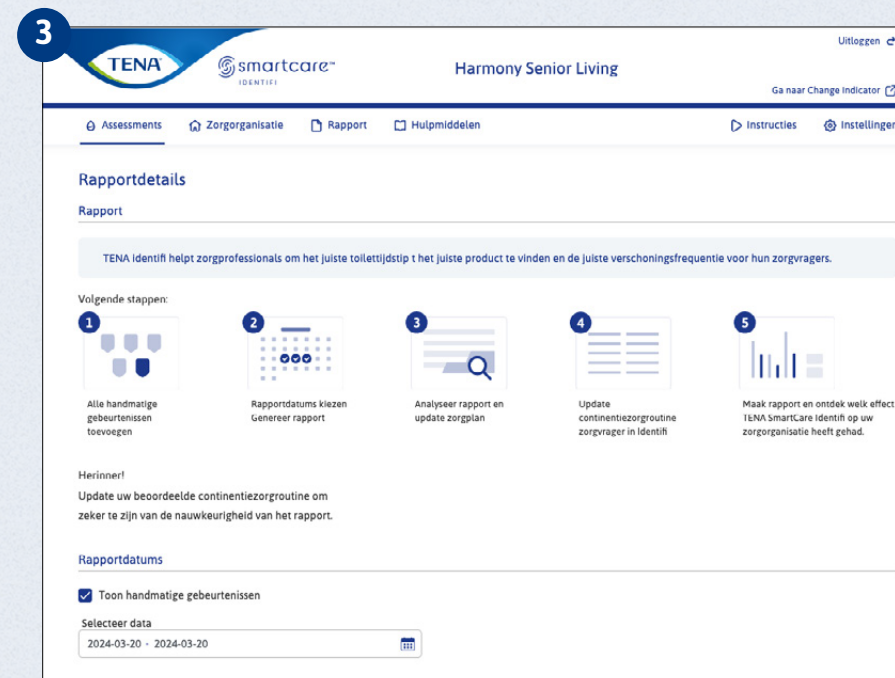

Voer de gewenste **datums** in. Standaard worden de datums van de laatste beoordeling weergegeven. Klik op **rapport genereren**.

EEN BEOORDELINGSRAPPORT GENEREREN

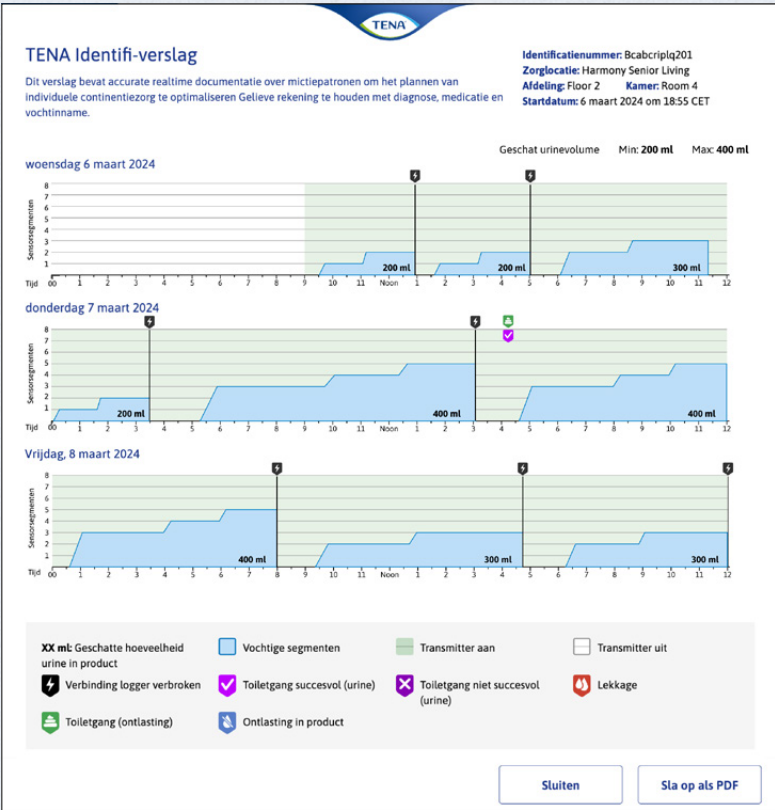

Het beoordelingsrapport geeft per uur inzicht in het mictiepatroon en het volume van de afgelopen 72 uur. De gegevens die via de logger worden verzameld, worden weergegeven in een grafische vorm die het patroon laat zien van hoe het product is gevuld met urine.

U vindt uitleg over hoe u het rapport moet interpreteren onder bronnen in de app.

Vorbereiden om een persoonlijk zorgplan te maken

Het op de persoon gerichte plan moet het volgende omvatten:

- Persoonlijk toiletstelsel om de juiste verschoonings- en toiletijden te vinden en verstoring 's nachts te vermijden
- Persoonlijk verschooningschema
- De juiste incontinentieproducten - het juiste type, absorptieniveau en de juiste maat

Dit is de basis voor het bepalen van de doelen:

- Doel 1 - Vind de juiste toiletijden
- Doel 2 - Langere perioden van ongestoorde nachtrust
- Doel 3 - Het meest geschikte product vinden voor de zorgvrager

Overweeg bij het opstellen van het zorgplan ook of er nog andere zaken zijn waarmee de zorgvrager rekening moet houden, zoals medicatie, huidstatus, mobiliteit, persoonlijke gewoonten en darmbeheer.

Wat is het volgende?

Communicer de voordelen

Efficiënte communicatie en samenwerking tussen de zorgvrager, de familie van de zorgvrager en het personeel verbetert de veiligheid van de zorgvrager en de zorg.

Toon het rapport

Toon het rapport aan de zorgverleners en leg uit waarom de nieuwe routines geschikt zijn voor de zorgvrager.

Plan een vervolgesprek

essity

Interpretatie van het rapport

Continuïteitsplan voor zorgvrager

Waar rekening mee te houden	Antwoord
Hoe vaak en op welk tijdstip van de dag komt de urine volgens het rapport?	
Heveel urine is er tijdens de verschoning in het product gekomen?	
Welke patronen neemt u waar tijdens de drie dagen?	

Gebruik deze informatie voor het zorgplan	Antwoord
Is er nog iets anders te overwegen over de zorgvrager (medicijnen, gewoonten en gedrag)?	
Wat zijn de meest geschikte tijden voor toiletbezoeken?	
Wanneer moeten andere verschoningen plaatsvinden voor een goed dagritme?	
Wanneer moet het nachproduct worden aangebracht?	
Wanneer moet het laatste toiletbezoek zijn?	
Welk type bescherming is geschikt?	Dag: Nacht:
Welk absorptievermogen is nodig voor dag/nacht?	Dag: Nacht:

essity

TENA

een merk van Essity

Elk rapport bevat een gedeelte waarin u de in het rapport verzamelde informatie kunt invoeren om het zorgplan voor de zorgvrager te verbeteren. Bijvoorbeeld: de juiste toiletbezoektijden vinden, het meest geschikte product selecteren en zorgen voor langere periodes van ongestoorde slaap.

U kunt een bewerkbare versie downloaden, zodat u opmerkingen aan het rapport kunt toevoegen of opmerkingen kunt wijzigen.

VOLTOOIDE BEOORDELINGEN (STAP 3*)



Nadat de beoordeling is geanalyseerd, voegt u de routine voor na de continentiezorg toe.

1

Selecteer **voltooide beoordelingen** in het menu.

2

Klik hier om een continentiezorgroutine aan de beoordeling toe te voegen.


* Dit is alleen van toepassing voor gebruikers die toegang hebben tot het controlerapport.

3

Voeg de details van de continentiezorgroutine en de enquêtevragen toe en klik vervolgens op **verzenden**).

Dit kan ook worden gedaan onder **zorgvrager beheren** - zie pagina 24

GEARCHIVEERDE BEOORDELINGEN


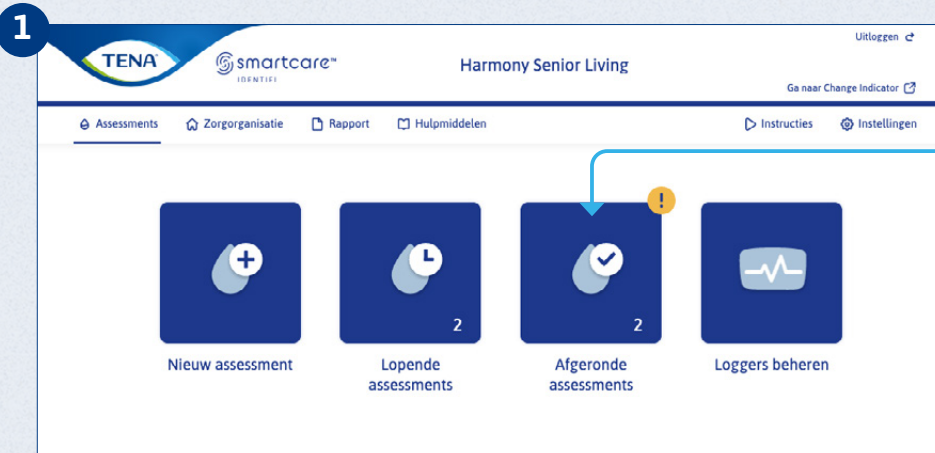


Assessments ouder dan 90 dagen worden opgeslagen onder **Gearchiveerde beoordelingen**.

Klik op **voltooide beoordelingen**.

Scrol omlaag op de pagina voltooide beoordelingen.

Klik op **gearchiveerde beoordelingen**.

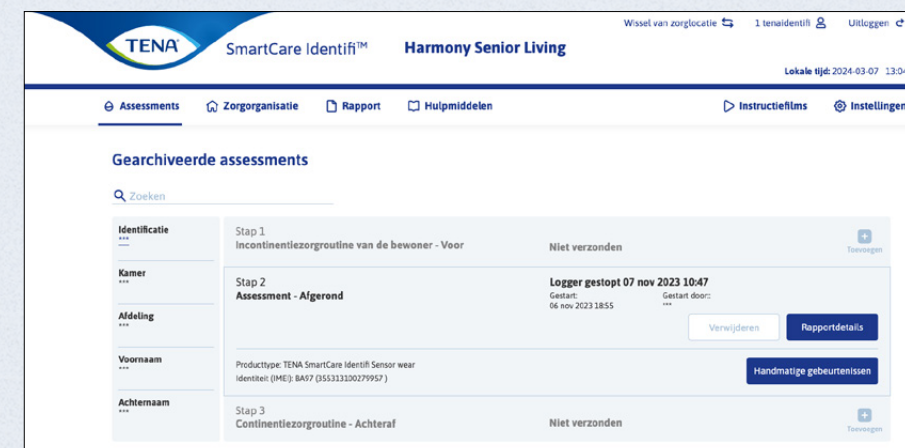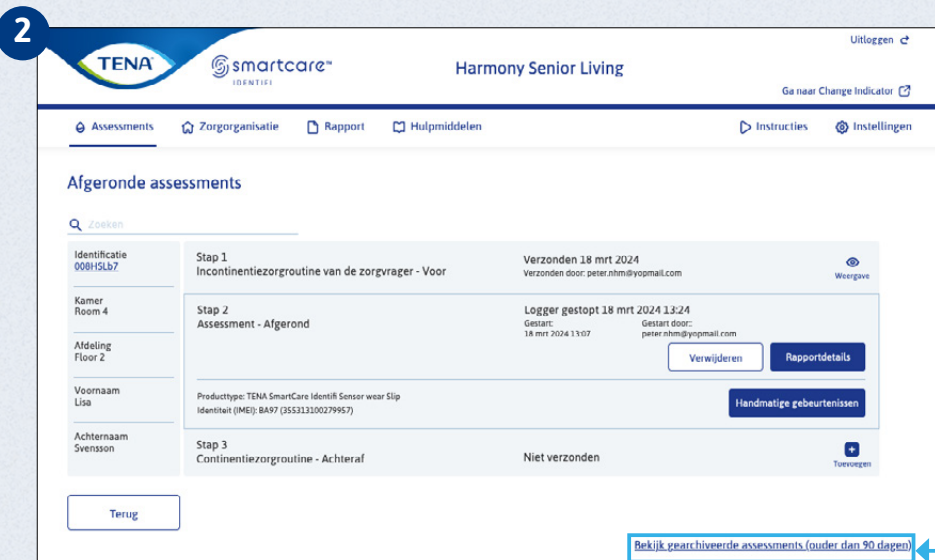

De lijst met gearchiveerde beoordelingen wordt weergegeven. Klik op **rapportdetails** om een rapport te bekijken.

EEN CONTROLLERAPPORT GENEREREN



1

TENA smartcare IDENTIFI Harmony Senior Living

Uitloggen

Ga naar Change Indicator

Assessments Zorgorganisatie **Rapport** Hulpmiddelen Instructies Instellingen

2

TENA smartcare IDENTIFI Harmony Senior Living

Uitloggen

Ga naar Change Indicator

Assessments Zorgorganisatie **Rapport** Hulpmiddelen Instructies Instellingen

Rapport

TENA SmartCare Identifi Monitoring report toont value of TENA SmartCare Identifi door de continenzorgrouines voor en na hun assessments met elkaar te vergelijken.

Herinnering:

1 Voltooi de continenzorgrouine van de cliënt in Identifi

2 Assessments uitvoeren

3 Aanpassing van de continenzorgrouine volgens assessmentrapport

Volgende stappen:

4 Selecteer periode

5 Selecteer toe te voegen zorgorganisaties

6 Maak rapport en zie hoe TENA SmartCare Identifi effect heeft op uw zorgorganisatie

Selecteer

Van * 2024-01-01 Aan * 2024-03-20

Selecteer de data voor de periode die u wilt bekijken.

Selecteer **rapport** in het menu

3

TENA smartcare IDENTIFI Harmony Senior Living

Uitloggen

Ga naar Change Indicator

Assessments Zorgorganisatie **Rapport** Hulpmiddelen Instructies Instellingen

Rapport: 2024-01-01 - 2024-03-20

10 Invoer 1 of 1

Zorgorganisatie Stichting Aantal zorgvragers

Harmony Senior Living Harmony Senior Living 1/5 [Bekijk zorgvragers](#)

Terug < 1 > Rapport maken

Zorgvragers - Harmony Senior Living

ID	Identifi	Datum Assessment
☒ 24280	008HSLb7	18 mrt 2024 - 18 mrt 2024

Annuleer Opslaan

Zorgvragers weergeven laat zien welke zorgvragers worden opgenomen in het rapport.

Klik op **rapport genereren** om een rapport te genereren dat u kunt downloaden.



WELKE GEGEVENS WORDEN OPGENOMEN IN HET RAPPORT?



Bontouch Test Facility
Beoordeling van 1 cliënten uitgevoerd 7 jan 2026 - 7 jan 2026

Monitoringverslag

Resultaat	1
Zorgtijd	2-3
materialen	4-5
Toiletbezoeken	6
Lekkage	7-8
Totale kosten	9-10
CO ₂ -effect	11
Belangrijke punten om te onthouden	12
Bijlage	13-14

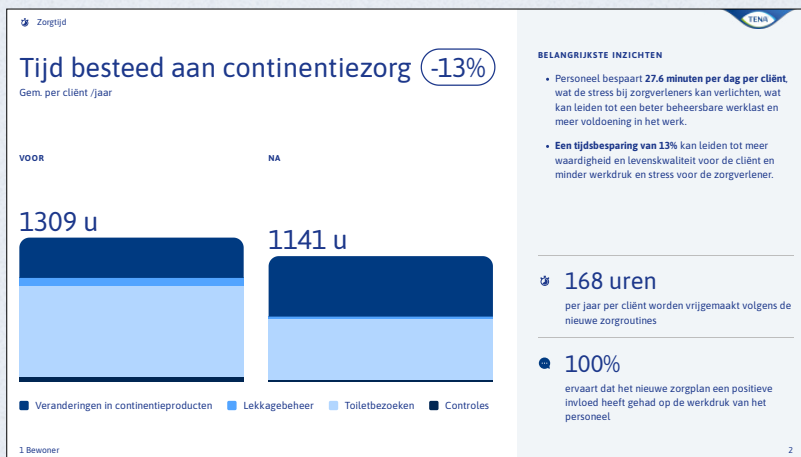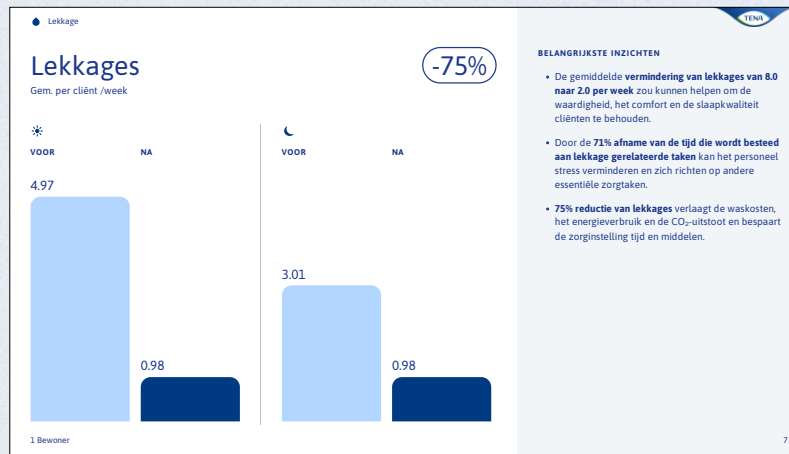

Het rapport wordt opgesteld op basis van de resultaten van de vergelijking van de routine voor en na de continëntiezorg en is beschikbaar als pdf (zie onderstaande instructie om de pdf af te drukken).


Aan de hand van het rapport, dat uit verschillende pagina's met de verzamelde gegevens bestaat, kunt u de prestaties van het product meten met betrekking tot continëntiezorgrountines, anderen in de zorgorganisatie, de gebruikte producten en het milieu-effect.

Het rapport afdrukken


Houd er rekening mee dat u mogelijk 2 instellingen moet aanpassen bij het afdrukken. Klik op **opslaan als pdf** en zorg ook dat u **achtergrondafbeeldingen opneemt** om het volledige rapport te zien.

NIEUW ACCOUNT TOEVOEGEN

ALLEEN VOOR BEHEERDER

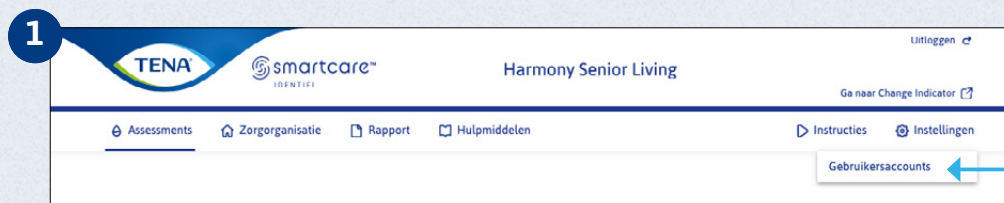

Klik op **instellingen** en daarna op **gebruikersaccounts**.

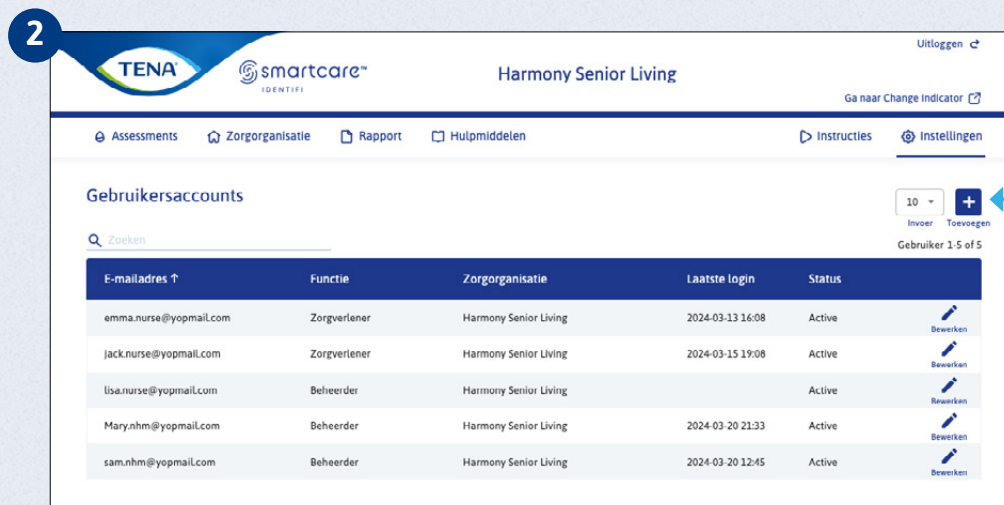

Klik op **toevoegen**.

Vul de velden in en klik op **verzenden** om een nieuw gebruikersaccount aan te maken.

Nieuw gebruikersaccount aanmaken

Selecteer rol

☒ Beheerder ☐ Zorgverlener

Toegang tot de zorgorganisatie

☒ Selecteer alles

☒ Harmony Senior Living

Algemene instellingen

E-mailadres * Gsm-nummer

Taal *

☒ Rapport

Met monitoringrapport vergelijkt de status van de individuele zorgvrager en/of zorgorganisatie voor en na het uitvoeren van de wijzigingen nav analyse met de informatie uit het TENA SmartCare Identifi Assessment. De gebruiker kan veranderingen zien in kosten, werkdruk en het effect dat het assessment heeft gehad op zorgvragers.


De toegang tot het controlerapport kan worden gegeven of ingetrokken door de beheerder.

Als u meervoudige verificatie gebruikt, kunt worden gemachtigd via e-mail of telefoon, afhankelijk van welke contactgegevens u hebt ingevoerd.




GEBRUIKERSACCOUNT BEWERKEN OF VERWIJDEREN

1

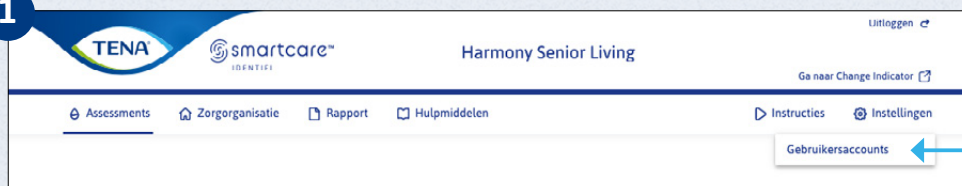

Klik op **instellingen** en daarna op **gebruikersaccounts**.

2

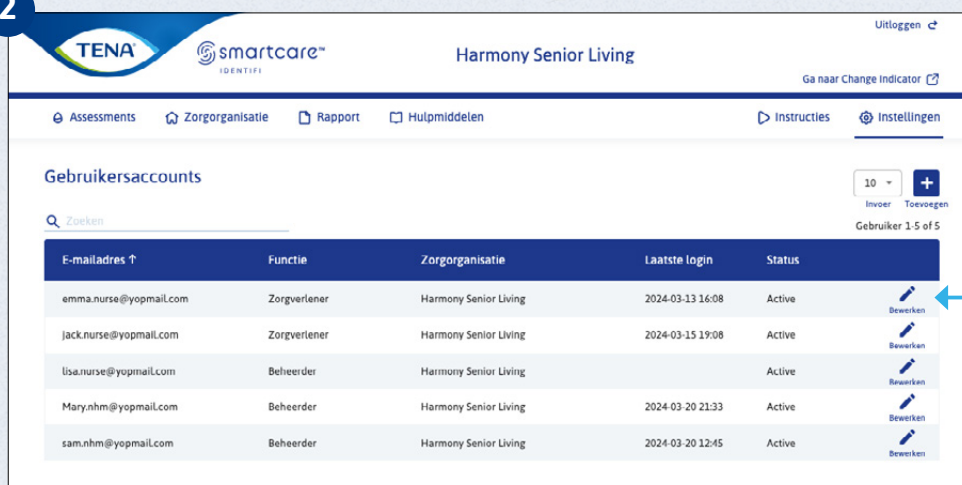

Klik op de gebruikersnaam die u wilt bewerken. Bewerk de details en klik daarna op **verzenden**.

Wijzig gebruikersprofiel voor {{username}}

Selecteer rol

☐ Beheerder ☒ Zorgverlener

Toegang tot de zorgorganisatie

☒ Selecteer alles

☒ Harmony Senior Living

Algemene instellingen

E-mailadres * Gon-nummer

Taal *


☒ Rapport

Het monitoringrapport vergelijkt de status van de individuele zorgvrager en/of zorgorganisatie voor en na het uitvoeren van de wijzigingen nav een analyse met de informatie uit het TENA SmartCare Identifi Assessment.


De gebruiker kan veranderingen zien in kosten, werkdruk en het effect dat het assessment heeft gehad op zorgvragers.

Als u een account wilt **Verwijderen**, klikt u op het prullenbakpictogram bovenaan de pagina.


AFDELINGEN BEHEREN

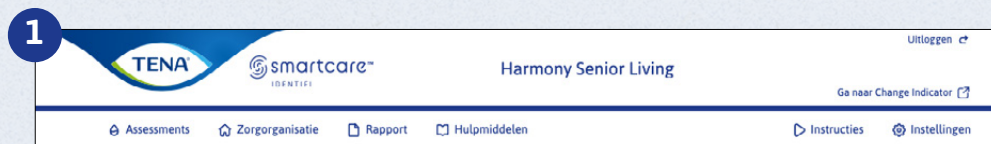

Klik op **zorgorganisatie**.

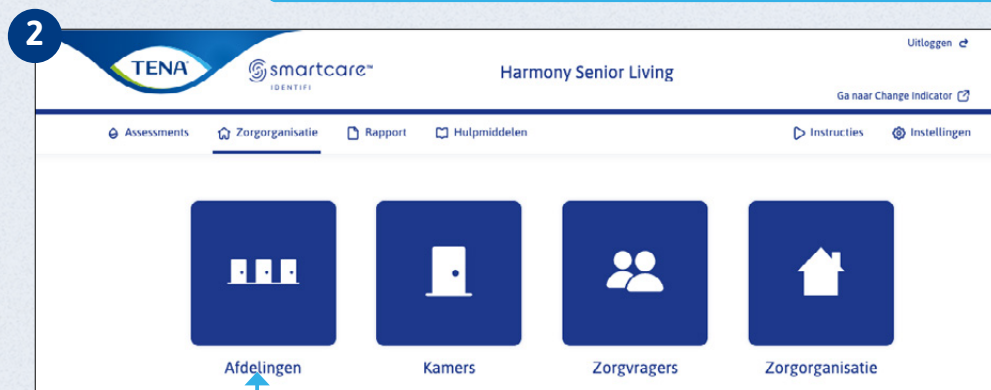

Klik op **afdelingen**.

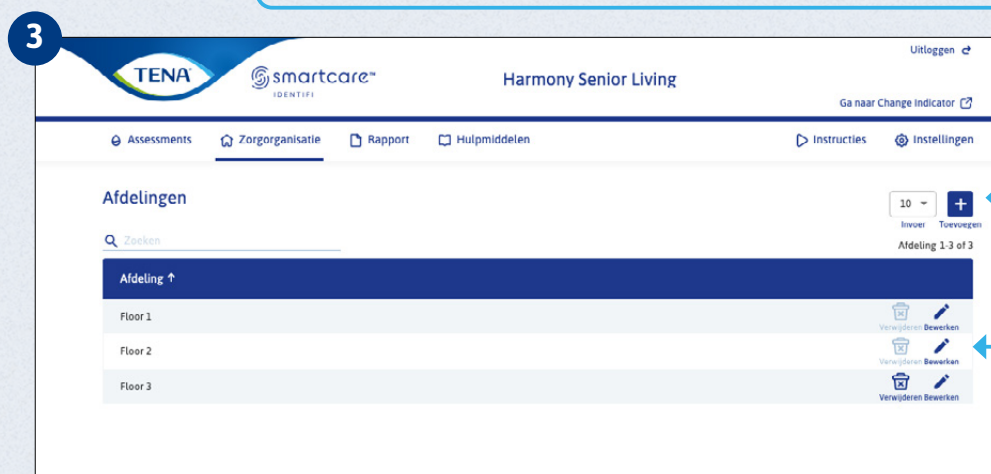

Klik op **toevoegen** om een nieuwe afdeling aan te maken.

Afdeling toevoegen

Afdeling *

Of klik op **bewerken** naast de afdeling waarvoor u de gegevens wilt aanpassen.


Bewerk afdeling

Afdeling *


KAMERS BEHEREN



Klik op **zorgorganisatie**.

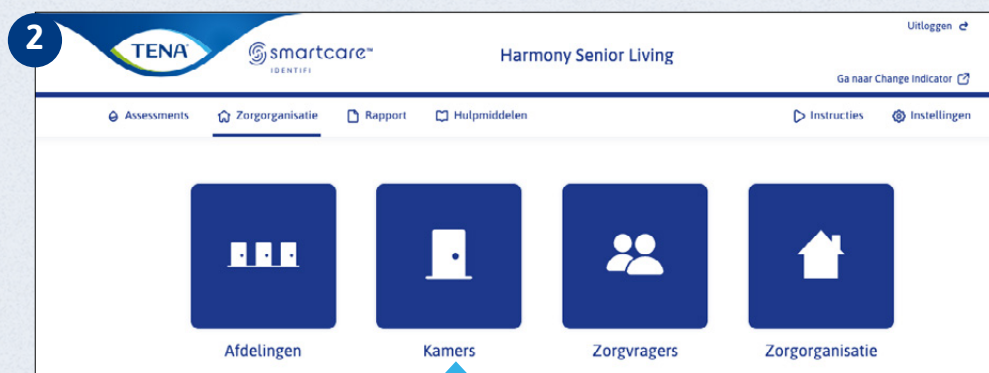

Klik op **kamers**.

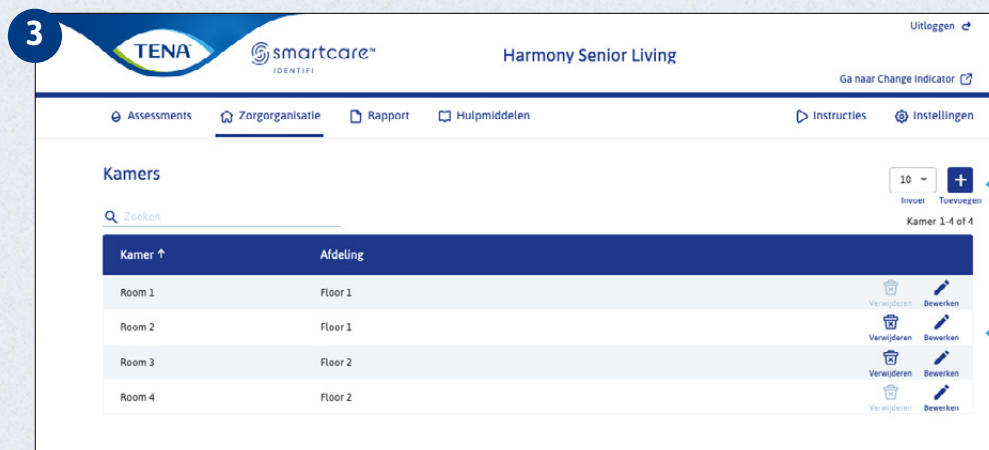

Klik op **toevoegen** om een nieuwe kamer aan te maken. Geef de kamer een naam en wijs de kamer toe aan een bestaande afdeling.

Kamer toevoegen

Kamer *

Naam afdeling *

Selecteren

Annuleer Toevoegen

Of klik op **bewerken** naast de kamer waarvoor u de gegevens wilt aanpassen.

Bewerk kamer




Kamer *

Naam afdeling *

Floor 1

Annuleer Opslaan

ZORGVRAGERS BEHEREN

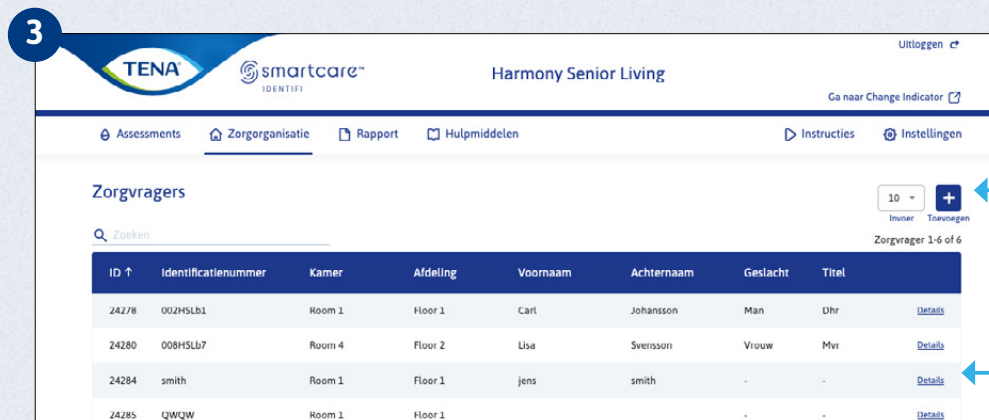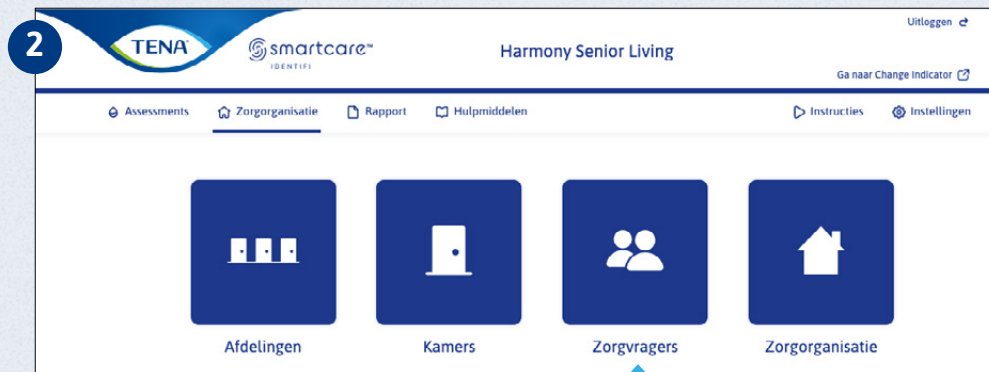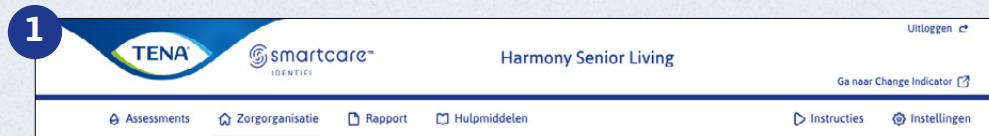


Klik op **zorgorganisatie**.

Klik op **zorgvragers**.

Klik op **toevoegen** om een nieuwe zorgvrager aan te maken. Geef de zorgvrager een naam en wijs deze toe aan een bestaande afdeling.



Of klik op **Details** naast de zorgvrager waarvan u de gegevens wilt aanpassen.

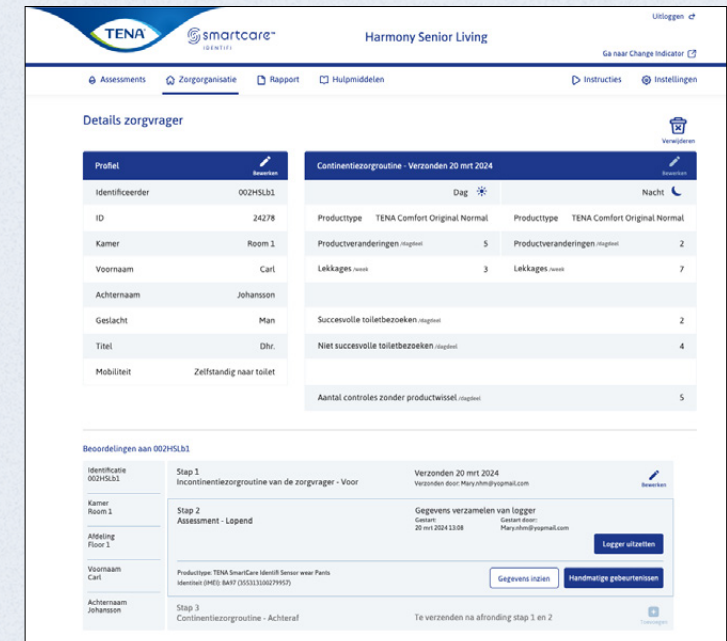

Opmerking: De details over de zorgvragers tonen altijd de laatst ingediende continenzorgroutine als de zorgorganisatie toegang heeft tot het controllerapport.

ZORGORGANISATIE BEHEREN

ALLEEN VOOR BEHEERDER

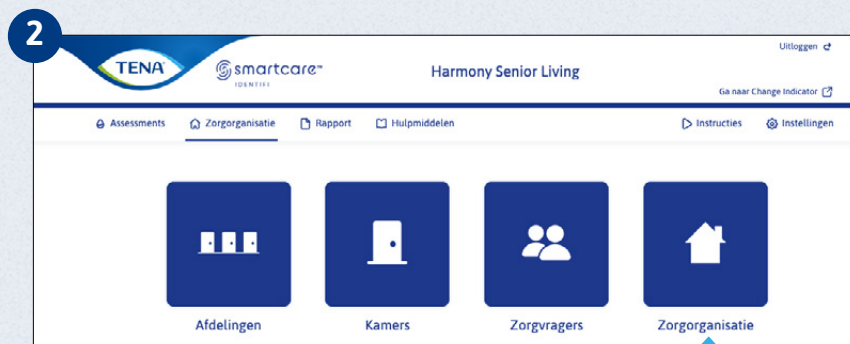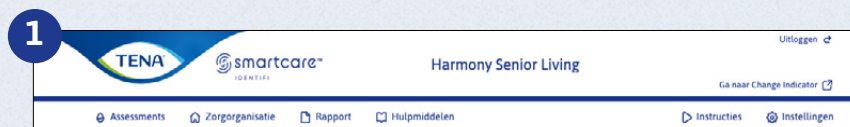

Klik op het **zorgorganisatie-**pictogram.
Hierna kunt u de instellingen voor de gegevens van de zorgvrager en de zorgorganisatie bijwerken.

Klik op **zorgorganisatie.**

Vraag toestemming
U kunt het vakje aanvinken om een herinnering te activeren om toestemming van de zorgvrager te krijgen voordat u een beoordeling start.

Meervoudige verificatie
Hiervoor is vereist dat de gebruikers hun mobiele telefoonnummer in hun profiel hebben geregistreerd.

Klik op **opslaan** onderaan de pagina.

INSTELLINGEN VOOR DE GEGEVENS IN HET CONTROLLERAPPORT

ALLEEN VOOR BEHEERDER



De instellingen van het controllerapport kunnen worden aangepast als er waarden veranderen. De waarden die zijn ingevoerd in de instellingen van het controllerapport zijn toegankelijk onder **zorgorganisatie beheren** en worden gebruikt als basis om de resultaten van het controllerapport te genereren.

TENA smartcare® Harmony Senior Living

Uitloggen

Assessment | **Zorgorganisatie** | Rapport | Hulpmiddelen | Instructies | Instellingen

Beheer Harmony Senior Living

Instellingen Zorgorganisatie

Zorgorganisatie *
Harmony Senior Living

Contactpersoon
Naam

E-mailadres
Telefoonnummer
0800 0227500

GSM nummer
Doelstelling
\$

Privacy instellingen

☐ Vraag toestemming
Deze functie activeert een herinnering om de toestemming van de cliënt te vragen voordat een assessment wordt gestart.

☐ 2-staps verificatie
2-staps verificatie vereist dat de gebruikers hun pin-nummers in hun profiel hebben geregistreerd om te kunnen inloggen op het systeem.

Instellingen voor gegevens zorgvragers

In de gedetailleerde versie van de gegevens van zorgvragers worden de volgende instellingen gebruikt. Als u wilt wijzigen, klik op de instelling die u wilt wijzigen.

Identificatienummer	Mobiliteit	Voornaam	Achternaam
☒ Zichtbaar	☒ Zichtbaar	☒ Zichtbaar	☒ Zichtbaar
☐ Verplicht	☐ Verplicht	☐ Verplicht	☐ Verplicht
☐ Maximaal 3 tekens	☐ Maximaal 3 tekens	☐ Maximaal 3 tekens	☐ Maximaal 3 tekens

Geslacht

☒ Zichtbaar

☐ Verplicht

☒ Man

☐ Vrouw

☐ Niet gespecificeerd

Titel

☒ Zichtbaar

☐ Verplicht

☒ Dhr.

☐ Mevr.

☐ Meer.

☐ Niet gespecificeerd

Rapport datainstellingen

Loonkosten *
200 SEK

Loonkosten *
500 SEK

Waskosten - kleding (volledige set) *
45 SEK

Waskosten - beddinen (volledige set) *
60 SEK

Benodigde tijd voor verschoning *
20 Min

Benodigde tijd voor verschoning *
20 Min

Benodigde tijd voor kledingwissel - lekkage *
30 Min




Benodigde tijd voor verschoning beddinen - lekkage *
30 Min

Benodigde tijd voor controle zonder verschoning *
5 Min

Tenig

Annuleer

Opslaan

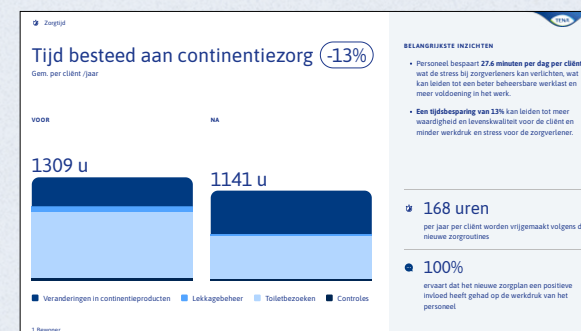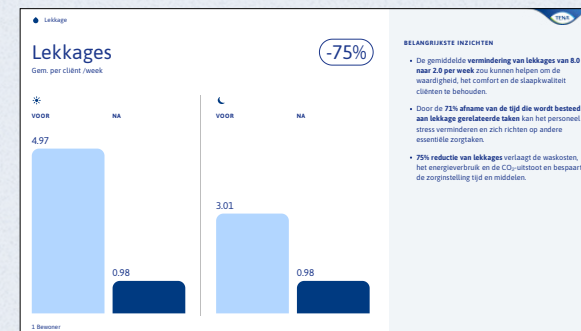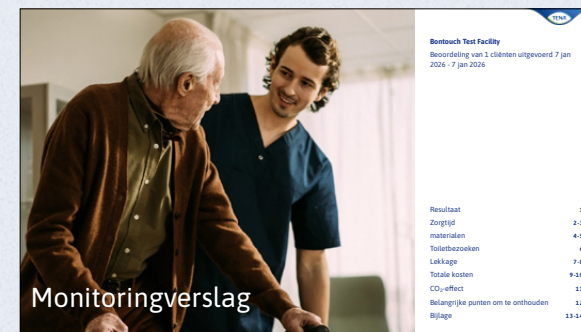

INSTRUCTIE- EN VRAAG-EN-ANTWOORD-FILMPJES



1

Wissel van zorgorganisatie Uitloggen

Ga naar Change Indicator

Assessments Zorgorganisatie Rapport Hulpmiddelen **Instructies** Instellingen

Help

Zoeken

Voor het assessment
Wat u nodig heeft voordat u met een assessment begint

TENA SmartCare Identifi staande fixatie
Gebruikersinstructies voor het bevestigen van de TENA SmartCare Identifi-sensor op een staande persoon.

TENA SmartCare Identifi fixatie liggend
Gebruikersinstructies voor het bevestigen van de TENA SmartCare Identifi-sensor op een liggende persoon.

TENA SmartCare Identifi Pants
Voor zorgvragers die zelf hun incontinentieproduct verwisselen.


Groen licht
Nadat hij op het product is geplaatst, knippert de TENA SmartCare Identifi-logger gedurende 45 seconden groen. Dit betekent dat het werkt.

Oranje licht
Een oranje lampje betekent dat de batterij bijna leeg is en moet worden opgeladen.

Klik op **instructies**.


Klik op **a een video** om de instructies voor dit onderdeel te zien.

BRONNEN

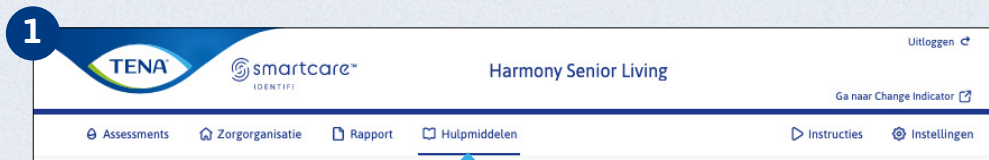

De pagina met bronnen bevat verschillende materialen ter ondersteuning van het gebruik van TENA SmartCare Identifi™.

Klik in het hoofdmenu op **bronnen**.

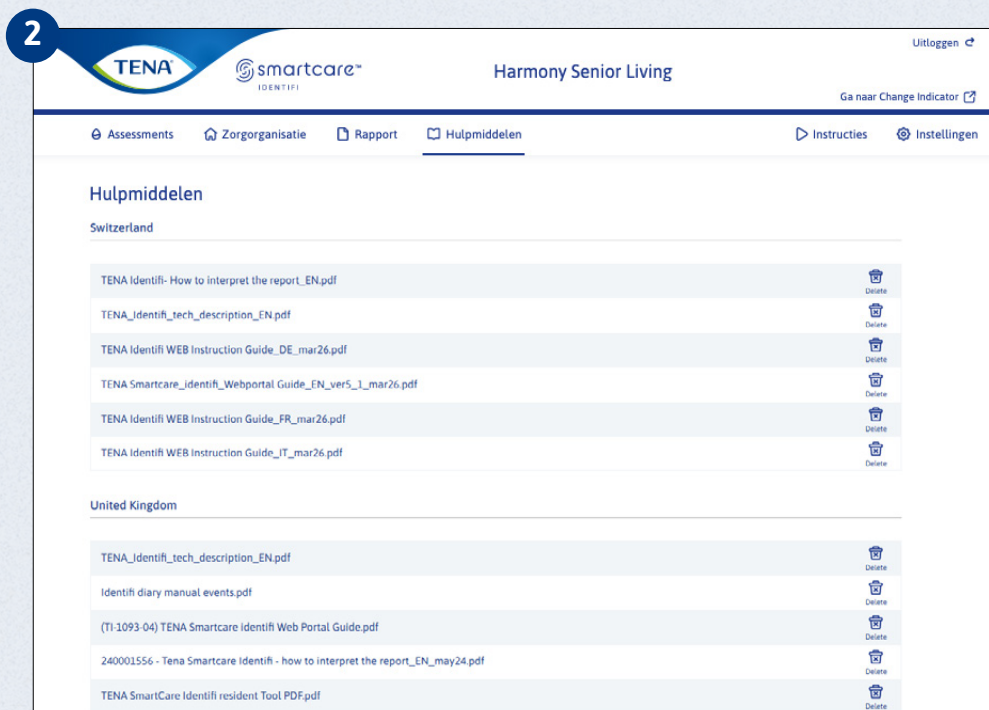

Een bestand weergeven/downloaden

Er wordt een lijst met beschikbare bestanden weergegeven.

Klik op het gewenste bestand om het te downloaden/bekijken.

