

TENA SMARTCARE IDENTIFI™ SPRIEVODCA WEBOVÝM PORTÁLOM



OBSAH



OBSAH	2
ÚVOD	3
ZAČÍNAME	
Aktivácia účtu/prihlásenie	5
HODNOTENIE	
Hodnotenie s monitorovacou správou	6
Nové	
Začať nové hodnotenie	7
Presunúť záznamové zariadenie	8
Registrácia nového príjemcu starostlivosti	9
Začať hodnotenie	10
Prebiehajúce	
Manuálne zadanie udalosti	11
Prezerať prebiehajúce hodnotenie	12
Zastaviť hodnotenie	13
Dokončiť hodnotenie	14
Vytvorenie hodnotiacej správy	15
Ukončené hodnotenia	17
Archivované hodnotenia	18

MONITOROVACIA SPRÁVA

Vytvorenie monitorovacej správy	19
Čo správa obsahuje?	20

POUŽÍVATEĽ

Pridať nový účet (Len pre správcu)	21
Upraviť alebo odstrániť používateľský účet	22

NASTAVENIA

Spravovať oddelenia	23
Spravovať izby	24
Správa príjemcov starostlivosti	25
Správa opatrovateľského zariadenia (Len pre správcu)	26
Nastavenia údajov monitorovacej správy (Len pre správcu)	27

POMOCNÍK

Videa s pokynmi a často kladenými otázkami	28
Zdroje	29

ÚVOD



Táto používateľská príručka je určená pre roly zdravotnej sestry a správcu.

Systém TENA SmartCare Identifi™ je určený na použitie ako pomôcka pri hodnotení kontinencie príjemcov starostlivosti, na stanovenie najvhodnejších absorpčných pomôcok, odporúčaných časov návštevy toalety a úprav rutínnej inkontinenčnej starostlivosti o pacienta. Obdobie hodnotenia je 72 hodín.

Systém TENA SmartCare Identifi™ sa skladá z troch častí: nositeľný snímač, záznamová súprava a systém hlásenia.

Účelom systému hlásenia TENA SmartCare Identifi™ je zozbierať a prezentovať údaje získané zo záznamových zariadení. Systém hlásenia sa používa na začiatok hodnotení a po dokončení prezentuje výsledky v správach.

Systém hlásenia TENA SmartCare Identifi™ ponúka sledovanie a preukázanie postupu s monitorovacou správou. Monitorovacia správa ukazuje prínos používania riešenia porovnaním rutínnej inkontinenčnej starostlivosti pred použitím riešenia a po ňom.



POZNÁMKA: Systém TENA SmartCare Identifi™ odhaduje objem tekutiny. Systém sa nesmie používať na monitorovanie príjmu tekutín.



ÚVOD POKRAČ.



Novou funkciou systému TENA SmartCare Identifi™ je monitorovacia správa. Monitorovacia správa je cenným doplnkom pre opatrovateľské zariadenie, ktorý ukazuje celkovú hodnotu pre opatrovateľské zariadenia po dokončení hodnotení starostlivosti pre príjemcov starostlivosti.

Poskytuje domovu informácie o tom, aké produkty sa používajú, o potrebách príjemcov starostlivosti a meniacich sa rutinách, čo umožní domovu plánovať podľa toho rozpisu sestier, a tiež ukazuje environmentálny aspekt každého domova.



Monitorovacia správa sa ako funkcia pridá, keď implementujete systém a pripojíte ho k prístupu používateľa. Správca ju nemôže pridať ani odstrániť.

Pozrite si prehľad toho, čo môže systém urobiť pre vaše opatrovateľské zariadenie na strane 6.

Upravenie nastavení tak, aby ste z monitorovacej správy získali čo najviac, nájdete na strane 27.

Vstup do webového portálu indikátora výmeny

Opatrovateľské zariadenia, ktoré používajú systém TENA SmartCare Identifi™ a indikátor výmeny TENA SmartCare™, majú prístup ku každému webovému portálu kliknutím na položku **Prejsť na indikátor výmeny**.

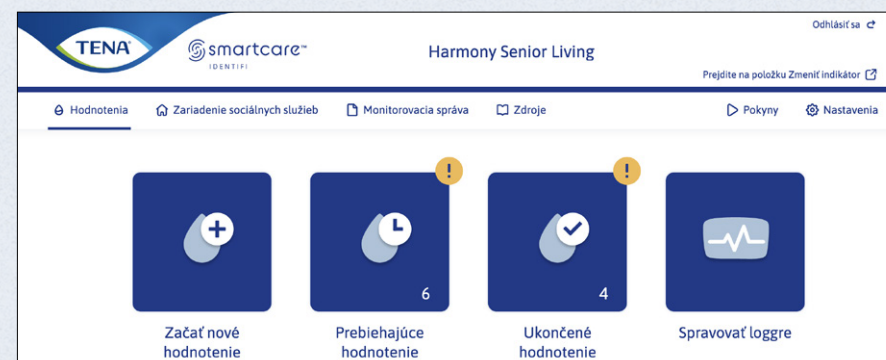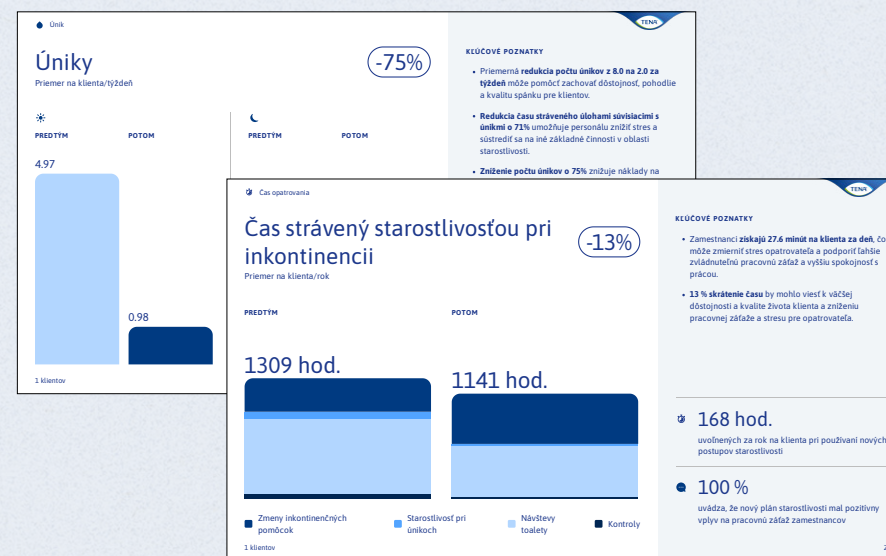

AKTIVÁCIA ÚČTU/PRIHLÁSENIE



Nastaviť heslo pre používateľa anna.anderson@nursinghome.com

Heslo musí mať aspoň 8 znakov a musí obsahovať aspoň 3 z nasledujúcich typov znakov:

- Malé písmeno (a – z),
- Veľké písmeno (A – Z)
- Číslu (0 – 9),
- Špeciálny znak (@#\$%^& atď.)

Aktuálne heslo nemôžete znova použiť.

Heslo

Potvrdiť heslo

Nastaviť heslo

Aktivujte svoj účet prostredníctvom odkazu zaslaného na vašu e-mailovú adresu.

Zadajte heslo.

Kliknite na tlačidlo **Nastaviť heslo**.


Po vytvorení stačí zadať svoju e-mailovú adresu a heslo a kliknúť na tlačidlo **Prihlásiť sa**.

Zabudli ste svoje heslo? Kliknite na tlačidlo **Obnoviť heslo** a budete mať možnosť vytvoriť si nové.

Viacfaktorové overenie

Ak používate viacfaktorové overenie, príde vám overovací kód na registrované telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Zadajte kód a prihláste sa.

HODNOTENIE S MONITOROVACOU SPRÁVOU

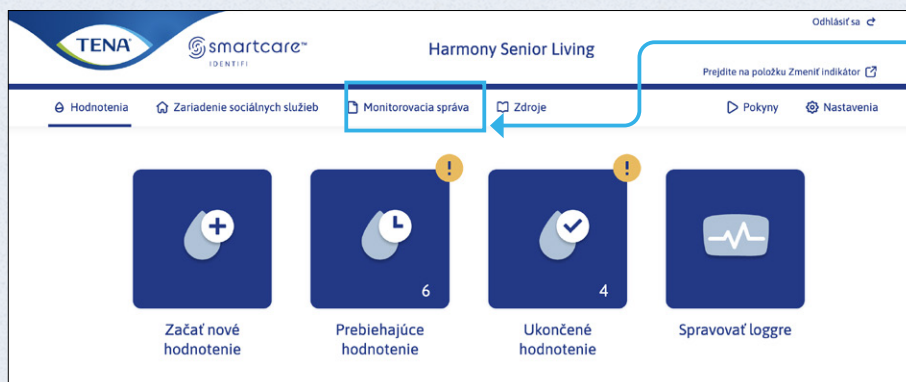

Ak má vaše opatrovateľské zariadenie funkciu monitorovacej správy, táto možnosť sa objaví v ponuke. Monitorovacia správa vám poskytuje dodatočné údaje, ktoré ukazujú hodnotu systému TENA SmartCare Identifi™ porovnaním rutínnej inkontinenčnej starostlivosti príjemcov starostlivosti pred hodnotením a po ňom.*



Tento symbol sa objaví v prípade, že sa stále požaduje úkon na dokončenie hodnotenia, ak je povolená monitorovacia správa.

Prečo používať monitorovaciu správu?

Krok 1



Rutinná inkontinenčná starostlivosť – predtým

Na vytvorenie hodnotenia sa zadávajú všetky informácie o súčasnej rutine príjemcov starostlivosti, ktoré produkty sa používajú, časy a frekvencia výmeny.

Krok 2



Hodnotenie a analýza

Po 72-hodinovom hodnotení môžeme vidieť opravy, ktoré sa vykonali a zaznamenali, a analyzovať údaje zhromaždené systémom TENA SmartCare Identifi™ u príjemcu starostlivosti počas hodnotiaceho obdobia.

Krok 3




Rutinná inkontinenčná starostlivosť – po

Na základe údajov môžete zaviesť novú rutinu, ktorá by mala zefektívniť postup pre sestru aj príjemcu starostlivosti. To často znamená vhodnejší produkt, menej výmen a lepší rozpis výmen. Monitorovacie správy sa uložia a každú správu môžete porovnať s predchádzajúcou.


* Monitorovacia správa je pripojená k prístupu používateľa a správca ju nemôže pridať ani odstrániť.

ZAČAŤ NOVÉ HODNOTENIE

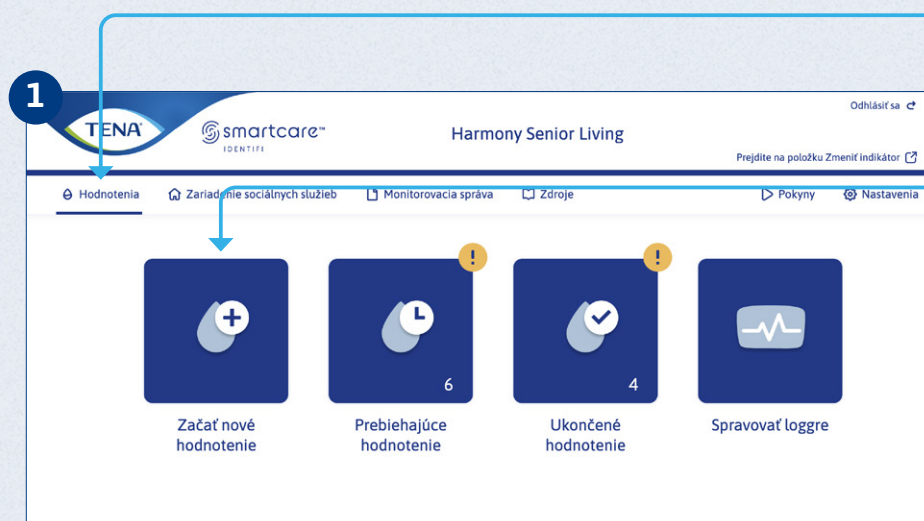

- Najprv v hlavnej ponuke vyberte možnosť **Hodnotenie**
- a následne kliknite na možnosť **Nové hodnotenie**.

Krok 1 je dostupný len v prípade, že má opatrovateľské zariadenie prístup k monitorovacej správe.

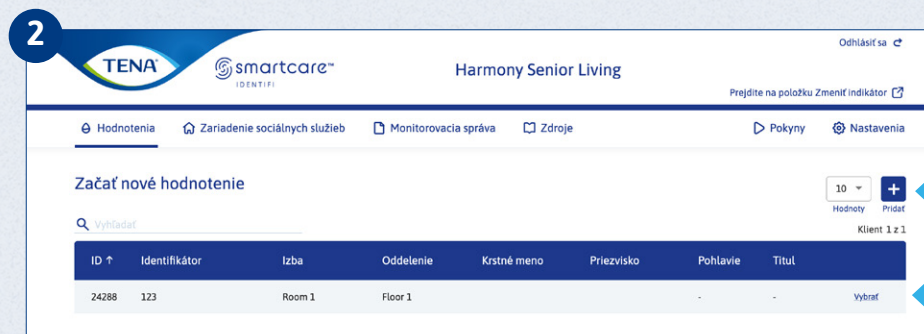


- Ak chcete začať nové hodnotenie, príjemcovia starostlivosti musia byť najprv zaregistrovaní.
- Kliknite na možnosť **Vybrať** u existujúceho príjemcu starostlivosti alebo na možnosť **Pridať**, ak chcete registrovať nového príjemcu starostlivosti.

NOVÉ | PREBIEHAJÚCE | VYTVORIŤ HODNOTIACIU SPRÁVU | ARCHIVOVANÉ HODNOTENIE


└─ Začať nové hodnotenie | Presunúť záznamové zariadenie | Registrovať nového príjemcu starostlivosti | Začať hodnotenie

PRESUNÚŤ ZÁZNAMOVÉ ZARIADENIE

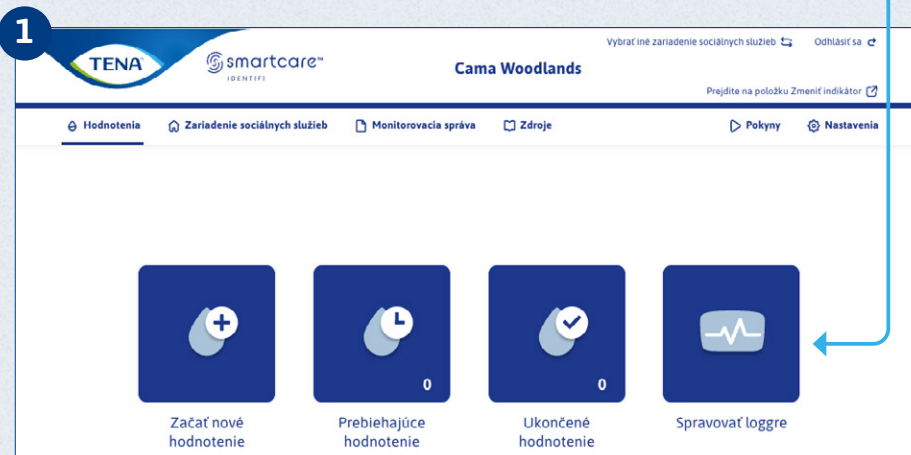

Záznamové zariadenia je možné presúvať medzi opatrovateľskými zariadeniami. Jednoducho vyberte možnosť **Spravovať záznamové zariadenie** a potom budete mať možnosť presunúť zariadenie z jedného opatrovateľského zariadenia na iné tak, aby sa záznamové zariadenie zaregistrovalo na správnom mieste. **Poznámka: Iba správca môže presúvať záznamové zariadenie medzi zariadeniami, ku ktorým má prístup v rámci tej istej skupiny.**

Kliknite na možnosť **Presúvací šípka** vedľa záznamového zariadenia, ak chcete uskutočniť presun, a potom vyberte nové zariadenie z rozbaľovacieho zoznamu v dialógovom okne.

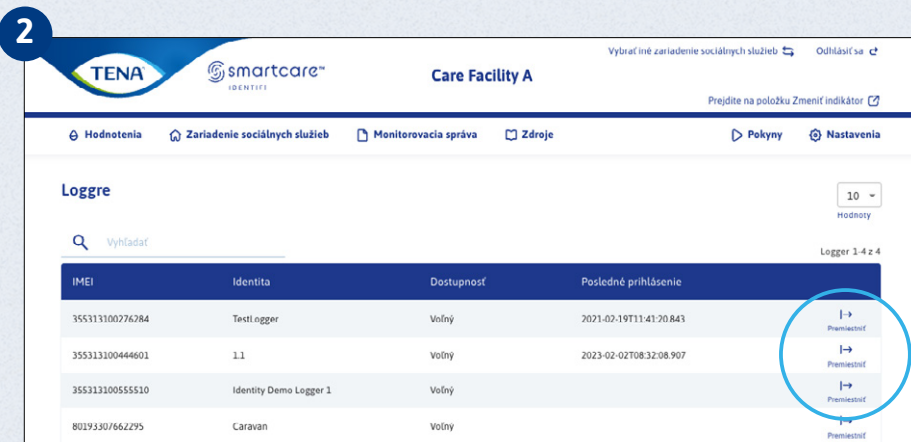

3

Premiestnite záznamník do iného zariadenia sociálnej starostlivosti

IMEI * Povinné polia

355313100444601

Priradené zariadenie sociálnej starostlivosti *

Country

Pred odoslaním záznamníka do iného zariadenia sociálnej starostlivosti sa uistite, že je správne **vyčistený**.

Pokyny na čistenie nájdete v časti so zdrojmi informácií.

Zrušiť

Premiestniť

← Späť
→ Ďalej
Obsah

TENA SmartCare Identifi™

8

NOVÉ | PREBIEHAJÚCE | VYTVORIŤ HODNOTIACU SPRÁVU | ARCHIVOVANÉ HODNOTENIE

└─ Začať nové hodnotenie | Presunúť záznamové zariadenie | Registrovať nového príjemcu starostlivosti | Začať hodnotenie





REGISTRÁCIA NOVÉHO PRÍJEMCU STAROSTLIVOSTI



Najprv v hlavnej ponuke vyberte možnosť **Opatrovateľské zariadenie** a potom možnosť **Nové hodnotenie**.

Ak chcete vytvoriť nového príjemcu starostlivosti, kliknite na možnosť **Pridať**.

Vyplňte všetky povinné polia. **Identifikátor** je kódové meno príjemcu starostlivosti.

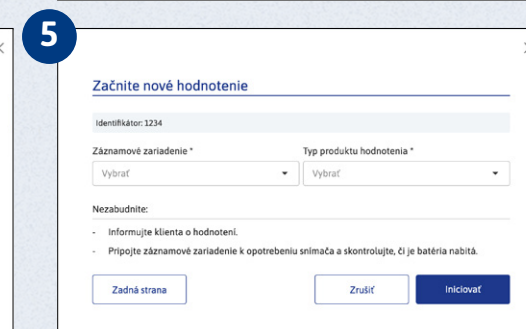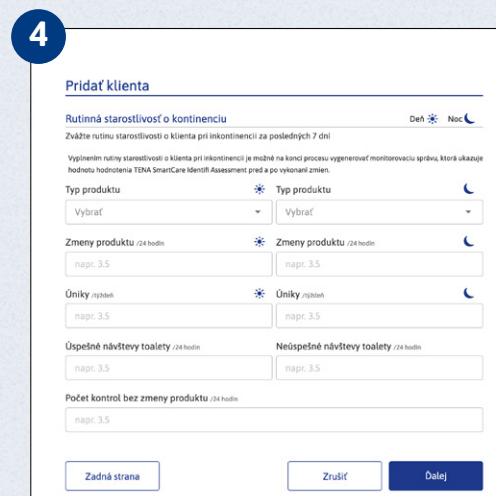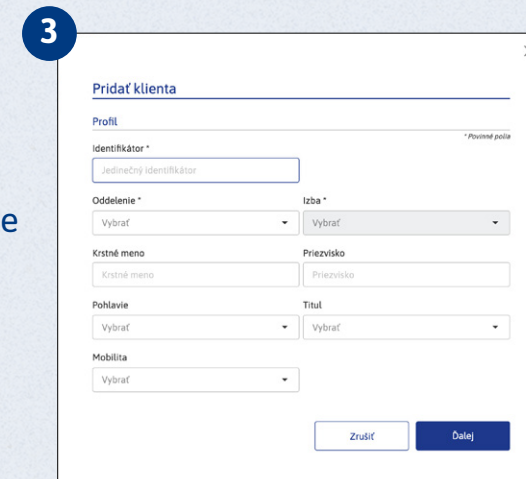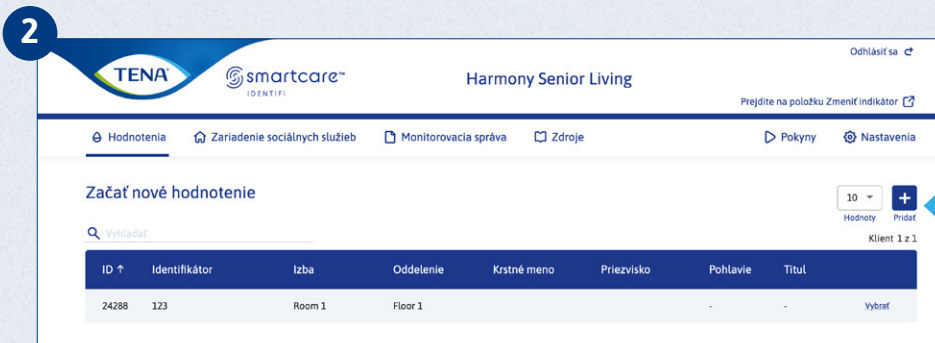

NOVÉ | PREBIEHAJÚCE | VYTVORIŤ HODNOTIACU SPRÁVU | ARCHIVOVANÉ HODNOTENIE

└─ Začať nové hodnotenie | Presunúť záznamové zariadenie | Registrovať nového príjemcu starostlivosti | **Začať hodnotenie**

ZAČAŤ HODNOTENIE



1

Najprv v hlavnej ponuke vyberte možnosť **Hodnotenie**.

Kliknite na možnosť **Vybrať** vedľa príjemcu starostlivosti, u ktorého chcete začať hodnotenie.

2

V dialógovom okne New Assessment (Nové hodnotenie) vyplňte podrobnosti príjemcov starostlivosti pre krok 1* a krok 2. Následne kliknite na možnosť **Spustiť**, aby ste začali hodnotenie.

Hodnotenie začalo

Hodnotenie sa teraz začalo.

3

* Dostupné len pre opatrovateľské zariadenia s prístupom k monitorovacej správe.

MANUÁLNE ZADANÉ UDALOSTI



Čo sú to manuálne zadané udalosti?

Manuálne zadané udalosti sú udalosti, ktoré záznamové zariadenie nezachytilo, ako sú úniky, fekálna inkontinencia alebo toaleta. Tieto je potrebné manuálne pridať počas 72-hodinového hodnotenia.

1

Správa manuálne zadaných udalostí

Stlačte tlačidlo **Manuálne zadané udalosti** a pridajte manuálne zadané udalosti.

Vyberte možnosť **Dátum** a **Čas** pre danú udalosť.


Zvoľte **udalosti zo zoznamu**. Môžete vybrať viac udalostí naraz. Kliknite na možnosť **Pridať do zoznamu**.

Keď zadáte všetky udalosti, kliknite na možnosť **Uložiť**.

NOVÉ | PREBIEHAJÚCE | VYTVORIŤ HODNOTIACIU SPRÁVU | ARCHIVOVANÉ HODNOTENIE

└─ Manuálne zadanie udalosti | **Prezerať** | Zastaviť | Dokončiť

PREZERAŤ PREBIEHAJÚCE HODNOTENIE

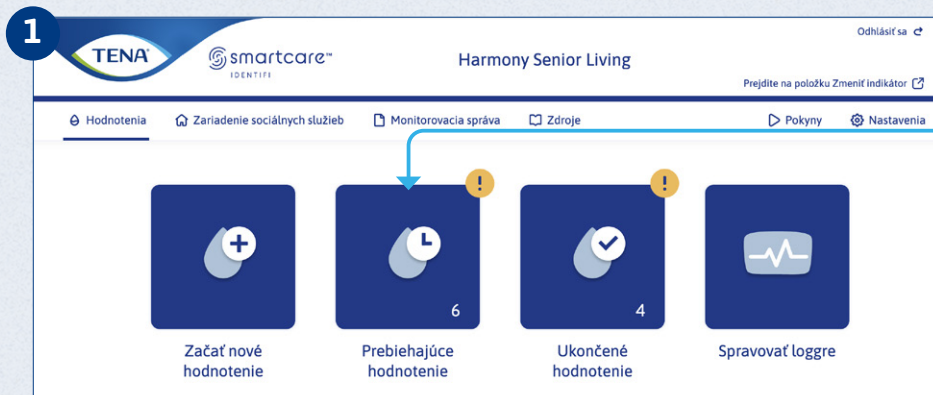


Počas 72 hodín môžete prezerať správu hodnotenia TENA SmartCare Identifi™.


Kliknite na možnosť **Prebiehajúce hodnotenie**.

Kliknite na možnosť **Prezerať údaje**.

Správa sa otvorí v rovnakom okne. Správu môžete tiež stiahnuť vo formáte PDF.

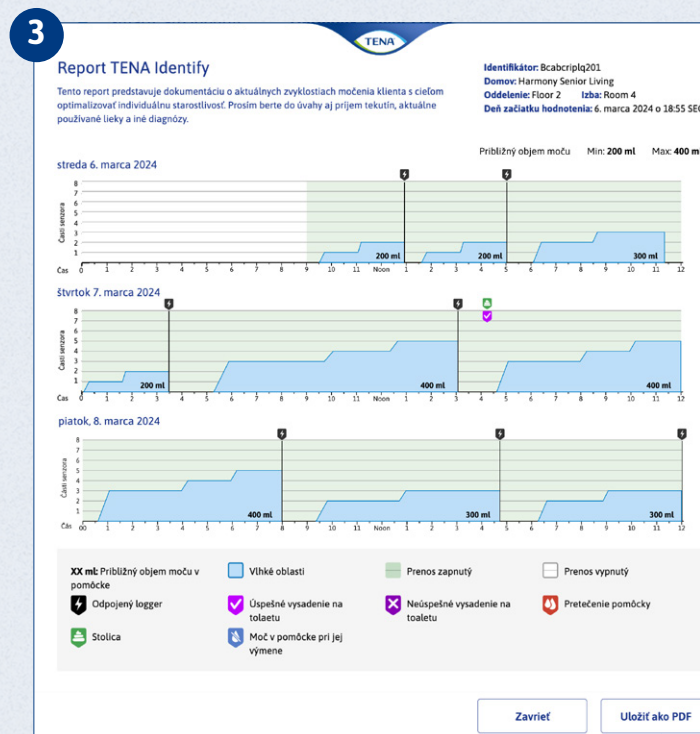


ZASTAVIŤ HODNOTENIE

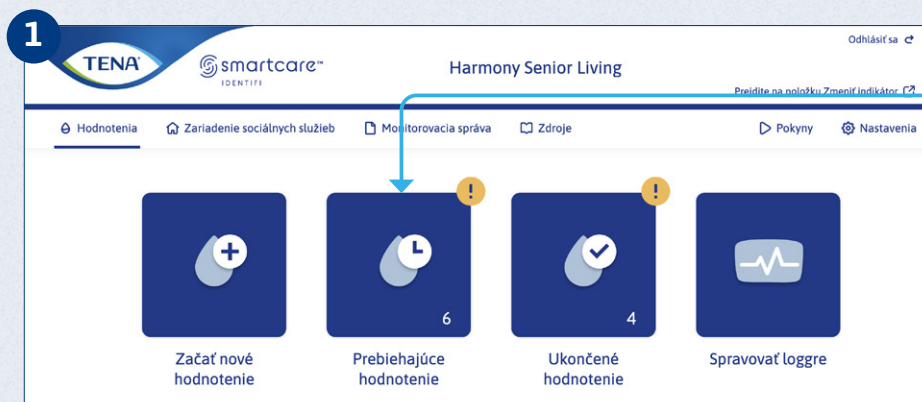


Kliknite na možnosť **Prebiehajúce hodnotenia**.

Po 72 hodinách zastavte hodnotenie.

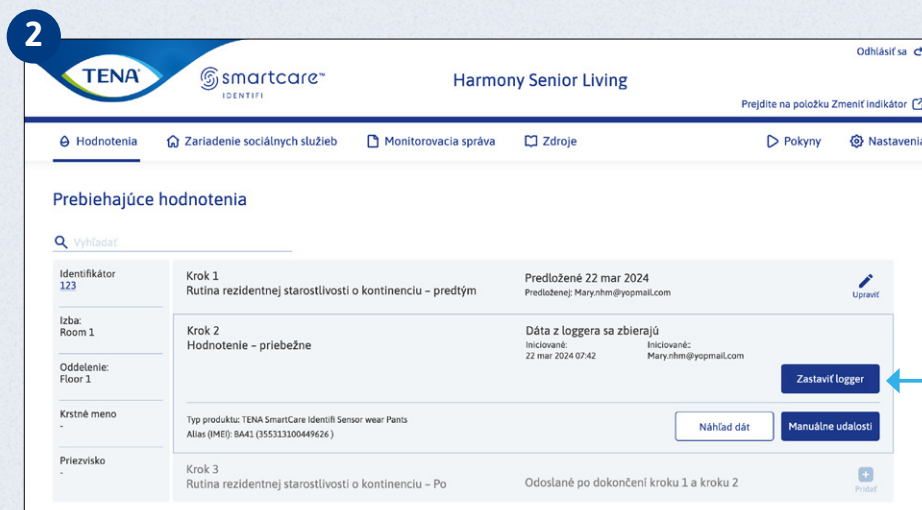

Pre vybrané hodnotenie kliknite na možnosť **Zastaviť záznamové zariadenie**.

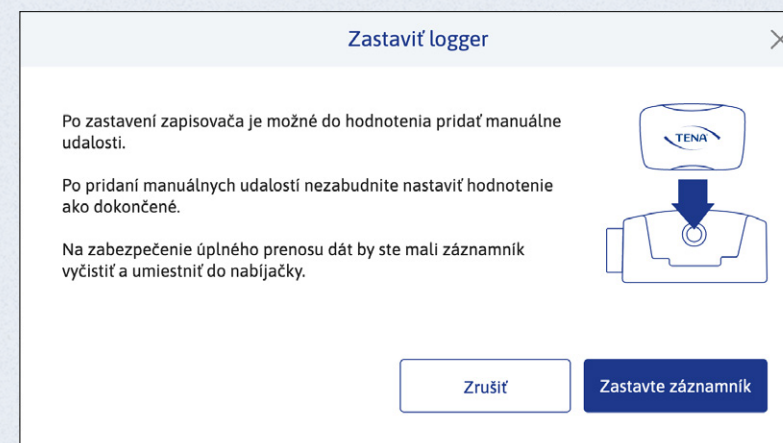

Pred kliknutím na možnosť **Zastaviť záznamové zariadenie** vo vyskakovacom okne záznamové zariadenie vyčistite a vráťte do nabíjačky, aby ste zaistili, že sa prenesú všetky údaje.

Na dokončenie hodnotenia postupujte podľa krokov na strane 13.

DOKONČIŤ HODNOTENIE



1

Nastaviť ako dokončené

Kliknite na možnosť **Nastaviť ako dokončené**, aby ste presunuli dokončené hodnotenie z kategórie **Prebiehajúce hodnotenia** do kategórie **Dokončené hodnotenia**.

Robí sa to na účel oddelenia hodnotení, ktoré prebiehajú, od tých, ktoré sú dokončené.

Kliknite na možnosť **Nastaviť ako dokončené**.

2

Dokončenie hodnotenia

Keď je hodnotenie nastavené ako dokončené, už nemôžete upravovať informácie o bývalej rutinnej starostlivosti o klienta pri inkontinencii.

Hodnotenie sa presunie do časti Dokončené hodnotenia. Udalosti môžete do hodnotenia pridať aj manuálne.

Táto akcia sa nedá vrátiť späť.

Zrušiť Súprava dokončená




Ak hodnotenie nenastavíte ako dokončené, dokončí sa automaticky po 15 dňoch.


VYTVORENIE HODNOTIACEJ SPRÁVY



Kliknite na možnosť **Dokončené hodnotenia**.

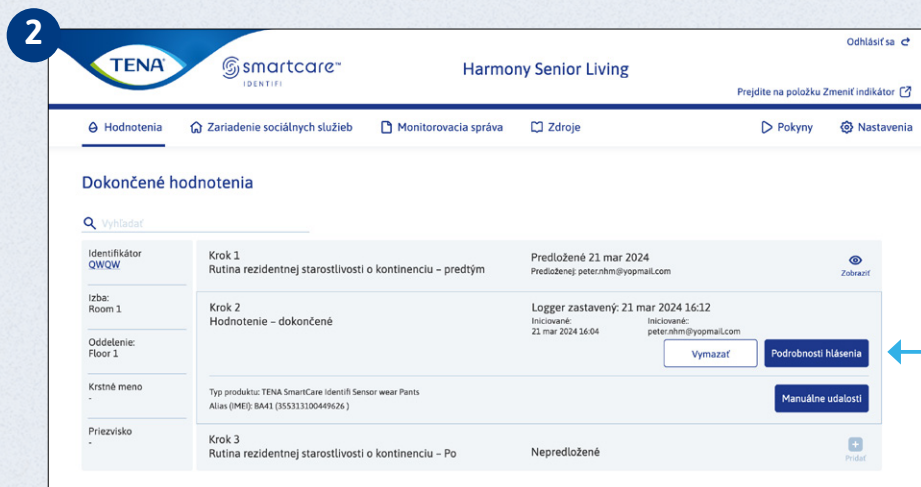


Kliknite na možnosť **Podrobnosti správy** pre požadované hodnotenie.
Vytvorenie správy o ukončenom hodnotení

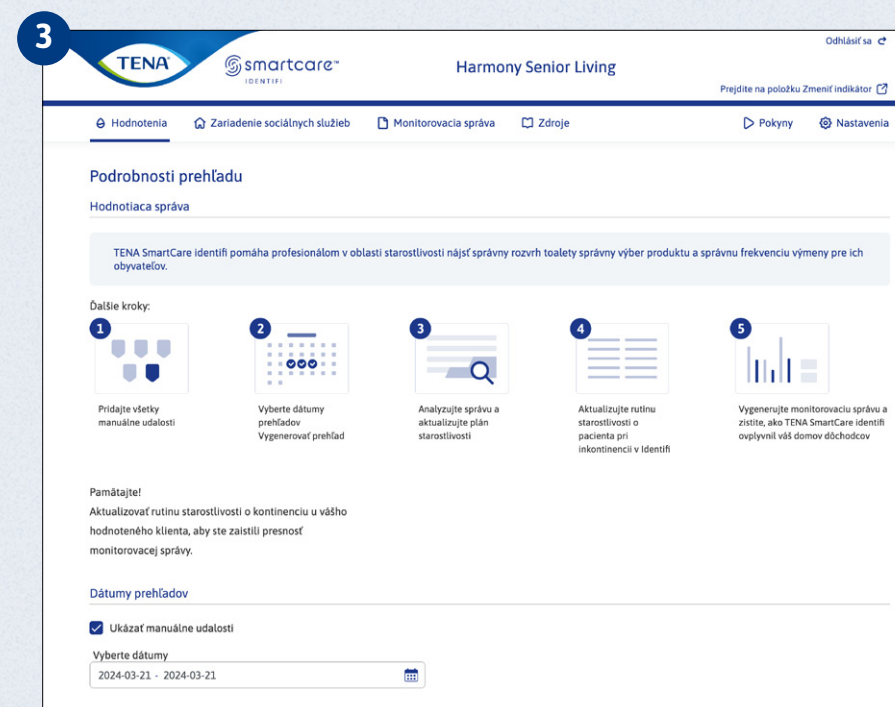

Zadajte požadované **Dátumy**. Predvolene sa zobrazujú dátumy posledného hodnotenia. Kliknite na možnosť **Vytvoriť správu**.

VYTVORENIE HODNOTIACEJ SPRÁVY

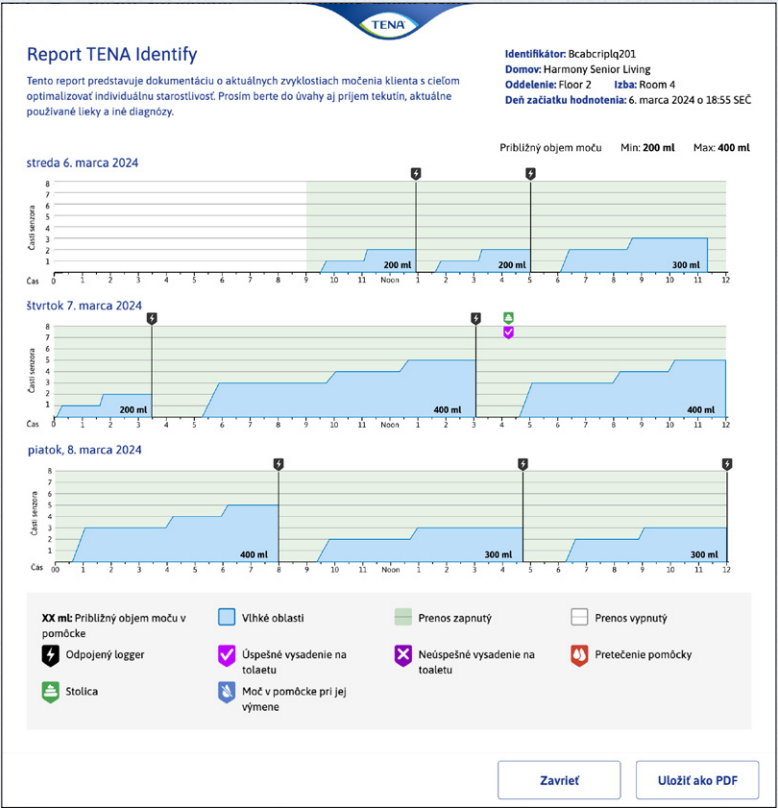

Správa o hodnotení poskytuje prehľad vzorca vyprázdňovania a objemu po hodine za obdobie 72 hodín. Údaje zozbierané záznamovým zariadením sú prezentované v grafickej podobe, ktorá ukazuje vzorec naplňania produktu močom.

Príručku „ako interpretovať správu“ nájdete v časti zdrojov v aplikácii.

Prípravte osobno prilagojen načrt oskrbe

Osebnu prilagojen načrt naj vključuje:

- Posamezniku prilagojen urinik za obisk stranišča z namenom določanja ustreznih časov menjav izdekov in obiskov stranišča ter preprečevanje motenj ponoči
- Osebnu prilagojen urinik preoblačila
- Pravi izdelek za obvladovanje inkontinence – ustrezna vrsta, vpojnost in velikost

To je osnova za doseganje ciljev:

- Cilj 1 - Pošlite ustrezen čas za obisk stranišča
- Cilj 2 - Daljša obdobja nemotenega spanca ponoči
- Cilj 3 - Izkanje najbolj ustreznega izdelka za stanovanje

Med pripravo načrta skrbí za kontinenco upoštevajte tudi druge okolišne stanovalca, kot so zdravila, stanje kože, mobilnost, osebne navade in obvladovanje črevesja.

Cilj 1 - Pošlite ustrezen čas za obisk stranišča

Cilj 2 - Daljša obdobja nemotenega spanca ponoči

Cilj 3 - Izkanje najbolj ustreznega izdelka za stanovanje

Kaj sledi?

Sporočite prednosti

Učinkovita komunikacija in sodelovanje med stanovlci, njihovimi družinami in osebje zagotavlja varnost in ustreznost nega stanovlca.

Prilagite poročilo

Poročilo prilagajate negovalcem in razložite, zakaj so novi postopki ustrezni za stanovalca.

Načrtujte naknadno srečanje

Interpretacija izdelka

Osebnu prilagojen načrt oskrbe inkontinence

Kaj je treba upoštevati

Odgovor

Kako pogosto in kdaj oseba urinira glede na zabeleženo?

Koliko urina je izdelek vpił med menjavo?

Katere vzorce menjav opazite v zadnjih treh dneh?

Vnos v načrt oskrbe

Odgovor

Ali morate v povezavi z meho upoštevati le kaj posebnega (zdravila, navade in vedenje)?

Kateri časi so najprimernejši za obiske stranišča?

Kdaj je najbolje izvesti druge menjave izdelkov za ohranitev ustreznega dnevnega ritma?

Kdaj uporabiti nočne izdelke?

Kdaj naj bo zadnji obisk stranišča?

Kakšna vrsta zaščite je primerna?

Kakšna vpojnost je potrebna podnevi/ponoči?

Dan:

Noč:

Dan:

Noč:

essity

TENA

blagovna znamka družbe Essity

Každá správa obsahuje časť, do ktorej môžete vložiť informácie zbierané v správe, aby ste zlepšili plán starostlivosti pre príjemcu starostlivosti. Napríklad: stanovenie správnych časov na návštevu toalety, najvhodnejšej inkontinenčnej pomôcky a vytvorenie dlhších období nerušeného spánku. Môžete si stiahnuť upravitelnú verziu, ktorá umožňuje pridávať alebo upravovať poznámky k správe.

← Späť

→ Ďalej

Obsah →


TENA SmartCare Identifi™

16


UKONČENÉ HODNOTENIA (KROK 3*)



Po analýze hodnotenia pridajte rutinnú inkontinenčnú starostlivosť „po hodnotení“.

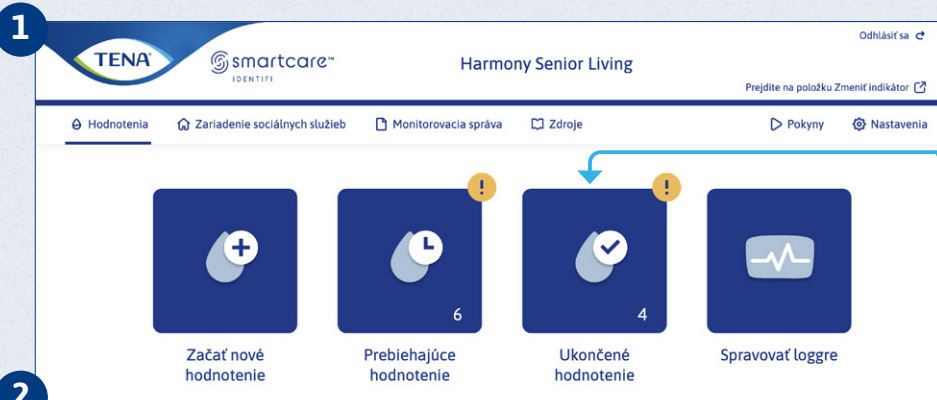

Vyberte z ponuky možnosť **Ukončené hodnotenia**.

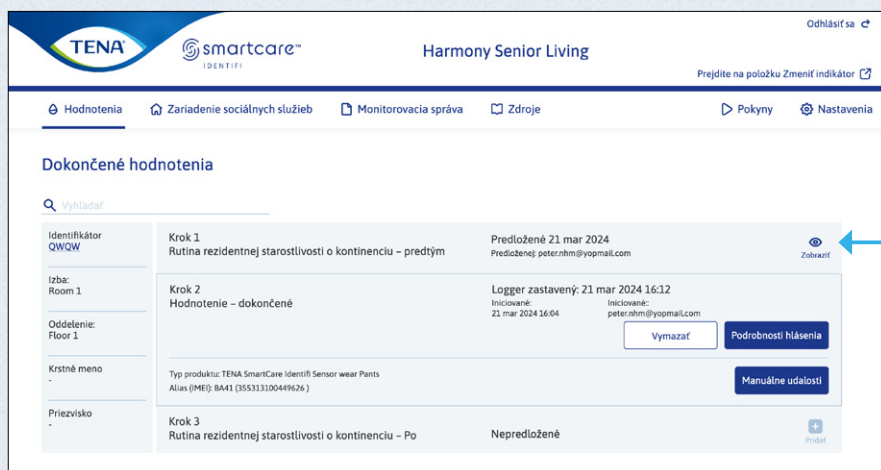

Kliknite sem, aby ste pridali k hodnoteniu inkontinenčnú rutinnú starostlivosť.

3

Rutinná starostlivosť o kontinenciu Deň ☀️ Noc 🌙

Zvážte rutinu starostlivosti o klienta pri inkontinencii za posledných 7 dní

Vypinením rutiny starostlivosti o klienta pri inkontinencii je možné na konci procesu vygenerovať monitorovaciu správu, ktorá ukazuje hodnotu hodnotenia TENA SmartCare Identifi Assessment pred a po vykonaní zmien.

Typ produktu ☀️ 🌙

TENA Comfort Original Super ▼ TENA Comfort Original Plus ▼

Zmeny produktu /24 hodín ☀️ 🌙

napr. 3.5 ▼ napr. 3.5 ▼

Úniky /výdeň ☀️ 🌙

napr. 3.5 ▼ napr. 3.5 ▼

Úspešné návštevy toalety /24 hodín ☀️ 🌙

napr. 3.5 ▼ napr. 3.5 ▼

Neúspešné návštevy toalety /24 hodín

Počet kontrol bez zmeny produktu /24 hodín

napr. 3.5 ▼


OK

Pridajte podrobnosti rutinnej inkontinenčnej starostlivosti a odpovedzte na otázky prieskumu, následne kliknite na možnosť **Odoslať**.

To môžete urobiť tiež v časti **Správa príjemcov starostlivosti** – pozrite si stranu 24.

*To sa uplatní len pre osoby s prístupom k monitorovacej správe.

ARCHIVOVANÉ HODNOTENIA


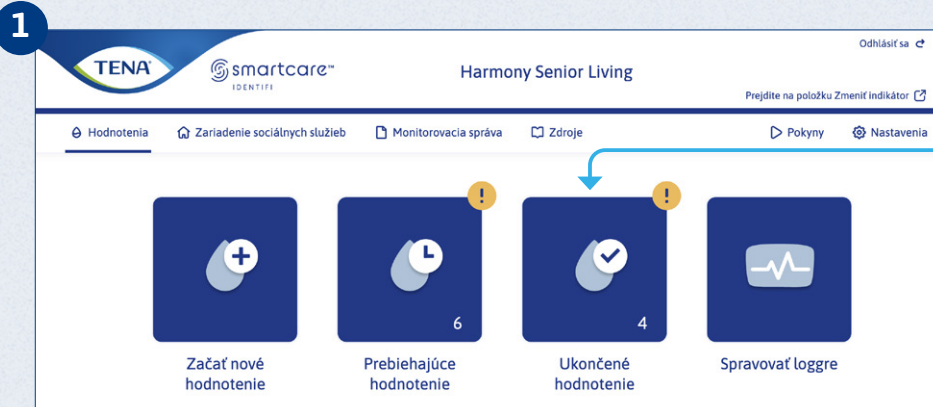


Hodnotenia staršie ako 90 dní sa uložia do časti **Archivované hodnotenia**.

Kliknite na možnosť **Dokončené hodnotenia**.


Rolujte nadol až do spodnej časti stránky Completed Assessments (Dokončené hodnotenia).

Kliknite na možnosť **Archivované hodnotenia**.

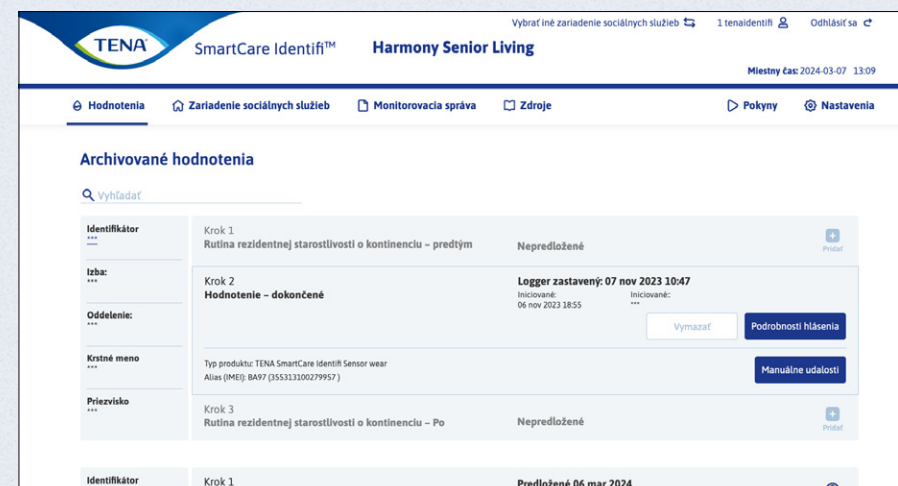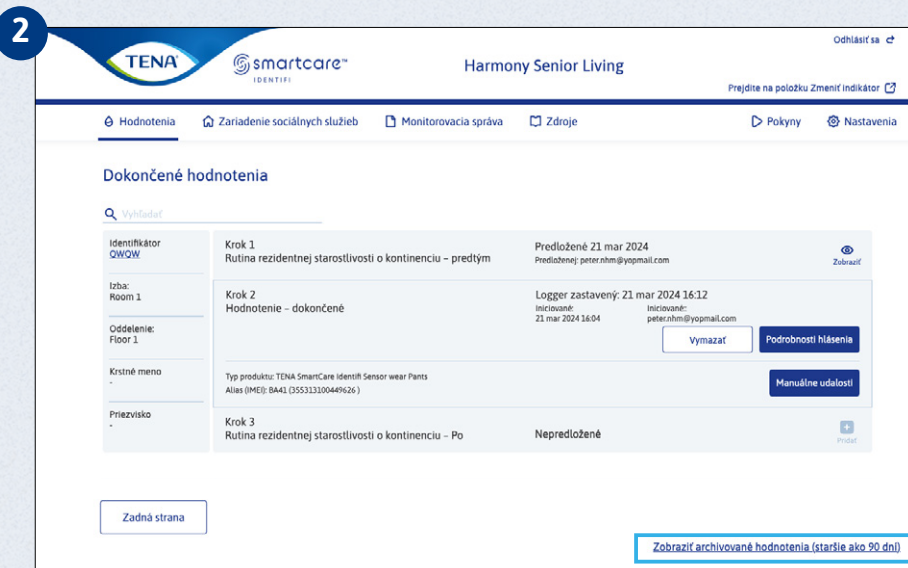


Zobrazí sa zoznam archivovaných hodnotení. Na zobrazenie hlásenia kliknite na možnosť **Podrobnosti správy**.


VYTVORENIE MONITOROVACEJ SPRÁVY

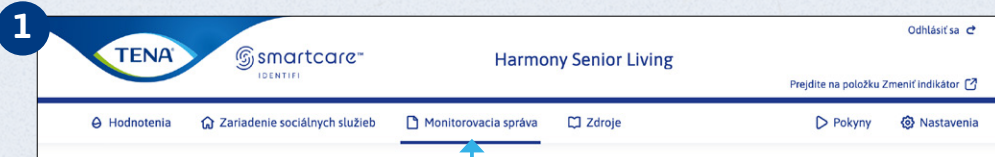

1 Vyberte z ponuky možnosť **Monitorovacia správa**.

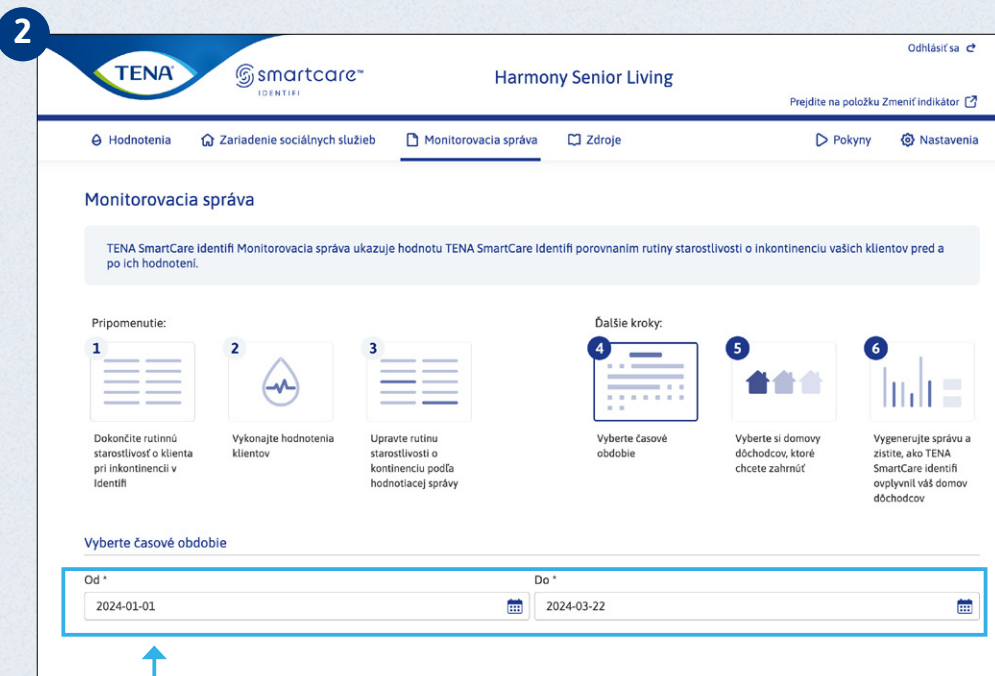

2 Vyberte dátumy, ktoré chcete zobraziť.

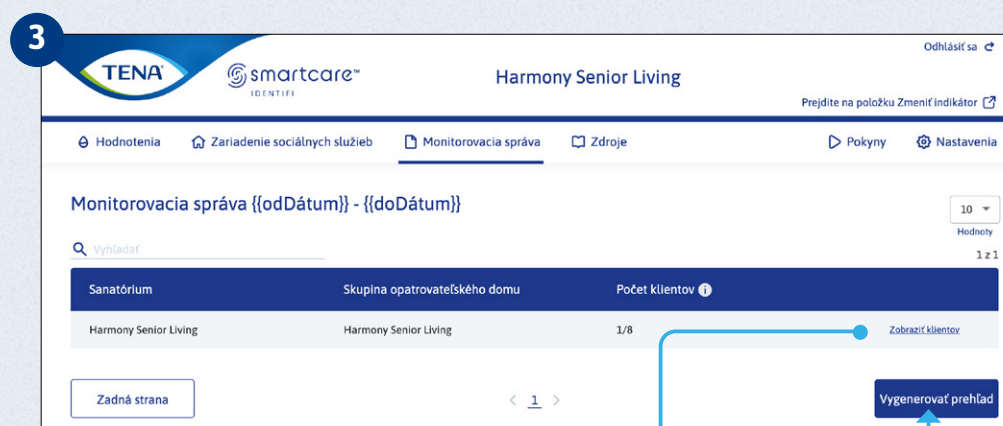

3 Ak chcete vytvoriť správu na stiahnutie, kliknite na možnosť **Vytvoriť správu**.



Možnosť **Zobraziť príjemcov starostlivosti** ukáže, ktorí príjemcovia starostlivosti budú zahrnutí do správy.



ČO SPRÁVA OBSAHUJE?




Bontouch Test Facility
Hodnotenia za 1 klienta vykonané 7.1.2026 – 7.1.2026

Výsledok 1
Čas opatrovania 2-3
Produkty 4-5
Návštevy toalety 6
Únik 7-8
Celkové náklady 9-10
Vplyv CO₂ 11
Kľúčové poznatky 12
Príloha 13-14

Monitorovacia správa

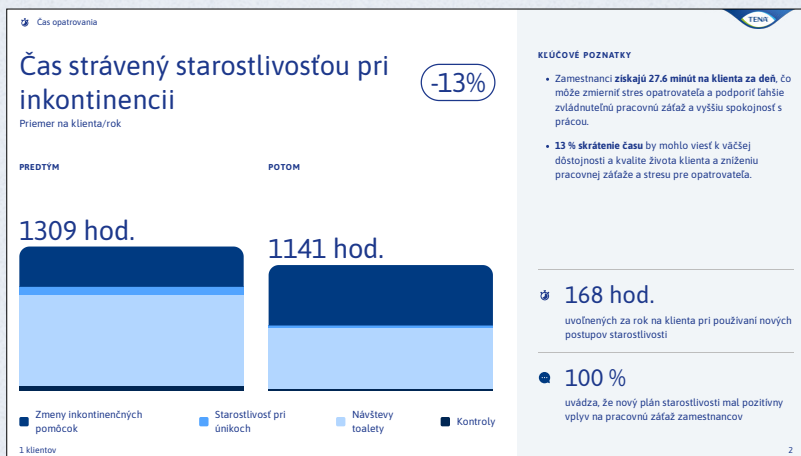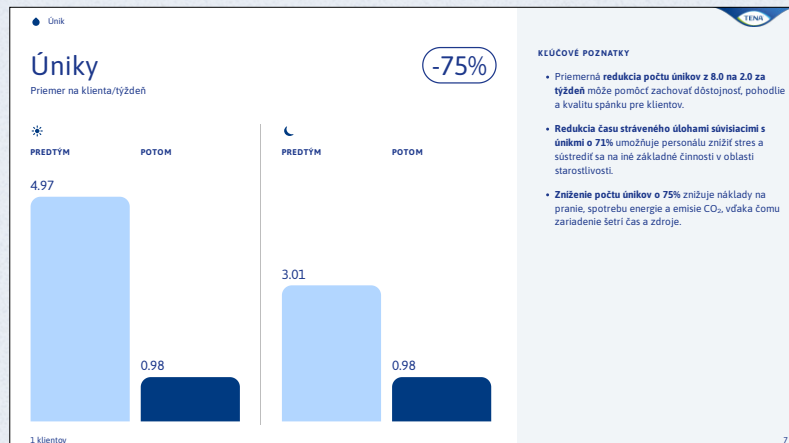

Správa sa vytvára na základe výsledkov porovnania rutínnej inkontinenčnej starostlivosti pred hodnotením a po ňom a je dostupná vo formáte PDF (pokyn na tlačenie súboru PDF nájdete nižšie).


Správa má niekoľko strán so zozbieranými údajmi a umožňuje vám zmerať výkon produktu vo vzťahu k rutínnej inkontinenčnej starostlivosti, k iným osobám v opatrovateľskom zariadení, k použitým produktom a vplyvu na životné prostredie.

Tlačenie správy


Upozorňujeme, že pri tlačením môže byť potrebné upraviť 2 nastavenia. Kliknite na možnosť **uložiť ako PDF** a tiež možnosť **zahrnúť grafiku na pozadí**, aby ste zobrazili správu kompletne.

PRIDAŤ NOVÝ ÚČET

LEN PRE SPRÁVCU

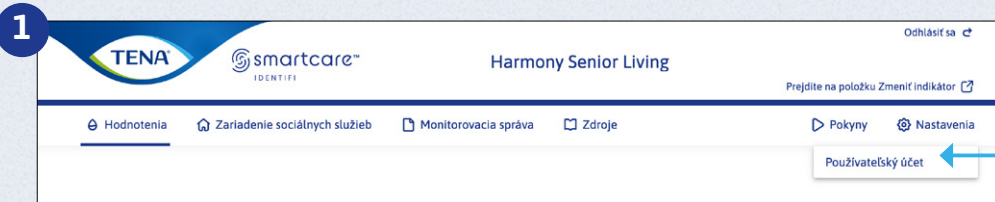

Kliknite na možnosť **Nastavenia**, následne na možnosť **Používateľské účty**.

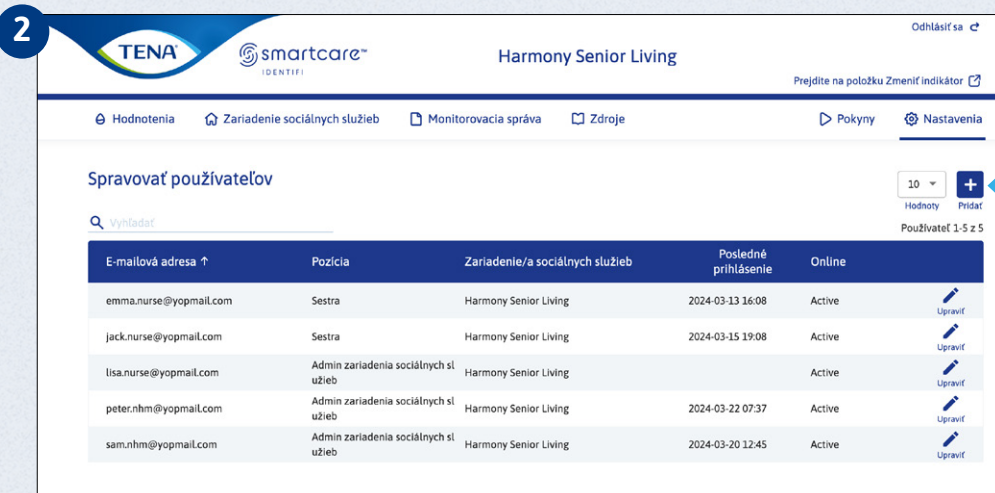


Kliknite na možnosť **Pridať**.

Vyplňte polia a kliknite na možnosť **Odoslať**, aby ste vytvorili nový používateľský účet.


Prístup k monitorovacej správe môže udeliť alebo odobrať správca.

Ak máte dvojfaktorové prihlásenie, môžete overiť svoje prihlásenie pomocou e-mailu alebo telefónu v závislosti od toho, ktoré informácie ste zadali.


UPRAVIŤ ALEBO ODSTRÁNIŤ POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

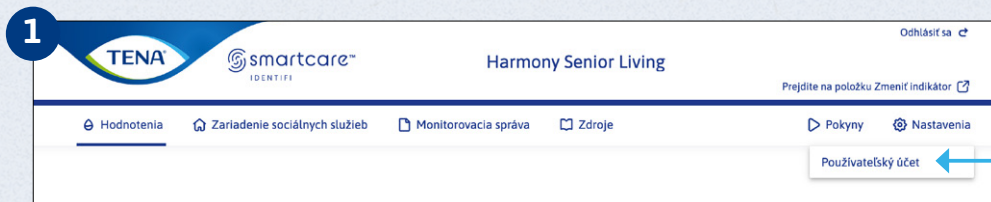

Kliknite na možnosť **Nastavenia**, následne na možnosť **Používateľské účty**.



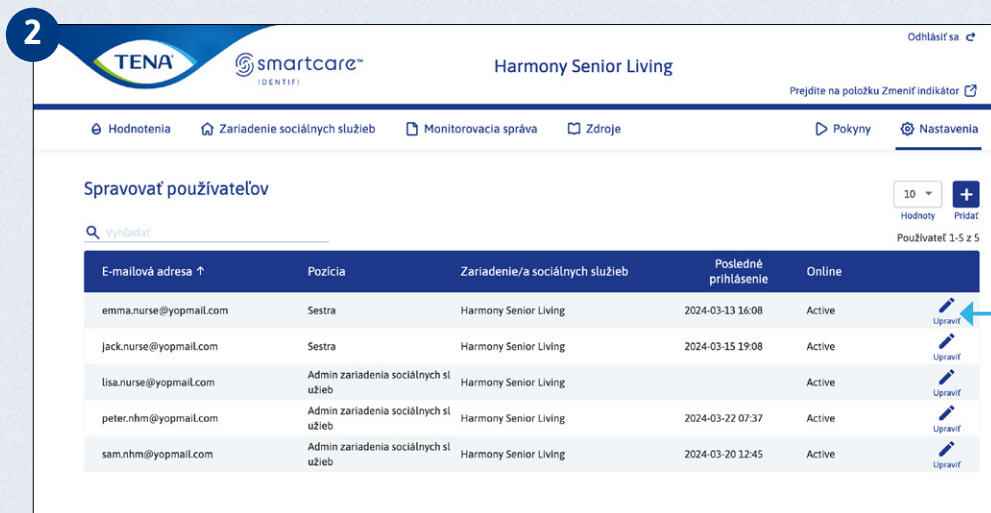


Kliknite na používateľské meno, ktoré chcete upraviť. Potom upravte podrobnosti a kliknite na možnosť **Odoslať**.

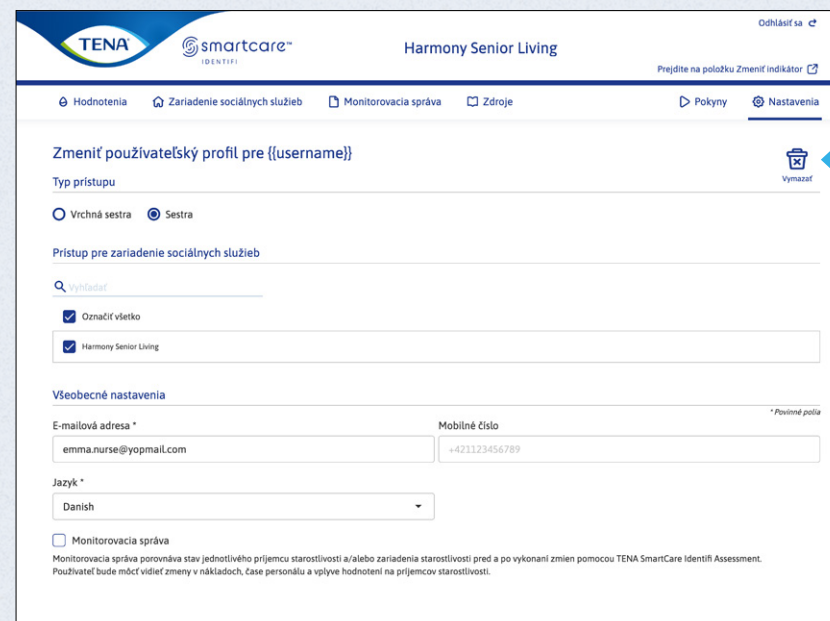

Ak chcete **Odstrániť** účet, kliknite na ikonu v hornej časti strany.

SPRAVOVAŤ ODDELENIA

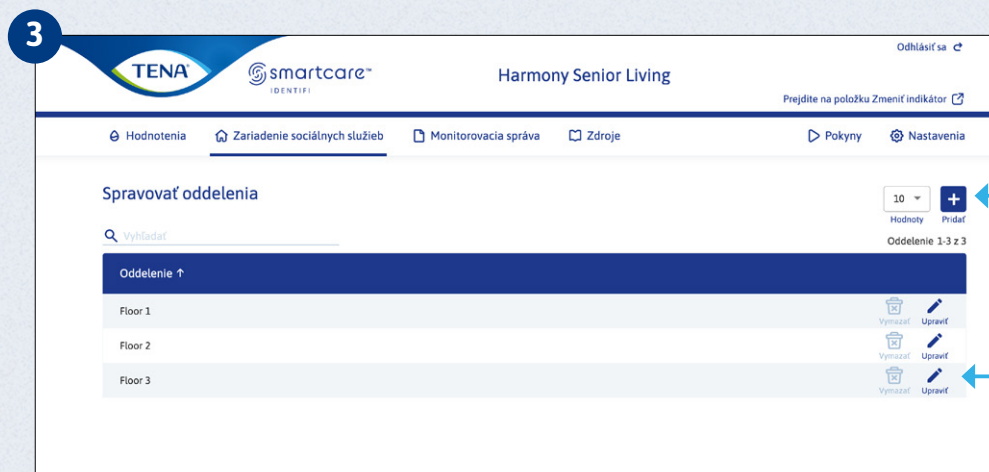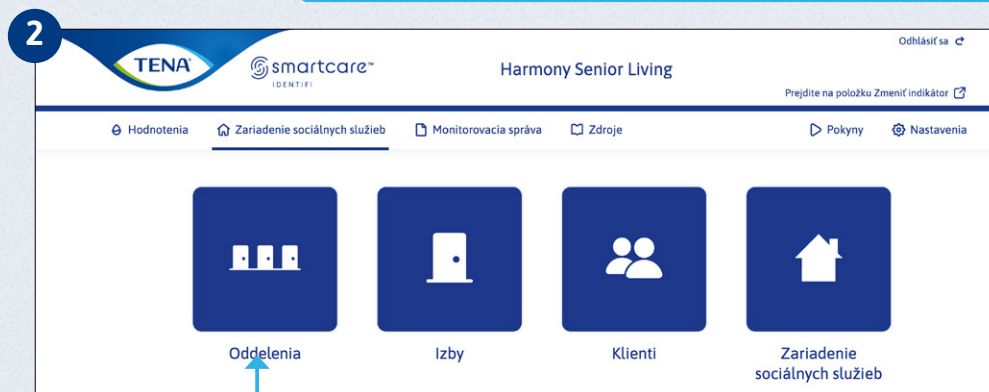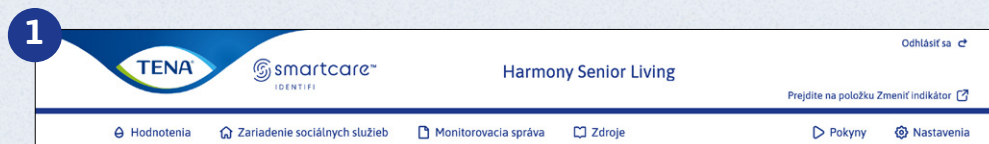

Kliknite na možnosť **Opatrovateľské zariadenie**.

Kliknite na možnosť **Oddelenia**.

Ak chcete vytvoriť nové oddelenie, kliknite na možnosť **Pridať**.

Alebo kliknite na možnosť **Upraviť** vedľa oddelenia, ku ktorému chcete niečo doplniť.

Pridať oddelenie

Oddelenie *

Názov oddelenia

Zrušiť Pridať




Upraviť oddelenie

Oddelenie *

Floor 1

Zrušiť Uložiť

SPRAVOVAŤ IZBY

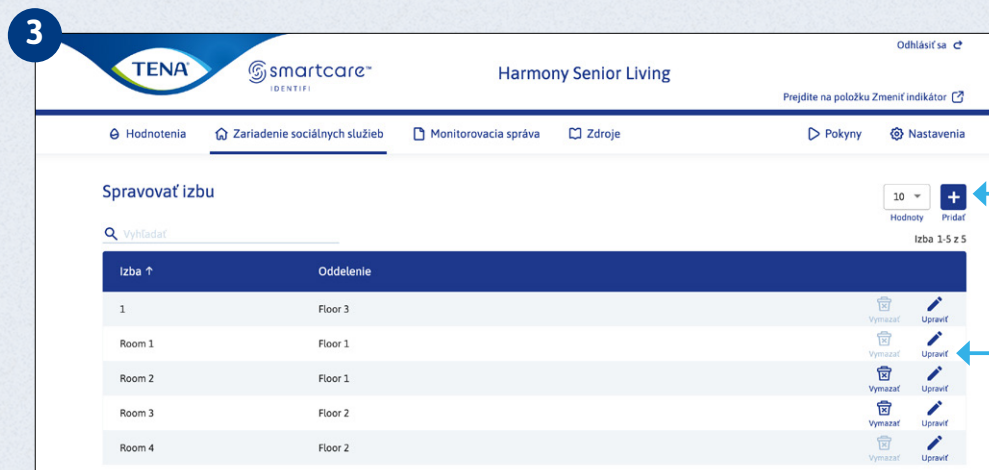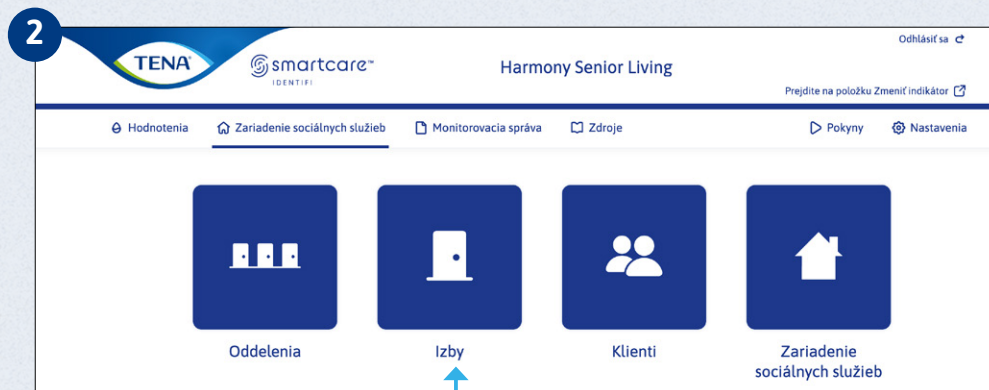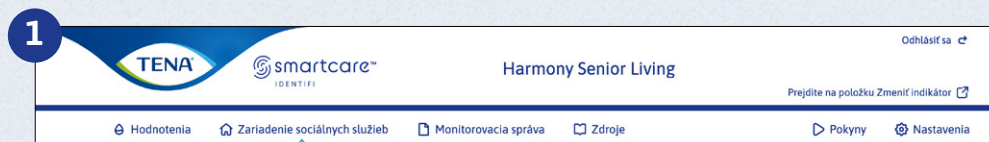

Kliknite na možnosť **Opatrovateľské zariadenie**).

Kliknite na možnosť **Izby**.

Ak chcete vytvoriť novú izbu, kliknite na možnosť **Pridať**. Pomenujte ju a priradte ju na existujúce oddelenie.

Alebo kliknite na možnosť **Upraviť** vedľa izby, ku ktorej chcete niečo doplniť.

Pridať izbu

Izba *

Názov miestnosti

Názov oddelenia *

Vybrať

Zrušiť Pridať

Upraviť izbu

V tejto miestnosti sú klienti.

Izba *



1

Názov oddelenia *

Floor 3

Zrušiť Uložiť

SPRÁVA PRÍJEMCOV STAROSTLIVOSTI

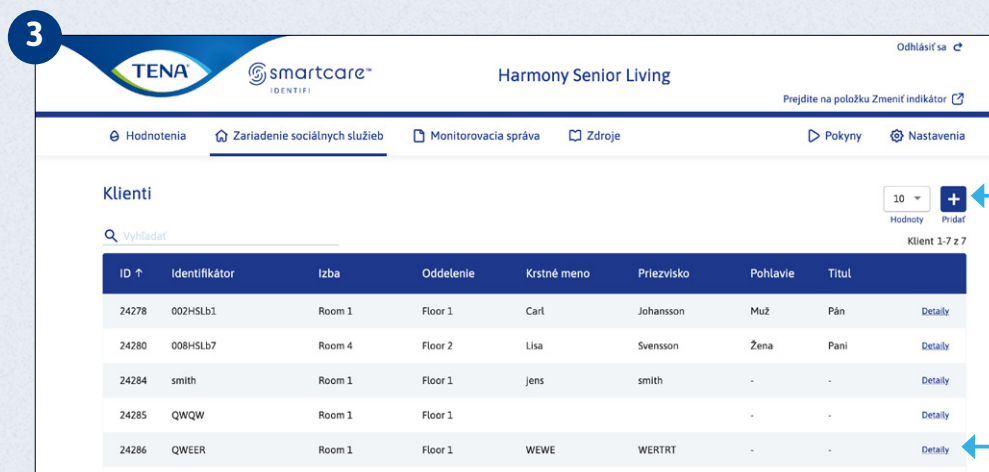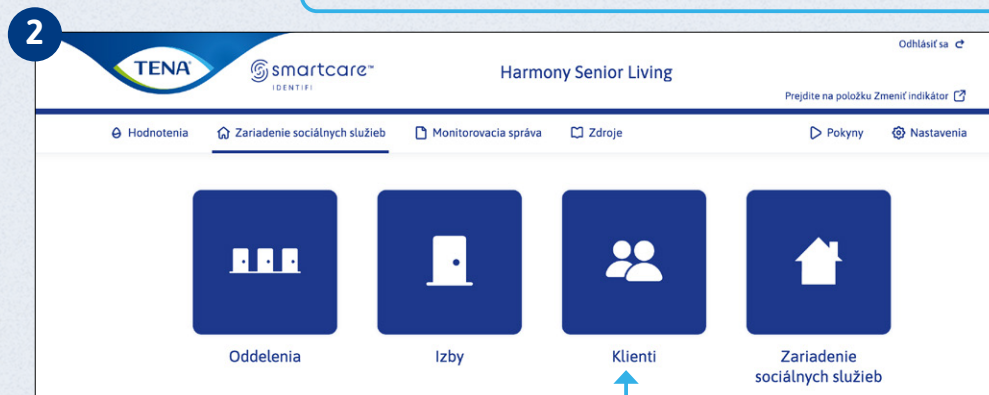


Kliknite na možnosť
**Opatrovateľské
zariadenie.**

Kliknite na možnosť
**Príjemcovia
starostlivosti.**

Ak chcete vytvoriť
nového príjemcu
starostlivosti, kliknite na
možnosť **Pridať**. Pomenujte
ho a priradte ho na
existujúce oddelenie.



Alebo kliknite na možnosť
Detaily vedľa príjemcu
starostlivosti, ku ktorému
chcete niečo doplniť.

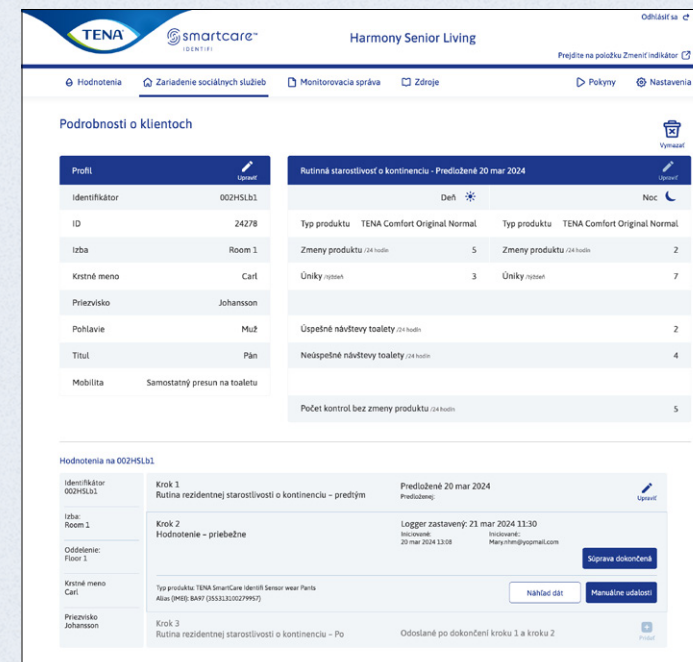

Poznámka: Podrobnosti
o príjemcoch starostlivosti vždy
zobrazujú poslednú odoslanú
rutinnú inkontinenčnú
starostlivosť, pokiaľ má
opatrovateľské zariadenie
prístup k monitorovacej správe.

SPRÁVA OPATROVATEĽSKÉHO ZARIADENIA

LEN PRE SPRÁVCU

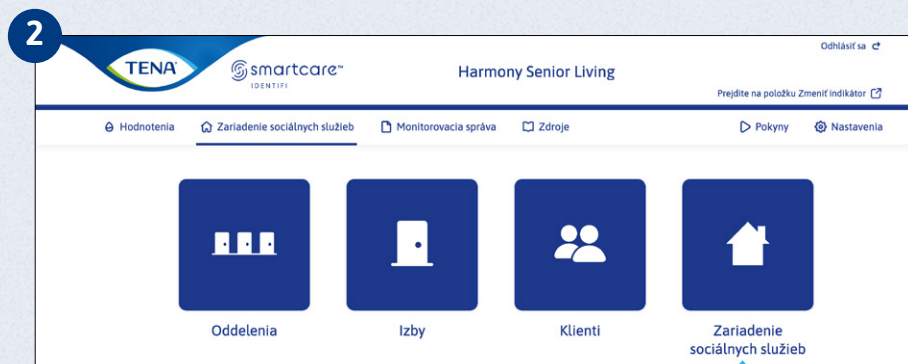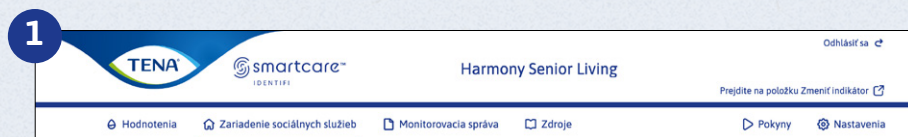

Kliknite na ikonu **Opatrovateľské zariadenie**.

Môžete aktualizovať nastavenia pre údaje o príjemcoch starostlivosti a opatrovateľské zariadenie.

Kliknite na možnosť **Opatrovateľské zariadenie**.

! Získať súhlas
Políčko môžete zaškrtnúť, aby ste aktivovali pripomienku na získanie súhlasu od príjemcu starostlivosti, než začnete s hodnotením.

! Viacfaktorové overovanie To
vyžaduje, aby používatelia mali vo svojom profile zaregistrované číslo mobilného telefónu.

Kliknite na možnosť **Uložiť** v spodnej časti strany.

Spravovať zariadenie sociálnych služieb Harmony Senior Living

Nastavenia opatrovateľského domu

Zariadenia sociálnych služieb * Meno kontaktnej osoby

E-mailová adresa Telefónne číslo na pevnú linku

Mobilné číslo Cieľ

Nastavenia ochrany osobných údajov

☐ Získať súhlas
Táto funkcia pripomienku potrebu získania súhlasu klienta pred začatím hodnotenia.

☐ Dvojfaktorové overenie identity
Dvojfaktorové overenie vyžaduje od používateľa, aby mal vo svojom profile uvedené telefónne číslo, na ktoré mu bude odoslaná sms správa s cieľom prihlásenia sa do systému.

Údaje o klientovi

Tento číselník umožňuje prístup k údajom o klientoch, ktorí majú odovzdané používateľské meno a heslo do systému. Identifikátor je prístupný a meniteľný sa mení ako nastavenie.

Identifikátor	Mobilita	Krčné meno	Priezvisko
☒ Viditeľný	☒ Viditeľný	☒ Viditeľný	☒ Viditeľný
☐ Povinný	☐ Povinný	☐ Povinný	☐ Povinný
☐ Limit počtu znakov: 3	☐ Limit počtu znakov: 3	☐ Limit počtu znakov: 3	☐ Limit počtu znakov: 3

Pohlavie

☒ Viditeľný

☐ Povinný

☒ Muž

☐ Žena

☒ Bližšie neurčené

Titul

☒ Viditeľný

☐ Povinný

☒ Pan

☐ Sľach

☐ Nešpecifikované

Nastavenia monitorovacieho reportu

Cena práce /hod. * Cena práce /hod. *

Náklady na pranie oblečenia * Náklady na pranie posteľného prádla *

Čas potrebný pre výmenu pomôcky * Čas potrebný pre výmenu pomôcky *

Čas potrebný na výmenu pomôcky - pretečenie /min. /hod. * Čas potrebný na výmenu posteľnej bielizne - pretečenie /min. /hod. *

Čas potrebný na kontrolu stavu pomôcky (bez jej výmeny) /min. *

Zadná strana

NASTAVENIA ÚDAJOV MONITOROVACEJ SPRÁVY

LEN PRE SPRÁVCU



Nastavenia monitorovacej správy sa môžu v prípade zmeny akýchkoľvek hodnôt upraviť. Hodnoty zadané v nastaveniach monitorovacej správy, prístupné pod položkou **Spravovať opatrovateľské zariadenie**, sa použijú na generovanie výsledkov monitorovacej správy.

TENA smartcare Harmony Senior Living

Prejdite na položku Zmeniť indikátor

Hodnotenia | **Zariadenie sociálnych služieb** | Monitorovacia správa | Zdroje | Pokyny | Nastavenia

Spravovať zariadenie sociálnych služieb Harmony Senior Living

Nastavenia opatrovateľského domu

Zariadenia sociálnych služieb * Harmony Senior Living

Meno kontaktnej osoby *

E-mailová adresa *

Telefónne číslo na pevnú linku *

Mobilné číslo *

Cieľ inzerencie *

Nastavenia ochrany osobných údajov

☐ Získať súhlas
Táto funkcia pripomene potrebu získania súhlasu klienta pred začatím hodnotenia.

☐ Dvojfaktorové overenie identity
Dvojfaktorové overenie vyžaduje od používateľa, aby mal vo svojom profile uvedené telefónne číslo, na ktoré mu bude odoslaná sms správa s cieľom priradenia sa do systému.

Údaje o klientovi

Identifikátor: ☒ Viditeľný, ☐ Povinný, Limit počtu znakov: 3

Mobilita: ☒ Viditeľný, ☐ Povinný

Krídne meno: ☒ Viditeľný, ☐ Povinný, Limit počtu znakov: 3

Priezvisko: ☒ Viditeľný, ☐ Povinný, Limit počtu znakov: 3

Pohlavie: ☒ Viditeľný, ☐ Povinný, Muž, Žena, Blízke neurčené

Titul: ☒ Viditeľný, ☐ Povinný, Pán, Pani, Sľučna, Nešpecifikované

Nastavenia monitorovacieho reportu

Cena práce /hod * 200 SEK, Cena práce * 500 SEK




Náklady na pranie oblečenia * 45 SEK, Náklady na pranie posteľného prádla * 60 SEK

Čas potrebný pre výmenu pomôcky * 20 min., Čas potrebný pre výmenu pomôcky * 30 min.

Čas potrebný na výmenu pomôcky - pretrečenie * 30 min., Čas potrebný na výmenu posteľnej bielizne - pretrečenie * 30 min.

Čas potrebný na kontrolu stavu pomôcky (bez jej výmeny) min. * 5 min.

Zadná strana Zrušiť Uložiť

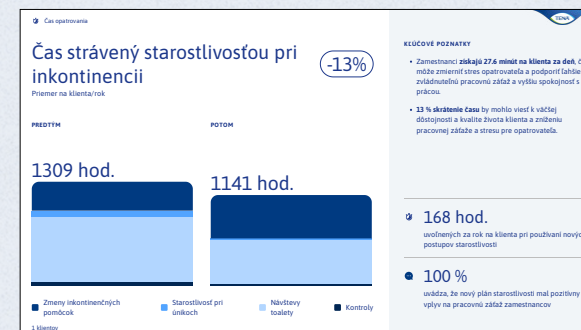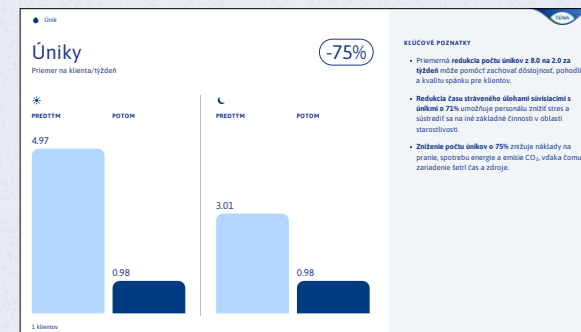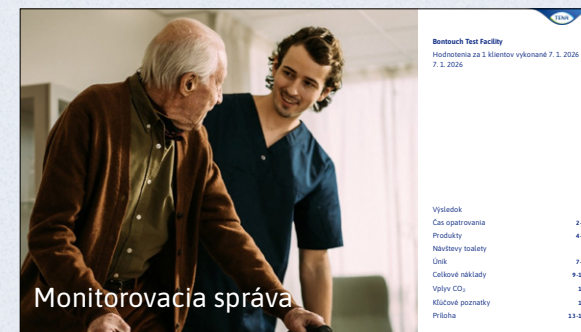

VIDEÁ S POKYNYMI A ČASTO KLADENÝMI OTÁZKAMI



1

Vybrať iné zariadenie sociálnych služieb Odhlásiť sa

Cama Woodlands

Prejdite na položku Zmeniť indikátor

Hodnotenia Zariadenie sociálnych služieb Monitorovacia správa Zdroje Pokyny Nastavenia

Pomoc

Vyhľadať

Pred hodnotením
Čo potrebujete pred začatím hodnotenia

Nasadenie TENA Identify v stojí
Pokyny pre nasadenie pomôcky TENA Identifi v stojí.

Nasadenie TENA Identify v ľahu
Pokyny pre nasadenie pomôcky TENA Identifi v ľahu.

TENA Identifi Pants
Pre klientov, ktorí si vymieňajú inkontinenčnú pomôcku sami.


Zelené svetlo
Po vložení loggera TENA Identifi do konektora na pomôcku bude blikať zelené svetlo po dobu 45 sekúnd. Znamená to, že logger pracuje správne.

Oranžové svetlo
Oranžové svetlo znamená, že batéria ja vybitá a je ju nutné dobiť.

Kliknite na možnosť **Pokyny**.


Kliknite na **video**, aby ste si pozreli usmernenie k tejto časti.

ZDROJE

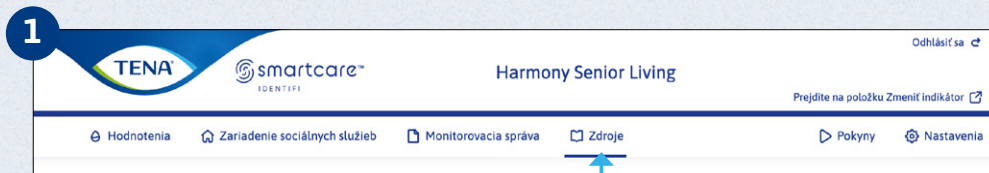

Strana so zdrojmi obsahuje rôzny materiál na podporu používania systému TENA SmartCare Identifi.

V hornej ponuke kliknite na možnosť **Zdroje**.

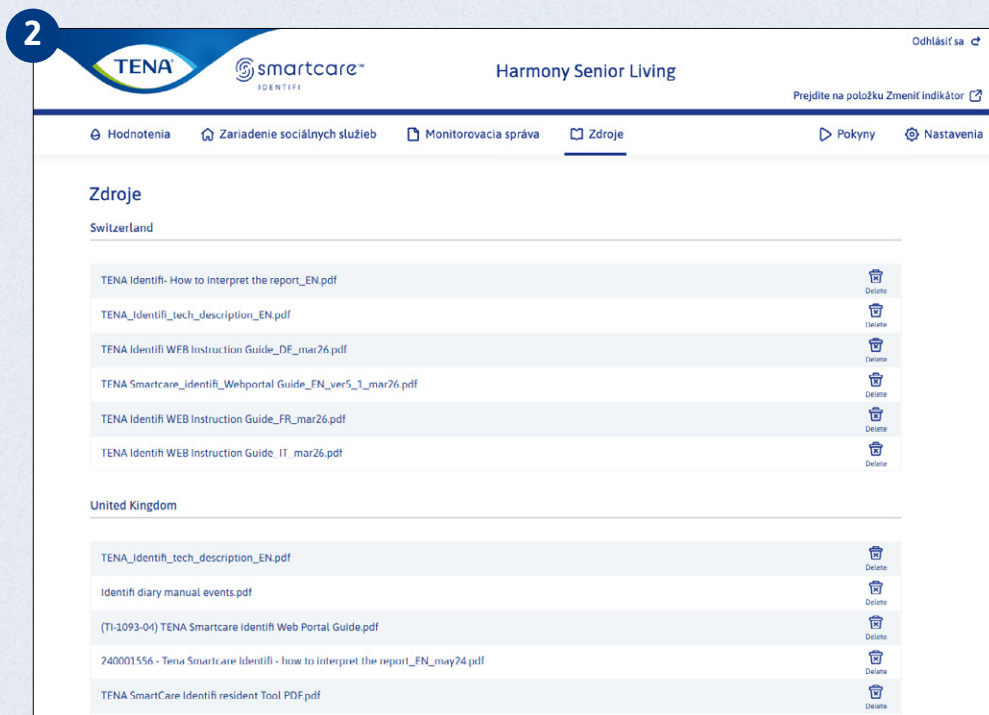

Zobraziť/stiahnuť súbor

Zobrazí sa zoznam dostupných súborov.

Kliknite na požadovaný súbor, ktorý chcete stiahnuť/zobraziť.



TENA® je značka
spoločnosti Essity