





GEBRUIKSAANWIJZING TENA SMARTCARE IDENTIFI^{TM/MC} SYSTEEM

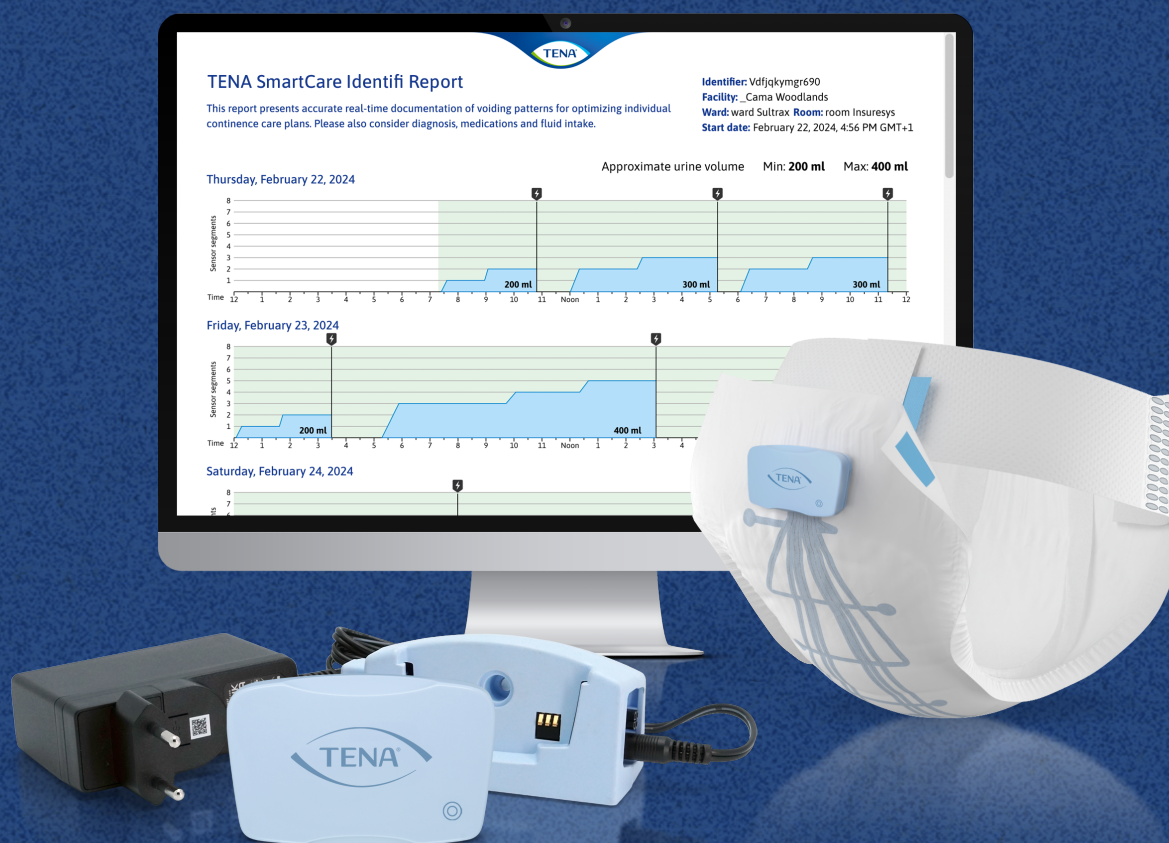


Gebruiksaanwijzing TENA SmartCare Identifi™/MC systeem

TENA SmartCare Identifi™/MC is een handig en effectief trackingsysteem om nauwkeurigere, geïndividualiseerde plannen voor continëntiezorg te ondersteunen.

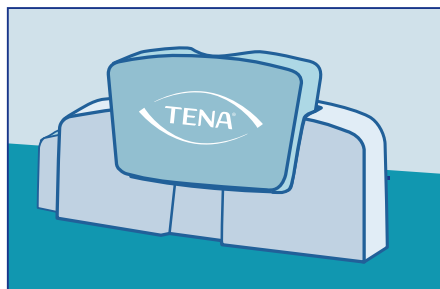


De TENA SmartCare Identifi™/MC **Logger Kit** bestaat uit een herbruikbare logger en lader. De logger wordt gebruikt voor het registreren en verzenden van gegevens over urineverlies van TENA SmartCare Identifi™/MC Sensor Wear-producten.

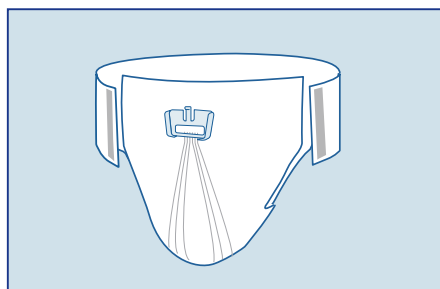

TENA SmartCare Identifi™/MC **Sensor Wear** is een absorberend product voor eenmalig gebruik met een loggerconnector en fijne, draadachtige sensoren om informatie over urineverlies te verzamelen.



Gegevens van de logger worden automatisch omgezet in een rapport door het TENA SmartCare Identifi™/MC **Reporting System**. Het grafische rapport biedt zorgverleners diepgaande patronen over urineverlies en andere continëntiegerelateerde informatie, ter ondersteuning van een nauwkeurigere, geïndividualiseerde continëntiebeoordeling.

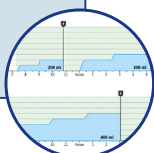

Indicatielampjes op de TENA SmartCare Identifi™/MC Logger

Indicatielampje tijdens aansluiting op TENA SmartCare Identifi™/MC Sensor Wear:



Groen knipperend (knippert 45 sec.) = Correct geplaatst



Constant oranje = Batterij bijna leeg

Indicatielampje in de lader:



Oranje knipperend = Opladen bezig



Constant groen = Volledig opgeladen



Constant rood = Buiten werking. Neem voor ondersteuning contact op met de klantenservice van Essity.

Vóór aanvang van een beoordeling




Gebruik TENA SmartCare Identifi™/MC **Logger** niet bij personen waarvan bekend is dat ze antibioticaresistente bacteriën of besmettelijke ziekten hebben.



- 1 U hebt toegang nodig tot een computer met een geopende internetbrowser. Houd uw gebruikers-ID en wachtwoord van het webportaal bij de hand om toegang te krijgen tot het TENA SmartCare Identifi™/MC -webportaal via deze link: <https://identifi.tena.com>

Bescherm uw persoonlijke wachtwoord. Het mag niet worden gedeeld met anderen. Als u geen gebruikers-ID en tijdelijk wachtwoord hebt ontvangen, neem dan contact op met de klantenservice van Essity.

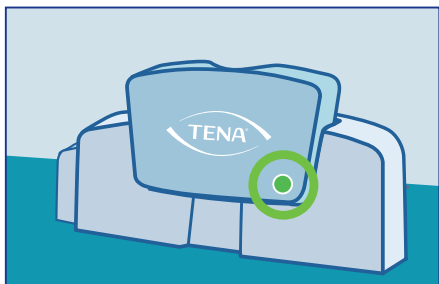

- 2 Laad de logger op totdat het indicatielampje groen wordt. Dit kan maximaal twee uur duren. Controleer het volgende:
Indicatielampje in de oplader




Oranje knipperend =
Opladen bezig



Constant groen =
Volledig opgeladen



Constant rood = Buiten werking. Neem voor ondersteuning contact op met de klantenservice van Essity.

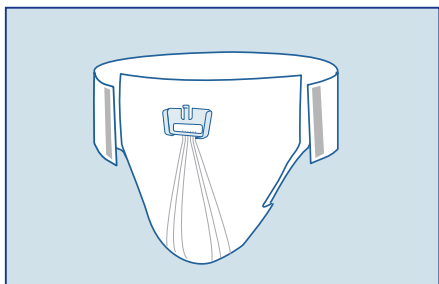

- 3 Zorg ervoor dat u voldoende TENA SmartCare Identifi™/MC **Sensor Wear** hebt voor gebruik gedurende de periode van 72 uur. Gebruik Sensor Wear in plaats van andere absorberende producten gedurende de beoordelingsperiode van 72 uur. Draag tijdens het gebruik van Sensor Wear geen andere absorberende producten zoals verbanden, inlegkruisjes of broekjes.



- 4 Deel TENA SmartCare Identifi™/MC -toiletregistratieformulieren uit, voor het handmatig vastleggen van de aanvullende gebeurtenissen die in het 72-uursrapport moeten worden opgenomen.



- 5 Voor succesvolle resultaten mag u het systeem niet gebruiken zonder de juiste opleiding en training van het personeel van Essity/TENA of een getrainde aangewezen persoon.

De start van een beoordeling




Log in op het webportaal op <https://identifi.tena.com>. Registreer de beoordeling door de TENA SmartCare Identifi™/MC Logger ID te koppelen aan de identificatie van de te beoordelen persoon. Raadpleeg de gebruikersaanwijzing van het TENA SmartCare Identifi™/MC Web Portal voor verdere instructies over het begin van de beoordeling in het webportaal.



De ID van de TENA SmartCare Identifi™/MC Logger is vermeld op het label aan de achterkant van de logger. Zorg ervoor dat de logger-ID die in het webportaal is geselecteerd, overeenkomt met de logger-ID die voor de beoordeling is geselecteerd.

Omgang met TENA SmartCare Identifi™/MC Sensor Wear en Logger tijdens een beoordeling

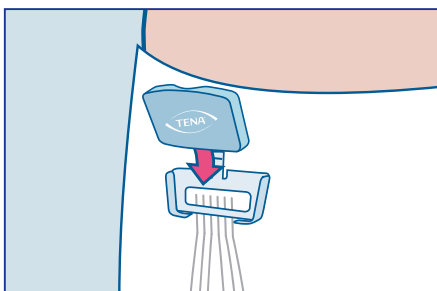

1 Bevestig TENA SmartCare Identifi™/MC Logger aan TENA SmartCare Identifi™/MC Sensor Wear


Breng Sensor Wear aan zoals u gewone incontinentiebescherming zou aanbrengen. Steek vervolgens de logger in de blauwe connector aan de voorkant. Een knipperend groen lampje betekent dat de logger correct is geplaatst.

Hij stopt na 45 seconden met knipperen en blijft inactief tot de volgende wijziging. De logger is nu klaar om gegevens te verzenden.




2 Toiletbezoeken registreren

Gebruik een mobiel apparaat, tablet of een tabel in een agenda om de extra gebeurtenissen te documenteren, bijv. toiletbezoeken of lekkage op kleding/linnengoed, die moeten worden opgenomen in het rapport over urineverlies.

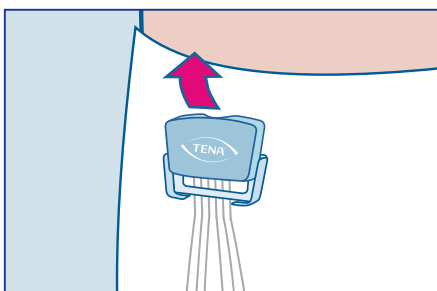

3 De TENA SmartCare Identifi™/MC Logger volgt de cliënt


Draag bij de volgende reguliere productwisseling beschermende handschoenen en schuif de logger uit de connector, voordat u de Sensor Wear verwijdert. Tijdens de gehele beoordeling wordt dezelfde logger gebruikt.

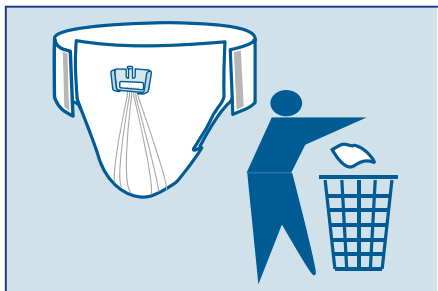

4 Gooi gebruikte TENA SmartCare Identifi™/MC Sensor Wear weg. Zorg ervoor dat u de logger niet weggooit!

Gooi verontreinigde Sensor Wear weg nadat de logger is verwijderd.

Breng nieuwe Sensor Wear aan en steek de herbruikbare logger in de connector. Een knipperend groen lampje betekent dat de logger correct is geplaatst.

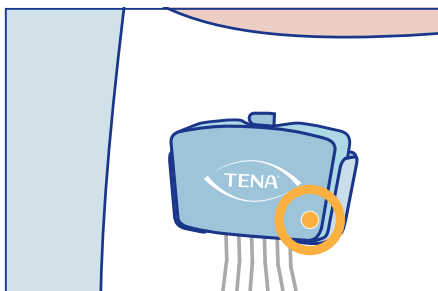


5 Laad de TENA SmartCare Identifi™/MC Logger indien nodig op

Controleer of het oranje lampje 'batterij bijna leeg' brandt tijdens het vervangen van Sensor Wear. Desinfecteer de eventueel aanwezige logger volgens het reinigings- en desinfectieprotocol in deze handleiding en laad hem vervolgens 30 minuten op, voordat u hem weer in de Sensor Wear-connector steekt.



6 TENA SmartCare Identifi™/MC Logger reinigen en desinfecteren

Na afronding van de beoordeling reinigt en desinfecteert u de logger volgens het reinigings- en desinfectieprotocol in deze handleiding.

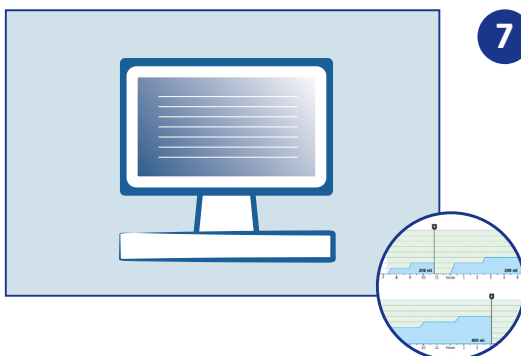


7 Volledig rapport over urineverlies in het TENA SmartCare Identifi™/MC -webportaal


Na 72 uur gaan de cliënten weer over op hun reguliere producten. Als dit nog niet is gedaan met een mobiel apparaat of tablet, registreert u andere gegevens met betrekking tot continëntie, zoals toiletbezoek, lekkage enz. in het webportaal.

Het TENA SmartCare Identifi™/MC -rapport is nu klaar voor analyse. Door de integratie van TENA SmartCare Identifi™/MC in uw beoordelingsprotocollen krijgt het zorgpersoneel nauwkeurigere informatie om de resultaten van de continëntiezorg te verbeteren.

Reinigingsinstructies

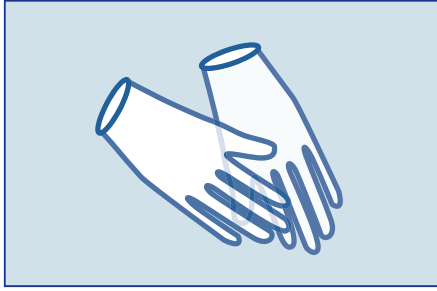

Draag beschermende handschoenen voordat u met de logger gaat werken en voordat u deze reinigt en desinfecteert. Reinig en desinfecteer de logger altijd voordat u hem weer in de lader plaatst.

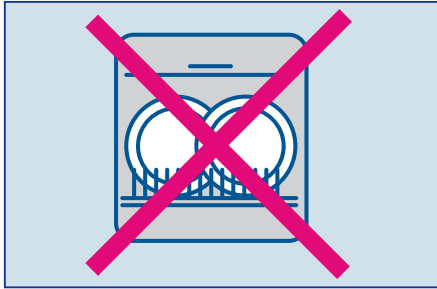


Niet geschikt voor reiniging in de vaatwasser of autoclaaf.



Gebruik de TENA SmartCare Identifi^{TM/MC} Logger niet bij personen waarvan bekend is dat ze antibioticaresistente bacteriën of besmettelijke ziekten hebben.

Mocht de logger per ongeluk bij dergelijke personen zijn gebruikt, volg dan de protocollen van uw organisatie voor de omgang met infectieuze materialen en infectiebestrijding.

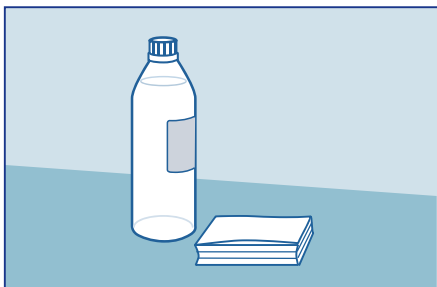

Het kunststof oppervlak van de TENA SmartCare Identifi^{TM/MC} Logger is compatibel met de volgende niet-corrosieve desinfectiemiddelen:

- hypochlore oplossingen
- oplossingen met quaternaire ammoniumverbindingen
- kaliumperoxosulfaat

Gebruik geen chloorbleekmiddel (natriumhypochlorietoplossing) op de logger.



De lader moet worden gereinigd met een droge doek om stof en dergelijke te verwijderen. Vermijd vloeistoffen.

De logger reinigen



- 1 Reinig alle oppervlakken, waaronder spleten, met water en reinigingsmiddel of een vooraf bevochtigd reinigingsdoekje, waarbij u de logger ten minste 1 minuut schoon wrijft.



- 2 Droog de logger af met een papieren handdoek of een wegwerpdoekje.
Ga verder met het desinfecteren van de logger volgens de beschrijving hieronder.



- 3 Desinfecteer de logger. Gebruik een desinfectiemiddel dat geschikt is voor apparatuur met een laag risico om pathogene micro-organismen te inactiveren.



Mogelijke desinfectiemiddelen zijn:

- 70% alcohol
- Virkon® met de werkzame stof kaliumperoxosulfaat

Wrijf over alle oppervlakken, waaronder spleten, en zorg ervoor dat de oppervlakken en spleten volledig doordrenkt zijn met het desinfectiemiddel.


Volg de aanbevolen gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het desinfectiemiddel.

Virkon is een geregistreerd handelsmerk van E. I. du Pont de Nemours en Company of haar dochterondernemingen.

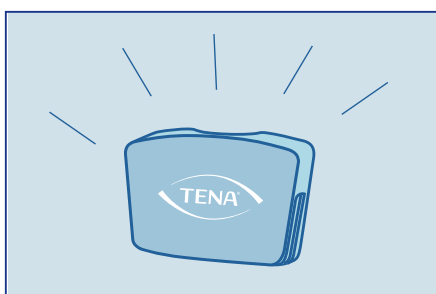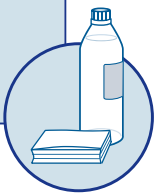

- 4 Laat de logger volledig aan de lucht drogen.

De logger opladen

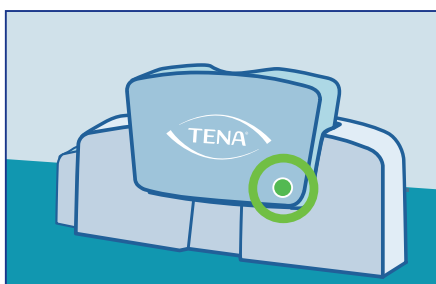

Plaats de logger na het reinigen in de lader totdat hij volledig is opgeladen en het lampje continu groen brandt. Dit zorgt er ook voor dat alle gegevens met succes zijn overgedragen.

Zodra de logger volledig is opgeladen, is deze klaar voor een nieuwe beoordeling.

Laad de logger minstens om de zes maanden op om de batterij in goede staat te houden.

Voorzorgsmaatregelen:

Waarschuwing! Gebruik alleen het netsnoer en de oplader die bij de TENA SmartCare Identifi™/MC Logger Kit meegeleverd zijn.

Waarschuwing! Sluit maximaal 3 oplaadunits in serie aan op één enkele stroombron.

Waarschuwing! Als de inhoud van de TENA SmartCare Identifi™/MC Logger-Kit beschadigd of kapot lijkt te zijn, neem dan contact op met de klantenservice van TENA.

Waarschuwing! Voordat u de logger langere tijd opslaat, moet u hem altijd eerst opladen. Een lege batterij vermindert de werking aanzienlijk.

Waarschuwing! Gebruik de TENA SmartCare Identifi™/MC Logger niet bij personen waarvan bekend is dat ze antibioticaresistente bacteriën of besmettelijke ziekten hebben.

Aandachtspunten:

Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

Lees alle instructies aandachtig en volledig door voordat u een beoordeling start. Neem bij twijfel contact op met Essity voor ondersteuning.

Plaats de apparatuur niet in direct zonlicht, omdat dit de kunststof behuizingen zal verkleuren.

Reinig en desinfecteer de TENA SmartCare Identifi™/MC Logger-eenheid altijd in overeenstemming met deze handleiding.

Het is niet toegestaan om wijzigingen aan deze apparatuur aan te brengen.

IP65-classificatie: 6 stofdicht, 5 beschermd tegen waterstralen.

De TENA SmartCare Identifi™/MC Logger Kit moet aan het einde van zijn gebruiksduur worden geretourneerd aan Essity.

Wanneer de logger langere tijd niet wordt gebruikt, moet deze ten minste om de 6 maanden in de lader worden geplaatst om permanente schade aan de batterij te voorkomen.

Omgevingstemperatuur tijdens opslag: 23 °C +/- 5 °C, 73 ± 41 °F. Relatieve vochtigheid tijdens opslag: 65% +/- 20%.

Bewaar de logger altijd op een veilige plek, uit de buurt van zonlicht en buiten het bereik van cliënten, wanneer deze niet in gebruik is.



De laatste versie van dit document vindt u op <https://identifi.tena.com>

Computer niet inbegrepen. Het rapportagesysteem is toegankelijk vanaf elke beschikbare computer met internet.
De Logger en Sensor Wear worden niet op werkelijk formaat weergegeven. TENA SmartCare Identifi™/MC Sensor Wear afzonderlijk verkrijgbaar.



TENA, a brand of Essity
– a global leading hygiene
and health company
www.essity.com



Essity Hygiene and Health AB
SE-405 03 Göteborg, Sweden
Visiting address: Mölndals Bro 2, Mölndal

