

TENA SMARTCARE CHANGE INDICATOR™ -VAIHTOILMAISIMEN VERKKOPORTAALI



SISÄLTÖ



JOHDANTO	3
-----------------------	---

KÄYTÖN ALOITUS

Käyttäjätilin aktivointi ja sisäänkirjautuminen	4
---	---

OSASTO

Osaston lisääminen.....	5
-------------------------	---

Osaston muokkaaminen tai poistaminen.....	6
---	---

HOIDETTAVA HENKIÖ

Hoidettavan henkilön lisääminen	7
---------------------------------------	---

Hoidettavan henkilön tarkastelu	8
---------------------------------------	---

Hoidettavan henkilön muokkaaminen tai poistaminen	9
---	---

KÄYTTÄJÄT

Käyttäjätilin lisääminen.....	10
-------------------------------	----

Käyttäjätilin muokkaaminen tai poistaminen	11
--	----

HOITOLAITOS

Hoitolaitoksen asetusten muokkaaminen	12
---	----

KÄYTTÖ JA TIEDOT

Yleiskatsaus.....	13
-------------------	----

Seuranta	14
----------------	----

Tila ja kuvakkeet	15
-------------------------	----

Tilastot.....	17
---------------	----

Tarkastusloki.....	18
--------------------	----

OHJE


Ohjeet	19
--------------	----

JOHDANTO



TENA SmartCare Change Indicator™-verkkoportaali on tarkoitettu hoitolaitoskäyttöön. Se toimii ylläpitäjien, sairaanhoitajien ja ammattihoitajien tietokeskuksena sekä tarjoaa täydellisen yleiskatsauksen asukkaiden kontinenssista TENA SmartCare Change Indicator™-vaihtoilmaisimen avulla. Nämä tiedot sisältävät hoidettavan henkilön tilan, suojan vaihdot, vasteajat sekä olennaiset reaaliaikaiset ja historialliset tiedot Change Indicator -vaihtoilmaisimen käytöstä.

Tässä oppaassa hoitolaitosten ylläpitäjille kerrotaan, kuinka verkkoportaalin käyttäjät ja osastot määritetään sekä kuinka hoidettavat henkilöt määritetään sekä heidän käyttämänsä inkontinenssisuojat rekisteröidään. Siinä kerrotaan myös, miten kuinka inkontinenssin hoitoa voidaan seurata verkkoportaalin avulla koko hoitolaitoksessa.

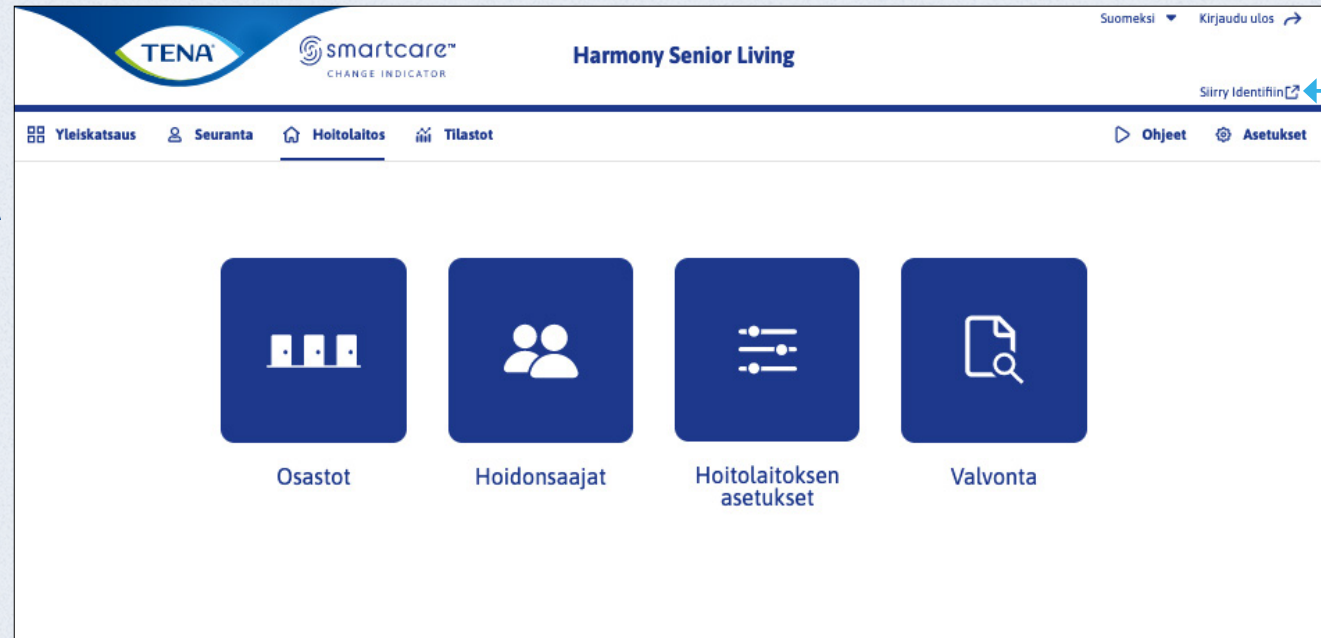

Identifi-verkkoportaalin käyttö

Sekä TENA SmartCare Change Indicator™-vaihtoilmaisinta että TENA SmartCare Identifi™-ratkaisua käyttävät hoitolaitokset voivat siirtyä portaaliin napsauttamalla **Siirry Identifi-alustalle**.

KÄYTTÄJÄTILIN AKTIVOINTI JA SISÄÄNKIRJAUTUMINEN



Aseta salasana käyttäjätunnukselle anna.anderson@nursinghome.com

Salasan tulee olla vähintään kahdeksan merkkiä pitkä ja sisältää vähintään kolme seuraavista merkkityypeistä:

- pieni kirjain (a–z)
- iso kirjain (A–Z)
- numero (0–9)
- erikoismerkki (@#\$%^& jne.)

Et voi käyttää nykyistä salasanaa uudelleen.

Salasana

Vahvista salasana

Aseta salasana

Aktivoi käyttäjätili sähköpostiin lähetetyn linkin avulla.

Anna salasana.

Napsauta **Aseta salasana**.

Kun käyttäjätili on luotu, anna sähköpostiosoite sekä salasana ja napsauta sitten **Kirjaudu sisään**.

Unohditko salasana?
Napsauta **Palauta salasana**, niin voit luoda uuden.

Monivaiheinen todennus


Vahvistuskoodi lähetetään sinulle rekisteröityyn puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen. Kirjaudu sisään antamalla salasana.

OSASTON LISÄÄMINEN



Napsauta **Hoitolaitos**.

Napsauta **Osastot**.

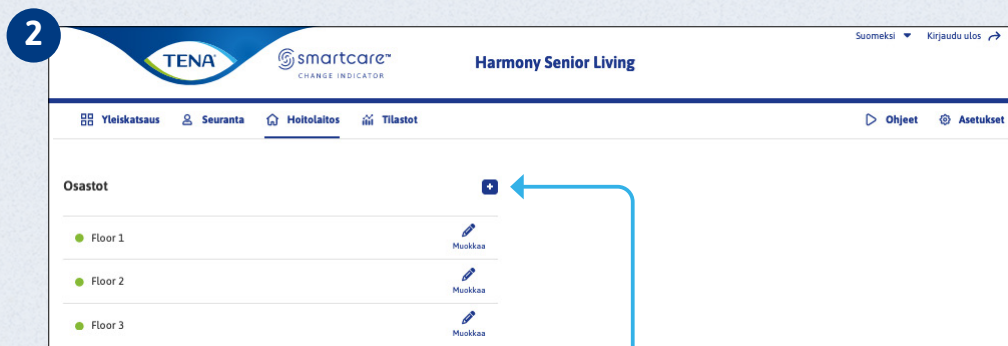

Napsauta **Lisää**.

Luo uusi osasto täyttämällä kentät ja napsauttamalla **Tallenna**.


Jos osaston on oltava aktiivinen, valitse Active -valintaruutu. Jätä muussa tapauksessa kyseinen valintaruutu tyhjäksi.

OSASTON MUOKKAAMINEN TAI POISTAMINEN



Napsauta **Hoitolaitos**.

Napsauta **Osastot**.

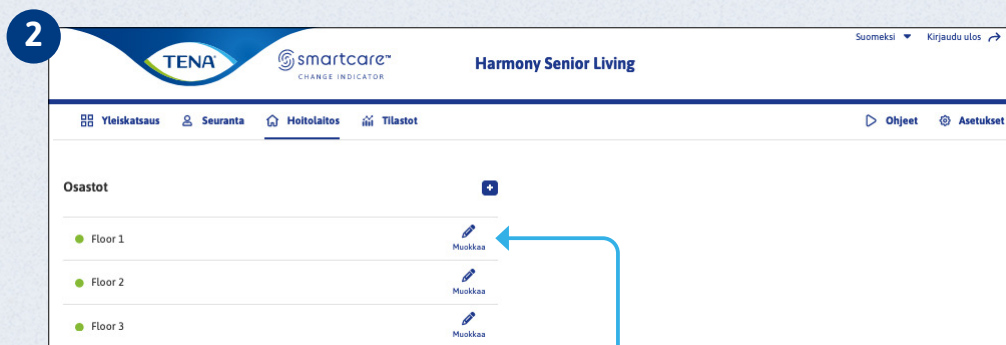

Napsauta **Muokkaa** muokattavan osaston kohdalla.

3

Muokkaa osastoa


Osaston nimi/numero
Floor 1

☒ Aktiivinen

Peruuta Poista osasto Tallenna

Muokkaa sitten tietoja ja napsauta **Tallenna**. Poista osasto napsauttamalla **Poista osasto**.



HOIDETTAVAN HENKILÖN LISÄÄMINEN

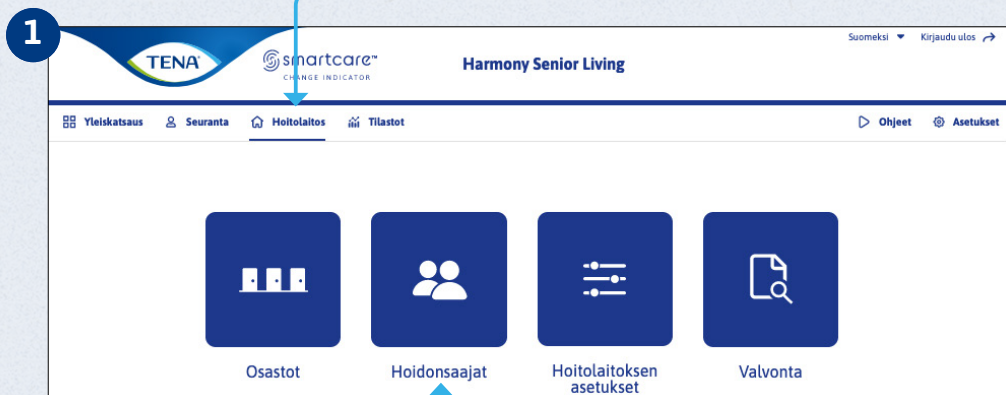

Napsauta **Hoitolaitos**.

Napsauta **Hoidonsaajat**.


Napsauta **Lisää**.

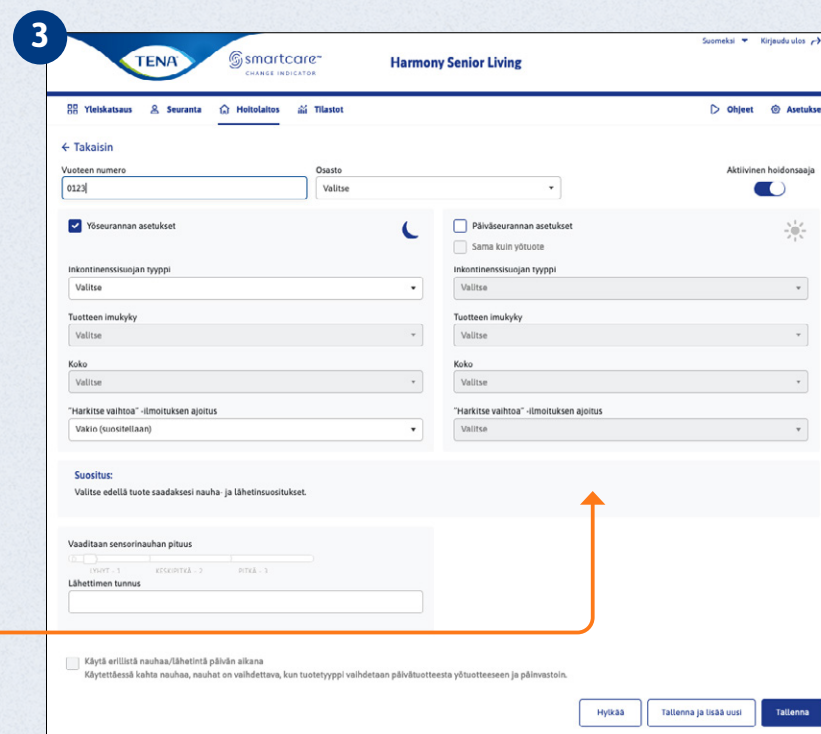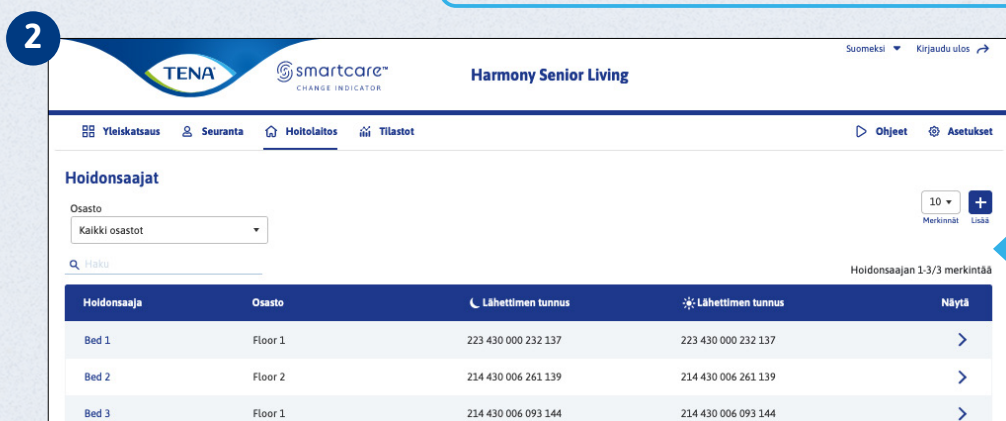

! "Harkitse vaihtoa" -ilmoituksen ajoitus
Täällä voit muokata vaihdon harkitsemista koskevan ilmoituksen ajoituksen muokkaamista.


Luo uusi hoidettava henkilö täyttämällä kentät ja napsauttamalla **Tallenna**.

HOIDETTAVAN HENKILÖN TARKASTELU

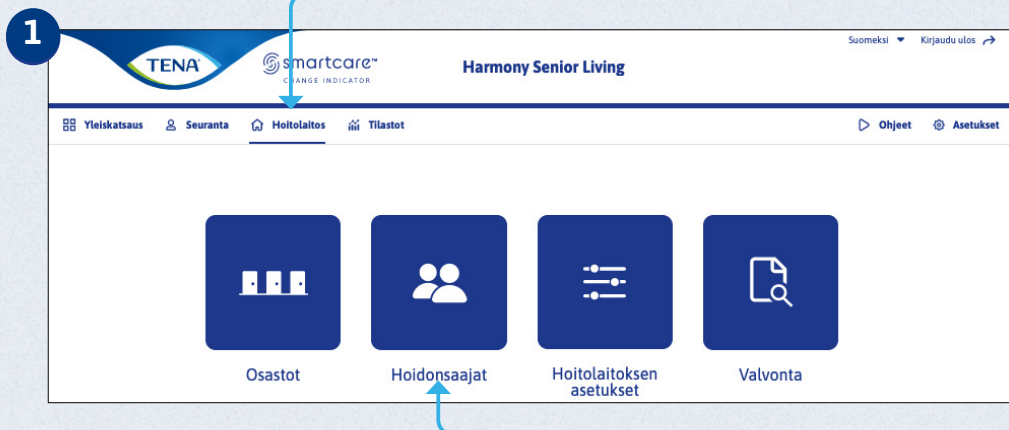


1 Napsauta **Hoitolaitos**.


2 Napsauta **Hoidonsaajat**.

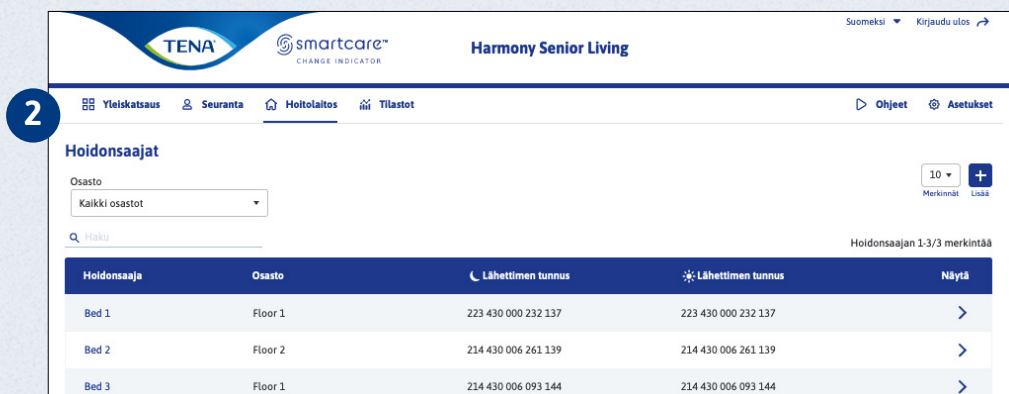

Valitse hoidettava henkilö, jota haluat tarkastella.

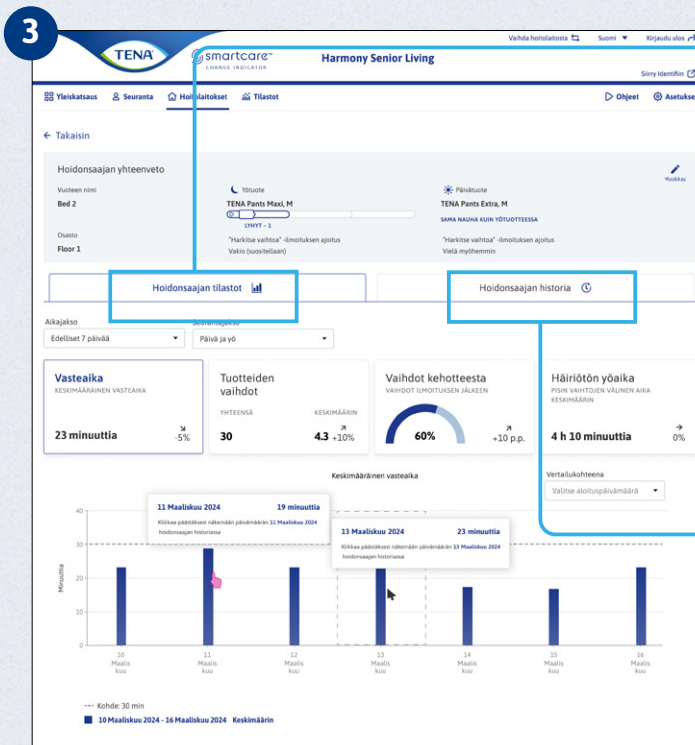



HOIDETTAVAN HENKILÖN MUOKKAAMINEN TAI POISTAMINEN

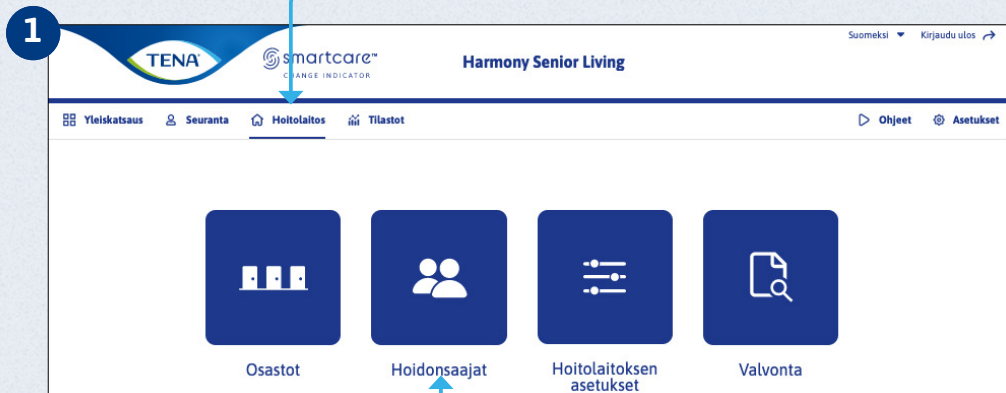

Napsauta **Hoitolaitos**.


Napsauta **Hoidonsaajat**.

Valitse hoidettava henkilö, jota haluat muokata tai jonka haluat poistaa.

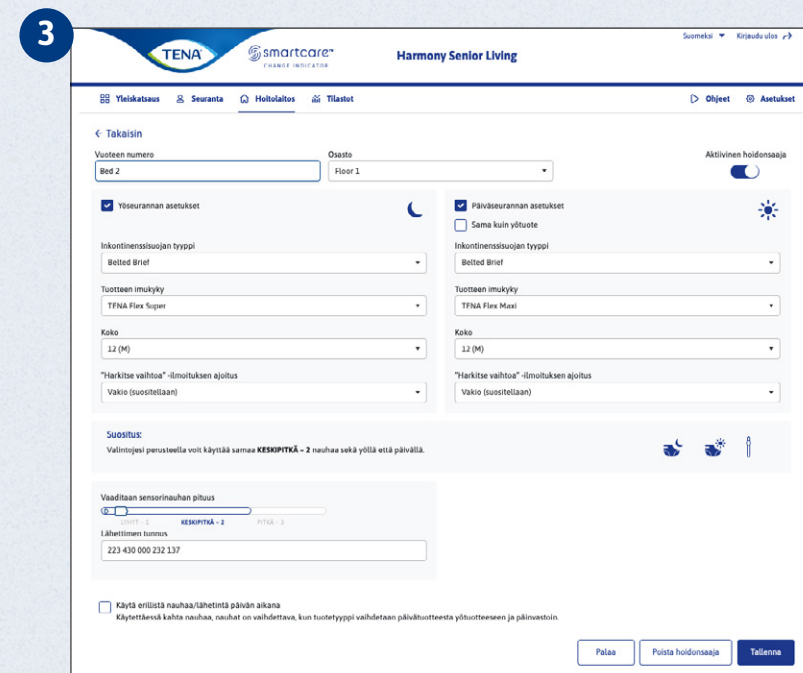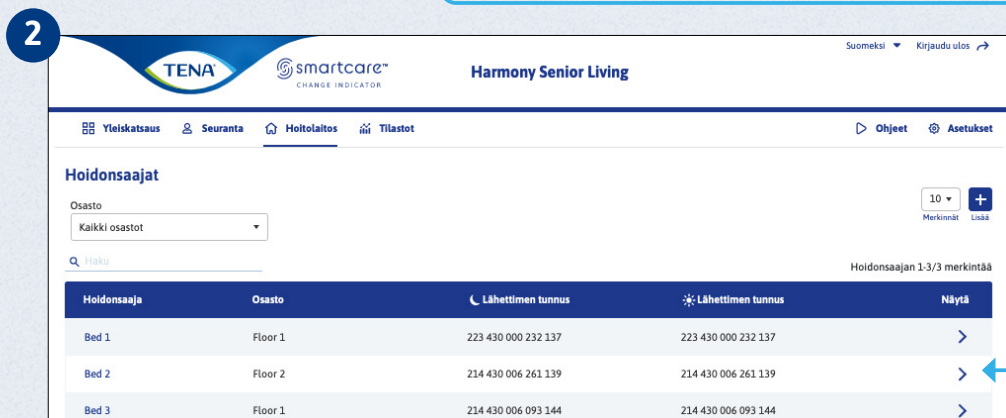


Muokkaa tietoja ja napsauta **Tallenna**.
Poista hoidettava henkilö napsauttamalla
Poista hoidonsaaja.


KÄYTTÄJÄTILIN LISÄÄMINEN

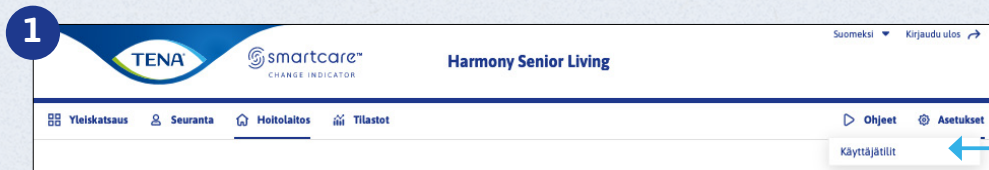

Napsauta aloitussivulla **Asetukset** ja sitten **Käyttäjätilit**.


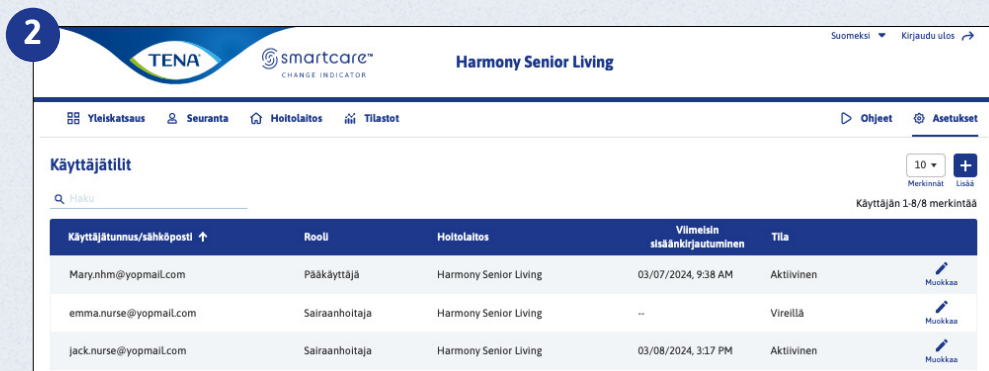


Napsauta **Lisää**.

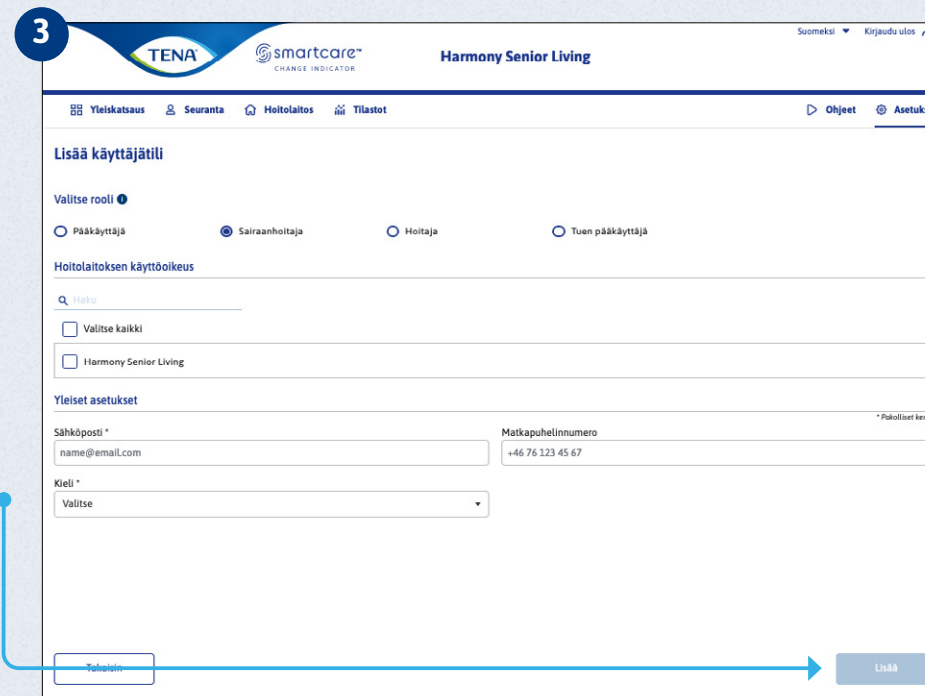


Luo uusi käyttäjätili täyttämällä tiedot ja napsauttamalla **Lisää**.

KÄYTTÄJÄTILIN MUOKKAAMINEN TAI POISTAMINEN

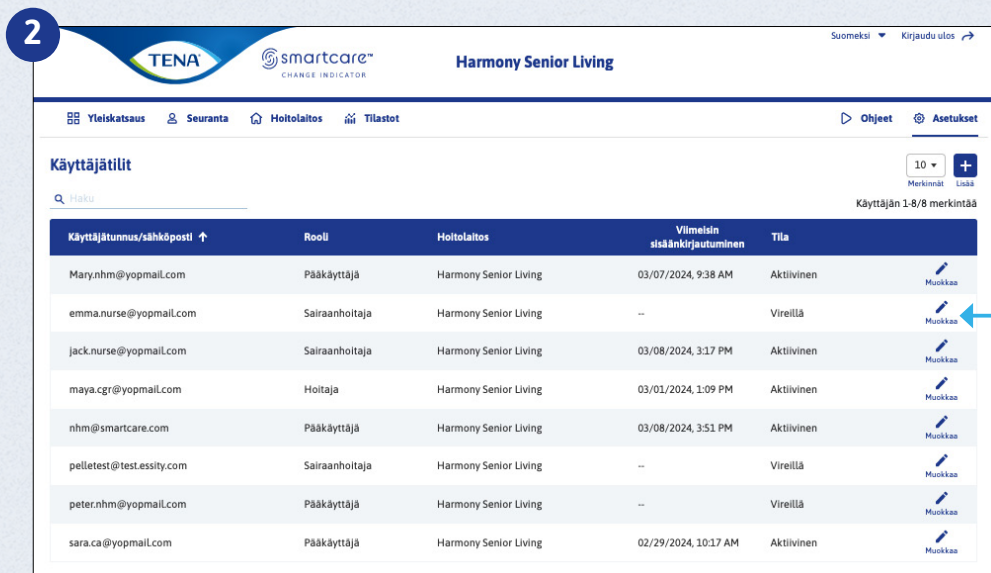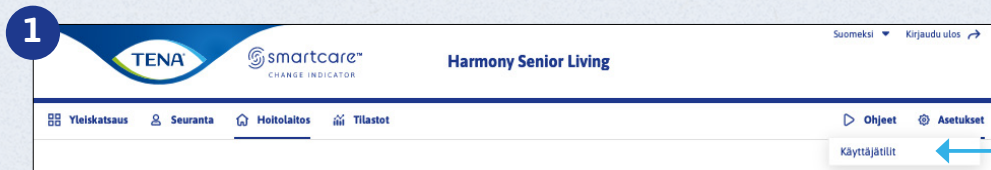

Napsauta aloitussivulla **Asetukset** ja sitten **Käyttäjät**.

Napsauta **Muokkaa** muokattavan käyttäjän kohdalla.

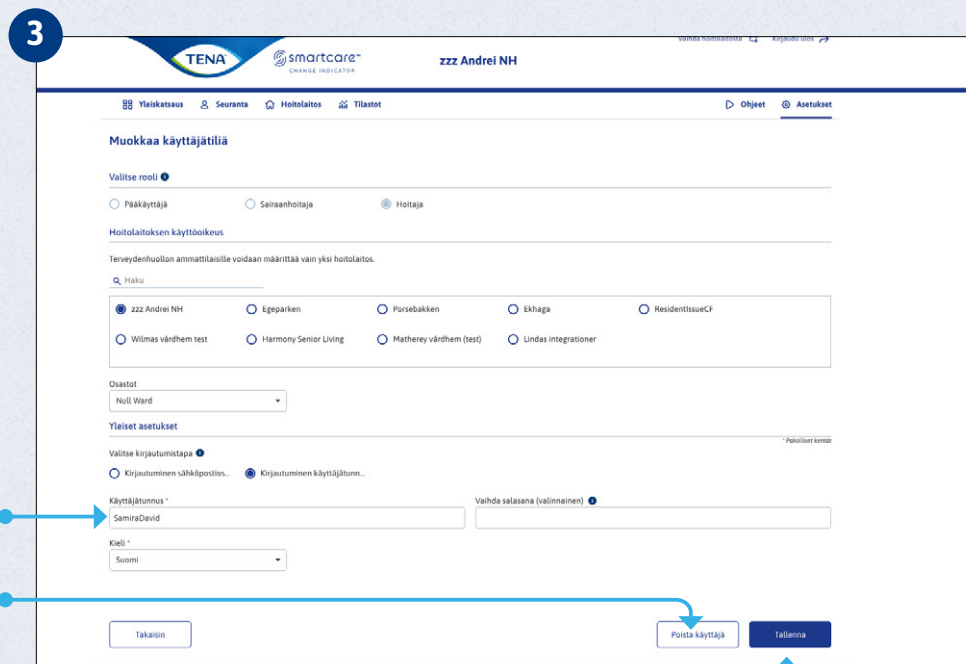


Jos olet kirjautunut sisään sairaanhoitajana, voit itse muuttaa kieltä tai yhteystietoja.

Poista käyttäjätiili napsauttamalla **Poista käyttäjä**.

Jos monivaiheinen todennus on otettu käyttöön, vahvistus suoritetaan antamiesi yhteystietojen perusteella joko sähköpostitse tai puhelimitse.

Muokkaa kenttiä ja napsauta **Tallenna**.

HOITOLAITOKSEN ASETUSTEN MUOKKAAMINEN

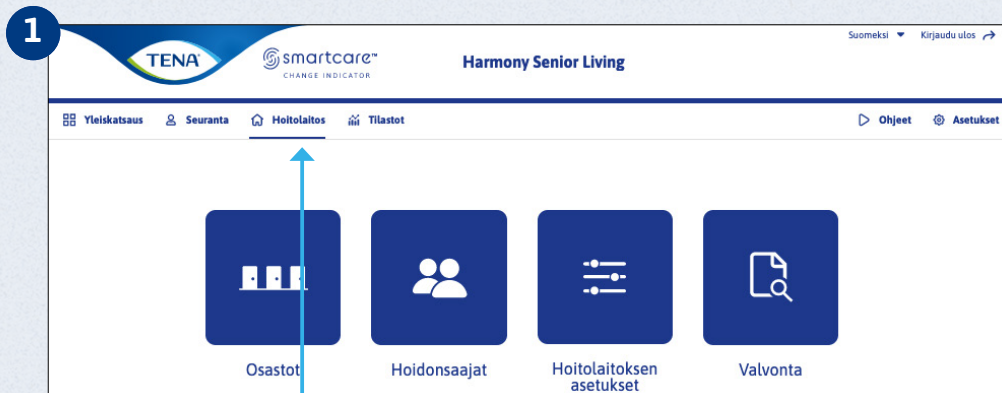

Napsauta
Hoitolaitos.

Napsauta
Hoitolaitoksen
asetukset.

Muokkaa kenttiä ja napsauta Tallenna.

Muokkaa hoitolaitosta

Yleiset asetukset

Hoitolaitoksen nimi *
Harmony Senior Living

Tietoturva-asetukset

Verkoportaali

☒ Määritä monivaiheinen todentaminen pakolliseksi verkoportaaliissa

Sovellus

☐ Määritä monivaiheinen todentaminen pakolliseksi sovelluksessa

☒ Määritä vahva salasana pakolliseksi terveydenhuollon ammattilaisille

☒ Määritä sähköpostiosoite pakolliseksi terveydenhuollon ammattilaisille

Yöilmoitukset

Hoitajan vastekohde

10 minuuttia 20 minuuttia **30 minuuttia** 40 minuuttia

Ilmoita hoitajille joka

Pois päältä 3 minuuttia 6 minuuttia **9 minuuttia** 12 minuuttia 15 minuuttia

Päiväilmoitukset

Hoitajan vastekohde

10 minuuttia 20 minuuttia 30 minuuttia 40 minuuttia

Ilmoita hoitajille joka

Pois päältä **3 minuuttia** 6 minuuttia 9 minuuttia 12 minuuttia 15 minuuttia

Ilmoita hoitajille, jos "Jonkin verran virtsaa" -tila pysyy yli kahdeksan tuntia

Pois päältä **PÄÄLLÄ**

Seurantajakson aloitusajat

Päivä Yö

06:00 21:00

Ilmoita hoitajalle, jos tuotteen vaihtoa ei ole rekisteröity tähän mennessä:

Päivä Yö

☒ Poista ilmoitus käytöstä

Takaisin Tallenna

YLEISKATSAUS



Vaihtaja hoitolaitosta Suomi Kirjautu ulos

TENA smartcare CHANGE INDICATOR Harmony Senior Living Siirry Identifin

Yleiskatsaus Seuranta Hoitolaitokset Tilastot Ohjeet Asetukset

Osasto Aikajakso
Kaikki osastot Edelliset 7 päivää

Tuotevaihtoja ja vaihtoja kehoitteesta Vasteaika Häiriötön yöaika

Tuotevaihtoja ja vaihtoja kehoitteesta
HOIDONSAAJAN TUOTTEEN VAIHDOT YHTEENSÄ AIKAJAKSON AIKANA

Hoidonsaaja	Vaihtoja yhteensä	Trendi	Kehotteesta	Yö	Päivä	Osasto	Näytä
Floor 1, Bed 2	21	↗ (+5)	28 %	5	10	Floor 1	>
Floor 1, Bed 2	21	↗ (+5)	28 %	5	10	Floor 1	>
Floor 2, Bed 3	21	↗ (+5)	50 %	5	10	Floor 1	>

Näytä kaikki

Vasteaika
KESKIMÄÄRINEN VASTEAIKA

Hoidonsaaja	Keskimäärin	Trendi	Yö	Päivä	Osasto	Näytä
Floor 1, Bed 1	58 min	↗ (+18 min)	41 min	1 h 12 min	Floor 1	>
Floor 1, Bed 2	46 min	↗ (+9 min)	36 min	52 min	Floor 2	>
Floor 2, Bed 3	45 min	↗ (+6 min)	34 min	56 min	Floor 1	>

Näytä kaikki

Häiriötön yöaika
PISIN VAIHTOJEN VÄLINEN AIKA KESKIMÄÄRIN

Hoidonsaaja	Keskimäärin	Trendi	Osasto	Näytä
Floor 1, Bed 1	2 h 32 min	↘ (-2 h 12 min)	Floor 2	>
Floor 1, Bed 2	2 h 55 min	↘ (-2 h 5 min)	Floor 1	>
Floor 1, Bed 2	3 h 03 min	↘ (-1 h 46 min)	Floor 2	>

Näytä kaikki

Napsauta Yleiskatsaus.

Yleiskatsaus -sivulla on tietoa tietyn ajanjakson aikana rekisteröidyistä hoitotrendeistä.

Tietojen avulla voidaan tunnistaa epäsäännölliset tapahtumat, jotka voivat vaikuttaa hoidettavan henkilön hyvinvointiin.

Esimerkiksi muutokset

- suojien vaihtokertojen määrässä
- vasteajassa
- häiriöttömässä yöajassa.

SEURANTA



Vaihda hoitolaitosta Suomi Kirjaudu ulos Siirry Identifiin

Yleiskatsaus Seuranta Hoitolaitokset Tilastot Ohjeet Asetukset

Osasto
Kaikki osastot

Hoidonsaajat
AKTIIVINEN/KAIKKI
3/3

Tilayhteenveto

- 3 - Harkitse vaihtoa
- 14 - Virhe
- 1 - Jonkin verran virtsaa
- 10 - OK

Hoidonsaaja	Nykyinen tila	Seurannan asetukset	Aktiivinen seuranta	Osasto	Paristo	Näytä
Bed 1	Harkitse vaihtoa 10 min	Yksi nauha Kaksi tuotetta	[Icon]	Ward C		>
Bed 2	OK 24 min	Yksi nauha Kaksi tuotetta	[Icon]	Floor 2		>
Bed 3	Jonkin verran virtsaa 24 min	Yksi nauha Kaksi tuotetta	[Icon]	Floor 1	[Icon]	>

Napsauta **Seuranta**.

Seuranta -sivulla näytetään ajantasainen yleiskatsaus hoitolaitoksessa käytetyistä laitteista.

Luettelossa ilmoitetaan seurattujen inkontinenssisuojien tila.

TILA JA KUVAKKEET



-  **OK**
Toimia ei tarvita. Hoidettavan henkilön inkontinenssisuoja on kuiva.
-  **Jonkin verran virtsaa**
Toimia ei tarvita. Jonkin verran virtsaa on havaittu, mutta tuotteen pinta on edelleen kuiva.
-  **Harkitse vaihtamista**
Hoidettavan henkilön inkontinenssisuojan imukyky on melkein kokonaan käytetty.
-  **Pois päältä**
Hoidettavaa henkilöä ei seurata. Ota seuranta käyttöön Seurannan aktivointi-kohdassa seurantasivulla.
-  **Yhteyttä muodostetaan**
Change Indicator -vaihtoilmaisin yrittää muodostaa yhteyttä järjestelmään.
-  **Virhe**
Change Indicator -vaihtoilmaisimessa tai järjestelmässä on virhe. Ratkaise ongelma siirtymällä Ohje -sivun Käyttöohjeet -kohtaan.
-  **Ei aktiivinen**
Hoidettavan henkilön seuranta ei ole käytössä. Ota seuranta käyttöön Muokkaa hoidettavaa henkilöä -kohdassa.
-  **Harkitse vaihtamista**
21 m

Tilan yhteydessä näytettävä aika.
-  **Akun varaustaso on alhainen ja se on vaihdettava.**

TILA JA KUVAKKEET (JATKUU)



Seurannan määrittäminen

Hoidettavan henkilön käyttämien sensorinauhojen määrä ja inkontinenssisuojien tyyppi.


Aktiivinen seuranta

Painikkeilla voidaan manuaalisesti vaihtaa päivä- ja yöseurannan välillä tai poistaa valvonta käytöstä.

Seurannan asetukset	Aktiivinen seuranta
Yksi nauha Yötuote	
Yksi nauha Yksi tuote 24 h	
Yksi nauha Kaksi tuotetta	
Kaksi nauhaa Yksi tuote 24 h	
Kaksi nauhaa Kaksi tuotetta	

1. Hoidettava henkilö käyttää yhtä sensorinauhaa ja yhtä inkontinenssisuojaa yöllä.
2. Hoidettava henkilö käyttää yhtä sensorinauhaa ja samantyyppistä inkontinenssisuojaa sekä päivällä että yöllä.
3. Hoidettava henkilö käyttää yhtä sensorinauhaa ja erityyppistä inkontinenssisuojaa päivällä ja yöllä.
4. Hoidettava henkilö käyttää kahta sensorinauhaa ja samantyyppistä inkontinenssisuojaa sekä päivällä että yöllä.
5. Hoidettava henkilö käyttää kahta sensorinauhaa ja erityyppistä inkontinenssisuojaa päivällä ja yöllä.

TILASTOT

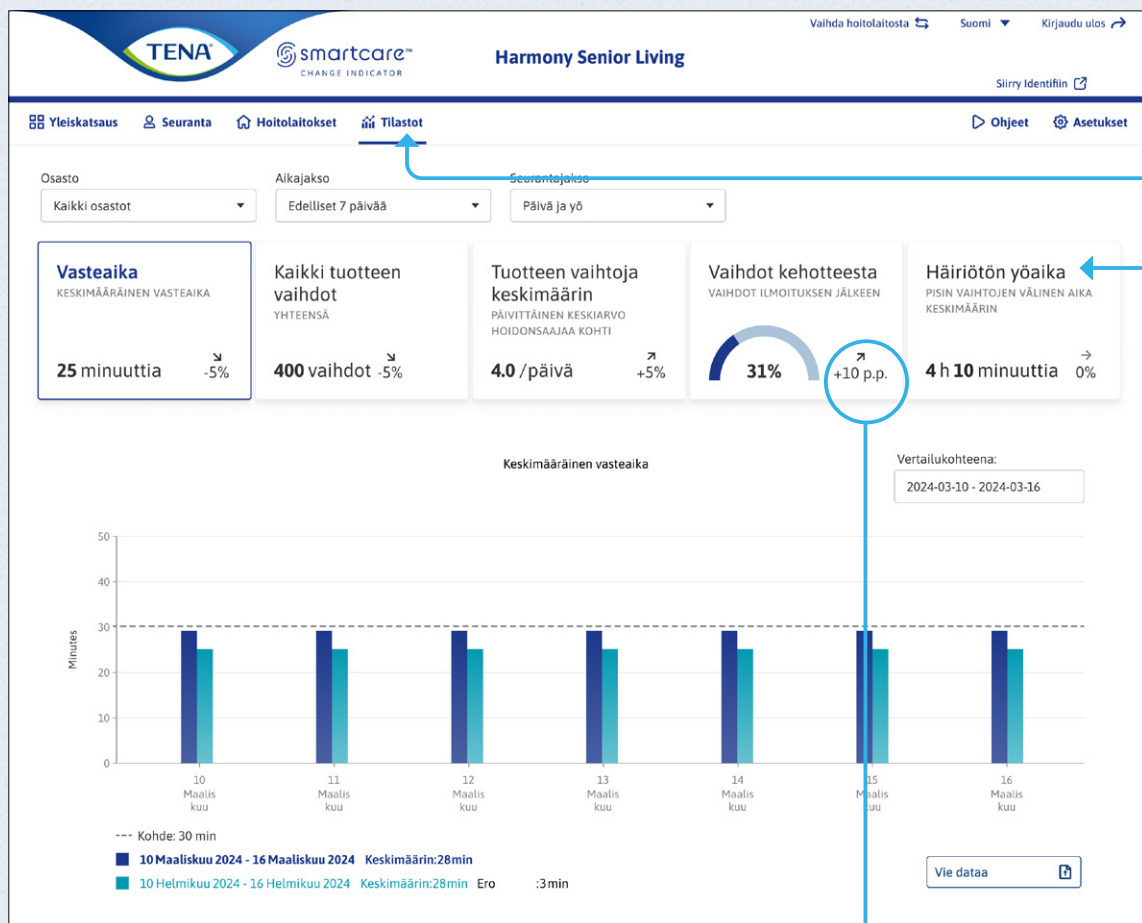

Napsauta Tilastot.

Tällä sivulla näytetään hoitolaitoksen tilastoja valittujen ajanjaksojen ajalta.

Vasteaika: aika, joka hoitajilta kuluu vaihtamisen harkitsemista koskevaan ilmoitukseen reagoimiseen.

Kaikki tuotteen vaihdot: vaihdettujen inkontinenssisuojien kokonaismäärä.

Tuotteen vaihtoja keskimäärin: inkontinenssisuojien vaihtojen keskimääräinen määrä päivässä per hoidettava henkilö.

Vaihdot kehotteesta: vaihtamisen harkitsemista koskevien ilmoitusten vuoksi vaihdettujen inkontinenssisuojien määrä.

Häiriötön yöaika: pisin vaihtojen välinen aika.

Näyttää trendin valittuun ajanjaksoon verrattuna.

TARKASTUSLOKI



1

TENA smartcare™ Harmony Senior Living

Suomeksi Kirjautu ulos

Yleiskatsaus Seuranta Hoitolaitos Tilastot Ohjeet Asetukset

2

TENA smartcare™ Harmony Senior Living

Suomeksi Kirjautu ulos

Yleiskatsaus Seuranta Hoitolaitos Tilastot Ohjeet Asetukset

Osastot Hoidonsaajat Hoitolaitoksen asetukset Valvonta

3

TENA smartcare™ Harmony Senior Living

Suomeksi Kirjautu ulos

Yleiskatsaus Seuranta Hoitolaitos Tilastot Ohjeet Asetukset

Valvontatyyppi Aikajakso Hoidonsaaja Muokkaaja

Hoidonsaaja Edelliset 7 päivää Kaikki Kaikki

Päivämäärä/aika	Hoidonsaaja	Aktivisuus	Muokkaaja	Tila
03/06/2024, 7:47 PM	Bed 1	Update care recipient	Mary.nhm@yopmail.com	Onnistui Tiedot
03/06/2024, 7:47 PM	Bed 1	Update care recipient	Mary.nhm@yopmail.com	Onnistui Tiedot
03/06/2024, 7:46 PM	Bed 3	Read care recipient history	Mary.nhm@yopmail.com	Onnistui

Napsauta **Hoitolaitos**.

Napsauta **Valvonta**.

Tarkastusloki -sivulla näytetään järjestelmän käyttäjien toimintaa hoidettavan henkilön, käyttäjän tai sisäänkirjautumisistunnon perusteella.

OHJEET



1

Napsauta **Ohjeet**.

Täältä löydät ohjeellisia asiakirjoja, videoita ja työkaluja.

