



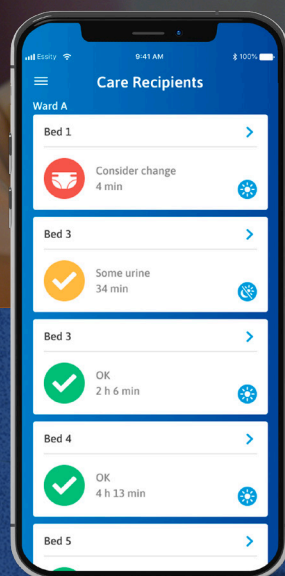

TENA SMARTCARE™ NÁVOD K APLIKACI PROFESSIONAL

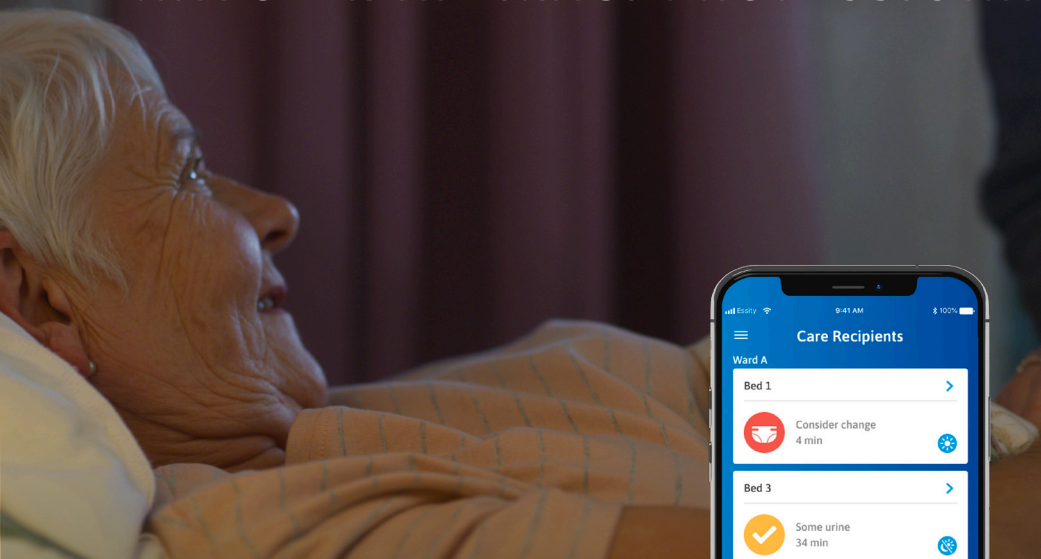

PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY

www.tena.com

TENA SMARTCARE™ APLIKACE PROFESSIONAL



PODPORA PRO PEČOVATELE

Nástroj TENA SmartCare Change Indicator™ pomáhá odborným pečovatelům určovat, kdy je vhodné vyměnit absorpční pomůcku, jelikož nabízí aktuální údaje o svěřených klientech.

Pomocí nejnovějších technologií sleduje množství moči v absorpčních pomůckách TENA. Pečovatelům se do aplikace TENA SmartCare™ Professional v mobilním telefonu odesílají údaje o saturaci absorpčních pomůcek jednotlivých klientů.

Pomocí tohoto stručného návodu se pečovatelé v domovech naučí, jak si aplikaci TENA SmartCare™ Professional stáhnout, jak ji používat, a seznámí se s tím, co znamenají jednotlivá oznámení.

Upozornění: Aplikaci TENA SmartCare™ Professional pravidelně aktualizujte, abyste měli přístup k nejaktuálnějším pokynům k používání a nejnovějším bezpečnostním opatřením.

ZAČÍNÁME S APLIKACÍ

1

Stažení aplikace

Stáhněte si aplikaci **TENA SmartCare™ Professional** z obchodu App Store nebo Google Play.



2

Nastavení uživatelského jména nebo e-mailové adresy a hesla

Abyste se mohli přihlásit a začít aplikaci používat, potřebujete nastavit uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu a heslo. Tyto přihlašovací údaje zřizuje správce pečovatelského zařízení na webovém portálu TENA SmartCare.

www.smartcarepro.tena.com




3

Přihlášení

Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, zadejte heslo a stiskněte tlačítko Sign in (Přihlásit se).

3.1 Na přihlašovací obrazovce zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu a heslo, které vám správce přidělil.

3.2 Stiskněte tlačítko Sign in (Přihlásit se).

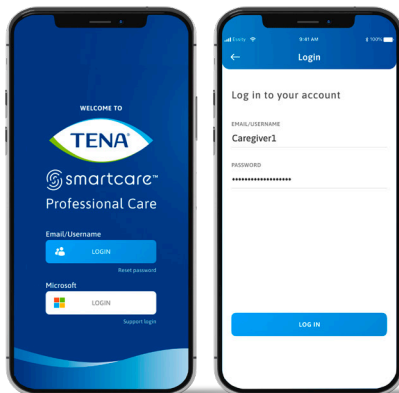


SPRÁVA KLIENTŮ

4

Výběr oddělení

Vyberte požadované oddělení a stiskněte tlačítko Continue (Pokračovat).


- 4.1 Vyberte oddělení, na kterém máte nadcházející směnu. V případě potřeby můžete vybrat více oddělení.
- 4.2 Stiskněte tlačítko Continue (Pokračovat).

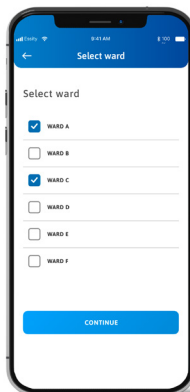

5

Zobrazení stavu klienta



Na obrazovce s klienty si můžete zkontrolovat stav saturace absorpčních pomůcek jednotlivých klientů. K zachování soukromí se u klientů neuvádí jméno, ale číslo pokoje nebo lůžka.

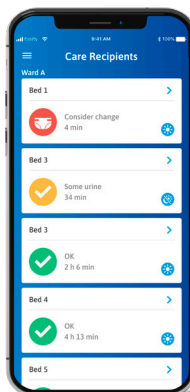

6

Zobrazení podrobností o klientovi

Po výměně absorpční pomůcky se stav klienta automaticky vrátí na hodnotu OK (V pořádku). Můžete se také podívat, která pomůcka je právě sledována, a můžete si zobrazit přehled posledních provedených výměn.

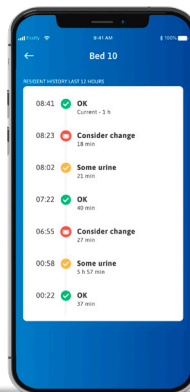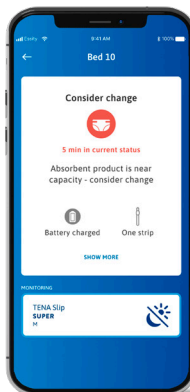

VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH OZNÁMENÍ

Vedle každého čísla pokoje či lůžka se zobrazuje ikona, která udává stav daného klienta. Dále najdete seznam jednotlivých ikon a oznámení, jejich význam a případné potřebné úkony.


V nabídce jsou dostupné tři možnosti: Change ward (Změnit oddělení), Help (Nápověda) a Sign out (Odhlásit se). Na obrazovce Help (Nápověda) si můžete prohlédnout stručný návod a instruktážní video k nástroji Change Indicator.

Absorpční pomůcka klienta je téměř plná. Zvažte výměnu.

V absorpční pomůcce klienta bylo zjištěno malé množství moči, ale její povrch je na dotyk suchý. Není nutné nic dělat.

Absorpční pomůcka klienta je suchá. Není nutné nic dělat.

Číslo klientova lůžka

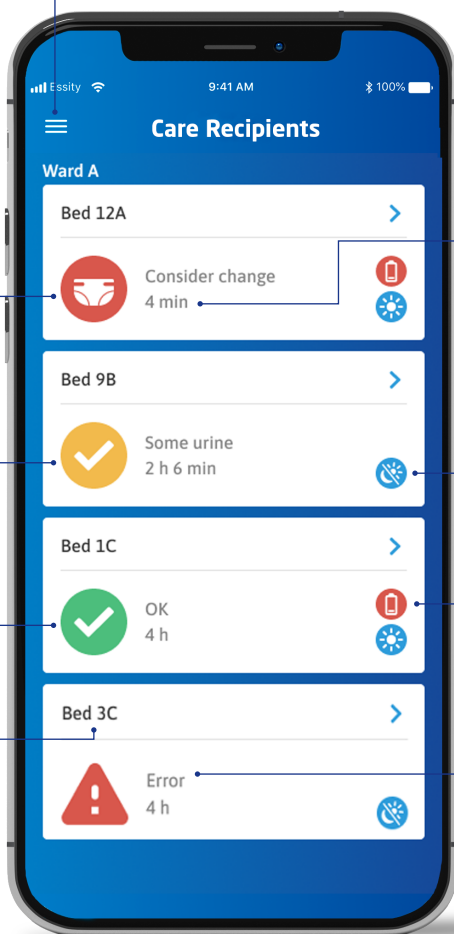


Doba, po kterou se klient nachází v daném stavu.

Ukazatel toho, zda je aktivní denní, noční nebo 24hodinové monitorování.

Baterie vysílače je téměř vybitá. Vyměňte ji.

U nástroje Change Indicator nebo u systému došlo k chybě. Kliknutím na tuto ikonu si zobrazíte další informace a pokyny, jak postupovat.

VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH OZNÁMENÍ

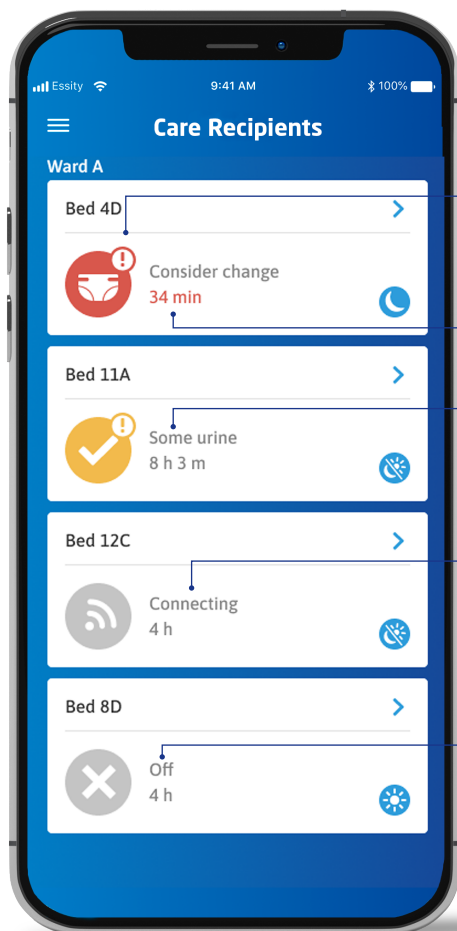

Byl překročen určený čas na reakci personálu. Zvažte výměnu.

Doba, po kterou se klient nachází v daném stavu.

Stav klienta „Some urine“ (Trocha moči) trvá déle než 8 hodin. Zvažte vhodný úkon.

Nástroj Change Indicator se pokouší připojit k systému.

Nástroj Change Indicator absorpční pomůcku klienta nemonitoruje.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Funguje aplikace TENA SmartCare™ Professional na všech chytrých telefonech?

Aplikace TENA SmartCare Professional funguje na zařízeních iPhone se systémem iOS verze 11 a novějším a na zařízeních se systémem Android verze 7.0 a novějším.

Na koho se máme obrátit, pokud se u aplikace TENA SmartCare™ Professional vyskytnou technické problémy?

Pokud u aplikace dojde k technickému problému, oznamte to svému správci nebo kontaktujte podporu TENA SmartCare.

Kde je možné najít přehled výměn nebo rozpis výměn jednotlivých klientů?

Přehled výměn u jednotlivých klientů si můžete zobrazit na webovém portálu TENA SmartCare™. Více informací vám poskytne správce. V aplikaci si však můžete zobrazit posledních 12 hodin.

Funguje systém pouze s pomůcky TENA?

Tento systém byl validovaný pouze na pomůckách TENA a není určen k použití s jinými absorpčními pomůckami.





Inovativní řešení v oblasti digitálních zdravotnických technologií

Ve společnosti TENA dobře víme, co vše péče o klienty obnáší. Proto jsme vytvořili digitální zdravotnické technologie TENA SmartCare™, které přispějí k transformaci sociální péče. Díky dlouholetým zkušenostem a výzkumu nejmodernějších technologií přinášíme řešení, která vyzdvihují lidskou důstojnost a sounáležitost. Nástroj Change Indicator k systému TENA SmartCare™ je převratné řešení, se kterým výměny pomůcek probíhají včas a jen když jsou nutné.

Pokud se chcete dozvědět více, obraťte se na nás

Essity Czech Republic s.r.o.

 www.tenac.cz/proodborniky/

 800 111 121