



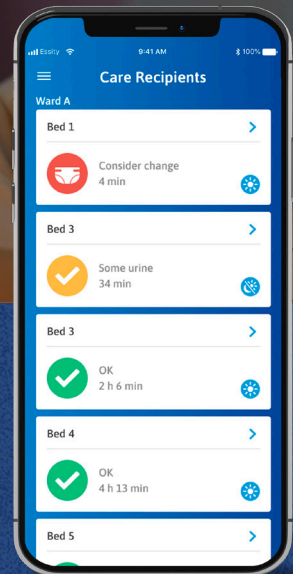

TENA SMARTCARE™ PROFESSIONAL -SOVELLUKSEN OPAS

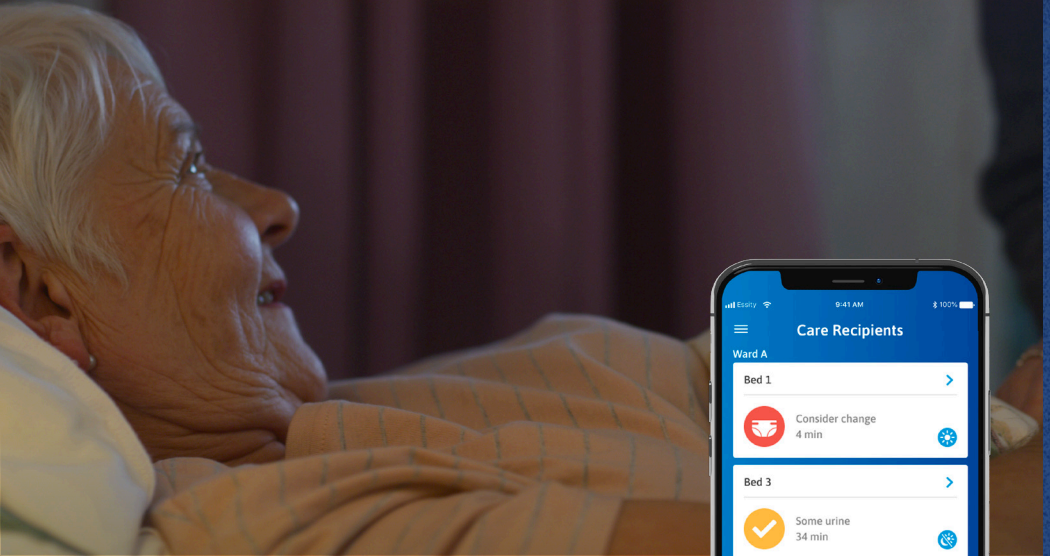

AMMATTILAISTEN KÄYTTÖÖN

www.tena.com

TENA SMARTCARE™ PROFESSIONAL -SOVELLUS



TUKEA AMMATTIHOITAJILLE

TENA SmartCare Change Indicator™ -vaihtoilmaisoin tuottaa reaaliaikaisia tietoja hoidettavista henkilöistä ja auttaa siten ammattihoitajia päättämään, milloin inkontinenssisuoja on vaihdettava.

Change Indicator -vaihtoilmaisimessa käytetään uusinta tekniikkaa TENA-inkontinenssisuojan virtsatason seuraamiseen. Ilmoitukset kaikista hoidettavan henkilön käyttämisestä inkontinenssisuojien virtsatasoista lähetetään hoitajan matkapuhelimeen TENA SmartCare™ Professional -sovelluksen kautta.

Tässä pikaoppaassa näytetään, miten hoitolaitoksessa työskentelevät hoitajat voivat ladata TENA SmartCare™ Professional -sovelluksen ja käyttää sitä, sekä tässä selitetään mitä eri ilmoitukset tarkoittavat.

Huomautus! Varmista, että laitteellasi on aina uusin TENA SmartCare Professional™ -sovelluksen versio, jotta voit käyttää uusimpia käyttöohjeita ja uusimpia suojauskeinoja.

SOVELLUKSEN KÄYTÖN ALOITTAMINEN

1

Lataa sovellus

Lataa **TENA SmartCare™ Professional -sovellus** AppStoresta Google Play Kaupasta.



2

Aseta käyttäjätunnus/ sähköpostiosoite ja salasana

Ennen kuin voit kirjautua sisään ja aloittaa sovelluksen käytön, sinulla on oltava käyttäjätunnus tai sähköpostiosoite ja salasana. Hoitolaitoksesi ylläpitäjä määrittää käyttäjätunnuksen tai sähköpostiosoitteen ja salasanan, jota käytät TENA SmartCare™ -verkkoportaaliissa.
www.smartcarepro.tena.com




3

Kirjaudu sisään

Anna käyttäjätunnus tai sähköpostiosoite ja salasana, paina sitten Sign in (Kirjaudu sisään).

3.1 Anna sisäänkirjautumissivulla ylläpitäjän antama käyttäjätunnus tai sähköpostiosoite ja salasana.

3.2 Paina Sign in (Kirjaudu sisään).

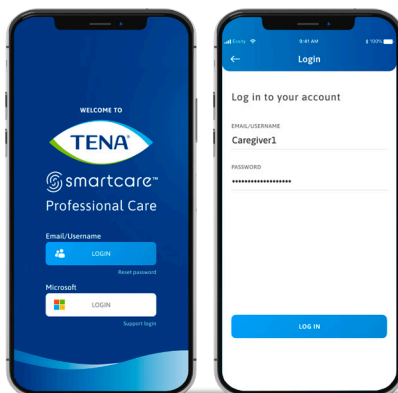

HOIDETTAVIEN HENKILÖIDEN HALLINTA


4

Valitse osasto

Valitse osasto ja paina Continue (Jatka).

4.1 Valitse osasto, jolla teet vuorosi. Voit tarvittaessa valita useamman osaston.


4.2 Paina Continue (Jatka).

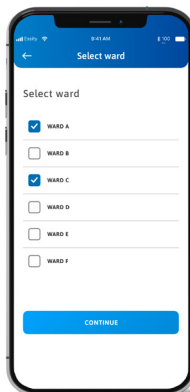

5

Tarkastele hoidettavan henkilön tilaa



Care Recipients (Hoidettavat henkilöt) -sivulla voit tarkastella kaikkien hoidettavien henkilöiden inkontinenssisuojien virtsatasoa. Yksityisyysystistä hoidettavat henkilöt on eritelty huone- tai sänkynumeron perusteella nimen sijaan.

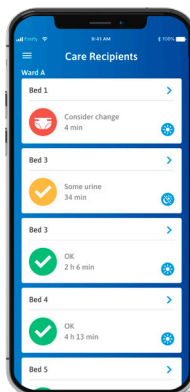

6

Tarkastele hoidettavan henkilön tietoja

Kun hoidettavan henkilön inkontinenssisuoja on vaihdettu, hänen tilansa palautuu automaattisesti tilaan OK. Näet lisäksi, mitä suojaa kyseisellä hetkellä seurataan, ja viimeisten tuotemuutosten historian.

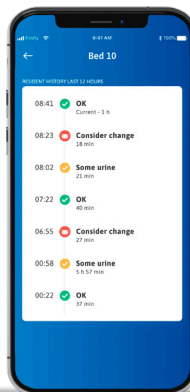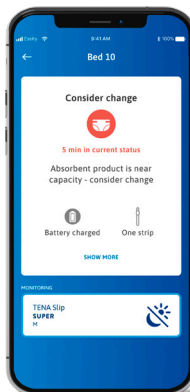

ILMOITUSTEN TULKITSEMINEN

Jokaisen hoidettavan henkilön huone- tai sänkynumeron vieressä on kyseisen hoidettavan henkilön tilakuvake. Alla on esitelty eri tilakuvakkeet ja ilmoitukset, niiden tarkoitukset ja toimet, joihin hoitajien on mahdollisesti ryhdyttävä.


Valikossa on kolme vaihtoehtoa: Change ward (Vaihda osastoa), Help (Ohje) ja Sign out (Kirjaudu ulos). Help (Ohje) -osiossa voit tarkastella Change Indicator -vaihtoilmaisimen pikaopasta ja ohjevideon.

Hoidettavan henkilön inkontinenssisuojan imukyky on melkein käytetty. Harkitse vaihtamista.

Hoidettavan henkilön inkontinenssisuojassa on havaittu jonkin verran virtsaa, mutta pinta tuntuu silti ihoa vasten kuivalta. Toimia ei vaadita.

Hoidettavan henkilön inkontinenssisuoja on kuiva. Toimia ei vaadita.

Hoidettavan henkilön sänkynumero.

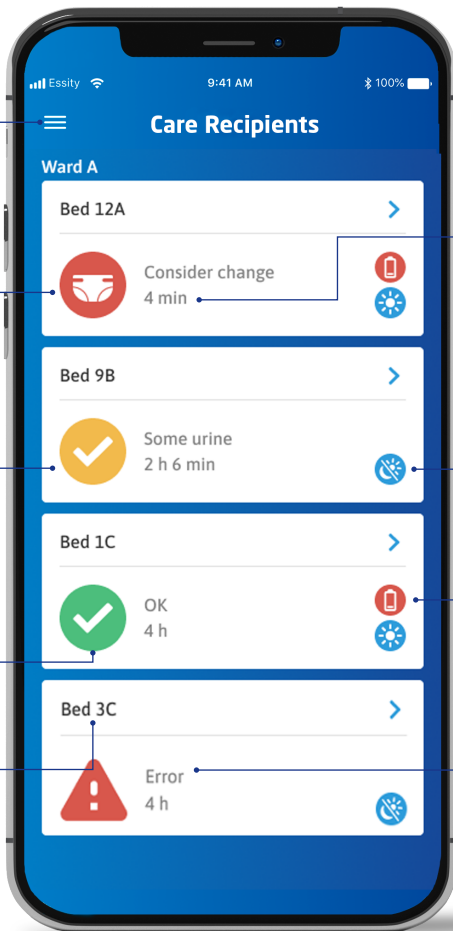


Aika, jonka hoidettavan henkilön tila on ollut kyseisessä tilassa.

Näyttää, onko käytössä päivä-, yö vai ympärivuorokautinen seuranta.

Lähettimen akun varaus on alhainen. Vaihda akku.

Hoidettavan henkilön Change Indicator -vaihtoilmaisimessa tai järjestelmässä on virhe. Saat lisätietoa ja ongelman ratkaisuohejeet napsauttamalla kuvaketta.

ILMOITUSTEN TULKITSEMINEN

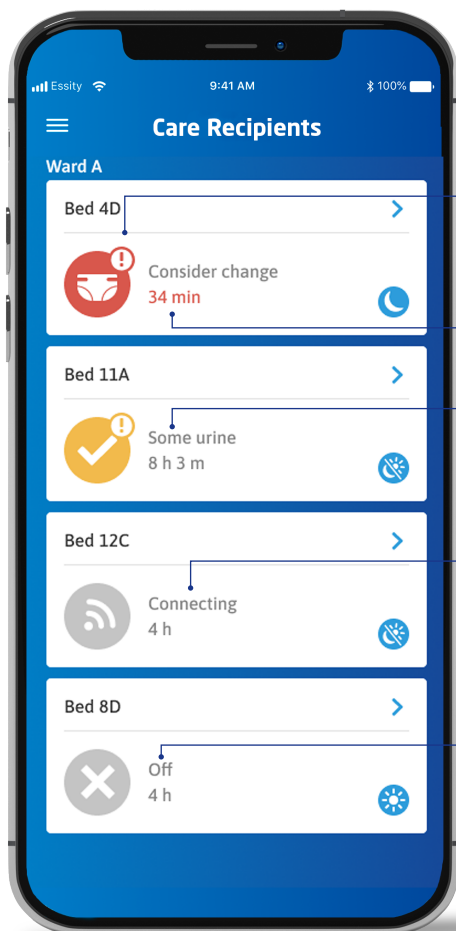

Hoitajan vastetavoite on myöhässä.
Harkitse vaihtamista.

Aika, jonka hoidettavan henkilön tila on ollut kyseisessä tilassa.

Hoidettavan henkilön tila on ollut
"Jonkin verran virtsaa" yli 8 tuntia.
Harkitse toimia.

Change Indicator -vaihtoilmaisin yrittää
muodostaa yhteyttä järjestelmään.

Change Indicator -vaihtoilmaisin ei
seuraa hoidettavan henkilön
inkontinenssisuojaa.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Toimiiko TENA SmartCare™ Professional -sovellus kaikissa älypuhelimissa?
TENA SmartCare™ Professional -sovellus toimii iPhone-älypuhelisten iOS-versiossa 11 tai uudemmissa ja Android-älypuhelisten 7.0-versiossa tai uudemmissa.

Keneen otan yhteyttä, jos minulla on teknisiä ongelmia TENA SmartCare™ Professional -sovellukseen liittyen?

Jos sinulla on sovellukseen liittyen teknisiä ongelmia, keskustele asiasta ylläpitäjäsi kanssa tai ota yhteyttä TENA SmartCare™ -tukeen.

Missä voin tarkastella hoidettavan henkilön vaihtohistoriaa ja vaihtomalleja?

Hoidettavan henkilön vaihtohistoriaa voidaan tarkastella TENA SmartCare™ -verkkoportaalisissa. Saat lisätietoa ottamalla yhteyttä ylläpitäjäsi. Voit kuitenkin tarkastella kulunutta 12 tuntia sovelluksessa.

Toimiiko järjestelmä vain TENA-tuotteiden kanssa?

Järjestelmä on validoitu vain TENA-tuotteille, eikä sitä ole tarkoitettu käytettäväksi muiden inkontinenssisuojien kanssa.





Innovatiivinen ja digitaalinen terveysteknologiaratkaisu

TENAlla tiedämme, mitä hyvä hoito on. Siksi olemme julkaisseet TENA SmartCare™ -valikoiman, joka sisältää hoidon mullistavia digitaalisia terveysteknologiaratkaisuja. Se asettaa tekniikkavetoisen ihmisten välisen yhteyden keskiöön yhdistämällä maailman johtavan asiantuntemuksen uusimpaan teknologiaan. Change Indicator -vaihtoilmaisin on yksi TENA SmartCare™ -innovaatioistamme – se on uraauurtava ratkaisu, joka auttaa inkontinenssisuojien vaihdoissa.

Saat lisätietoa ottamalla meihin yhteyttä

-  tena.fi
-  asiakaspalvelu@essity.com
-  (09) 506 88 465