

## FORMULAIRE DE COMMANDE - PIÈCE DE JAMBE ET PIÈCE DE PIED TRIM-TO-FIT

ENVOYER AU SERVICE À LA CLIENTÈLE PAR TÉLÉCOPIEUR : 1-877-978-9703 OU COURRIEL : CA.SERVICEALACLIENTELE@ESSITY.COM

Nom du patient : \_\_\_\_\_ DDN : \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_ Genre M  F


Postal Code: \_\_\_\_\_

Diagnostic : \_\_\_\_\_

Médecin/adresse : \_\_\_\_\_

Code postal : \_\_\_\_\_

N° du bon de commande	
Commande initiale <input type="checkbox"/>	Renouvellement de commande avec <input type="checkbox"/>
Renouvellement de commande exacte <input type="checkbox"/>	changements <input type="checkbox"/>

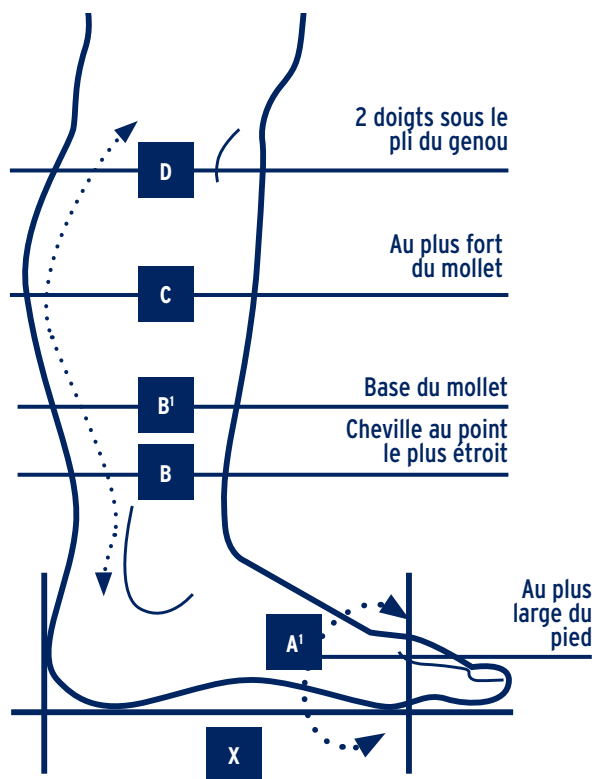

D \_\_\_\_\_ cm C \_\_\_\_\_ cm B' \_\_\_\_\_ cm

JOBST® FARROWWRAP® PIÈCE DE JAMBE TRIM-TO-FIT			
Code	Taille	Description	Quantité
7612300	20-60 cm (D) 20-55 (C) 20-45 (B1) 20-40 (B) longueur 27-35 (B-D)	PIÈCE DE JAMBE LITE TTF : M	
7612302	20-60 cm (D) 20-55 (C) 20-45 (B1) 20-40 (B) longueur 27-35 (B-D)	PIÈCE DE JAMBE LITE TTF AVEC BANDE SUPPLÉMENTAIRE : M	
7611800	20-60 cm (D) 20-55 (C) 20-45 (B1) 20-40 (B) longueur 27-35 (B-D)	PIÈCE DE JAMBE STRONG TTF : M	
7611801	45-90 cm (D) 45-90 (C) 35-80 (B1) 35-70 (B) longueur 27-35 (B-D)	PIÈCE DE JAMBE STRONG TTF : TG	
7611803	20-60 cm	PIÈCE DE JAMBE STRONG TTF AVEC BANDE SUPPLÉMENTAIRE : M	
7611804	45-90 cm	PIÈCE DE JAMBE STRONG TTF AVEC BANDE SUPPLÉMENTAIRE : TG	

JOBST® FARROWWRAP® PIÈCE DE PIED TRIM-TO-FIT			
Code	Taille	Description	Quantité
7612100	20-30 cm (A1) 14-21 (X)	PIÈCE DE PIED LITE TTF : M	
7611600	20-30 cm (A1) 14-21 (X)	PIÈCE DE PIED STRONG TTF : M	


Directives de coupe du vêtement au verso

# Directives de coupe et d'ajustement

Visitez [www.jobstcanada.com](http://www.jobstcanada.com) pour visionner des vidéos de démonstration Trim-To-Fit.

## Directives d'ajustement pour les pièces de jambe LITE et STRONG

1. Coupez l'extrémité distale (bas) de la pièce de jambe TTF (ajustable) de chaque côté en vous basant sur la circonférence au point B. La distance entre chaque ligne est de 5 cm. Si la circonférence se situe entre les lignes, estimez la distance et coupez en conséquence.
2. Coupez les bandes consécutivement tout le long de la pièce de jambe correspondant aux circonférences respectives L2-L5.
3. La bande séparée peut être fixée avec la pièce Velcro® au haut de la colonne de maintien (à l'arrière) et peut être déplacée vers le haut ou vers le bas, selon les besoins, pour diminuer ou augmenter la hauteur de la pièce de jambe.
4. Attachez la pièce de Velcro® du côté que le patient préfère en étirant précisément la moitié par-dessus le bord de la bande.
5. Enroulez la pièce de Velcro® inutilisée sur la même bande.
6. Informez le patient de ne pas perdre la pièce de Velcro®. Des pièces de Velcro® de remplacement sont vendues séparément.

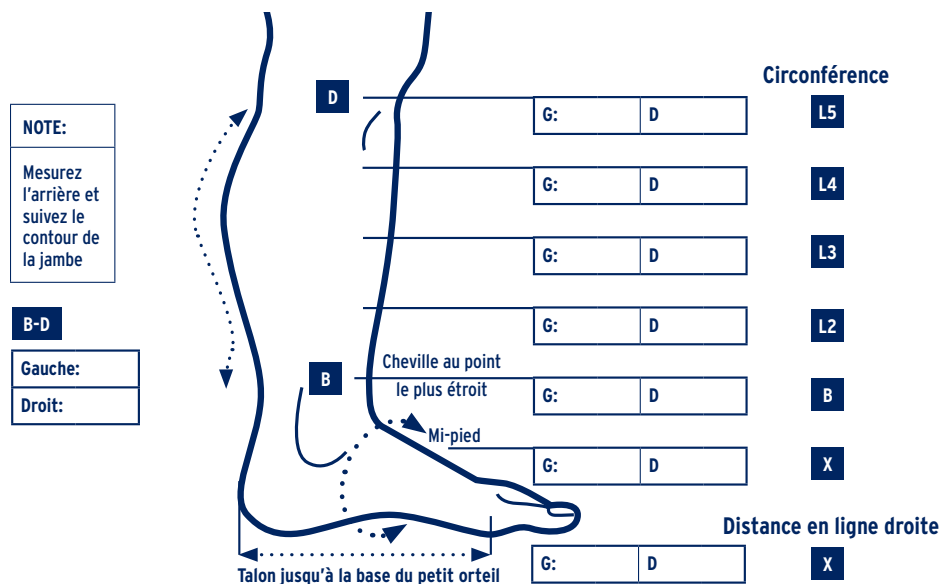

## Directives de coupe et d'ajustement pour les pièces de pied LITE et STRONG

1. Sur le vêtement, coupez la longueur de la pièce de jambe qui correspond à la distance en ligne droite X. La première ligne sur la longueur représente 14 cm et chacune des lignes suivantes représente 1 cm additionnel.
2. En vous basant sur les deux nombres apparaissant de chacun des côtés de la pièce de jambe, les parties les plus proches des orteils, comptez à partir de ce nombre et coupez la largeur la plus proche de la circonférence au point X de deux côtés de la pièce de pied parallèlement aux lignes de chaque côté de la pièce de jambe. La distance entre les lignes représente 2 cm. Si la première ligne représente 19 cm, la suivante sera 21 et ainsi de suite. Si l'incrément est de 1 cm, coupez au milieu parallèlement aux lignes.
3. Coupez la longue bande de Velcro® de la même longueur que le bord droit que vous avez coupé à l'étape 2. Maintenant, pliez la bande en deux et coupez-la sur le pli.
4. Pour créer des volets pour les bandes de Velcro®, pliez le bord droit d'un des côtés de la pièce de pied que vous venez de couper en gardant les lignes vers le haut. Coupez perpendiculairement le long du pli du vêtement à 2 cm de profondeur ou 3 lignes. Faites la même chose de l'autre côté.
5. Attachez la bande de Velcro® sur les volets ainsi créés du côté préféré du patient avec une extension dépassant de moitié le rabat. Puis pliez la bande de Velcro® sur elle-même dans le vêtement pour la préparation à l'enfilage du vêtement. Assurez-vous que le patient comprend qu'il est important qu'il procède de la même façon.
6. Pour les pièces de pied LITE TTF (ajustable), coupez les bandes de cheville suffisamment longues pour que la bande de Velcro® puisse s'attacher du côté opposé du pied sans toucher aucune bande de Velcro® sous-jacente. Attachez la bande de Velcro® qui est incluse des deux côtés de la bande de cheville avec une extension dépassant de moitié le rabat de la bande. Puis appliquez.
7. Pour les pièces de pied STRONG TTF (ajustable), pour ajouter de la compression supplémentaire au pied, les bandes de cheville doivent être longues. La première bande de cheville devrait être enroulée sur le dessus du pied vers le côté opposé le plus près des orteils, puis le même enroulement peut être fait une deuxième fois. Fixez avec la bande de Velcro®. La deuxième bande de cheville devrait aussi être enroulée vers le côté opposé du pied mais plus près de la cheville pour une compression supplémentaire à cette partie du pied, ou elle pourrait être enroulée autour de la cheville, à la discrétion du thérapeute. Si aucune compression supplémentaire est requise, elles peuvent être coupées et appliquées comme à l'étape 6.

### Information importante

Les vêtements LITE et STRONG doivent être appliqués de la partie distale à la partie proximale avec un chevauchement de  $\frac{1}{4}$  sur les bandes opposées (n'incluant pas la pièce Velcro®). Ces vêtements permettront une réduction de l'œdème de 20 %; toutefois, il ne faut pas oublier que les plages de compression pour LITE et STRONG seront moins précises si l'application se fait sur un membre plus large que ce pourquoi le vêtement a été coupé.

- Il est contre-indiqué d'utiliser des pièces de jambe TTF (ajustable) sur des circonférences de jambe de moins de 20 cm.
- Ne pas combiner avec des vêtements d'autres marques que JOBST® FarrowWrap® puisque ceci peut augmenter le risque pour le patient et est par le fait même contre-indiqué.