



JOBST®


La
solution
complète
pour le
lymphœdème

Une gamme complète de
produits de compression conçus
en pensant au **patient** et au **thérapeute**.

La solution complète pour le lymphœdème

Notre objectif est de vous appuyer, vous et vos patients, tout au long du continuum de soins à l'aide de produits innovateurs qui produisent des résultats thérapeutiques en accroissant l'observance du patient.

Pourquoi JOBST®?	3	JOBST® Custom Soft Sur mesure sans couture	
Cutimed® Siltec®		JOBST® Relax	10
Cutimed® Siltec® Sorbact®		JOBST® Bellavar®	
Cutimed® Sorbion®		JOBST® Sur mesure avec couture	11
Cutimed® Sorbion® Sorbact®	4	JOBST® Bella ^{MC} Lite	
Bandages de compression		JOBST® Bella ^{MC} Strong.....	12
JOBST® Compri2.....	5	JOBST® SoftFit	
JOBST® FarrowWrap®	6	Choix de bandes.....	13
JOBST® Elvarex®	7	Zones fonctionnelles sur JOBST® Elvarex®	
JOBST® Elvarex Plus®		et JOBST® Elvarex® Soft	14
JOBST® Elvarex® Soft	8	Aides à l'enfilage JOBST®	15
JOBST® Confiance		Ressources éducatives et JOBST® eShop.....	16
JOBST® Elvarex® Soft sans couture	9		

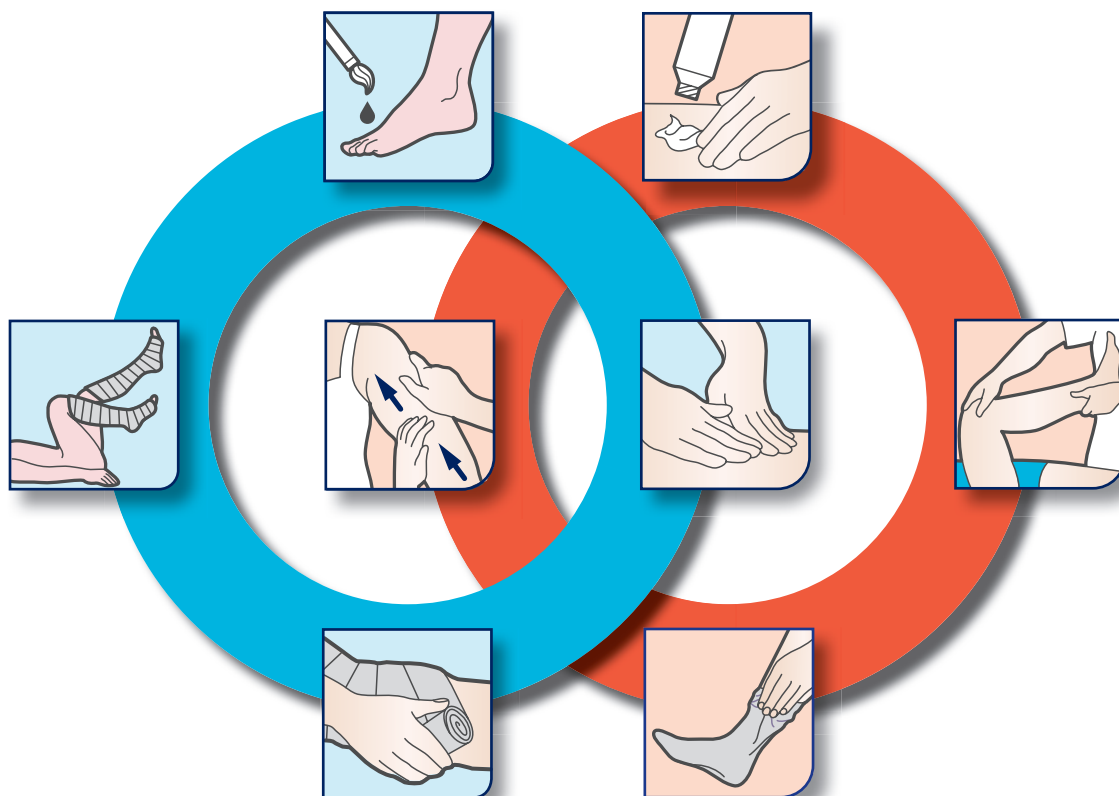

Pourquoi JOBST®?

Confiance et historique



- Conrad Jobst, ingénieur mécanicien et pionnier de l'industrie, a consacré sa vie et son expertise à l'invention de produits de compression graduée dans les années 1950.
- JOBST® est une marque de jambière de compression médicale pour la prévention, le traitement et la gestion des maladies veineuses et lymphatiques.
- À la suite du décès de Conrad JOBST®, sa conjointe Carolyn a assumé la présidence de l'entreprise pendant 27 ans. Inspirée par le travail de son défunt conjoint, Carolyn a fait croître l'entreprise en une organisation mondiale dont les ventes ont rejoint pratiquement chaque continent à mesure que la réputation de qualité des produits JOBST® prenait son envol.

Innovation



- JOBST® développe des produits en fonctions de ses clients et des professionnels des soins de santé. Des groupes de discussion aux tests laver-porter, tous les vêtements sont soumis à un processus de conception rigoureux qui vise à assurer de hauts niveaux de satisfaction, d'efficacité et de sécurité.
- L'innovation est au cœur de l'excellence de nos produits. Le développement de produits est centré sur la production d'un produit de la plus haute qualité fournissant le plus fort degré d'assurance d'obtention d'une efficacité médicale.

Partenariats



- JOBST® est commanditaire exclusif de la Bourse de recherche JOBST® en maladies veineuses et lymphatiques remise en association avec *American Venous Forum Foundation*.
- JOBST® appuie le National Lymphedema Network et le *Lymphatic Education and Research Network*.
- Les principaux intervenants JOBST® font partie du Lymphedema Advocacy Group. Leur mission est l'obtention d'une couverture d'assurance accrue en présence de diagnostic et de traitement de la maladie.



Formation

- L'Institut de compression JOBST® représente une riche source d'information pour les ajusteurs, médecins cliniciens, fournisseurs de soins de santé et soignants qui souhaitent en apprendre davantage sur la thérapie de compression et sur les maladies lymphatiques et veineuses.
- Nos experts, appelés conseillers de formation médicale, et notre dévouée équipe de ventes, procurent des solutions et des séances de formation pour ajusteurs et thérapeutes.



Responsabilité sociale

- Chaque année, JOBST® fait don de centaines de vêtements de compression à des organismes de soins de santé qui partagent notre mission de contribuer à l'accroissement de la qualité de vie des patients. Qu'il s'agisse de financer la formation par l'entremise d'organismes comme *Lymphatic Education and Research Network (LE&RN)* ou d'aider les personnes qui se remettent d'une catastrophe naturelle dévastatrice, JOBST® n'hésite pas à prêter main forte.

Produits de soins de plaie avancés

Cutimed offre une vaste gamme de produits avancés qui permettent d'obtenir une cicatrisation efficace de plaies à divers stades de guérison et à divers niveaux d'exsudat.

Cutimed® Siltec®

Gestion de niveaux d'exsudat modérés à élevés

Cutimed® Siltec® a été conçu pour une cicatrisation ininterrompue et un traitement sûr des liquides.

- Couche contact avec bordure adhésive douce en silicone pour protéger les nouveaux tissus fragiles
- Absorbe et retient le liquide même sous compression



Cutimed® Siltec® Sorbact®

Aide à la gestion de l'infection et au retrait de l'exsudat

Cutimed® Siltec® Sorbact® offre une combinaison innovatrice d'absorption et de gestion de l'infection. Les particules superabsorbantes de la couche mousse s'ajustent efficacement pour absorber l'exsudat de viscosité modérée à élevée, et pour le retenir même sous compression.

- Absorption accrue grâce aux bandes thermofusibles superabsorbantes



Cutimed® Sorbion®

Gestion de niveaux d'exsudat modérés à élevés

Cutimed® Sorbion® est une famille de pansements superabsorbants qui absorbent et retiennent l'exsudat pour supporter un milieu de guérison humide, même sous pression.

- Sorbion Sana aide à protéger les tissus sains et fragiles
- Sorbion Sachet® procure un débridement en douceur pour la préparation du lit de la plaie



Cutimed® Sorbion® Sorbact®

Retrait de bactéries et de niveaux élevés d'exsudat

Cutimed® Sorbion® Sorbact® est un pansement hydrophobe qui lie les microbes de manière sécuritaire par mode d'action physique au lieu d'un mode d'action par réaction chimique.

- Le centre superabsorbant absorbe et retient des niveaux d'exsudat modérés à élevés
- Réduit le risque de macération même sous compression



Bandages de compression

Une famille de produits complète pour la gestion du lymphœdème. Conçue en pensant au patient et au thérapeute pour optimiser les résultats de thérapie décongestive complexe (TDC).

Bandages multicouches



Comprilan®

Bandage de compression à courte élasticité

- Compression élevée en période active et faible au repos
- Entretien facile et durable



CompriFoam®

Bandage mousse à alvéoles ouvertes

- 100 % mousse polyuréthane
- Réutilisable



Tricofix®

Filet léger

- Utile sous le plâtre de Paris ou plâtre synthétique
- Respirant



Artiflex®

Rembourrage non tissé

- Utilisé en lymphologie
- Procure un rembourrage aux formes osseuses ou irrégulières
- Confortable et perméable à l'air
- Procure une distribution égale de pression



Elastomull®

Bandage confortable et doux

- Idéal pour les doigts et les orteils
- Disponible en version stérile ou non stérile



Isoband®

Bandage élastique multiusage

- Élasticité courte et longitudinale pour compression élevée en période active
- Réutilisable
- Tissé poreux procurant une bonne circulation d'air pour la peau

JOBST® Comprî2 Bandage à double couche

JOBST® Comprî2 est un système de bandage à double couche* conçu spécialement pour son aisance d'application. Il procure une compression graduée fiable pendant jusqu'à sept jours pour contribuer à obtenir une réduction efficace de l'œdème et aide à promouvoir la cicatrisation.



1^{re} couche - rembourrage non tissé

- **Extensible** - simplifie l'application
- **Gestion active de l'humidité** - aide à garder la peau sèche et confortable
- **Rembourrage personnalisé** - permet de s'ajuster à l'anatomie et de protéger les zones sensibles



2^e couche - bandage à courte élasticité

- **Cohésif** - fournit une compression fiable
- **Ajustable** - modification possible pendant l'application
- **Visuel** - indicateur offre un soutien simple et efficace à l'application

*Comme JOBST® Comprî2 ne comprend pas de pansement, toute plaie doit être traitée avec un pansement adéquat au préalable, avant d'appliquer le bandage de compression.

JOBST® FarrowWrap®

Adaptable et abordable, contention confortable

Famille de produits


LITE

Tissu satiné doublé qui convient aux besoins en compression légère à modérée, particulièrement adéquat pour les soins à domicile et les patients en autogestion. Tissu durable.

Versions disponibles

- Membre supérieur et inférieur
- TTF ajustable (Trim-To-Fit)
- Ready-to-Wear (RTW)
- Sur mesure (SM)

20-30 mmHg* Œdème / lymphœdème chronique léger à modéré

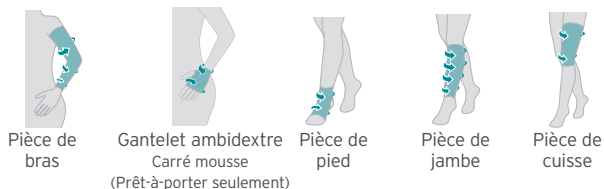


STRONG

Tissu haut de gamme de forte compression avec doublure douce pour œdème modéré à grave sur un membre de forme régulière.

Versions disponibles

- Membre supérieur et inférieur
- TTF ajustable (Trim-To-Fit)
- Prêt-à-porter (PAP)
- Sur mesure (SM)

30-40 mmHg* Œdème / lymphœdème chronique modéré à grave sur un membre de forme régulière

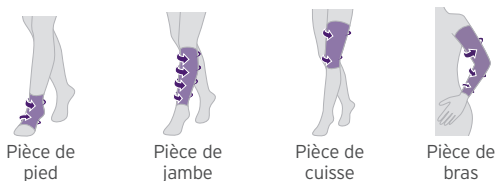


CLASSIC

Tissu original d'utilisation clinique démontrée depuis bon nombre d'années auprès de milliers de patients partout dans le monde.

Versions disponibles

- Membre supérieur et inférieur
- Prêt-à-porter (PAP)
- Sur mesure (SM)

30-40 mmHg* Œdème / lymphœdème chronique modéré à grave

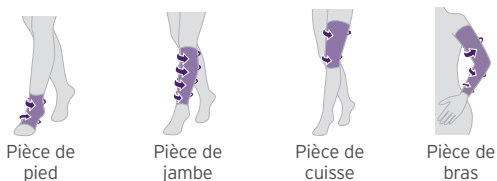

BASIC

Tissu plus économique avec compression de qualité. VELCRO® double face permet d'ajuster ou de couper la longueur de la bande lorsque le membre réduit.

Versions disponibles

- Membre inférieur
- Prêt-à-porter (PAP)

30-40 mmHg* Œdème / lymphœdème chronique modéré à grave



* Cette doublure procure une compression au pied et à la cheville seulement.


4000

Le manchon intérieur et le concept à 4 bandes facilitent l'application. Le profil anatomique prévient le bâillement.

Versions disponibles

- Membre inférieur
- Prêt-à-porter (PAP)

30-40 mmHg* Œdème / lymphœdème chronique modéré à grave

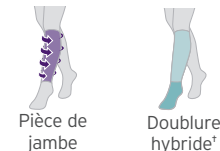

* Cette doublure procure une compression au pied et à la cheville seulement.



JOBST® Elvarex®

La norme



JOBST® Elvarex® représente la norme en matière de vêtements personnalisés de jour pour la gestion du lymphœdème. Ces vêtements en tricot plat offrent ce qu'il y a de mieux au chapitre du confort et de la contention, même pour les cas les plus graves. Doté d'un centre de caoutchouc naturel*, Elvarex® procure une structure et un contrôle sans égal peu importe la taille et la forme.

JOBST® Elvarex® - Caractéristiques clés

- La structure de tricot plat fait le pont sur les plis cutanés au lieu de s'y enfoncer
- Centre en latex de caoutchouc naturel procure une contention supérieure et permet au vêtement de reprendre sa forme originale pour un port prolongé
- Excellente respirabilité apporte plus de confort et d'observance pour le patient
- Sept classes de compression pour des résultats thérapeutiques optimaux
- Vaste assortiment de produits pour traiter diverses spécifications et exigences du patient
- Fournit une protection solaire FPS UV 80



Modèles de base

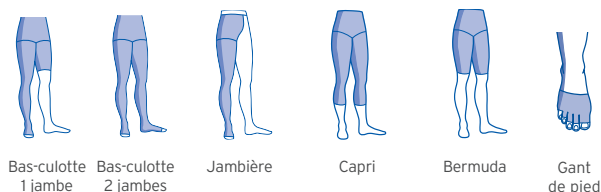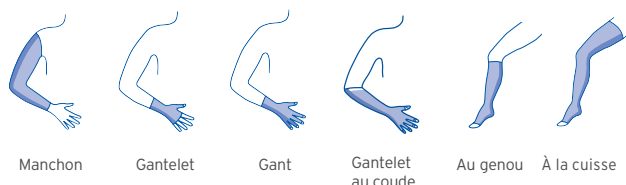

Classes de compression

Classe 1	Classe 2
Classe 2 forte	Classe 3
Classe 3 forte	Classe 4
Classe 4 super	

Membres / Couleurs

Supérieure	1-2	 Beige	 Noir	 Marine	 Miel	 Canneberge	 Cerise	 Caramel		
	2-Forte	 Beige	 Noir	 Marine	 Miel	 Canneberge	 Cerise			
Inférieure	1-4 Super	 Beige	 Noir	 Marine	 Cacao	 Canneberge	 Gris	 Henna**	 Graphite**	 Denim**

* MISE EN GARDE : Ces produits contiennent du latex de caoutchouc naturel, lequel pose un risque de réaction allergique.

** Gant de pied non disponible

JOBST® Elvarex® Plus*


Technologie de pointe en matière de tricot plat

JOBST® Elvarex® Plus utilise une technologie de tricot plat pour construire ses vêtements en trois dimensions et obtenir un ajustement plus conforme aux pieds et aux mains. Ces vêtements sans couture aident à minimiser les risques d'irritation entre les doigts et les orteils, ainsi qu'à la base du pouce. Ils aident les patients à obtenir le confort voulu et le rendement dont ils ont besoin.

* MISE EN GARDE : Ces produits contiennent du latex de caoutchouc naturel, lequel pose un risque de réaction allergique.



Modèles de base

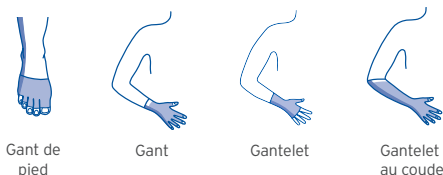

Classes de compression

Classe 1

Classe 2

Type / Couleurs

Main	Beige	Noir	Marine	Miel	Canneberge	Rouge	Caramel	Cerise
Pied	Beige	Noir	Marine	Cacao	Canneberge	Rouge	Gris	


* MISE EN GARDE : Ces produits contiennent du latex de caoutchouc naturel, lequel pose un risque de réaction allergique.

JOBST® Elvarex® Soft

Doux et sans latex de caoutchouc naturel

JOBST® Elvarex® Soft est la solution pour les patients qui recherchent un vêtement de compression qui travaille plus en douceur. Le tricot plat facilite l'enfilage et comble les besoins de bon nombre de patients âgés et pédiatriques, ou de patients souffrant de lipœdème. Doux et flexible, JOBST® Elvarex® Soft procure tout de même la contention nécessaire en présence de lymphœdème.

Modèles de base

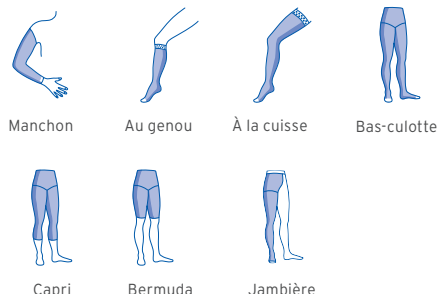


Classes de compression

Classe 1

Classe 2

Classe 3

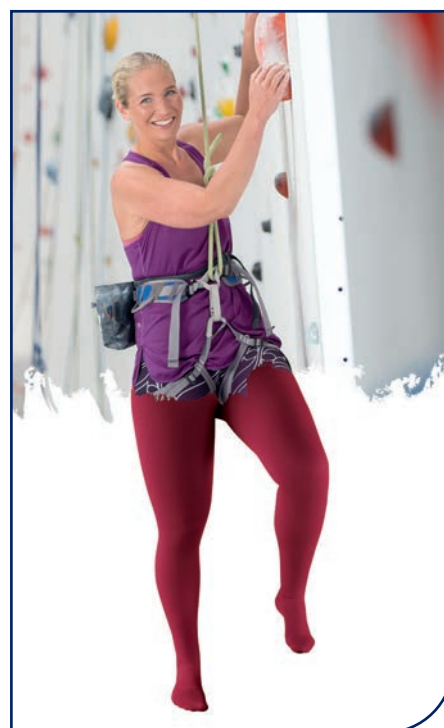

Membres / Couleurs

Supérieure CLC 1-2	Beige	Noir	Marine	Canneberge	Cerise	Miel	
Inférieure CLC 1	Beige	Noir	Marine	Canneberge	Cerise	Gris	Cacao

JOBST® Confidence


Prochaine génération de vêtements de compression sur mesure en tricot plat

JOBST® Confidence aide vos patients à bouger librement grâce à un vêtement dont l'ajustement est aussi unique qu'eux. La technologie de prochaine génération du tricot plat permet d'obtenir un ajustement précis qui épouse les formes anatomiques réelles. Cet ajustement raffiné procure non seulement du confort, mais il aide à donner à vos patients une plus grande amplitude de mouvement.

JOBST® Confidence - Caractéristiques clés

- Méthode de tricot innovatrice en trois dimensions permettant au vêtement d'épouser les formes du corps
- Tissu modelant qui offre aussi un soutien ferme
- Gestion de l'humidité grâce à une construction à double couche pour un confort optimal
- Tissu souple et conformable qui facilite l'enfilage et le retrait

Modèles de base

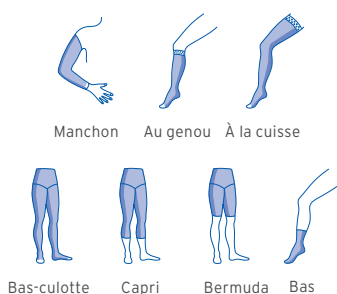

Classes de compression

Membre supérieur Membre inférieur

Classe 1	Class 1
Classe 2	Class 2
	Class 2

Nouvelles options d'ornement



Options de confort



Couleurs

Beige	Chiné rouge
Noir	Chiné anthracite
Caramel	Chiné anthracite

JOBST® Elvarex® Soft sans couture


Doux et sans couture, là où ça compte

JOBST® Elvarex® Soft sans couture allie tous les avantages de Elvarex Soft à la construction sans couture que les patients aiment des gants de doigts ou de pied. Non seulement sont-ils faits d'un tricot plat doux qui ne contient aucun latex de caoutchouc naturel, mais ils sont sans couture, ce qui ajoute au confort en aidant à éliminer les risques d'irritation entre les doigts et les orteils.

JOBST® Elvarex® Soft sans couture - Caractéristiques clés

- Tricot plat doux, durable et respirant
- Fini plat aux bordures, qui réduit l'épaisseur et empêche le vêtement de s'enrouler
- Facile à enfiler, confortable à porter

Modèles de base

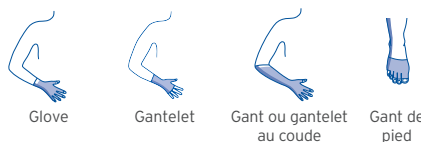

Classes de compression

Classe 1	Classe 2
----------	----------



Membres / Couleurs

Supérieure CLC 1-2	Beige	Noir	Marine	Cacao	Miel	Canneberge	Cerise
Inférieure CLC 1-3	Beige	Noir	Marine	Cacao	Gris	Canneberge	Cerise

JOBST® Soft Sur mesure sans couture


Bas de compression sur mesure

JOBST® Custom Sur mesure sans couture est un vêtement de tricot circulaire sur mesure qui a l'apparence d'un bas régulier. Il convient aux troubles vasculaires et aux œdèmes légers à modérés. Ce vêtement emprisonne l'humidité loin du corps pour garder la peau fraîche et au sec. Grâce à JOBST® Soft Sur mesure sans couture, nul besoin de sacrifier l'ajustement ou le style pour porter un bas de compression médicale.

JOBST® Soft Sur mesure sans couture - Caractéristiques clés

- Fibre multiple double procurant plus de douceur tout en facilitant l'enfilage
- Opacité raffinée couvrant les imperfections et les cicatrices
- Fibre extensible au centre pour aider à reprendre sa forme et prévenir le glissement
- Zones renforcées au pied pour plus de résistance, de durabilité et de confort

Modèles de base

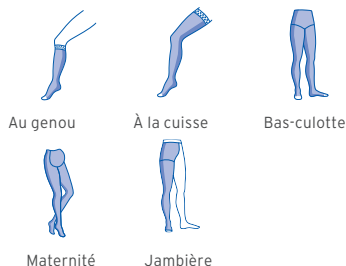

Couleurs

 Sable	 Noir	 Espresso	 Caramel
 Marine	 Bronze	 Canneberge	

Classes de compression

Classe 1	Classe 3
Classe 2	



JOBST® Bellavar®


Contention avec un tricot circulaire ferme

JOBST® Bellavar® est conçu pour gérer l'œdème modéré à grave dans les jambes en procurant extensibilité et résistance contrôlée. Bellavar® est un vêtement de tricot circulaire sur mesure sans couture qui procure un niveau de contention plus élevé que JOBST® Soft Sur mesure sans couture.

JOBST® Bellavar® - Caractéristiques clés

- Conçu pour réduire les plis derrière le genou
- Variété de styles et d'options pour combler les besoins des patients

Modèles de base

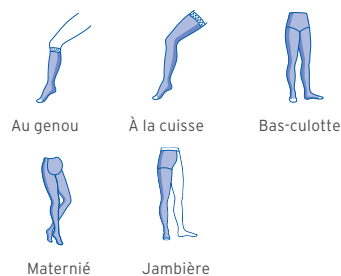

Couleurs

 Sable	 Noir	 Bronze
---	--	--

Classes de compression

Classe 2
Classe 3

JOBST® Relax

Révolution des soins de nuit pour le lymphœdème

JOBST® Relax est un vêtement de nuit révolutionnaire conçu pour obtenir plus qu'une bonne nuit de sommeil. Sa technologie d'espacement est unique sur le marché et donne un vêtement extrêmement léger, flexible et amincissant. Relax fournit des avantages exceptionnels pour la qualité de vie et le style des patients souffrant de lymphœdème léger à modéré grâce à des techniques de tricot évoluées et aux fibres CoolMax®. Comme Relax est respirant et flexible, les patients peuvent mieux observer le traitement le soir.



JOBST® Relax - Caractéristiques clés

- Technologie de tricot plat, sur mesure, qui fournit une compression graduée qui reste en place
- Surface texturée et couche d'espacement monofilament conçues pour créer différents points de pression qui soutiennent la stimulation de la circulation lymphatique lorsque la personne est au repos
- Fermeture à glissière intégrée optionnelle avec languette qui reste en bas facilite l'enfilage et le retrait. Tissu sous la fermeture à glissière protège la peau

Styles pour bras




Manchon
(CG1)



Combinaison manchon
et gantelet
(AG1)

Styles pour jambe

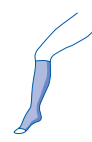

Au genou
(AD)



À la cuisse
(AG)

Couleurs



Classes de compression

15-20 mmHg*

20-30 mmHg*

JOBST® Sur mesure avec couture

Solutions presque sans limite pour des situations uniques

Les vêtements JOBST® Sur mesure avec couture sont les pionniers de la gestion du lymphœdème et même s'ils ont beaucoup évolué au cours des 70 dernières années, notre capacité de trouver des solutions à des situations uniques reste toujours la même. Les vêtements Sur mesure avec couture sont disponibles pour chaque partie du corps dans d'innombrables configurations. Chaque vêtement est coupé avec précision et cousu à la main à Hickory, en Caroline du Nord.

JOBST® Sur mesure avec couture - Caractéristiques clés

- Tissu durable pour un port à long terme
- Compression graduée précise basée sur un concept informatisé
- Variété d'options : fermeture éclair, doublure, bande en silicone et autres

Couleurs



Classes de compression

15-65+

Modèles de base



Manchon



Gant



Gantelet




Au genou




À la cuisse



Bas-culotte

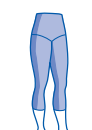


Capri

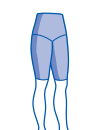

Bermuda



Masque
facial

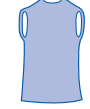

Veste sans
manches



Veste, 2
manches
longues



Support pelvien
abdominal

JOBST® Bella^{MC} Lite

Le point d'entrée de la qualité JOBST®


Les vêtements de compression pour extrémités supérieures JOBST® Bella^{MC} Lite sont conçus pour les patients qui souffrent de lymphœdème léger à modéré, qui ont reçu un diagnostic récent, qui ont récemment subi une chirurgie ou dont l'état n'exige pas de confinement à l'aide de tricot plat. Le tissu est léger, respirant, conçu pour être confortable et facile à enfiler, parfait pour les patients qui apprennent à intégrer l'observance de leur vêtement de compression à la vie de tous les jours.



JOBST® Bella^{MC} Lite - Caractéristiques clés

- S'ajuste à diverses formes de bras et de main; disponible avec ou sans bande de silicone
- Deux longueurs de manchons pour un ajustement optimal
- Coutures fines avec tissu de compression ultra mince et doux

Modèles de base

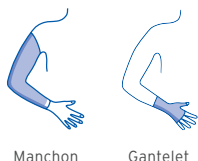

Manchon

Gantelet

Couleurs



* Certains niveaux de compression et styles seulement

Classes de compression

15-20 mmHg*

20-30 mmHg*

JOBST® Bella^{MC} Strong

Compression confortable et économique

Les vêtements de compression pour extrémités supérieures JOBST® Bella^{MC} Strong fournissent une solution de prêt-à-porter aux patients qui veulent gérer un lymphœdème, mais dont l'état n'exige pas de confinement à l'aide de tricot plat. Bella^{MC} Strong met la qualité JOBST® à la portée d'un grand nombre de patients en offrant une vaste gamme de tailles, de longueurs, de classes de compression et de prix plus accessibles.



JOBST® Bella^{MC} Strong - Caractéristiques clés

- Couvre une vaste échelle de dimensions
- Conçu pour être facile à enfiler, le manchon est vendu avec un aide à l'enfilage
- Couture plate au poignet réduit l'enroulage
- Sensation de coton

Modèles de base



Manchon

Gantelet

Couleur



Classes de compression

15-20 mmHg*

20-30 mmHg*

30-40 mmHg*

* Tous les niveaux de compression affichés correspondent à une compression moyenne pour un avant-bras de taille moyenne (manchon) ou une compression moyenne pour une paume de taille moyenne (gant/gantelet).
Les styles ne sont pas tous offerts dans tous les niveaux de compression

JOBST® SoftFit^{MC}

Notre technologie innovatrice JOBST® SoftFit^{MC} est un système unique composé de fils de silicone, tricotés dans la bande de maintien de nos vêtements de compression. Ce système offre une friction sans couture douce sur la peau, qui réduit les risques de constriction et de glissement.



BELLE APPARENCE, GRAND CONFORT

Avec la technologie SoftFit^{MC}, les bas de compression sont non seulement plus attrayants à regarder et plus confortables, mais ils procurent exactement la bonne quantité de compression là où c'est nécessaire.

OBSERVANCE ACCRUE, QUALITÉ DE VIE ACCRUE

Des vêtements de compression qui sont confortables entraînent une meilleure observance de la part du patient.

PLUS DE CHOIX, PLUS DE PATIENTS HEUREUX

La technologie SoftFit est offerte dans un vaste choix de vêtements de compression et de styles.

Choix de bandes

Produit	 Silicone à pois	 Silicone en dentelle	 SoftFit	 Sensitive	 Bande élastique lignée
Elvarex® Membre supérieur	2,5 cm, par-dessus, à l'intérieur 5 cm, par-dessus, à l'intérieur		3 cm, par-dessus (CLC 1 et 2 seulement)		
Elvarex® Membre inférieur	2,5 cm, par-dessus, à l'intérieur 5 cm, par-dessus, à l'intérieur 5 cm, par-dessus, à la taille		5 cm, par-dessus (au genou seulement, CLC 1 à 3)	5 cm, par-dessus (à la taille seulement)	5 cm, par-dessus (à la cuisse seulement)
Elvarex® Soft Membre supérieur	2,5 cm, par-dessus, à l'intérieur 5 cm, par-dessus seulement		3 cm, par-dessus		
Elvarex® Soft Membre inférieur	2,5 cm, par-dessus (au genou seulement) 5 cm, par-dessus		5 cm, par-dessus (au genou seulement)		
Confiance	5 cm, par-dessus (à la cuisse seulement) 2,5 cm, par-dessus, sur le manchon		5 cm, par-dessus (au genou seulement) 2,5 cm, par-dessus, sur le manchon		
Bella^{MC} Lite Manchon	5 cm, par-dessus				
Bella^{MC} Strong Manchon	5 cm, par-dessus				
Bellvar Sur mesure	5 cm, par-dessus (au genou et à la cuisse) 2,5 cm, par-dessus (au genou seulement)	6 cm, par-dessus (à la cuisse seulement)			
Soft Sur mesure sans couture	5 cm, par-dessus (au genou et à la cuisse) 2,5 cm, par-dessus (au genou seulement)	6 cm, par-dessus (à la cuisse seulement)	5 cm, par-dessus (au genou seulement, CLC 1 et 2 seulement)	5 cm, par-dessus (à la cuisse seulement)	
Sur mesure avec couture	2,5 cm, par-dessus 5 cm, par-dessus			5 cm, par-dessus	

Zones fonctionnelles sur JOBST® Elvarex® et Elvarex® Soft

Zones fonctionnelles uniques et innovatrices créées par l'utilisation de technologies avancées de tricot et de sélection de fibres spécialisées. Les zones fonctionnelles accroissent le confort du patient en fournissant une plus grande flexibilité et respirabilité, sans compromis au niveau de l'efficacité médicale.

Zones fonctionnelles sur JOBST® Elvarex®


- Utilisation de techniques de tricot et de fibres hautements spécialisées
- Port plus confortable en raison de respirabilité et flexibilité accrues
- Zones spéciales combattent les plis en se penchant et accélèrent la dissipation de l'humidité.

Zone confort fonctionnelle « Culotte pression Elvarex® (bandage corporel) »



- Disponible sur :
- Bandage corporel : CLC 1-3 Forte
 - Bas correspondants disponibles sur tous les CLC (1 - 4 Super)

Functional Zone "Top Comfort Zone"

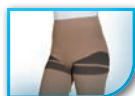

- Disponible sur :
- B'G, BG, CG, AG, AT Culotte pression Elvarex® (bandage corporel), bermuda, capri, moignons (ST)

Zone confort fonctionnelle « supérieure oblique »



- Disponible sur :
- Toutes les classes de compression (CLC 1 - 2 Forte)

Zone confort fonctionnelle au genou



- Disponible sur :
- CLC 2-3

Zone confort fonctionnelle en T au talon



- Disponible sur :
- CLC 2-3 Forte

Zone confort fonctionnelle au coude



- Disponible sur :
- CLC 2
 - Exception : sauf sur les pièces de main/bras simples

Zone confort fonctionnelle « pointe oblique »

Aides à l'enfilage JOBST®



Gants d'enfilage JOBST®*

Il est toujours plus facile d'enfiler un vêtement de compression JOBST® avec les gants d'enfilage JOBST®. Ils aident à créer une friction, procurant une meilleure prise et une distribution égale du vêtement sur la jambe.

* MISE EN GARDE : Ces produits contiennent du latex de caoutchouc naturel, lequel pose un risque de réaction allergique.



Enfile-bas JOBST®

Dispositif facile d'utilisation pour aider à appliquer les vêtements de compression JOBST®. Idéal pour les personnes dont la dextérité est limitée ou qui ont de la difficulté à toucher à leurs pieds. S'utilise avec les styles à pointe fermée et ouverte. Disponible en deux tailles : régulier et mollet large.



Aides à l'enfilage Arion

Les aides à l'enfilage Arion sont utiles pour enfiler et retirer les vêtements de compression pour extrémités supérieures et inférieures. Ils s'utilisent avec les vêtements à pointe ouverte ou fermée, et peuvent s'avérer particulièrement utiles pour les personnes qui souffrent de sensibilité ou de faiblesse dans le membre visé ou qui ne sont simplement pas assez fortes pour enfiler le vêtement par elles-mêmes.



Enfileur satiné

À utiliser avec les bas de compression à pointe ouverte seulement. Aide le bas à glisser en douceur sur le pied en réduisant la friction entre la peau du patient et le bas de compression.



Adhésif à bille JOBST®

- Conçu pour garder les bas JOBST® bien en place
- Idéal pour les bas à la cuisse qui n'ont pas de bande de silicone ou lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser un porte-jarretelles
- Conseil pratique : Appliquer les vêtements de tricot plat en bandes verticales



L'Institut de compression JOBST® est une ressource offerte à l'intention des fournisseurs de soins de santé et cliniciens qui aimeraient obtenir des informations supplémentaires sur les maladies veineuses et sur le lymphœdème. Vous y trouverez de la documentation, des vidéos et des liens vers nos affiliés nationaux. Vous y trouverez aussi des offres d'ateliers et de formation continue vous permettant d'acquérir des compétences sur les produits JOBST® et sur les techniques d'ajustement et de mesures. Jusqu'à 9 heures de crédits UEP sont disponibles. Inscrivez-vous à <http://www.jobstcompressioninstitute.com>.

VOUS PRÉFÉREZ
MAGASINER EN LIGNE?

JOBST® eShop

- Commandez vos produits de lymphologie sur mesure JOBST® en ligne
- Gestion intelligente du patient
- Documentation sur la prise de mesure
- Commandes pratiques pour économiser du temps



Pour commencer, visitez <https://eshop.jobst-ca.com/>

Des questions?

Contactez-nous à ca.elvarex@essity.com ou 1 877 978-5526.

Sorbact® est une marque déposée de ABIGO Medical AB.
VELCRO® est une marque déposée de Velcro BVBA.
CoolMax® est une marque déposée de INVISTA.
Easy-Slide® est une marque déposée de Arion International.

Prière de consulter l'étiquette ou l'encart d'emballage du produit pour lire les directives complètes d'utilisation sécuritaire de ces produits.



JOBST®,
une marque de Essity



jobstcanada.com essity.com

Essity
1275 North Service Road West, bureau 800
Oakville, ON Canada L6M 3G4
Tél. 1 877 978-5526 Téléc. 1 877 978-9703
52209F R17 136343F ©Essity, Produits de santé et d'hygiène, AB., 2022 C22